

# VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER

Instrucțiuni de utilizare rapide



Culori de pictură independente de CTE  
pentru controlul saturației

## VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER – date & caracteristici


### CHROMA STAINS sunt:

- Culori de pictură ceramice independente de CTE pentru toate ceramicile de fațetare standard, din oxid de zirconiu monolitic, ceramică silicatică sau feldspatice.

### CHROMA STAINS oferă următoarele avantaje:

- adaptare cromatică simplă în grupurile de luminozitate corespondente
- caracteristici de manipulare superioare, precum aplicarea foarte simplă
- rezultate deosebit de estetice prin pictare superficială

### COMPONENTELE SISTEMULUI

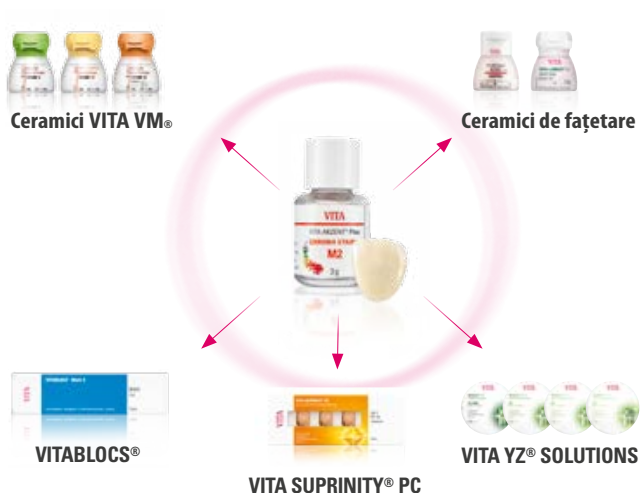

## VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER

### Aplicarea CHROMA STAINS 3D-Master pe o bază coloristică definită



<b>CHROMA STAINS L</b>		2L1.5 → 2L2.5	3L1.5
<b>CHROMA STAINS M2</b>		1M1 → 1M2	2M1 → 2M2
<b>CHROMA STAINS M3</b>			2M2
<b>CHROMA STAINS R</b>		2R1.5 → 2R2.5	3R1.5

### Notă:

\* Vă rugăm, mixați CHROMA STAINS INTENSE ORANGE (CSIO) din cele patru grupuri de luminozitate în culoarea de pictură CHROMA STAIN corespunzătoare (raport mixare 1:5).

## Controlul culorii

- Este posibilă schimbarea tuturor nuanțelor într-una mai roșiatică sau mai gălbuie prin amestecarea culorilor de pictură una cu alta (raport de mixare: 1:1).

**Exemplu:** Pentru a modifica 2M2 într-o culoare mai gălbuie, mixați CSM3 și CSL în raport 1:1 pentru a obține culoarea 2L2.5.



→ 3L2.5	4L1.5*	→ 4L2.5*	
3M1 → 3M2	4M1* → 4M2*	5M1 → 5M2	
→ 2M3	3M2 → 3M3	4M2* → 4M3*	5M2 → 5M3
→ 3R2.5	4R1.5*	→ 4R2.5*	

 Exemplu de aplicare pe o restaurare unicoronară din zona frontală



**1** Determinarea culorii



Culoarea restaurării nu se integrează  
în dentiția existentă



**2** Aplicarea CHROMA STAINS  
Arderea de fixare a culorilor de pictură sau  
arderea combinată cu VITA AKZENT Plus Glaze  
(vezi tabelul de ardere).



Adaptare cromatică perfectă la dinții existenți

## VITA AKZENT® Plus – Tabele de ardere

### Programe de ardere recomandate


Arderea glazurii pulbere – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Preus- care. °C	min.*	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. aprox. °C	min.	VAC min.	↗ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5.37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT	400	4.00	5.37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-	600**
VITA VM 11	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC GLAZE LT Paste	400	8.00	7.00	50	750	1.00	-	500*
Arderea de fixare a culorilor de pictură	500	4.00	2.30	80	700	1.00	-	-
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder	400	4.00	7.00	50	750	1.00	-	500**

\* Timpul de preîncălzire trebuie crescut de la 4 la 6 minute la ciclurile de ardere a consistenței pastă.

\*\* Răcirea de lungă durată până la temperatura adecvată este recomandată pentru ultimul ciclu de ardere planificat a ceramicii de fațetare. Poziția liftului la cuptoarele VITA VACUMAT trebuie să fie > 75%. Obiectele supuse arderii trebuie protejate de curenții direcți de aer.



 **Atenție:** Pe toate tipurile de restaurări se poate aplica VITA AKZENT Plus GLAZE LT. În aceste cazuri, temperatura poate fi redusă la 750°C.





## HOTLINE TEHNIC

Întrebări cu privire la produsele VITA?

Tehnicienii dentari experimentați și consultanți tehnici  
vă pot răspunde la întrebări aici:

- ▶ **Tel. +49 (0) 7761/56 22 22**
- ▶ **Mail: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **8.00 - 17.00 CET**



## SUPPORT ONLINE

Întrebări despre produse și manipularea lor?

Puteți găsi răspunsurile competente online sub formă de  
**materiale video, FAQs și tutoriale online.**

Informații mai detaliate găsiți în instrucțiunile de utilizare  
complete VITA AKZENT Plus.

- ▶ **[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **[www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)**

# CE 0124

MD



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)