

# VITAVM<sup>®</sup>.CC

## Informacja o produkcji



VITA ustalanie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Stan z 04.17

VITA – perfect match.

**VITA**

Materiał bez wypełniaczy przeznaczony do polimeryzacji na zimno.

Polimer stosujemy do wykonywania tymczasowych uzupełnień protetycznych oraz napraw.

Materiał jest dostępny w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER

i VITA classical A–D.

VITAVM<sup>®</sup>CC dostosowany do różnych zadań




Materiał VITAVM CC nie posiada wypełniaczy i polimeryzujemy go na zimno. Polimer idealnie nadaje się do wykonywania tymczasowych uzupełnień protetycznych oraz napraw. Wykonawstwo tymczasowego uzupełnienia i wszelkie naprawy przeprowadzamy poza jamą ustną pacjenta.

**Zastosowanie:**

- Wykonawstwo tymczasowych koron i mostów
- Mocowanie zębów akrylowych VITA np. w protezach szkieletowych
- Naprawy
- Pokrywanie zasuw w pracach złożonych



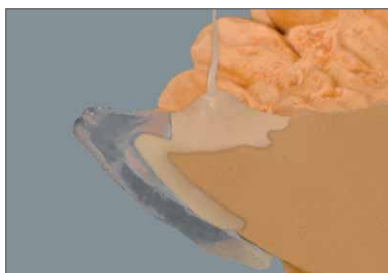

**Zdj. 1:** ukazuje przekrój poprzeczny obszaru równomiernie wypełnionego kompozytem.

Zastosowanie polimerów najwyższej klasy oraz ich odpowiednia obróbka, gwarantują znakomitą jakość techniczną materiału VITAVM CC.

#### **Łatwa obróbka**

Bardzo dobre właściwości mieszania masy oraz znakomita zdolność płynięcia, umożliwiają łatwą i szybką obróbkę materiału. Takie właściwości gwarantują wykonywanie uzupełnień protetycznych w bardzo krótkim czasie.

#### **Gładka powierzchnia**

Homogeniczna struktura materiału umożliwia łatwe polerowanie i wyklucza kumulację płytki nazębnej, oraz redukuje w znacznym stopniu jej osadzanie. Gładka powierzchnia tymczasowego uzupełnienia protetycznego gwarantuje dobre samopoczucie pacjenta. Uzupełnienie tymczasowe wykonane z materiału VITAVM CC jest bardzo trwałe i odgrywa znaczącą rolę w osiągnięciu odpowiednich walorów estetycznych tak ważnych dla pacjenta.

#### **VITA VM CC gwarantuje następujące korzyści**

- Znakomita zdolność płynięcia materiału
- Wysoka jakość mieszania
- Łatwe polerowanie powierzchni
- Stabilność koloru w porównaniu z innymi systemami
- Znakomita stabilność materiału dzięki idealnie dobranej wytrzymałości na zginanie oraz odpowiednio dobranemu modułowi elastyczności – czynnikowi, który minimalizuje niebezpieczeństwo złamania
- Wyklucza kumulację płytki nazębnej oraz w znacznym stopniu redukuje jej osadzanie
- W czasie utwardzania przy użyciu / lub bez garnka ciśnieniowego, wyklucza tworzenie się pęcherzy.




### System BASIC

VITA VM CC BASE DENTINE



VITA VM CC ENAMEL

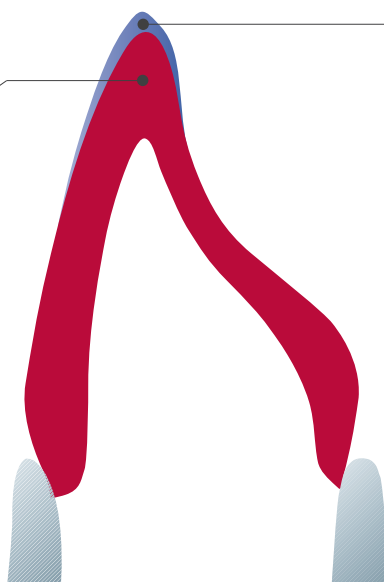

#### System BASIC

System nakładania warstw BASIC materiału VITA VM CC o intensywnych kolorach składa się z dwóch mas:

- BASE DENTINE
- ENAMEL

Użytkownik może za pomocą dwóch warstw, wykonać trwałe uzupełnienie tymczasowe o wysokich walorach estetycznych.

#### Indywidualizowanie uzupełnienia

Za pomocą mas dodatkowych można odpowiednio i łatwo, zreprodukować wszystkie naturalne efekty i cechy charakterystyczne zębów pacjenta.



### Uzupełnienie tymczasowe jako podstawa sukcesu

Uzupełnienie tymczasowe jest ważnym elementem w procesie leczenia pacjenta. Zasadniczo służy do ochrony oszlifowanych zębów i tymczasowo odtwarza estetykę oraz funkcję w jamie ustnej pacjenta.



Odpowiednio wykonane uzupełnienie tymczasowe spełnia dodatkowe funkcje. Dzięki niemu możemy optymalnie określić kształt wykonywanego uzupełnienia stałego. Szczególnie w przypadku odbudowy zębów przednich możemy za pomocą uzupełnienia tymczasowego przeprowadzić korekturę estetyki, fonetyki oraz funkcji.



Poza tym uzupełnienie tymczasowe ułatwia pacjentowi akceptację nowej sytuacji zaistniałej w jamie ustnej. Uzupełnienie tymczasowe wykonane z materiału VITAVM CC, odgrywa znaczącą rolę w osiągnięciu odpowiednich walorów estetycznych tak ważnych dla pacjenta.

**Zdj. 1:** sytuacja przed rehabilitacją

**Zdj. 2:** tymczasowe uzupełnienie w odcinku przednim wykonane z materiału VITAVM CC

**Zdj. 3:** sytuacja w jamie ustnej pacjenta zaraz po założeniu stałego uzupełnienia protetycznego (podbudowa VITA In-Ceram YZ licowana ceramiką VITAVM 9)



Forma uzupełnienia tymczasowego powinna dokładnie odzwierciedlać typ pacjenta. W tym celu możemy posłużyć się zębami konfekcyjnymi.






Aby odpowiednio określić właściwy kształt i kolor zębów stosujemy np. szablon kształtów VITA PHYSIODENS. W ten sposób pacjent wspólnie z technikiem dentystą i stomatologiem określa kształt i kolor nowego uzupełnienia protetycznego.

## VITAVM<sup>®</sup>CC modułowa i ergonomiczna budowa asortymentu

	<p><b>VITAVM<sup>®</sup>CC BASIC KIT 16-COLOR*</b> Zestaw BASIC do nakładania warstw systemem BASIC</p>
	<p><b>VITAVM<sup>®</sup>CC BASIC KIT 5-COLOR*</b> Mały zestaw BASIC do nakładania warstw systemem BASIC o zredukowanej ilości mas</p>
	<p><b>VITAVM<sup>®</sup>CC CLASSICAL COLOR KIT</b> Poszerzony asortyment dla użytkowników kolornika 3D-MASTER, którzy chcą poszerzyć swój asortyment o materiał VITA classical A–D (bez koloru B1).</p>
	<p><b>VITAVM<sup>®</sup>CC PROFESSIONAL KIT**</b> Zestaw do wykonywania naturalnych efektów oraz charakterystyki uzupełnień protetycznych.</p>

\* oferta w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITA classical A–D

\*\*stosować w połączeniu z kolorami VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITA classical A–D

	<p><b>VITA Easychade<sup>®</sup> V</b></p> <p>W celu cyfrowego poboru koloru stosujemy urządzenie VITA Easychade<sup>®</sup> V oraz tradycyjną metodę wzrokową kolornikami VITA Linearguide 3D-MASTER<sup>®</sup> lub VITA classical A1–D4<sup>®</sup>.</p>
	<p><b>VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER<sup>®</sup></b></p> <p>Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER wyznaczamy szybko i precyzyjnie odpowiedni kolor zębów. VITA Linearguide 3D-MASTER jest alternatywą dla sprawdzonego VITA Toothguide 3D-MASTER i cechuje się liniowym przyporządkowaniem konfekcyjnych kolorów zębów.</p>
	<p><b>Kolornik VITA classical A1–D4</b></p> <p>Oryginalny kolornik do wyznaczania kolorów wg skali VITA classical A–D. Dodatkowy VITA Bleached Shades umożliwia dobór właściwego koloru w wybielonych zębach.</p>
	<p><b>Zęby akrylowe VITA PHYSIODENS<sup>®</sup>, VITAPAN<sup>®</sup>, VITAPAN PLUS<sup>®</sup>, VITA LINGOFORM<sup>®</sup></b></p> <p>Wszystkie cztery typy zębów można stosować w każdym przypadku klinicznym. Materiał, z którego zostały wyprodukowane, sprawdził się na przestrzeni wielu lat i cechuje się znakomitą abrazją. Materiał VITA VM CC i zęby konfekcyjne VITA optymalnie ze sobą korelują.</p>
	<p><b>VITACOLL<sup>®</sup> pośrednik przyczepność</b></p> <p>Pośrednik przyczepności VITACOLL umożliwia pewne spojenie chemiczne zębów akrylowych z takimi polimerami jak np. VITAVM CC, których polimeryzacja przeprowadzana jest na zimno lub na ciepło. Materiał VITA VM CC skutecznie eliminuje wyłamywanie się zębów akrylowych np. z podstawy protezy.</p>

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Materiał VITAVM CC przeznaczony do wykonywania uzupełnień tymczasowych jest dostępny w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER oraz VITA classical A–D, a to oznacza kompatybilność ze wszystkimi kolorami materiałów VITA 3D-MASTER i VITA classical A–D.

Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne kolory zębów.



**UWAGA!** Produkt ten został opracowany do ściśle określonego zastosowania. Dlatego też powinien być stosowany zgodnie z instrukcją. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu, jeżeli pragnie się go zastosować do innych potrzeb. Wyklucza się odpowiedzialność producenta, jeżeli produkt ten nie będzie stosowany ze zgodnymi z nim materiałami oraz urządzeniami innych firm. Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych, niezależnie od podstawy prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdym przypadku do wartości dostawy według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk, pośrednie szkody, szkody będące następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób trzecich przeciwko kupującemu. Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania (zadłużenia w przypadku zawartego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu, niedozwolonego działania itp.) są możliwe tylko w przypadku rozmyślnego działania lub poważnego zaniedbania.  
Wydanie broszury informacyjnej: 04.17

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych. Następujące materiały posiadają certyfikat oraz oznaczenie **CE** 0124 :  
**VITAVM<sub>CC</sub>** · **VITA PHYSIODENS<sup>®</sup>** · **VITAPAN<sup>®</sup>** · **VITAPAN PLUS<sup>®</sup>**  
**VITA LINGOFORM<sup>®</sup>** · **VITACOLL<sup>®</sup>**

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com