


De veilige weg naar een nette prothese

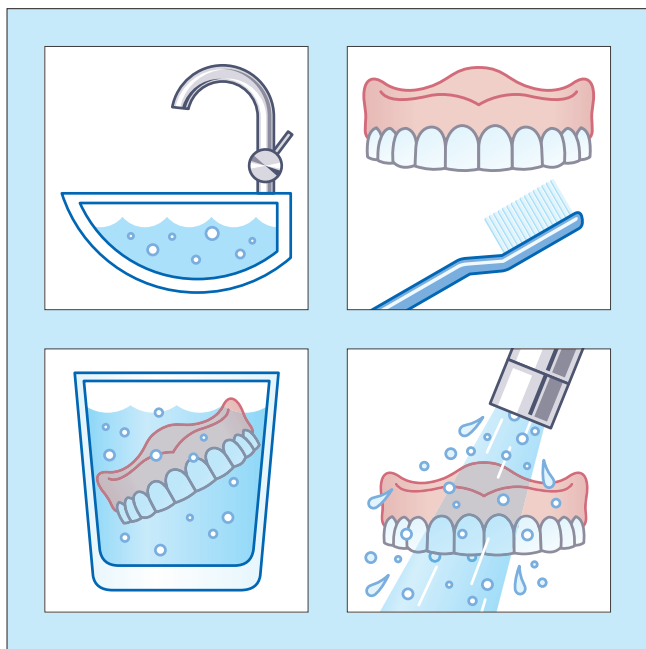

Uitgave 2021-08

VITA – perfect match.

VITA

Beste patiënte, beste patiënt,

Vandaag kreeg u uw nieuwe gebitsprothese van ons. Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

Uw prothese werd speciaal voor u gemaakt. Dankzij het gebruik van VITA prothesetanden zorgt uw gebitsprothese weer voor een natuurlijke glimlach. **Geniet van de uitstekende functionaliteit en een buitengewoon draagcomfort.**

Wij hopen dat u zo lang mogelijk plezier zal hebben van uw gebitsprothese. Opdat er ook op lange termijn geen klachten zouden voordoen, geven we u hierbij graag enkele onderhoudstips mee.

Voor bijkomende vragen kan u ons altijd contacteren - onze contactinformatie vindt u op de achterzijde.


Stap één: spoelen



Als bescherming tegen aanslag en om ontstekingen te vermijden reinigt u het best de hele prothese, 's morgens en 's avonds, grondig met stromend water.

Om uw prothese optimaal te beschermen, raden we aan om de reiniging uit te voeren in een met water gevulde waskom. Ook kan u een handdoek op de bodem van uw lavabo leggen.

Stap twee: reinigen en borstelen

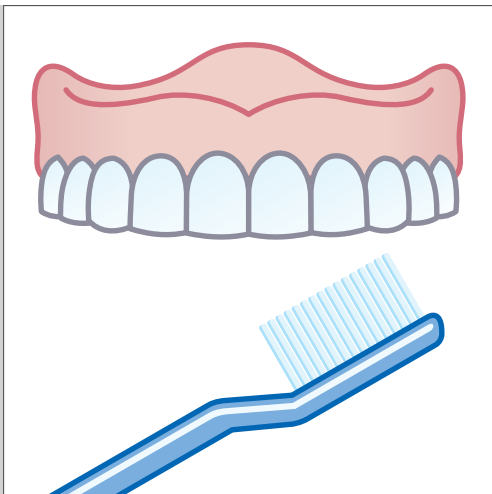


Vervolgens reinigt u de prothese in uw hand met een zachte borstel. Het meest geschikt hiervoor zijn handtandenborstels of tandprotheseborstels met nylonharen.

Belangrijk: Borstel alle tanden zeer zorgvuldig en let vooral ook op alle tussenruimten en alle plaatsen waar er contact met het tandvles of de natuurlijke tanden mogelijk is.

Gebruik voor de reiniging **warm water** en een **tandcrème ZONDER schurende partikels**.

Stap drie: laten weken

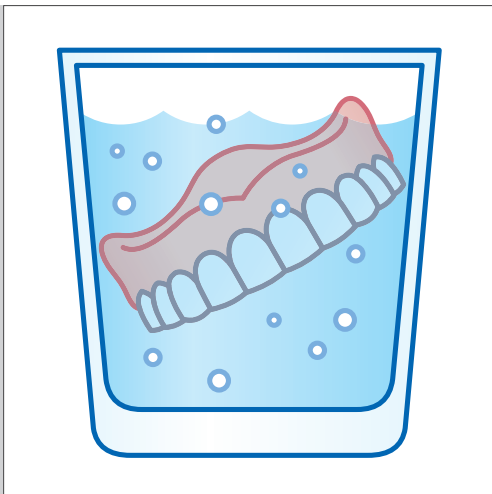

Spoel de prothese na het poetsen nog eens grondig met koud water en leg hem daarna voor een verdere reiniging in een voldoende groot en met water gevuld reservoir.

Stelt u ondanks het regelmatig reinigen toch aanslag vast, dan kan u gebruik maken van een ultrasoon toestel. Neem daarvoor contact op met uw tandarts. Daarnaast kan u de prothese ook gedurende tien minuten in een bad leggen met een 5-10%-azijnoplossing. Om de lange levensduur van uw tandprothese met VITA tanden te garanderen, raden we aan om geen agressieve reinigingstabletten of -oplossingen te gebruiken en de hier omschreven reinigingstips na te leven.


Stap vier: afspoelen



Spoel de prothese nog eens grondig onder stromend water vooraleer hem opnieuw te dragen.

Een regelmatige reiniging en controle bij de tandarts zal ervoor zorgen dat de hoge kwaliteit van uw prothese lang gegarandeerd blijft. Bovendien beschermt u op die manier uw gezondheid en vermijdt u mogelijke herstellkosten.

We wensen u steeds een goede beet!



Met vriendelijke aanbeveling van uw tandarts/dentaaltechnicus

We helpen u graag!

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik