

VITAPAN EXCELL®

Τέλειο σχήμα. Ακριβές χρώμα. Δυναμική διάδραση με το φως



Χρωματοληψία VITA

Σχετική με το χρώμα επικοινωνία VITA

Παραγωγή χρωμάτων VITA

Έλεγχος χρωμάτων VITA

Τελευταία ενημέρωση 2022-10

VITA – perfect match.

VITA

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το **VITAPAN EXCELL**[®] είναι ένα δόντι προσθετικής αποκατάστασης νέας γενιάς με εξαιρετικά ζωντανό σχήμα, χρώμα και διάδραση με το φως. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.



VITAPAN EXCELL:
Ζωντανά σχήματα δοντιών με
χρυσές αναλογίες

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣ



Τι;

- Το VITAPAN EXCELL είναι ένα πρόσθιο δόντι νέας γενιάς από σύνθετο MRP με εξαιρετική διάδραση σχήματος, χρώματος και φωτός για προσθετικές αποκαταστάσεις με φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Για ποιο σκοπό;

- Το VITAPAN EXCELL ενδείκνυται ιδίως για ολικές, μερικές και εμφυτευματικές αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής.

Με τι;

- Τα VITAPAN EXCELL πρόσθια σε συνδυασμό με τα VITAPAN LINGOFORM οπίσθια δόντια, είναι ο καταλληλότερος πολυλειτουργικός συνδυασμός για όλα τα είδη σύνταξης οδοντοστοιχιών.



✦ ζωντανά πολυεδρα
σχήματα

✦ εξαιρετική εναλλαγή
χρωμάτων/φωτός

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



ΰψογο σχήμα



Δυναμική διάδραση με το φως



Ακριβές χρώμα.

Απλή κατασκευή

- εύκολη δημιουργία οδοντοστοιχιών υψηλής αισθητικής χάρη στην ζωντάνια των δοντιών με «χρυσές» αναλογίες

Εξαιρετική ζωντάνια

- επίτευξη εξαιρετικά φυσικού παιχνιδιού χρώματος και φωτός χάρη στην ζωντανή δυναμική συμπεριφορά των δοντιών με το φως

Αξιόπιστη απόδοση χρώματος

- επιτρέπει την απόδοση του χρώματος χάρη στη ιδανική χρωματική πιστότητα με τη χρωματική κλίμακα

Υψηλή αντοχή

- αξιόπιστα υψηλή αντοχή χάρη στο σταθερό στην τριβή σύνθετο υλικό MRP

Κριτήρια για μια νέα γενιά

Ένα πρόσθιο δόντι χρειάζεται

- ✓ «χρυσές» αναλογίες ως προς το μήκος, πλάτος κτλ.
- ✓ προσαρμοσμένοι άξονες των δοντιών
- ✓ φυσικά χαρακτηριστικά γωνιών/κυρτότητας

Ένα πρόσθιο δόντι απαιτεί

- ✓ φυσική μετάδοση φωτός
- ✓ ζωντανή διάδραση με το φως


Ένα πρόσθιο δόντι είναι αναγκαίο να διαθέτει

- ✓ υψηλή χρωματική πιστότητα με το χρωματολόγιο VITA
- ✓ αρμονική χρωματική συνέχεια



VITAPAN EXCELL: Μια νέα γενιά,
δημιουργημένη με πάθος
για τη λεπτομέρεια

ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΔΟΝΤΙ ΜΕ ΧΡΥΣΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

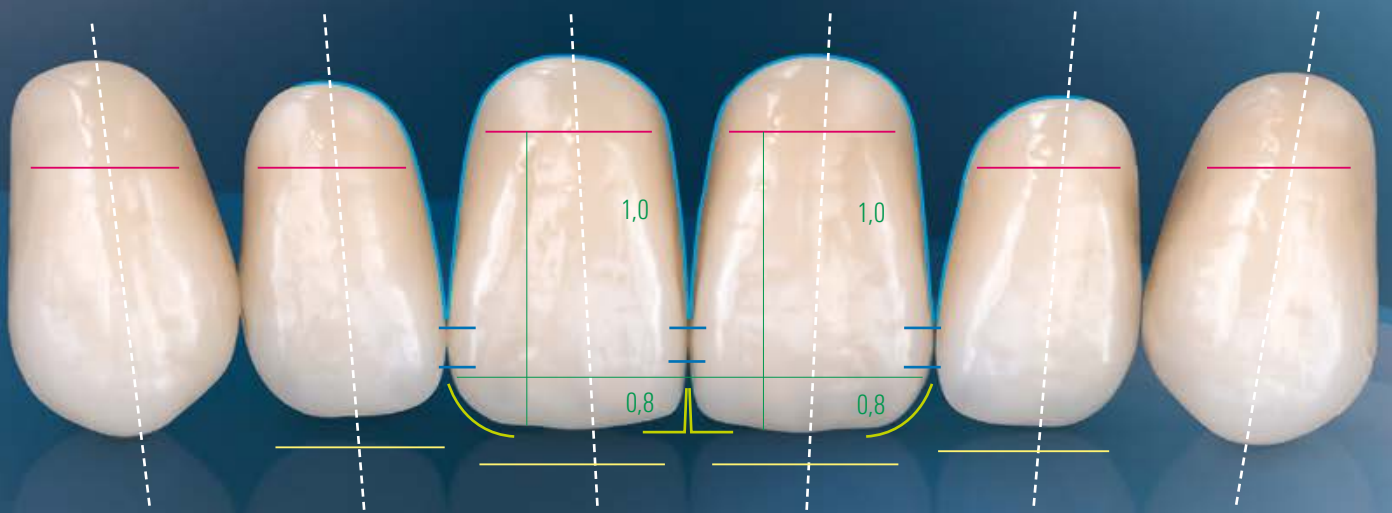

★ Άξονες δοντιών ★ Επιφάνειες επαφής ★ Χαρακτηριστικά γωνίας ★ Διαστάσεις δοντιού ★ Μορφή ούλων ★ Αναλογία μήκους-πλάτους

Το VITAPAN EXCELL επιτρέπει

- **εύκολη προσομοίωση της φυσικής συμμετρίας**
χάρη σε σχήματα με ισορροπημένη αναλογία μήκους-πλάτους
- **άνετη αναπαραγωγή της θέσης του δοντιού**
χάρη στα πρόσθια δόντια με ευθυγραμμισμένους άξονες των δοντιών



ΒΙΤΑΡΑΝ EXCELL: Δημιουργημένο σύμφωνα με τις καθολικά αποδεκτές αρχές για φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα


ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΟΝΤΙ



VITAPAN EXCELL: Το δόντι οδοντοστοιχίας για επαγγελματική διαμόρφωση μεσοδόντιου διαστήματος/θηλής

Το VITAPAN EXCELL επιτρέπει

- **χάρη στον πλατύ οδοντικό αυχένα του,** την εξαιρετική δυνατότητα διαμόρφωσης των ούλων, για την επίτευξη τέλει αισθητικής λευκού-κόκκινου.

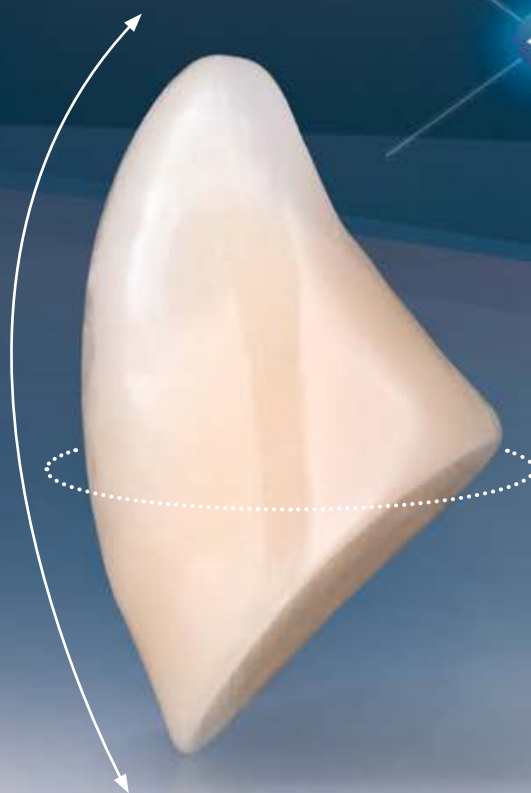

Το VITAPAN EXCELL διαθέτει φυσικά χαρακτηριστικά κυρτότητας

Το VITAPAN EXCELL επιτρέπει

- Ζωντάνια στο παιχνίδι του σχήματος
χάρη στις φόρμες με φυσικά χαρακτηριστικά γωνίας / καμπυλότητας.

ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ



Η μαγεία της ζωντανής φυσικότητας
χάρη στη διάθλαση και την ανάκλαση

Το VITAPAN EXCELL διαθέτει

- **έξοχη μετάδοση του φωτός**
χάρη στο υψηλό ποσοστό αδαμαντίνης
- **ζωντανή δυναμική αλληλεπίδραση με το φως**
χάρη στα ενσωματωμένα ιριδίζοντα εφέ
- **ζωηρή διάδραση με το φως**
χάρη στην πολυεπίπεδη επιφανειακή υφή του

έξοχη μετάδοση φωτός

Τα VITAPAN EXCELL παρουσιάζουν μια φυσική διαύγεια στην κοπτική περιοχή για φυσική διάδραση με το φως.



ενσωματωμένοι λοβοί (mamelons)/ιριδισμός

Χάρη στα ενσωματωμένα ιριδίζοντα εφέ, το VITAPAN EXCELL εμφανίζει μια φυσική ποικιλία χρωμάτων.



πολυεπίπεδη επιφανειακή υφή

Για να διασφαλιστεί η φυσική διάχυση και ανάκλαση του φωτός, το VITAPAN EXCELL διαθέτει πολυεπίπεδη επιφανειακή υφή




φυσικός φθορισμός

Χάρη στον ενσωματωμένο φθορισμό, το VITAPAN EXCELL παρουσιάζει μια εντυπωσιακή δυναμική διάδραση με το φως.



ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

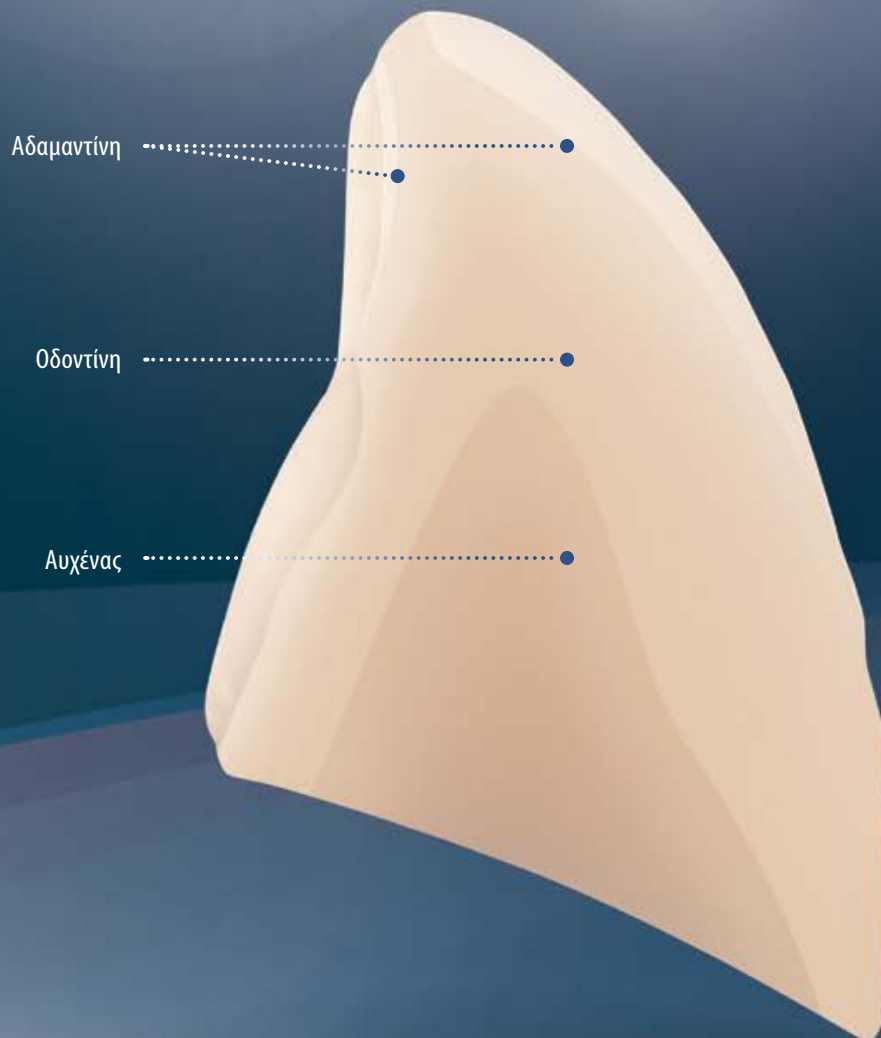

Το VITAPAN EXCELL προσφέρει

- **Αρμονική μετάβαση του χρώματος από την** περιοχή του αυχένα στην κοπτική περιοχή **χάρη στην** μοναδική τρισδιάστατη χρωματική διαστρωμάτωση*

*) Συστηματική αναπαραστάση της διαβαθμισμένης δομής του VITAPAN EXCELL

VITAPAN EXCELL ◀ ▶ Χρωματολόγιο VITA



A3

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μερικής νωδότητας είναι πολύ σημαντική η χρωματική πιστότητα ενός προσθετικού δοντιού

Το VITAPAN EXCELL προσφέρει

- **υψηλή χρωματική πιστότητα με το χρωματολόγιο VITA** χάρη σε ισορροπημένες τιμές φωτεινότητας, έντασης και απόχρωσης

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ



Συνδυασμός προσθίων/ οπισθίων δοντιών:

- Ένας ταιριαστός συνδυασμός: VITAPAN EXCELL και VITAPAN LINGOFORM
- για την τελειώτερη προσθετική σε σχήμα, χρώμα και λειτουργικότητα
 - χρησιμοποιούνται για όλα τα είδη σύνταξης οδοντοστοιχιών, χαρη στον πολυλειτουργικό σχεδιασμό τους

Σχέδια σύνταξης:

- Για συντάξεις γλωσσικής/ισορροπημένης σύγκλισης:
π.χ. κατά Gysi, κατά Prof. A. Gerber, κατά APF/TiF, κατά ABC

Ενδείξεις:

- Ενδείκνυται για ολικές και μερικές προσθετικές αποκαταστάσεις
- Ενδείκνυται για εμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις





ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Με το VITAPAN EXCELL παρέχεται η δυνατότητα αξιόπιστης αποκατάστασης της λειτουργικότητας, της φωνητικής και της αισθητικής. Περισσότερες πληροφορίες για τα κλινικά παραδείγματα επιτυχίας στις επόμενες σελίδες.



Με το VITAPAN EXCELL μπορείτε να ενθουσιάσετε μακροπρόθεσμα τους θεραπευτές και τους ασθενείς.

Το VITAPAN EXCELL® ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ




➔ **ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:** Η αισθητική εμφάνιση έδειξε σαφή ελλείματα.




1 Η μασθητική αποδοτικότητα και η φωνητική δεν ήταν ικανοποιητικές.



2 Οι αισθητικά και λειτουργικά ανεπαρκείς οδοντοστοιχίες παρουσίαζαν σημαντικές ενδείξεις τριβής των επιφανειών μάσησης.

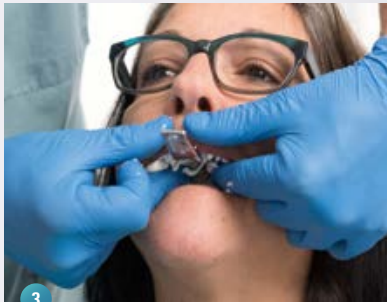

3 Με συμβατικά ανατομικά δισκάρια αποτύπωσης διαμορφώθηκαν οι φατνιακές ακρολοφίες στην άνω και στην κάτω γνάθο.

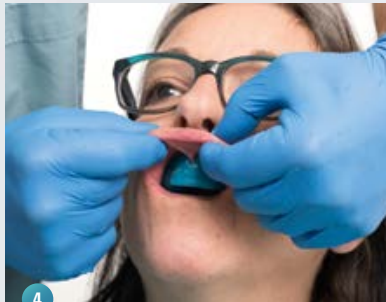

4 Η έδραση των επιμέρους δισκαρίων αποτύπωσης πρέπει να διασφαλίζεται και κατά τις κινήσεις στόματος και βλεννογόνων.



5 Μια εγκόπη συγκράτησης διαμορφώθηκε στο κέρινο τοίχωμα της κάτω γνάθου για τη στερέωση της σιλικόνης.



6 Τριγωνικές αυλακώσεις στο πρότυπο 'δαγκώματος' της άνω γνάθου καθιστούν δυνατή την κλινική επανατοποθέτηση και τον έλεγχο του κεντραρίσματος.



7 Η κεντρική θέση κονδύλων καθορίζεται με σιλικόνη και στη συνέχεια ελέγχεται.



8 Δεδομένου ότι το VITAPAN EXCELL βασίζεται στο πρότυπο της φυσικής οδοντοφυΐας, είναι δυνατή μια γρήγορη και εξατομικευμένη σύνταξη σε κέρι.



9 Η ασθενής ήταν σε θέση να εκφωνήσει το γράμμα «F» χωρίς προβλήματα κατά τη δοκιμή κεριού.



10 Η τρισδιάστατη, ανατομικά πολυεπίπεδη δομή, σε συνδυασμό με την πολύπλευρη υφή της επιφάνειας, επέτρεψαν ένα φυσικό παιχνίδι χρώματος και φωτός.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Η ασθενής ήταν ενθουσιασμένη από το εξαιρετικά καλαίσθητο αποτέλεσμα και τη λειτουργικότητα της νέας αποκατάστασης.



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ


Το **VITAPAN EXCELL**[®] είναι ένα προσθετικό δόντι, δημιουργημένο από οδοντοτεχνίτες για τους οδοντοτεχνίτες. Μάθετε τώρα περισσότερα για τα υλικά, την παραγωγική διαδικασία και τους χρήστες στα εργαστήρια.



Με τα προσθετικά δόντια VITA,
εμπιστεύεστε υψηλά πρότυπα
παραγωγής και ελεγμένη ποιότητα




VITAPAN EXCELL® – 100 % GERMAN DENTAL ENGINEERING BY VITA

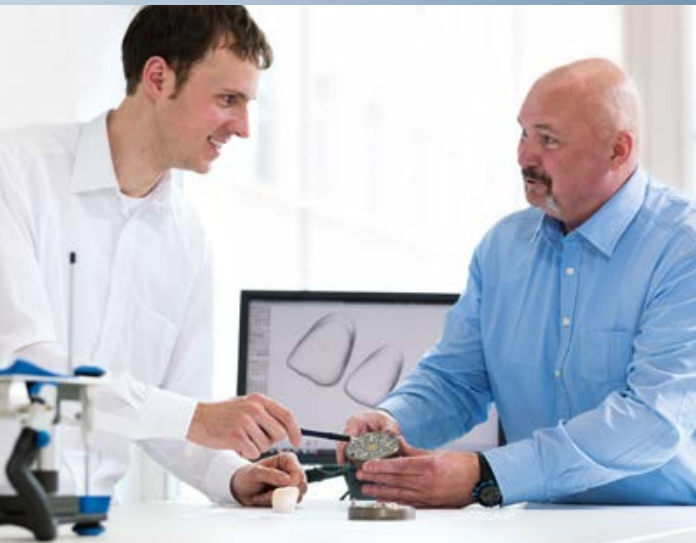

Ανάπτυξη, σχεδιασμός και μορφοποίηση Για ιδανική εφαρμογή στην πράξη

Το VITAPAN EXCELL σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με βάση τα φυσικά δόντια. Οι προγραμματιστές και οι μηχανικοί της VITA έλαβαν πληροφορίες και ιδέες για το προϊόν από έμπειρους οδοντοτεχνίτες σε όλο τον κόσμο.

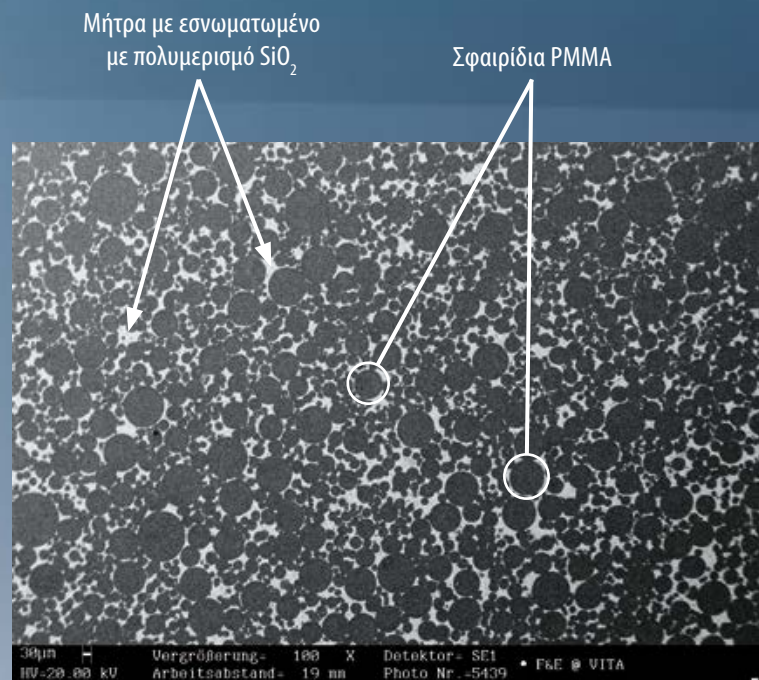

Φωτογραφία REM VITA Σύνθετο υλικό MRP Πηγή: VITA F&E



Σύνθετο υλικό MRP Για υψηλή αντοχή

Τα δόντια οδοντοστοιχιών VITAPAN EXCELL είναι κατασκευασμένα από MRP composite .(Microfiller Reinforced Polymer matrix). Το MRP composite είναι ένα πολύ-διασυνδεδεμένο (highly cross-linked) πολυμερές πλέγμα με ομοιογενώς καταμεμημένα, πολυμερισμένα microfillers SiO_2 .



Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής Για βέλτιστη ποιότητα

Το VITAPAN EXCELL κατασκευάζεται στη Νότια Γερμανία, στην έδρα της εταιρείας VITA, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα παραγωγής και ποιότητας – για αξιόπιστη προσθετική.



Έλεγχος στο εργαστήριο Για αξιόπιστη χρήση

Πριν από την κυκλοφορία στην αγορά, το VITAPAN EXCELL δοκιμάστηκε σε πολυάριθμα εργαστήρια ανά τον κόσμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αξιοπιστία του δοντιού.



Γερμανική μηχανική τέχνη, συνδυασμένη με εξειδικευμένη οδοντοτεχνική γνώση – από το 1924

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 96% ΜΕ VITAPAN EXCELL®

Απόψεις ειδικών για το αισθητικό αποτέλεσμα του VITAPAN EXCELL®


«Το σχήμα και η επιφανειακή δομή μου αρέσουν πολύ, όλα δείχνουν πολύ φυσικά!»

Urban Christen διπλωματούχος οδοντοτεχνίτης, Hunzenschwil



«Η υφή, η εναλλαγή χρωμάτων, η αναλογία οδοντίνης -διαφάνειας ... όλα αυτά κάνουν το δόντι να δείχνει ζωντανό!»

Daniel Sperlich, οδοντοτεχνίτης, Freiburg

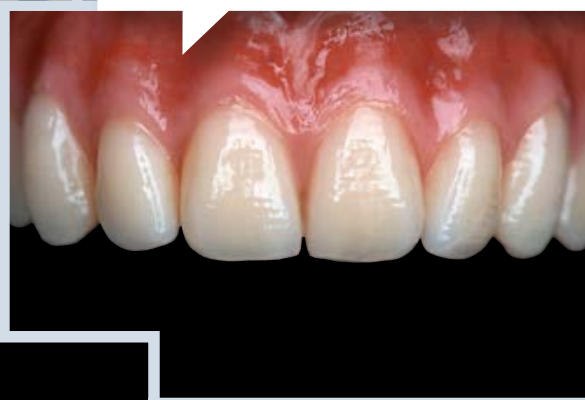


«Το προσθετικό δόντι έχει εξαιρετικά ζωντανή εμφάνιση χάρη στο συνδυασμό επίστρωσης, ημιδιαφάνειας, υφής και λαμπρότητας!»

Οδοντοτεχνίτης Conrad Frerichs, Oldenburg



«Το πραγματικά ενδιαφέρον στοιχείο του VITAPAN EXCELL® είναι το ζωντανό σχήμα και χρώμα του.»

Οδοντοτεχνίτης Berit Hantusch, Bautzen



*«Ιδιαίτερα ωραίο θεωρώ στο VITAPAN EXCELL
το ζωντανό φυσικό σχήμα του δοντιού!»*

Οδοντοτεχνίτης Benjamin Strasser, Regensburg

Αποτελέσματα μετά από οδοντοτεχνική αξιολόγηση*

- **96 % ικανοποίηση με την αισθητική εμφάνιση**
96 % των οδοντοτεχνιτών που ερωτήθηκαν, αξιολογούν το αισθητικό οπτικό αποτέλεσμα του VITAPAN EXCELL ως καλό ή πολύ καλό
- **Ιδιαίτερα καλή αξιολόγηση του σχήματος, του χρώματος και της υφής**
Στους οδοντοτεχνίτες αρέσει ιδιαίτερα το σχήμα, οι χρωματικοί τόνοι και η επιφανειακή υφή του VITAPAN EXCELL


*) Πηγή: Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο της αξιολόγησης του VITAPAN EXCELL σε επιλεγμένα οδοντοτεχνικά εργαστήρια (N=25), Μελέτη και έκθεση: 4eins41 Διοίκηση επιχειρήσεων και έρευνα αγοράς, 10/2016 ([1], βλ. οπισθόφυλλο ενημερωτικού φυλλαδίου)

Πηγή φωτογραφιών: Προσθετική αποκατάσταση VITAPAN EXCELL του οδοντοτεχνίτη Franz Horpe, Saerbeck, Γερμανία. Φωτογραφική τεκμηρίωση από την Marita Heeren, Oldenburg, Γερμανία.

A close-up, shallow depth-of-field photograph of a computer keyboard. The focus is on the orange keycaps, which are slightly blurred. The background is a soft, out-of-focus blue and white. The keyboard is light grey.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μάθετε τώρα περισσότερα σχετικά με την ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων, τους προτεινόμενους συνδυασμούς και τα προτεινόμενα εξαρτήματα του συστήματος.



Το πάθος για την προσθετική είναι εκείνο που ενώνει τους οδοντοτεχνίτες και την εταιρεία VITA εδώ και πολλές γενιές.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

VITAPAN EXCELL® Anterior

> Διαθέσιμα χρώματα:

- 28 χρώματα VITA SYSTEM 3D-MASTER®
0M1, 0M3, 1M1 – 5M3
- 15 χρώματα VITA classical A1–D4®
A1–D4 (χωρίς B1)

VITAPAN® LINGOFORM Posterior

> Διαθέσιμα χρώματα:





- 27 χρώματα VITA SYSTEM 3D-MASTER®
0M3, 1M1 – 5M3
- 15 χρώματα VITA classical A1–D4®
A1–D4 (χωρίς B1)

VITAPAN EXCELL OK-Anterior								
 ωοειδές	O41  10,1 7,4	O43  9,7 7,9	O45  9,7 8,4	O47  10,3 8,6	O48  11,1 9,1	O49  11,2 9,0	O51  12,3 9,3	
 τρίγωνο	T42  9,5 7,7	T44  9,7 8,1	T46  11,1 8,2	T47  11,2 8,5	T48  10,5 8,7	T50  11,6 9,2	T51  11,8 9,4	T54  12,7 9,8
 ορθογώνιο	R45  9,9 8,2	R47  11,2 8,6	R49  11,6 8,9					
 τετράγωνο	S46  10,3 8,5	S48  9,1 8,7	S52  10,7 9,6					
VITAPAN EXCELL UK-Anterior								
	L33  9,0 5,0	L35  9,9 5,2	L37  9,4 5,5	L37LC  11,4 5,6	L39  9,8 6,0	L41  10,8 6,1		

VITAPAN LINGOFORM Posterior

21L 9,6  10,0	22L 10,0  10,2	23L 10,9  10,8	24L 11,0  11,2
--	---	---	---

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

VITAPAN EXCELL Anterior		VITAPAN LINGOFORM Posterior	
OK/Αρ.  mm	UK/Αρ.  mm	OK/Αρ.  mm	UK/Αρ.  mm
041 41,3	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
043 43,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
045 45,1	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
047 47,3	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
048 48,1	L37/ L37LC 37,3/ 37,4	22L 31,6	22L 32,1
049 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8
051 51,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4

VITAPAN EXCELL Anterior		VITAPAN LINGOFORM Posterior	
OK/Αρ.  mm	UK/Αρ.  mm	OK/Αρ.  mm	UK/Αρ.  mm
T42 42,0	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
T44 44,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
T46 46,2	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
T47 46,9	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
T48 48,1	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
T50 50,0	L39 39,0	24L 35,8	24L 36,4
T51 51,4	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8
T54 54,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4

R45 45,4	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
R47 47,0	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
R49 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8

S46 46,3	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
S48 47,9	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
S52 52,1	L41 41,2	23L 34,2	23L 34,8

Οι πληροφορίες στον πίνακα συνδυασμών αποτελούν γενικές, μη δεσμευτικές τιμές για τον προσανατολισμό, που μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την εκάστοτε εξατομικευμένη κατάσταση του ασθενούς

ΣΕΤ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ



Κάρτα σχημάτων VITAPAN EXCELL

Μεταλλική θήκη με όλα τα σχήματα για την επιλογή δοντιού:

- VITAPAN EXCELL Anterior

Θήκες δοντιών VITAPAN EXCELL

- X-Small*: 67 σετ / 402 Anterior
- Small*: 134 σετ / 804 Anterior
- Medium*: 268 σετ / 1.608 Anterior
- Large*: 400 σετ / 2.400 Anterior


Διαθέσιμες σε χρώματα VITA classical A1–D4® και VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**



*) Ευχαρίστως σχεδιάζουμε μια θήκη της επιλογής σας, σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

**) δείτε τα διαθέσιμα χρώματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

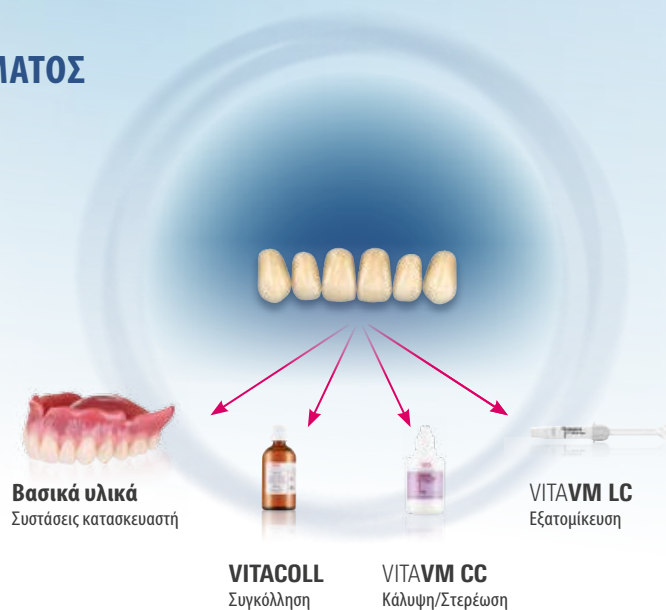

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποτύπωση /
Κατασκευή
αποτυπώματος



- Για την αποτύπωση θέσης/λειτουργικότητας χρησιμοποιήστε **κατάλληλα δικάρια και υλικά αποτύπωσης**.

Χρωματικός
προσδιορισμός*



- Για τον χρωματικό προσδιορισμό σε περίπτωση μερικής νωδότητας, χρησιμοποιήστε **VITA Easyshade V** ή ένα χρωματολόγιο της VITA.

Ανάλυση
αποτυπώματος/
Επιλογή σχήματος



- Μετά την ανάλυση του εκμαγείου, χρησιμοποιήστε το μεγεθολόγιο της VITA με τα σχήματα και τα μεγέθη, για να επιλέξετε τα κατάλληλα δόντια.

Κέρωμα



- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα κεριά και εργαλεία επεξεργασίας για σύνταξη στο κερί και **προσομοίωση της μάσησης**.

Συγκόλληση



- Για ασφάλεια στο δεσμό μεταξύ των δοντιών VITA και των υλικών βάσης, χρησιμοποιήστε το συγκολλητικό παράγοντα **VITACOLL**.

Βασική
κατασκευή



- Για τη βάση της οδοντοστοιχίας χρησιμοποιήστε τα **ψυχρά/θερμά πολυμερή** που προτείνει η VITA, με μέθοδο έγχυσης ή πίεσης.

Ολοκλήρωση



- Για την ολοκλήρωση χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία στίλβωσης και για την εξατομίκευση σύνθετο **υλικό επικάλυψης VITA VM LC**.

*) Οπτικός και μετρολογικός προσδιορισμός χρώματος μόνο με σε περίπτωση μερικής νωδότητας.

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΟΗΘΕΙΑ

► Περισσότερες πληροφορίες για προϊόντα και την επεξεργασία παρέχονται επίσης στην ιστοσελίδα www.vita-zahnfabrik.com



Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης Hotline, υποστήριξη πωλήσεων

Για παραγγελίες και ερωτήσεις για την παράδοση, για δεδομένα προϊόντων καθώς και για διαφημιστικά υλικά, η κυρία Carmen Holsten και η ομάδα εσωτερικής διανομής είναι στη διάθεσή σας.

► Τηλέφωνο +49 (0) 7761 / 56 28 84
Φαξ +49 (0) 7761 / 56 22 99
8.00 έως 17.00 CET
E-mail info@vita-zahnfabrik.com



Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης Hotline για τεχνικά ζητήματα

Για τεχνικά ερωτήματα σχετικά με τις ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΪΟΝΤΩΝ VITA PROTHETIK μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δρ. Michael Tholey και την ομάδα του τεχνικής υποστήριξης.

► Τηλέφωνο +49 (0) 7761 / 56 22 22
Φαξ +49 (0) 7761 / 56 24 46
8.00 έως 17.00 CET
E-mail info@vita-zahnfabrik.com



ΛΥΣΕΙΣ VITA PROTHETIK

Για τις καλύτερες προσθετικές αποκαταστάσεις: φυσικότητα, αξιοπιστία, ποικιλία.

Αποδοτικές οδοντοστοιχίες CAD/CAM για μεγαλύτερη παραγωγικότητα.



Ικανοποιητική ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων για όλες τις περιπτώσεις.



Εγγυημένη κλασική προσθετική με την αποδοτικότητα κόστους.



VITAPAN EXCELL® (Anterior)
VITAPAN® LINGOFORM (Posterior)

> Ζωντανή διάδραση χρώματος και σχήματος για φυσικά αποτελέσματα.


Θέλετε να δημιουργείτε τις καλύτερες προσθετικές αποκαταστάσεις;

Η VITA PREMIUM PROTHETIC σας παρέχει δόντια σύνθετου MRP υψηλής ποιότητας, με φυσική- ζωντανή αναπαραγωγή του σχήματος και του χρώματος για βέλτιστες ολικές, μερικές και εμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις, υψηλής αισθητικής..

Περισσότερες πληροφορίες για το VITAPAN EXCELL παρέχονται στη διεύθυνση: www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics

1. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης VITAPAN EXCELL:

4eins41 Διοίκηση επιχειρήσεων και Έρευνα αγοράς
Andreas Kuderer, Ιδιοκτήτης, Καρλσρούη, Γερμανία
Έκθεση: 10/2016

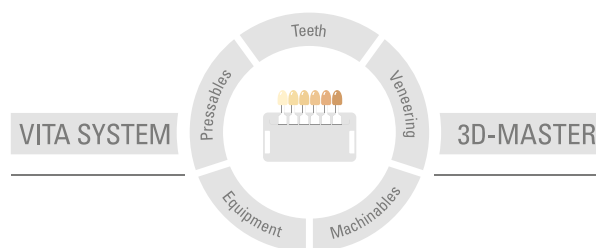

Λάβετε υπόψη: τα προϊόντα της εταιρείας μας πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από τον αδόκιμο χειρισμό ή επεξεργασία τους. Κατά τα άλλα, ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για το προβλεπόμενο πεδίο εφαρμογής προτού το χρησιμοποιήσει. Αποκλείεται κάθε ευθύνη της εταιρείας μας όταν το προϊόν υποβάλλεται σε επεξεργασία σε μη συμβατικό ή απαγορευμένο συνδυασμό με υλικά και συσκευές τρίτων κατασκευαστών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών. Το ερμάριο VITA Modulbox δεν αποτελεί υποχρεωτικό συστατικό του προϊόντος. Έκδοση του παρόντος δελτίου πληροφοριών χρήσης: 2022-10

Με την έκδοση του παρόντος δελτίου πληροφοριών χρήσης καταργούνται όλες οι προηγούμενες εκδόσεις. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vita-zahnfabrik.com

Η VITA Zahnfabrik έχει πιστοποιηθεί και τα παρακάτω προϊόντα φέρουν το σήμα

CE 0124

VITAPAN EXCELL®, **VITA AKZENT® LC**, **VITAPAN® LINGOFORM**, **VITACOLL®**, **VITAFOL®H**, **VITAVM®LC** και **VITAVM®CC**

Τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο προϊόντα/συστήματα άλλων κατασκευαστών είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα των εκάστοτε κατασκευαστών.

MD

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)