

VITAVM.11

Информация о продукте



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска 02.19

VITA – perfect match.

VITA

Мелкодисперсная керамика специально разработана для индивидуализации реставраций из силиката лития, усиленного диоксидом циркония (ZLS) VITA SUPRINITY PC.



Рис. 1: VITA VM 11 эффект-массы

Мелкодисперсная керамика для индивидуализации реставраций из VITA SUPRINITY PC.

VITA VM 11 – легкоплавкая мелкодисперсная керамика на основе полевого шпата была специально разработана для индивидуализации реставраций из силиката лития, усиленного диоксидом циркония (ZLS).

Стеклокерамика нового поколения требует особых параметров КТР керамической облицовки. Точное согласование параметров КТР каркаса и облицовочного материала обеспечивает образование надежной связки и, в результате, облицовка не деформируется и имеет низкие внутренние напряжения.

Преимущества продукта

Высоко эстетичные реставрации:

Высокая прозрачность и теплые оттенки цвета VITA VM 11 в сочетании с опалесцирующей VITA SUPRINITY PC обеспечивают достижение высокоэстетичного результата с естественной игрой цвета.

Надежное соединение:

Оптимальное согласование величин КТР гарантирует отсутствие внутренних напряжений и, как следствие этого, высокую прочность соединения.



Рис. 2

Великолепная шлифуемость и полируемость:

Отлично себя зарекомендовавшая мелкодисперсная структура VITA VM 11 обеспечивает формирование плотной, гладкой поверхности, которая легко шлифуется и быстро полируется.

Простота применения:

VITA VM 11 отличается великолепной стабильностью формы, минимальной усадкой и высокой стабильностью кромок. Благодаря очень хорошей смачиваемости поверхности новой стеклокерамики, каркасы из VITA SUPRINITY PC можно облицовывать без использования Liner и Wash обжига.



Рис. 3

Первоклассная стабильность при обжиге:

VITA VM 11 обладает первоклассной стабильностью при обжиге и сохраняет стабильность формы даже при большом количестве обжигов.



Рис. 4

Снимки 2-4 были любезно предоставлены зубным техником мастером Heike Assmann

* также применимо для CELTRA[®] Duo и CELTRA[®] CAD FC.

CELTRA — это зарегистрированный товарный знак фирмы DeguDent GmbH.



Наборы

VITAVM[®]11 DENTINE KIT 3D-MASTER, BV11DK

Количество	Содержание	Материал
6	12 г	TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 г	ENAMEL ENL, END
1	50 мл	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Рабочая инструкция

VITAVM[®]11 DENTINE KIT classical, BV11DKC

Количество	Содержание	Материал
8	12 г	TRANSPA DENTINE A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
2	12 г	ENAMEL ENL, END
1	50 мл	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Рабочая инструкция

VITAVM[®]11 CREATIVE KIT, BV11CKV1


Количество	Содержание	Материал
3	12 г	SUN DENTINE SD1-SD3
2	12 г	MAMELON MM1, MM3
7	12 г	EFFECT ENAMEL EE1, EE3, EE5, EE7, EE8, EE9, EE11
3	12 г	EFFECT CHROMA EC1, EC5, EC11
1	12 г	EFFECT PEARL EP1
4	12 г	EFFECT OPAL EO1-EO3, EO5
2	12 г	ENAMEL ENL, END
1	12 г	NEUTRAL, NT
1	12 г	WINDOW, WIN
1	50 мл	LOW FUSING MODELLING LIQUID
2		VITA VM 11 Планка цветовых образцов
		Рабочая инструкция

Массы VITAVM[®]11 поштучно

Цвет	Материал	Содержание	Кат. №
0M1	TRANSPA DENTINE	12 г	B4906112
1M1	TRANSPA DENTINE	12 г	B4906412
1M2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4906512
2M2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4906912
3M2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4907612
4M2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4908312
A1	TRANSPA DENTINE	12 г	B4945112
A2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4945212
A3	TRANSPA DENTINE	12 г	B4945312
A3.5	TRANSPA DENTINE	12 г	B4945412
B2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4945712
C2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4946112
D2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4946412
WIN	WINDOW	12 г	B4918112
NT	NEUTRAL	12 г	B4920112
ENL	ENAMEL light	12 г	B4919112
END	ENAMEL dark	12 г	B4919212
MM1	MAMELON	12 г	B4916112
MM3	MAMELON	12 г	B4916312

Цвет	Материал	Содержание	Кат. №
EP1	EFFECT PEARL	12 г	B4915112
EO1	EFFECT OPAL	12 г	B4917112
EO2	EFFECT OPAL	12 г	B4917212
EO3	EFFECT OPAL	12 г	B4917312
EO5	EFFECT OPAL	12 г	B4917512
EC1	EFFECT CHROMA	12 г	B4912112
EC5	EFFECT CHROMA	12 г	B4912512
EC11	EFFECT CHROMA	12 г	B4913112
EE1	EFFECT ENAMEL	12 г	B4909112
EE3	EFFECT ENAMEL	12 г	B4909312
EE5	EFFECT ENAMEL	12 г	B4909512
EE7	EFFECT ENAMEL	12 г	B4909712
EE8	EFFECT ENAMEL	12 г	B4909812
EE9	EFFECT ENAMEL	12 г	B4909912
EE11	EFFECT ENAMEL	12 г	B4910112
SD1	SUN DENTINE	12 г	B4936112
SD2	SUN DENTINE	12 г	B4936212
SD3	SUN DENTINE	12 г	B4936312

С помощью уникальной цветовой системы VITA SYSTEM 3D-MASTER все цвета естественных зубов систематизированно определяются и точно воспроизводятся.

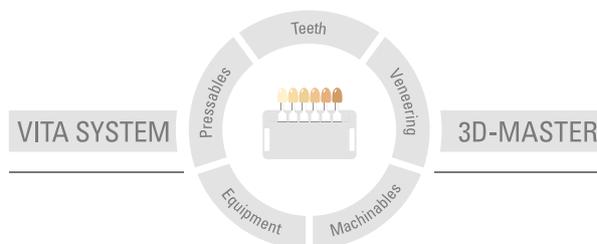

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 02.19

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

Фирма VITA является сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку **CE** 0124:

VITA VM.11 · VITA SUPRINITY® PC

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik