

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Instrucciones de inicio rápido



Spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY es:

- un spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET para todas las cerámicas de recubrimiento habituales, cerámicas monolíticas de circonio, de silicato, de feldespato o vítreas.
- Adecuado para obtener una fluorescencia natural, en particular en restauraciones monolíticas de cerámica sin metal sin fluorescencia propia.
- Adecuado para sellar la superficie de la cerámica.

Con VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY se beneficiará de:

- un incremento sencillo de la fluorescencia.
- Un glaseado rápido y seguro.
- Resultados altamente estéticos gracias a la fluorescencia natural.

COMPONENTES DEL SISTEMA



VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Utilización de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



Aplicación de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- Limpiar la restauración.
- Agitar enérgicamente el aerosol inmediatamente antes de usarlo.
- Sostener el cabezal pulverizador a unos 10 cm de la superficie a rociar.
- Aplicar desde todos los lados una capa uniforme.
- Colocar la restauración sobre un soporte de cocción para la cocción de glaseado (y de maquillajes) y cocerla conforme a los parámetros de cocción.



> Grosor de capa óptimo



> Se ha aplicado una capa demasiado fina



> Se ha aplicado una capa demasiado gruesa

Atención

- En caso de que el brillo sea insuficiente, se puede repetir el proceso.

Parámetros de cocción

	Presec. °C	→ min	↗ °C/min	Temp. aprox. °C	→ min	VAC min	↘ °C
VITA AKZENT PLUS GLAZE LT Paste	400	6.00	50	740-850*	1.00	-	500*

* La temperatura de cocción y/o el enfriamiento lento dependen de la cerámica de recubrimiento y del material de estructura utilizados; se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.



1 Obtención de una fluorescencia natural

2 Tomando como ejemplo una corona natural y coronas anteriores monolíticas de dióxido de circonio

corona natural



corona monolítica
de dióxido de circonio

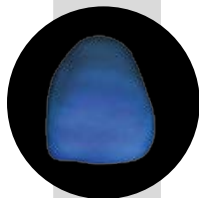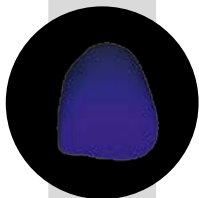


con agente de fluorescencia de la co

> sin fluorescencia
propia

> fluorescencia
demasiado débil

> estriado debido
al uso de pasta

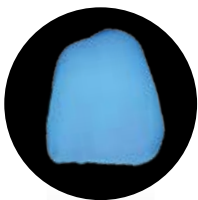

competencia



> fluorescencia
excesiva



con VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**



Agente de fluorescencia y glaseado perfectamente
armonizado y aplicado de forma homogénea
> VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**

VITA AKZENT® Plus – Gama de productos

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- Colores especialmente cromáticos y cubrientes.
- Para la reproducción de tonos cromáticos personalizados y ajustes cromáticos de cualquier característica de color natural.
- Aplicados en una capa gruesa, cubren por completo el color básico subyacente.

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- Materiales translúcidos de aplicación en capa fina, que actúan como un delgado filtro de color sobre el material de base.
- Para alteraciones y desviaciones del color hacia un tono rojizo, amarillento, naranja, pardusco o gris verdoso.

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- Colores de aplicación en capa fina para modificar la cromaticidad del material de base dentro de un grupo de colores.

VITA AKZENT Plus GLAZE

- Material de glasear para obtener una superficie brillante, vítrea, homogénea y cerrada tras la cocción.

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: material para glasear de bajo punto de fusión, para cerámicas con temperaturas de cocción inferiores a 800 °C.

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- Spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET para alcanzar una fluorescencia natural.

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- Proporciona una textura natural de la superficie con un brillo mate.

VITA AKZENT® Plus – Colores disponibles

VITA AKZENT Plus

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- ES01  blanco
- ES02  crema
- ES03  amarillo limón
- ES04  amarillo sol
- ES05  naranja
- ES06  rojo óxido
- ES07  caqui
- ES08  rosa
- ES09  rojo oscuro
- ES10  lila
- ES11  azul
- ES12  azul grisáceo
- ES13  gris
- ES14  negro

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- BS01  amarillo
- BS02  marrón amarillento
- BS03  naranja
- BS04  gris oliva
- BS05  marrón grisáceo

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA classical A1–D4

- CSA  rojizo-pardusco
- CSB  rojizo-amarillento
- CSC  grisáceo
- CSD  grisáceo-rojizo

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA SYSTEM 3D-MASTER

- CSL  amarillento
- CSM2  amarillento-rojizo
- CSM3  amarillo-rojo
- CSR  rojizo
- CSIO  naranja

VITA AKZENT Plus GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FLUOGLAZE LT
- FINISHING AGENT



LÍNEA DIRECTA DE ASISTENCIA TÉCNICA

¿Tiene preguntas sobre las soluciones de producto VITA?

El **protésico dental y asesor técnico Ralf Mehlin** estará encantado de responderlas:

- ▶ **Teléfono: +49 (0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **Correo electrónico: info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **De 8:00 a 17:00 h CET**

Encontrará más datos de contacto internacionales

- ▶ en **www.vita-zahnfabrik.com/contacts**



ASISTENCIA ONLINE

¿Tiene preguntas en torno a la elaboración y las soluciones de producto?

Encontrará respuestas competentes online en forma de

Preguntas frecuentes, vídeos y unidades didácticas electrónicas.

También encontrará más información detallada en las instrucciones de uso completas de VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **facebook.com/vita.zahnfabrik**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com