

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Mode d'emploi rapide



Spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – FAITS & CARACTÉRISTIQUES

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY est :

- un spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT destiné à toutes les céramiques cosmétiques courantes, céramiques en zirconium monolithiques, silicatées, feldspathiques ou vitreuses,
- adapté à l'obtention d'une fluorescence naturelle en particulier dans les restaurations céramo-céramiques monolithiques n'ayant pas de fluorescence propre,
- adapté au scellage des surfaces céramiques.

Avec VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY, vous profitez des avantages suivants :

- augmentation plus simple de la fluorescence,
- glaçage plus rapide et plus sûr,
- résultats très esthétiques à la fluorescence naturelle.

COMPOSANTS DU SYSTÈME



VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Utilisation de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



Application de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

- Nettoyer la restauration.
- Agiter vigoureusement le flacon vaporisateur avant usage.
- Maintenir la buse de vaporisation à env. 10 cm de la surface à traiter.
- Appliquer une couche uniforme sur toutes les faces.
- Déposer la restauration pour la cuisson de (colorants et) glaçage sur un support de cuisson et cuire selon les paramètres indiqués.



> Épaisseur de couche optimale



> Application trop mince



> Application trop épaisse

N. B.

- Si le glaçage ne suffit pas, le processus peut être répété.

Paramètres de cuisson


	Prés. °C	→ min	↗ °C/min	Temp. env. °C	→ min	Vide min	↘ °C
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Paste	400	6.00	50	740-850*	1.00	-	500*

* La température de cuisson et/ou le refroidissement lent dépendent de la céramique cosmétique utilisée, en particulier du matériau d'infrastructure ; respecter les spécifications du fabricant.


1 - **Obtention d'une fluorescence naturelle**

2 - À l'exemple d'une couronne naturelle et de couronnes antérieures en dioxyde de zirconium

Couronne naturelle

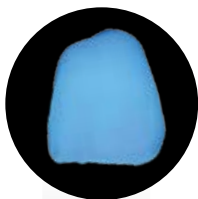


Couronne monolithique
en dioxyde de zirconium

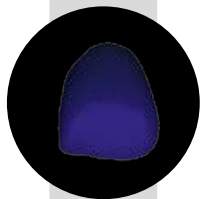


> **Aucune
fluorescence
intrinsèque**


Avec agent fluorescent conçu

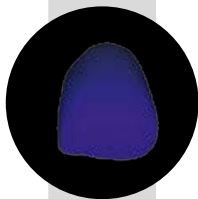

> **Fluorescence
trop faible**

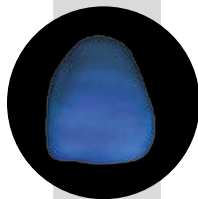

> **Stries dues à
l'utilisation de pâte**

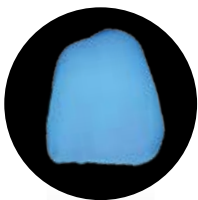

rent



> Trop grande
fluorescence



Avec VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT



Agent fluorescent et de glaçage parfaitement
harmonisé et homogènement appliqué
> VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

VITA AKZENT® Plus – Gamme de produits

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- Couleurs particulièrement saturées et couvrantes.
- Pour la reproduction de nuances spécifiques et pour se rapprocher d'une couleur naturelle particulière.
- En application épaisse, elles recouvrent intégralement la couleur de base sous-jacente.

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- Lasures translucides agissant comme un filtre chromatique fin sur le matériau de base.
- Pour des variations chromatiques et des écarts de teinte dans les tons rougeâtre, jaunâtre, orange, brunâtre ou gris-verdâtre.

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- Lasures colorées pour changer la chromaticité du matériau de base au sein d'un groupe de couleur.

VITA AKZENT Plus GLAZE

- Glaçure pour une surface brillante, s'apparentant à du verre, homogène et dense, après la cuisson.

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature : glaçure basse fusion pour les céramiques dont la température de cuisson est inférieure à 800 °C.
-


VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- Spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT pour l'obtention d'une fluorescence naturelle.

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- Pour une texture de surface naturelle avec un éclat mat.

VITA AKZENT® Plus – Couleurs disponibles

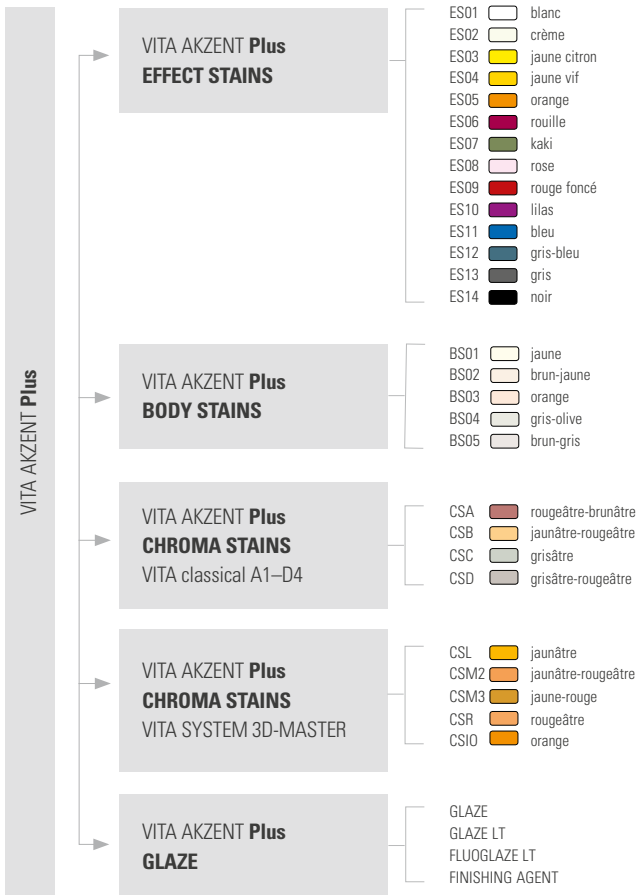



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE TECHNIQUE

Questions au sujet des produits VITA ?

Ralf Mehlin, prothésiste dentaire et conseiller technique,
répond à vos questions :

- ▶ **Téléphone + 49 (0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **Courriel info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8 h - 17 h HEC**

Pour obtenir les coordonnées des autres interlocuteurs à l'international,
▶ visitez la page www.vita-zahnfabrik.com/contacts



ASSISTANCE EN LIGNE

Des questions sur la mise en œuvre et les produits ?

Vous trouverez des réponses en ligne sous la forme de **FAQ,**
de vidéos et de modules de formation en ligne.

Vous trouverez de plus amples informations, entre autres,
dans le mode d'emploi complet VITA AKZENT Plus.

- ▶ www.vita-zahnfabrik.com
- ▶ www.facebook.com/vita.zahnfabrik



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com