

# VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Istruzioni di impiego Quick-Start



Glasuren in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET

VITA – perfect match.

**VITA**

## VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – FATTI & CARATTERISTICHE

---

### VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- glasura in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET, per tutte le correnti ceramiche di rivestimento, ceramiche monolitiche a base di zirconio, silicato, feldspato e vetroceramiche
- per conseguire una fluorescenza naturale specialmente su restauri monolitici in ceramica integrale privi di fluorescenza propria
- per sigillatura della superficie ceramica

### VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY offre:

- semplice incremento della fluorescenza
- glasura rapida e sicura
- risultati altamente estetici grazie alla fluorescenza naturale

### COMPONENTI DI SISTEMA



## VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

### 1 Impiego di VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



### 2 Applicazione di VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- pulire il restauro
- agitare energicamente la bomboletta appena prima dell'uso
- tenere la testina nebulizzatrice ad una distanza di ca. 10 cm dalla superficie da trattare
- nebulizzare da tutti i lati uno strato uniforme
- posizionare il restauro su un apposito supporto ed eseguire la cottura (dei supercolori e) finale secondo i parametri indicati



> Spessore ottimale



> Strato troppo sottile



> Strato troppo spesso

### 3 Attenzione:

- Se la lucentezza non fosse sufficiente, ripetere il processo

### 4 Parametri di cottura

	Prees. °C	→ min.	↗ °C/min.	Temp. ca. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C.
VITA AKZENT PLUS GLAZE LT Paste	400	6.00	50	740-850*	1.00	-	500*

\* Attenersi alle istruzioni del produttore per quanto riguarda temperatura di cottura e/o raffreddamento lento in funzione della ceramica di rivestimento o del materiale strutturale usati.

**1** - **Conseguimento di una fluorescenza naturale**

**2** - Sull'esempio di una corona naturale e di corone frontali monolitiche in biossido di zirconio


corona naturale



corona in biossido  
di zirconio monolitico



**> assenza di fluorescenza primaria**

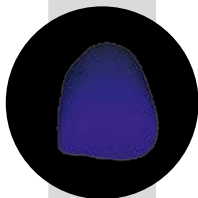

**> fluorescenza insufficiente**

con massa fluorescente di alta



**> a strisce per l'uso di pasta**



o produttore



> fluorescenza eccessiva



con VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**



**Massa glasura ad alta fluorescenza perfettamente correlata e applicata in modo omogeneo**

> VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**

## VITA AKZENT® Plus – Portfolio prodotti

---

### VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- colori particolarmente cromatici e coprenti
- per la riproduzione di tonalità individuali e adattamenti di colore a qualsiasi caratteristica cromatica naturale
- in spessore elevato coprono completamente il colore base sottostante

### VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- masse lasura, che lasciano trasparire, agenti come un sottile filtro cromatico sul materiale base
- per modifiche e scostamenti cromatici verso il rosso, giallo, arancio, marrone o grigio-verde

### VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- colori di lasura per modificare la cromaticità del materiale base all'interno di un gruppo di colori

### VITA AKZENT Plus GLAZE

- massa glasura per superfici lucenti, omogenee, simili al vetro e chiuse dopo la cottura

### VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: massa glasura a basso punto di fusione per ceramiche con temperature di cottura inferiori a 800 °C

### VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- glasura in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET per conseguire una fluorescenza naturale

### VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- per una tessitura superficiale naturale ed una lucentezza opaca

## VITA AKZENT® Plus – Colori disponibili

VITA AKZENT Plus

### VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- ES01  bianco
- ES02  crema
- ES03  giallo limone
- ES04  giallo sole
- ES05  arancio
- ES06  rosso ruggine
- ES07  cachi
- ES08  rosa
- ES09  rosso scuro
- ES10  lilla
- ES11  blu
- ES12  grigio-blu
- ES13  grigio
- ES14  nero

### VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- BS01  giallo
- BS02  giallo-marrone
- BS03  arancio
- BS04  oliva-grigio
- BS05  grigio-marrone

### VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA classical A1–D4

- CSA  rossiccio-marrone
- CSB  rossiccio-giallo
- CSC  grigio
- CSD  grigio-rosso

### VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA SYSTEM 3D-MASTER

- CSL  tendente al giallo
- CSM2  giallastro-rossiccio
- CSM3  giallo-rosso
- CSR  tendente al rosso
- CSIO  arancio

### VITA AKZENT Plus GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FLUOGLAZE LT
- FINISHING AGENT



## HOTLINE TECNICA

Domande sulle soluzioni di prodotto VITA?

**L'odontotecnico e consulente tecnico Ralf Mehlin**

può essere contattato nei modi seguenti:

- ▶ **Telefono +49 (0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **Mail [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **8.00 -17.00**

Per altri contatti internazionali consultare

- ▶ **[www.vita-zahnfabrik.com/contacts](http://www.vita-zahnfabrik.com/contacts)**



## SUPPORTO ONLINE

Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto?

Risposte competenti online in forma di **FAQ**,  
**video e unità didattiche elettroniche.**

Per ulteriori informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego complete VITA AKZENT Plus.

- ▶ **[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **[www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)