

VITA AKZENT® Plus

Istruzioni di impiego Quick-Start – CHROMA STAINS 3D-MASTER



Supercolori indipendenti dal CET
per il controllo del croma

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus – FATTI & CARATTERISTICHE


I CHROMA STAINS sono:

- Supercolori indipendenti dal CET per tutte le correnti ceramiche di rivestimento estetico, le ceramiche monolitiche a base di biossido di zirconio, silicatiche o feldspatiche

I CHROMA STAINS offrono:

- semplice adattamento cromatico nei corrispondenti gruppi di luminosità
- caratteristiche di lavorazione al massimo livello, come semplicità di applicazione
- risultati altamente estetici mediante pittura superficiale

COMPONENTI DI SISTEMA

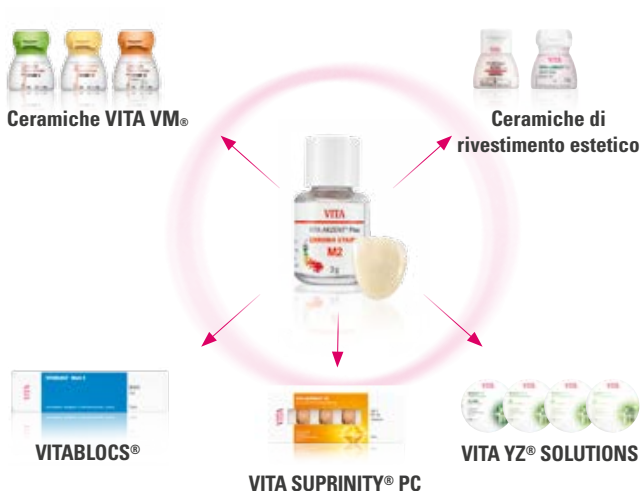

VITA AKZENT® Plus – CHROMA STAINS 3D-MASTER

↳ Uso di CHROMA STAINS 3D-MASTER su uno sfondo definito



| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----------|
| CHROMA STAINS L | | 2L1.5 → 2L2.5 | 3L1.5 |
| CHROMA STAINS M2 | | 1M1 → 1M2 | 2M1 → 2M2 |
| CHROMA STAINS M3 | | | 2M2 |
| CHROMA STAINS R | | 2R1.5 → 2R2.5 | 3R1.5 |

! Attenzione:

* Nel 4. livello di luminosità miscelare CHROMA STAINS INTENSE ORANGE (CSIO) nei corrispondenti CHROMA STAINS (rapporto 1:5).

Controllo della tinta

- E' possibile adattare le tinte verso il rosso o il giallo, miscelando tra loro i colori (rapporto 1:1).

Esempio: per rendere la tinta 2M2 più gialla, miscelare CSM3 e CSL in rapporto 1:1: in tal modo si ottiene 2L2.5.



| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| → 3L2.5 | 4L1.5* | → 4L2.5* | |
| 3M1 → 3M2 | 4M1* → 4M2* | 5M1 → 5M2 | |
| → 2M3 | 3M2 → 3M3 | 4M2* → 4M3* | 5M2 → 5M3 |
| → 3R2.5 | 4R1.5* | → 4R2.5* | |

VITA AKZENT® Plus – CHROMA STAINS 3D-MASTER

Applicazione sull'esempio del restauro di un dente anteriore singolo



1 Presa del colore



Il restauro non si armonizza cromaticamente con la dentatura residua



2 Applicazione CHROMA STAINS
Cottura di fissaggio supercolori o cottura combinata con VITA AKZENT Plus GLAZE (v. tabelle di cottura)



Adattamento cromatico perfetto del restauro alla dentatura residua

VITA AKZENT® Plus – Tabelle di cottura

Cottura raccomandata

Cottura finale POWDER – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

| | Prees. °C | min.* | ↗ min. | ↗ °C/ min. | Temp. ca. °C | min. | VAC min. | ↘ °C |
|-------------------------------------|--------------|-------|-----------|---------------|-----------------|------|-------------|---------|
| VITA SUPRINITY PC | 400 | 4.00 | 5.00 | 80 | 800 | 1.00 | - | - |
| VITABLOCS | 500 | 4.00 | 5.15 | 80 | 920 | 1.00 | - | - |
| VITA YZ T | 500 | 4.00 | 5.37 | 80 | 950 | 1.00 | - | - |
| VITA YZ HT | 400 | 4.00 | 5.37 | 80 | 850 | 1.00 | - | - |
| VITA VM 9 | 500 | 4.00 | 5.00 | 80 | 900 | 1.00 | - | 600** |
| VITA VM 11 | 400 | 4.00 | 5.00 | 80 | 800 | 1.00 | - | - |
| VITA VM 13 | 500 | 4.00 | 4.45 | 80 | 880 | 1.00 | - | - |
| VITA VMK Master | 500 | 4.00 | 5.15 | 80 | 920 | 1.00 | - | - |
| Cottura di fissaggio supercolori | 500 | 4.00 | 2.30 | 80 | 700 | 1.00 | - | - |
| VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder | 400 | 4.00 | 7.00 | 50 | 750 | 1.00 | - | 500** |

* Per la cottura dei materiali in pasta il tempo di preriscaldamento va aumentato da 4 min. a 6 min.

***) Il raffreddamento lento fino alla corrispondente temperatura è raccomandato per l'ultima cottura della ceramica di rivestimento prevista. Nei forni VITA VACUMAT la posizione del lift deve essere > 75%. Non esporre il lavoro a correnti d'aria dirette.



! Attenzione: tutti i tipi di restauro possono essere glazati con VITA AKZENT Plus GLAZE LT. In questo caso la temperatura può essere abbassata fino a 750°C.





HOTLINE TECNICA

Domande sulle soluzioni di prodotto VITA?
Odontotecnici e consulenti tecnici esperti
vi rispondono:

- ▶ **Telefono +49 (0)7761/562 222**
- ▶ **Mail info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8.00 - 17.00**



SUPPORTO ONLINE

Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto?
Risposte competenti online in forma di **FAQ,**
video e unità didattiche elettroniche.

Per ulteriori informazioni dettagliate consultare le istruzioni
di impiego complete VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com