


# VITA Easyshade<sup>®</sup> V

Détermination optimale des couleurs, sécurité maximale.

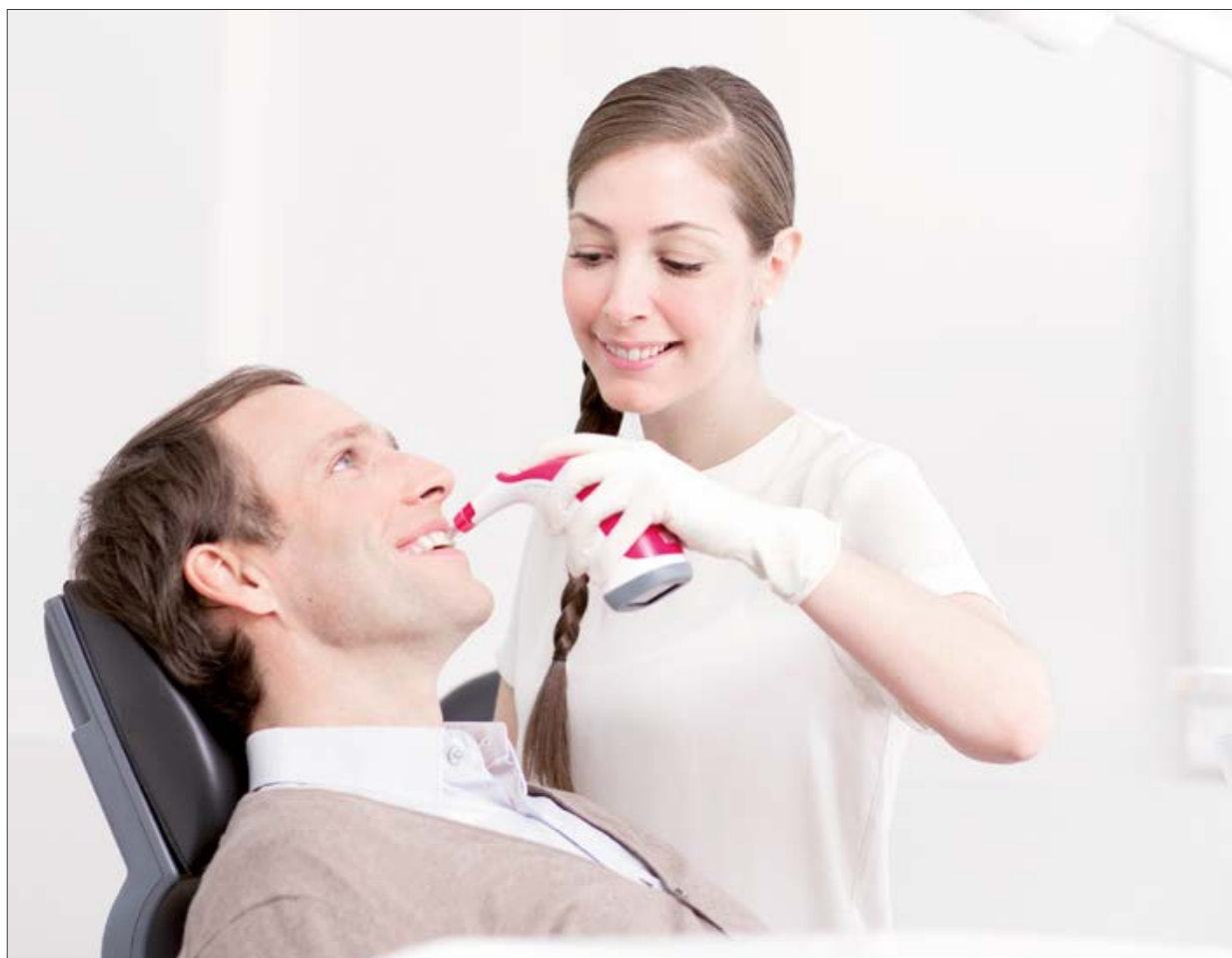

Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 2022-03



VITA – perfect match.

**VITA**

"Déterminer et communiquer les couleurs de dents de façon rentable, c'est possible  
uniquement numériquement – au mieux avec le VITA Easyshade® V."

*Dr chir. dent. Philipp Grohmann (prothésiste dentaire)*



## VITA Easyshade® V

### Détermination très précise de la couleur – Reproduction sûre de la couleur

VITA Easyshade V est un appareil numérique de mesure de la couleur pour une détermination de la couleur dentaire précise, rapide et fiable, qui peut être utilisé pour des dents naturelles, ainsi que pour des restaurations céramiques stratifiées.

Le VITA Easyshade V seconde les dentistes et les prothésistes depuis la détermination et la communication de la couleur de la dent jusqu'à la reproduction, en passant par le contrôle chromatique de la restauration céramique achevée. Il améliore ainsi la sécurité du processus.

#### **VITA Easyshade V**

- **Transmission fiable et précise des informations sur la couleur des dents**  
grâce à une technique de mesure intelligente et objective
- **Détermination de la couleur en quelques secondes permettant des gains de temps et d'argent**  
grâce à l'obtention des résultats de mesure d'un simple clic
- **Sélection de matériau et reproduction de la couleur sûres**  
grâce à des informations exactes et détaillées sur la couleur des dents
- **Transmission simple au laboratoire des informations sur la couleur des dents et des images**  
par logiciel ou l'application



# VITA Easyshade® V

## Un appareil – De multiples applications possibles

VITA Easyshade V offre aux cabinets et laboratoires dentaires un appui efficace et fiable dans :

- la détermination précise de la couleur des dents naturelles et des restaurations stratifiées,
- le choix optimal des matériaux de restauration adaptés,
- la planification et le contrôle professionnels de l'éclaircissement dentaire,
- le contrôle de la qualité des restaurations en céramique stratifiée par rapport à la couleur dentaire finale,
- la communication fluide entre le cabinet et le laboratoire dentaire.

### Détails du produit

- Spectrophotomètre compact et ergonomique à l'écran tactile d'utilisation intuitive avec chargeur
- Technique de mesure moderne pour la détermination de la couleur de base et des couleurs des différentes zones dentaires
- Sortie des résultats dans tous les standards de couleur VITA de même que l'indice d'éclaircissement selon l'American Dental Association (ADA)
- Affichage des valeurs Lab et LCh
- Interface Bluetooth pour une communication sans fil avec le logiciel et l'appli connexes




## VITA mobileAssist + La façon simple de communiquer

L'application VITA mobileAssist + permet la transmission simple et efficace de la couleur de la dent entre le cabinet et le laboratoire dentaire. Via une interface Bluetooth interne, les données sont transférées du VITA Easyshade V à l'application, où elles sont associées à une photo du patient avant d'être transmises par courriel. Toutes les informations pertinentes sur la couleur de dent de même que les photos de patients peuvent être ainsi envoyées de façon mobile et pratique au moyen d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.



## VITA Assist Communication et documentation professionnelles des couleurs de dents pour le cabinet et le laboratoire dentaire

Le logiciel sous Windows VITA Assist permet de documenter et de gérer de façon professionnelle les résultats dentaires et les informations sur la couleur des dents. VITA Assist permet l'intégration des résultats de mesure du VITA Easyshade V aux photos numériques des patients et offre en outre des outils supplémentaires de traitement des images de même que des fonctions de commentaire multiples. La base de données permet de gérer les cas de patients et d'échanger efficacement les informations entre le cabinet et le laboratoire.

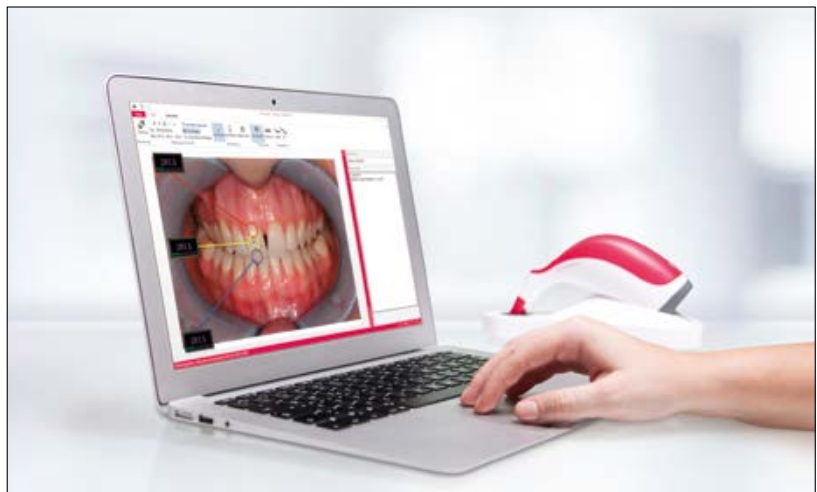


# Un appareil – D'innombrables applications




Détermination de la couleur de base sur dent naturelle.





Détermination de la couleur moyenne sur dents naturelles multichromatiques

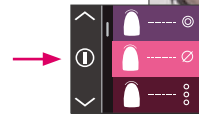

Détermination de la couleur par zones sur dent naturelle pour les zones cervicale, centrale et incisale.

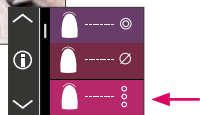


Détermination de la couleur de 6 dents antérieures maximum pour la planification et le contrôle du traitement de l'éclaircissement dentaire

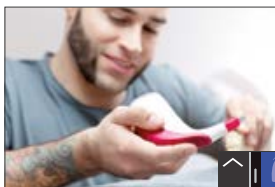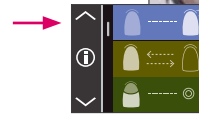

Détermination de la couleur de la restauration pendant le montage cosmétique et contrôle qualité de la couleur de la dent.



Détermination en bouche de la couleur des restaurations déjà existantes

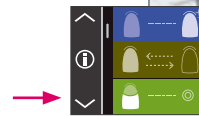

Communication via l'application VITA mobileAssist +

Communication via VITA Assist



# Systèmes VITA


Des solutions optimales pour l'usage



- Utilisez pour la détermination numérique de la couleur le **VITA Easyshade V** et pour la détermination visuelle de la couleur, p. ex. le **VITA Linearguide 3D-MASTER** ou **VITA classical A1–D4**.
- Pour la fabrication CFAO, vous disposez de la **céramique feldspathique très esthétique, de la céramique vitreuse très résistante, de la céramique hybride** innovante et du dioxyde de zirconium de VITA et, comme céramique pressée, vous disposez de la céramique au disilicate de lithium renforcée au dioxyde de zirconium **VITA AMBRIA** – il vous suffit de choisir le matériau le mieux adapté à vos besoins.
- Avec la céramique feldspathique, vitreuse et le dioxyde de zirconium, utilisez les colorants **VITA AKZENT Plus** et les céramiques cosmétiques **VITA LUMEX AC** ou **VITA VM 11**. Pour les céramo-métalliques, vous avez le choix entre **VITA VM 13** et **VITA VMK MASTER** et pour l'individualisation de la céramique hybride **VITA ENAMIC**, les colorants **VITA AKZENT LC** ou la résine cosmétique **VITA VM LC**.
- Pour la cuisson de glaçage, celle des colorants et/ou de la dentine, ainsi que pour la cuisson de cristallisation, le mieux est d'utiliser le four de prestige **VITA VACUMAT 6000 M** au laboratoire et le four de prestige **VITA SMART.FIRE** spécialement adapté aux traitements au cabinet.
- Vous utiliserez l'unité de pressée combi **VITA VACUMAT 6000 MP** pour la cuisson et la pressée des céramiques pressées.
- Pour la cuisson de frittage, utilisez idéalement le **VITA ZYRCOMAT 6100 MS**.
- Observation : avec la céramique hybride aucune cuisson.
- Utilisez pour la céramique feldspathique des systèmes de polissage prévus pour la céramique de silicate (par ex. coffret de pâte à polir diamantée **VITA Polish Cera**).
- Utilisez de préférence pour la céramique vitreuse et la céramique hybride **les coffrets de polissage VITA SUPRINITY/VITA ENAMIC**.
- Les **VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS** sont des produits adaptés aux matériaux VITA conçus pour le collage des restaurations à base de céramiques feldspathique, vitreuse et hybride.

\* Observation «Étapes facultatives processus / cuisson» : les céramiques feldspathique et hybride peuvent être posées en bouche directement après usinage et polissage. Pour la céramique feldspathique les étapes mentionnées ci-dessus sont facultatives. En principe, il en est de même pour la céramique hybride pour qui la cuisson est interdite. Avec l'oxyde de zirconium, on effectue une cuisson de frittage avant l'individualisation/personnalisation.

Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER® permet de déterminer d'une manière systématique toutes les couleurs de dent naturelles et de les reproduire intégralement.

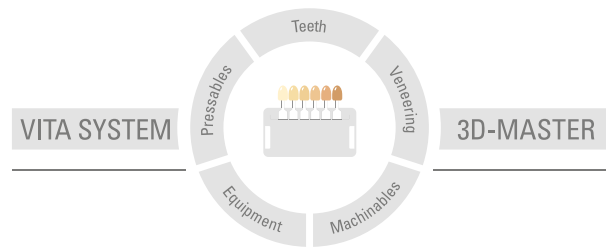

**N.B.** Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrectes. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 2022-03

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Easyshade® V bénéficie du marquage CE conformément à la directive CE 2006/95/Ce, 2004/108/CE et 2011/65/CE.

# VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)