

# VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Guide de démarrage rapide



Spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT

## VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – FAITS & CARACTÉRISTIQUES

---

### VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY est :

- un spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT destiné à toutes les céramiques cosmétiques courantes, céramiques en zirconium monolithiques, silicatées, feldspathiques ou vitreuses,
- adapté à l'obtention d'une fluorescence naturelle en particulier dans les restaurations céramo-céramiques monolithiques n'ayant pas de fluorescence propre,
- adapté au scellage des surfaces céramiques.

### Avec VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY, vous profitez des avantages suivants :

- augmentation plus simple de la fluorescence,
- glaçage plus rapide et plus sûr,
- résultats très esthétiques à la fluorescence naturelle.

### COMPOSANTS DU SYSTÈME



## VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

### Utilisation de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



### Application de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

- Nettoyer la restauration.
- Agiter vigoureusement le flacon vaporisateur avant usage.
- Maintenir la buse de vaporisation à env. 10 cm de la surface à traiter.
- Appliquer une couche uniforme sur toutes les faces.
- Déposer la restauration pour la cuisson de (colorants et) glaçage sur un support de cuisson et cuire selon les paramètres indiqués.



### N. B.

- Si le glaçage ne suffit pas, le processus peut être répété.

### Paramètres de cuisson


|                                 | Prés. °C | →<br>min | ↗<br>°C/min | Temp. env.<br>°C | →<br>min | Vide<br>min | ↘<br>°C |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|---------|
| VITA AKZENT Plus GLAZE LT Paste | 400      | 6.00     | 50          | 740-850*         | 1.00     | -           | 500*    |

\* La température de cuisson et/ou le refroidissement lent dépendent de la céramique cosmétique utilisée, en particulier du matériau d'infrastructure ; respecter les spécifications du fabricant.


**1** – **Obtention d'une fluorescence naturelle**

**2** – À l'exemple d'une couronne naturelle et de couronnes antérieures en dioxyde de zirconium

Couronne naturelle

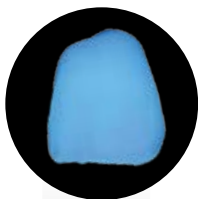


Couronne monolithique  
en dioxyde de zirconium

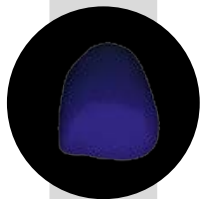


> **Aucune  
fluorescence  
intrinsèque**

Avec agent fluorescent conçu

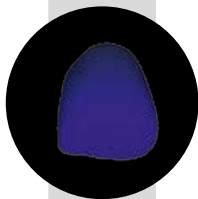

> **Fluorescence  
trop faible**

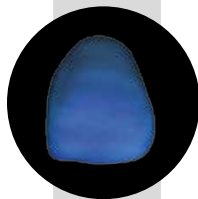

> **Stries dues à  
l'utilisation de pâte**



rent



› Trop grande  
fluorescence



Avec VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT



Agent fluorescent et de glaçage parfaitement  
harmonisé et homogènement appliqué  
› VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

## VITA AKZENT® Plus – Gamme de produits

---

### VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- Couleurs particulièrement saturées et couvrantes.
- Pour la reproduction de nuances spécifiques et pour se rapprocher d'une couleur naturelle particulière.
- En application épaisse, elles recouvrent intégralement la couleur de base sous-jacente.

### VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- Lasures translucides agissant comme un filtre chromatique fin sur le matériau de base.
- Pour des variations chromatiques et des écarts de teinte dans les tons rougeâtre, jaunâtre, orange, brunâtre ou gris-verdâtre.

### VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- Lasures colorées pour changer la chromaticité du matériau de base au sein d'un groupe de couleur.

### VITA AKZENT Plus GLAZE

- Glaçure pour une surface brillante, s'apparentant à du verre, homogène et dense, après la cuisson.

### VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature : glaçure basse fusion pour les céramiques dont la température de cuisson est inférieure à 800 °C.
- 


### VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- Spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT pour l'obtention d'une fluorescence naturelle.

### VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- Pour une texture de surface naturelle avec un éclat mat.

## VITA AKZENT® Plus – Couleurs disponibles

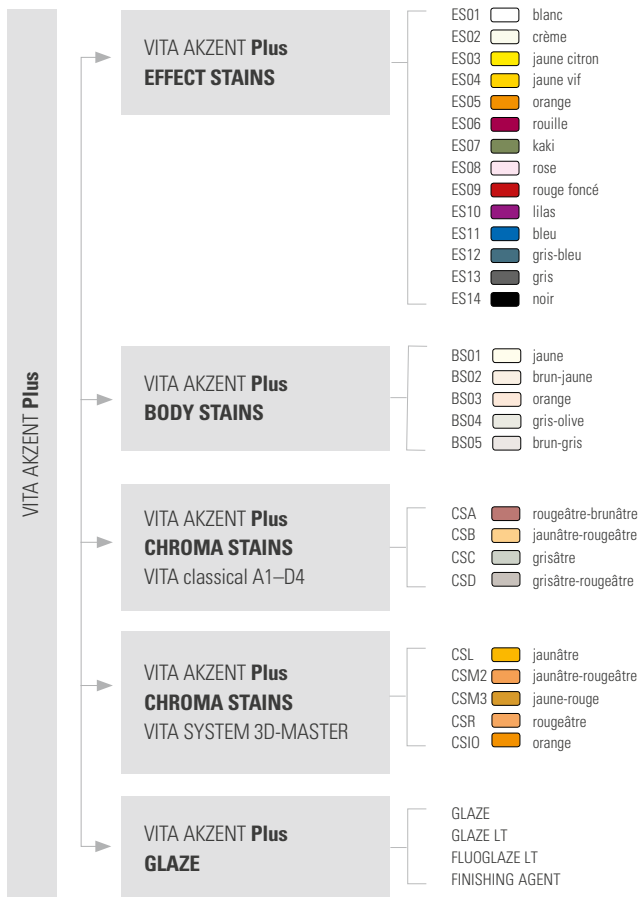



## ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE TECHNIQUE

Questions au sujet des produits VITA ?

Les **prothésistes et conseillers techniques expérimentés** sont à votre disposition :

- ▶ **Téléphone + 49 (0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **Courriel [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **8 h - 17 h HEC**

Pour obtenir les coordonnées des autres interlocuteurs à l'international,  
▶ visitez la page **[www.vita-zahnfabrik.com/contacts](http://www.vita-zahnfabrik.com/contacts)**



## ASSISTANCE EN LIGNE

Des questions sur la mise en œuvre et les produits ?

Vous trouverez des réponses en ligne sous la forme de **FAQ,**  
**de vidéos et de modules de formation en ligne.**

Vous trouverez de plus amples informations, entre autres,  
dans le mode d'emploi complet VITA AKZENT Plus.

- ▶ **[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **[www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)**

 **CE 0124**



 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG**  
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)