

VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS

Λαμπερά, πιστά χρωματικά αποτελέσματα πρεσαρίσματος. Κάθε στιγμή.



Χρωματοληψία VITA

Σχετική με το χρώμα επικοινωνία VITA

Παραγωγή χρωμάτων VITA

Έλεγχος χρωμάτων VITA



VITA – perfect match.

VITA



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το σύστημα **VITA AMBRIA®** Press solutions είναι ένα υψηλής αισθητικής κεραμικό σύστημα πρεσαρίσματος για ζωντανά φυσικά αποτελέσματα. Εκτός από την εξαιρετικά πιστή απόδοση του χρώματος και την εξαιρετική δυναμική διάδραση με το φως, το κεραμικό υλικό πρεσαρίσματος διακρίνεται επίσης για την αποδοτική του επεξεργασία.



▶ **VITA AMBRIA –**
Λάμψη. Πισιότητα χρώματος.
Απόλυτη εφαρμογή.



VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS – ΦΥΣΙΚΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ



VITA AMBRIA –
Κεραμικό σύστημα
πρεσαρίσματος υψηλής
αισθητικής και ανθεκτικότητας.



Τι;

- Κεραμικό πρεσαριστό σύστημα διπυριτικού λιθίου ενισχυμένου με ζirkονία, αποδοτικής κατεργασίας, για αποτελέσματα υψηλής αισθητικής και αντοχής.

Για ποιο σκοπό;

- Για την κατασκευή άψογων αποκαταστάσεων, όπως όψεων, ενθέτων/επένθετων, καθώς και υψηλής αισθητικής στεφανών/μερικών στεφανών και γεφυρών τριών μονάδων έως το 2ο προγόμφιο

Με τι;

- Το κεραμικό σύστημα πρεσαρίσματος περιλαμβάνει σφαιρίδια πρεσαρίσματος σε πολλές βαθμίδες Ημιδιαφάνειας (MO/T/HT/ST) και δύο μεγέθη (S, L), σύστημα μούφλου, πυρόχρωμα και υγρό, καθώς και έμβολο πρεσαρίσματος



ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



VITA AMBRIA®

- Για τη σταθερά αποδοτική και αξιόπιστη επεξεργασία διατίθενται υλικά για κάθε βήμα εργασίας, ιδανικά προσαρμοσμένα μεταξύ τους, από την επένδυση, έως το πρεσάρισμα και την επικάλυψη



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



ΜΟΝΤΕΛΑΡΙΣΜΑ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΥΡΟΧΩΙΜΑ



ΣΥΜΠΙΕΣΗ



ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ*



ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ



ΣΤΙΒΩΣΗ



VITA AMBRIA –
Αποδοτικότητα με σύστημα.

*) Προαιρετικό στάδιο επεξεργασίας: εκπίπτει στις μονολιθικές αποκαταστάσεις.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



▶ **VITA AMBRIA –**
Εντυπωσιακά καλαίσθητο,
αξιόπιστο και με απόλυτη
εφαρμογή.

Αστραφτερή αισθητική

- Εξαιρετικό, πολύπλευρο παιχνίδι χρώματος και φωτός χάρη στο υλικό κατασκευής με φυσική ημιδιαφάνεια, ιριδισμό και φθορισμό.

Πιστότητα χρώματος


- Αναπαράγει αξιόπιστα το χρώμα των δοντιών, χάρη στα σφαιρίδια πρεσαρίσματος υψηλής χρωματικής πιστότητας και στα τέλεια προσαρμοσμένα μεταξύ τους εξαρτήματα του συστήματος.

Αποδοτικότητα

- Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στη μείωση των βημάτων εργασίας και τα απόλυτα ακριβή αποτελέσματα πρεσαρίσματος με την ιδανική προσαρμογή υλικού και πυροχώματος.

Αντοχή

- Υψηλή αντοχή (> 550 MPa) χάρη στο ενισχυμένο με διοξείδιο του ζirkονίου κεραμικό υλικό διπυριτικού λιθίου που καθιστά δυνατή την κατασκευή αποκαταστάσεων υψηλής αισθητικής.

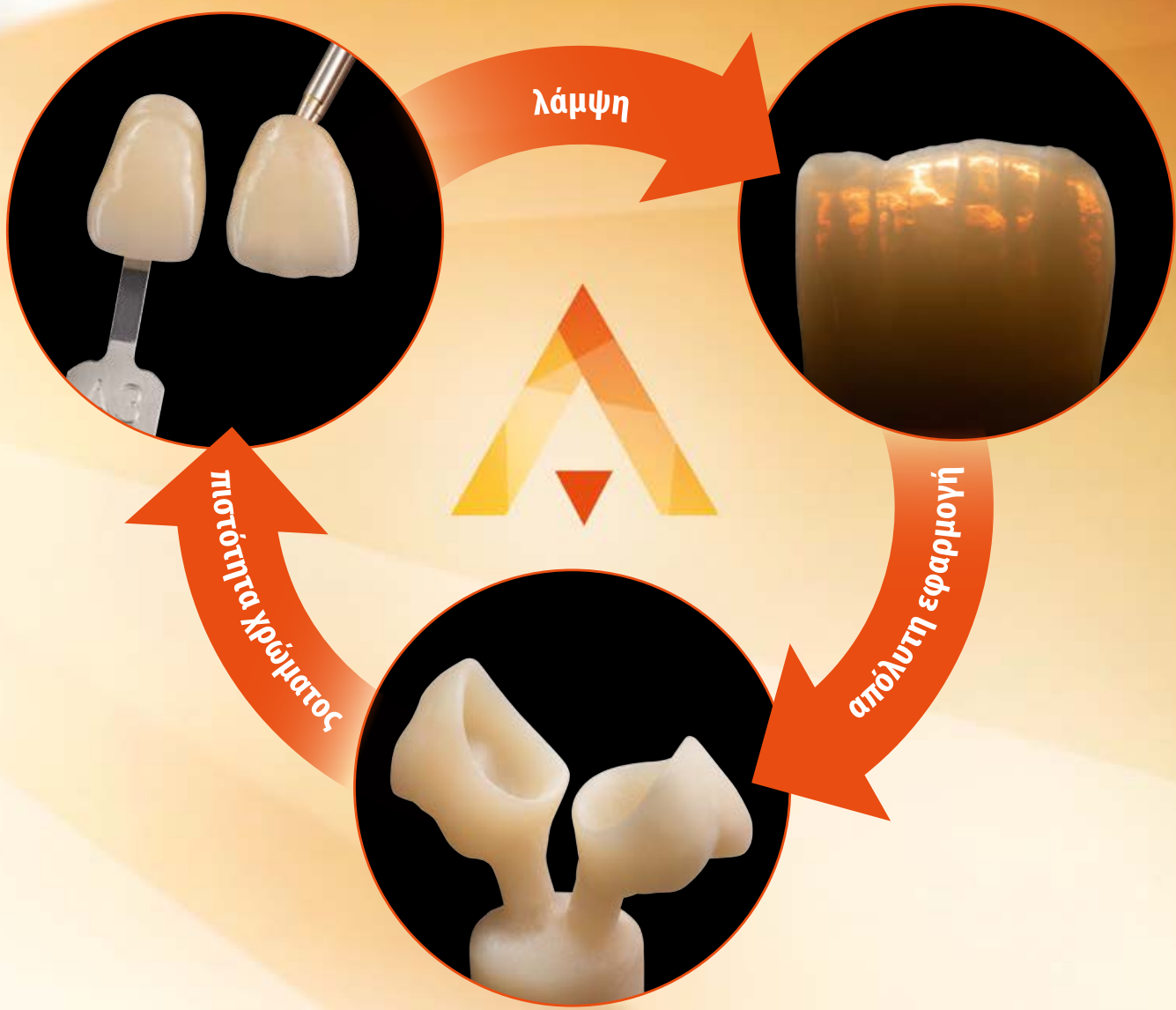

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

VITA AMBRIA –
Για ένα πολύπλευρο παιχνίδι
χρώματος και φωτός.



VITA AMBRIA®

- Διαθέτει φυσική ημιδιαφάνεια για εξαιρετική μετάδοση του φωτός
- Διαθέτει ενσωματωμένο ιριδισμό για λαμπερή δυναμική διάδραση των χρωμάτων
- Παρέχει φυσικό εγγενή φθορισμό για εντυπωσιακή δυναμική διάδραση με το φως



Εντυπωσιακή μετάδοση φωτός



Λαιπερή δυναμική διάδραση φωτός




φυσικός φθορισσμός



ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ



◀ **VITA AMBRIA – perfect match.**
Αξιοπίστη απόδοση του χρώματος
χάρη στα σφαιρίδια πρεσαρίσματος
με τέλεια πιστότητα χρώματος.

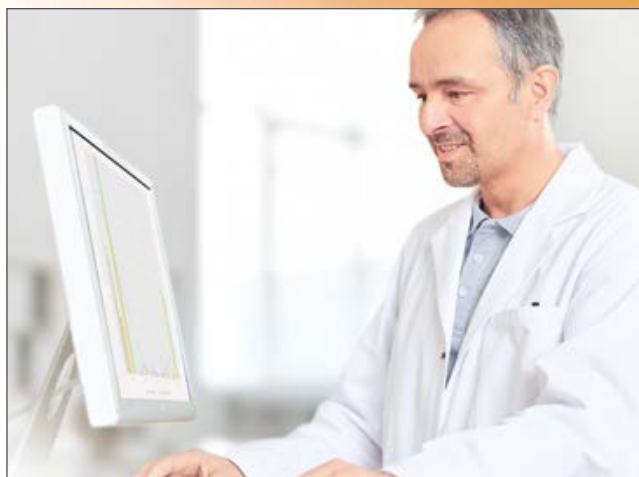

Ακριβής χρωματική συνταγή

- Χάρη στην τεχνολογία μέτρησης υψηλής ακρίβειας, επιτυγχάνεται κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή των κεραμικών υλικών VITA AMBRIA πολύ υψηλή πιστότητα χρώματος.



Απόλυτα ακριβής προσδιορισμός χρώματος

- Με τα οπτικά και τα ψηφιακά συστήματα προσδιορισμού χρώματος της εταιρείας VITA Zahnfabrik παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού του χρώματος των δοντιών με υψηλή ακρίβεια.



Απόλυτα ακριβής απόδοση χρώματος

- Οι απόλυτα ακριβείς πληροφορίες για το χρώμα των δοντιών και η πιστότητα χρώματος των σφαιριδίων πρεσαρίσματος καθιστούν δυνατή την αποδοτική και αξιόπιστη απόδοση των χρωμάτων.



ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πρεσαριστό κεραμικό υλικό VITA AMBRIA

VITA AMBRIA®

- Καθιστά δυνατή την επίτευξη αποτελεσμάτων απόλυτης εφαρμογής, καθώς το πρεσαριστό υλικό και το πυρόχρωμα είναι ιδανικά προσαρμοσμένα μεταξύ τους.
- Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στη μείωση των βημάτων εργασίας, καθώς το περιορισμένο στρώμα αντίδρασης μπορεί να αφαιρεθεί με γυάλινα σφαιρίδια χωρίς συμπληρωματική επεξεργασία σε λουτρό οξέος.



Πυρόχωμα και υγρό VITA AMBRIA




τέλεια εναρμονισμένο επενδυτικό υλικό

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

1. Εξαιρετική αντοχή για τέλεια ανθεκτικότητα



Διαξονική αντοχή

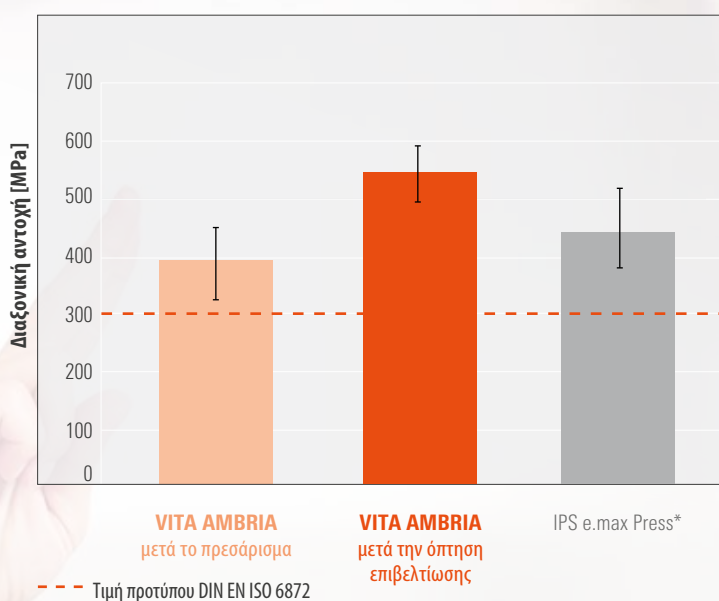


Πηγή: Εσωτερική έρευνα, VITA E&A, Μέτρηση της διαξονικής αντοχής των προαναφερόμενων υλικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6872 (με τροποποιημένη γεωμετρία δοκιμίων), (Gödiker, 1/2019, [1], βλ. οπισθόφυλλο ενημερωτικού φυλλαδίου)
*) Επίπεδο αντοχής μετά τη διαδικασία πρεσαρίσματος. Δεν αναφέρεται όπτηση επιβελτίωσης από τον κατασκευαστή.

VITA AMBRIA®


- Χάρη στην εξαιρετικά υψηλή αντοχή προσφέρει εξαιρετική, μακροχρόνια κλινική αντοχή
- Με διαξονική αντοχή κατά μέσο όρο > 550 MPa (ύστερα από όπτηση Power Glaze) επιτυγχάνει επίπεδο αντοχής πέραν των απαιτήσεων των προτύπων

2. Αποδοτική δυνατότητα στίλβωσης για εξαιρετικό βαθμό γυαλίσματος

1. Επεξεργασία με διαμάντι
Επιφάνεια μετά την επεξεργασία με διαμάντι

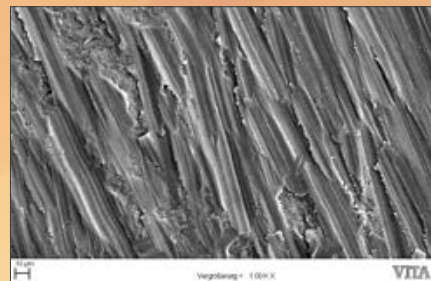

2. Αδρή στίλβωση
Επιφάνεια ύστερα από επεξεργασία με χονδρόκοκκο στίλβωτήρα

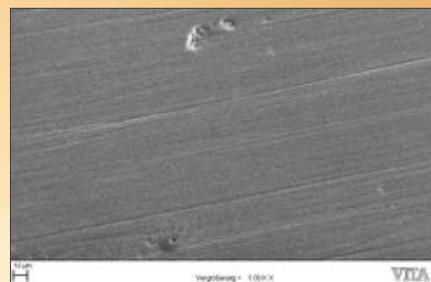

3. Εκλεπτισμένη στίλβωση
Επιφάνεια ύστερα από επεξεργασία με λεπτόκοκκο στίλβωτήρα



VITA AMBRIA –
Γρήγορη και αποδοτική
επίτευξη υψηλής γυαλάδας.

Πηγή: Εσωτερική έρευνα, VITA E&A,
Εικόνες REM της επεξεργασμένης επιφάνειας
δοκιμίων VITA AMBRIA, μεγέθυνση 1.000x,
(Gödiiker, 8/2019, [1] βλ. οπισθόφυλλο
ενημερωτικού φυλλαδίου)

VITA AMBRIA®

- Μπορεί να γυαλιστεί πολύ αποτελεσματικά σε υψηλή στίλβνότητα, χάρη στην ομοιογενή μικροδομή του.
- Παρουσιάζει στις δοκιμές ύστερα από τρία στάδια επεξεργασίας (επεξεργασία με διαμάντι, αδρή και λεία στίλβωση) ομοιογενείς, λείες επιφάνειες χωρίς ελαττωματικά σημεία





ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

Τα σφαιρίδια πρεσαρίσματος **VITA AMBRIA®** διατίθενται σε πολλές παραλλαγές και χρώματα. Επιπλέον το σύστημα διεθέτει και αρκετά ακόμη υλικά προσαρμοσμένα μεταξύ τους. Γνωρίστε τώρα ολόκληρο το φάσμα των διαθέσιμων υλικών.




ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Χρώματα και παραλλαγές VITA AMBRIA

Σφαιρίδια πρεσαρίσματος VITA AMBRIA												
για κομψές επικαλύψεις, υψηλής αισθητικής στεφάνες/μερικές στεφάνες και γέφυρες τριών τμημάτων έως το 2ο προγόνιο												
Βαθμίδα ημιδιαφάνειας				Μέγεθος				Χρώμα				
<ul style="list-style-type: none"> • Translucent T • High Translucent HT • Super Translucent ST* • Medium Opacity MO* 				Ακατέργαστα πρεσαριστά τεμάχια <ul style="list-style-type: none"> • S • L 				<ul style="list-style-type: none"> • mono-chromatic 				
VITA classical A1–D4												
Χρώματα	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D2	D3
Translucent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
High Translucent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VITA SYSTEM 3D-MASTER / Bleached Shades												
Χρώματα	0M1	0M3	1M1	1M2	2M1	2M2	3M1	3M2	4M1	4M2		
Translucent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
High Translucent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VITA ENAMEL												
Χρώματα	ENL			ENM				ENI				
Super Translucent	✓			✓				✓				
VITA AMBRIA MO												
Χρώματα	MO-0			MO-1				MO-2				
Medium Opacity	✓			✓				✓				

* διατίθεται μόνο ως σφαιρίδιο S

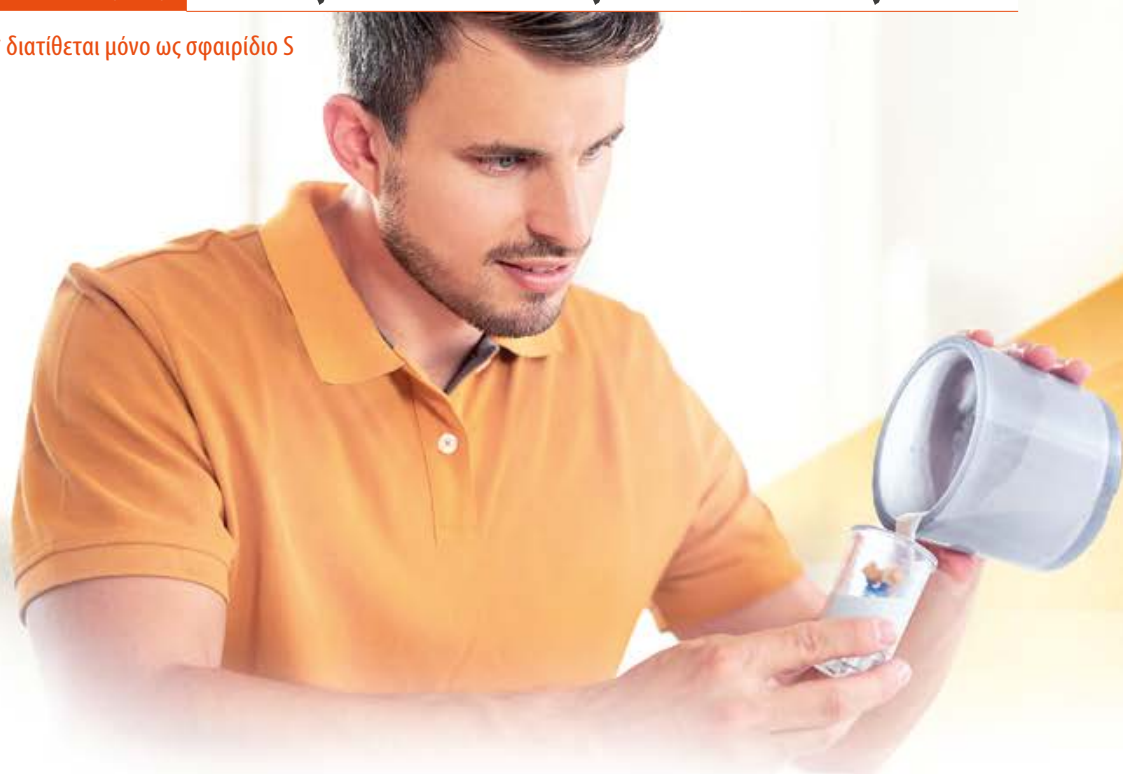

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



Πυρόχωμα/υγρό

Πυρόχωμα φωσφορικού τύπου γρήγορης προθέρμανσης ιδανικά προσαρμοσμένο στα σφαιρίδια πρεσαρίσματος VITA AMBRIA, και υγρό για απόλυτα ακριβή έλεγχο της διαστολής και της ρευστότητας. VITA AMBRIA INVEST

- VITA AMBRIA INVEST P: διατίθεται σε συσκευασία 50 x 100 g
- VITA AMBRIA INVEST F: διατίθεται σε συσκευασία φιάλης 1 λίτρου



Muffel System

Δακτύλιος και βάση μούφλου για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των αντικειμένων από το καλούπι, κατάλληλο για όλες τις διαδεδομένες μονάδες πρεσαρίσματος.

- VITA AMBRIA MUFEL SYSTEM: διατίθεται ως σύστημα μούφλου 100 g και 200 g



Έμβολο πρεσαρίσματος


Έμβολο πρεσαρίσματος μίας διαδρομής για απλό χειρισμό χωρίς να απαιτείται χρονοβόρα αμμοβόλιση και προθέρμανση.

- VITA AMBRIA PLUNGER: διατίθεται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων (διάμετρος 13 mm)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Επένδυση με πυρόχωμα
VITA AMBRIA INVEST P + F
Σύστημα μούφλου VITA AMBRIA

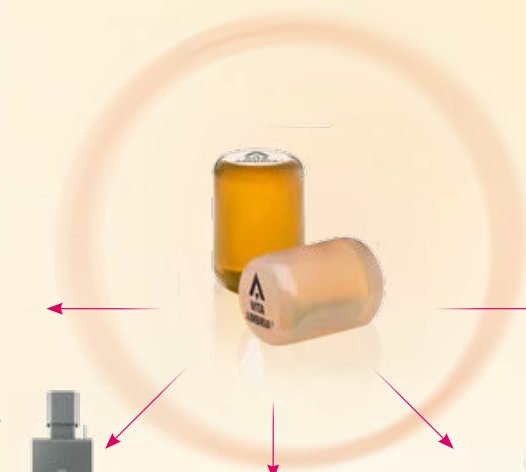

Χρωματισμός/Εφύαλωση
VITA AKZENT PLUS



Πρεσαρίσμα
VITA VACUMAT 6000 MP
VITA AMBRIA PLUNGER



Στίλβωση
VITA CERAMICS
POLISHING SET



Επικάλυψη
VITA LUMEX AC

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσδιορισμός χρώματος



- Για τον ψηφιακό προσδιορισμό του χρώματος χρησιμοποιήστε τη συσκευή **VITA Easyshade V** και για τον οπτικό προσδιορισμό χρώματος ένα **χρωματολόγιο VITA**.

Μοντελάρισμα



- Χρησιμοποιήστε για το μοντελάρισμα κεριά μοτελάρισματος και φρεζαρίσματος που καίγεται χωρίς κατάλοιπα.

Επένδυση με πυρόχρωμα



- Χρησιμοποιήστε για την επένδυση το προσαρμοσμένο σύστημα πυροχρώματος **VITA AMBRIA INVEST P + F** και το **VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM**.

Συμπίεση



- Χρησιμοποιήστε για το πρεσάρισμα των σφαιριδίων **VITA AMBRIA** την μονάδα όπτησης και πρεσαρίσματος **VITA VACUMAT 6000 MP** και το έμβολο πρεσαρίσματος μίας διαδρομής **VITA AMBRIA PLUNGER**.

Επικάλυψη*



- Επικαλύψτε τις αποκαταστάσεις σας με το ιδανικά προσαρμοσμένο στο σύστημα **VITA AMBRIA** κεραμικό υλικό επικάλυψης **VITA LUMEX AC**.

Χαρακτηρισμός, εφυάλωση



- Χαρακτηρίστε και εφυάλωστε τις αποκαταστάσεις με τα χρώματα μακιγιάζ/τις μάζες εφυάλωσης **VITA AKZENT PLUS**.

Στίλβωση



- Στίλβωστε τις αποκαταστάσεις σας με το συνιστώμενο σετ στίλβωσης **VITA CERAMICS Polishing Set**.

Συγκόλληση



- Στερεώστε την αποκατάσταση με την πλήρως συγκολλητική ή με την αυτοσυγκολλούμενη **VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS**.

*) Προαιρετικά: η επικάλυψη με υλικό VITA Lumex AC είναι ένα προαιρετικό βήμα διαδικασίας και εκπίπτει στο μονολιθικό σύστημα αποκατάστασης.

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Περισσότερες πληροφορίες για προϊόντα και την επεξεργασία παρέχονται επίσης στην ιστοσελίδα www.vita-zahnfabrik.com



Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης υποστήριξης πωλήσεων

Για την καταγραφή παραγγελιών και για ερωτήματα για την παράδοση, για στοιχεία προϊόντος καθώς και για διαφημιστικό υλικό είναι στη διάθεσή σας η ομάδα εσωτερικής διανομής.

► Τηλ. +49 (0) 7761 / 56 28 84
Φαξ +49 (0) 7761 / 56 22 99
8.00 έως 17.00 CET
Mail info@vita-zahnfabrik.com



Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης

Για τεχνικά ερωτήματα σχετικά με τις λύσεις προϊόντων VITA μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα του τμήματος τηλεφωνικής υποστήριξης.

► Τηλ. +49 (0) 7761 / 56 22 22
Φαξ +49 (0) 7761 / 56 24 46
8.00 έως 17.00 CET
Mail info@vita-zahnfabrik.com



Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν VITA AMBRIA
παρέχονται στην ιστοσελίδα: www.vita-zahnfabrik.com/ambria

1. Στοιχεία αναφοράς

1. Εσωτερικές έρευνες, VITA E&A:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Τομέας έρευνας και ανάπτυξης


Spitalgasse 3

79713 Bad Säckingen

Πτυχ. μηχαν. Michael Gödiker, Προϊστάμενος έργων E&A, Bad Säckingen

Για αναλυτικά δεδομένα δοκιμών βλ. Τεχνική επιστημονική τεκμηρίωση
VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS

Λήψη μέσω της ιστοσελίδας www.vita-zahnfabrik.com/ambria

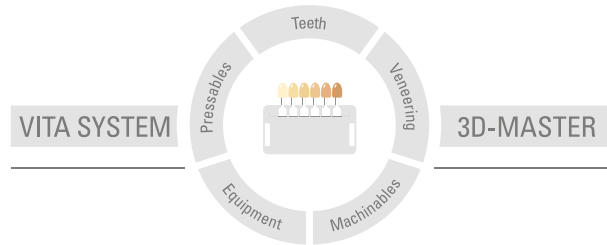

Λάβετε υπόψη: τα προϊόντα της εταιρείας μας πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από τον αδόκιμο χειρισμό ή επεξεργασία τους. Κατά τα άλλα, ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για το προβλεπόμενο πεδίο εφαρμογής προτού το χρησιμοποιήσει. Αποκλείεται κάθε ευθύνη της εταιρείας μας όταν το προϊόν υποβάλλεται σε επεξεργασία σε μη συμβατικό ή απαγορευμένο συνδυασμό με υλικά και συσκευές τρίτων κατασκευαστών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών. Το ερμάριο VITA Modulbox δεν αποτελεί υποχρεωτικό συστατικό του προϊόντος. Έκδοση του παρόντος δελτίου πληροφοριών χρήσης: 2024-04

Με την έκδοση του παρόντος δελτίου πληροφοριών χρήσης καταργούνται όλες οι προηγούμενες εκδόσεις. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vita-zahnfabrik.com

Η VITA Zahnfabrik έχει πιστοποιηθεί και τα παρακάτω προϊόντα φέρουν το σήμα

CE 0124

VITA AMBRIA®, VITA LUMEX® AC, VITA AKZENT® PLUS

Τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο προϊόντα/συστήματα άλλων κατασκευαστών είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα των εκάστοτε κατασκευαστών.

MD

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

[facebook.com/vita-zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita-zahnfabrik)