

VITA AKZENT® LC

Culori de pictură din compozit, pentru reproducerea fiabilă a tuturor caracterizărilor de culoare



VITA Determinarea culorii

VITA Transmiterea culorii

VITA Reproducerea culorii

VITA Verificarea culorii

Ediția: 2022-07




VITA – perfect match.

VITA



CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE

VITA AKZENT® LC este un sistem de pictare/glazurare pentru caracterizarea tuturor restaurărilor indirecte realizate din compozit, acrilat și ceramică hibridă. Culorile de pictură permit reproducerea fidelă a efectelor și corecția fiabilă a nuanței.

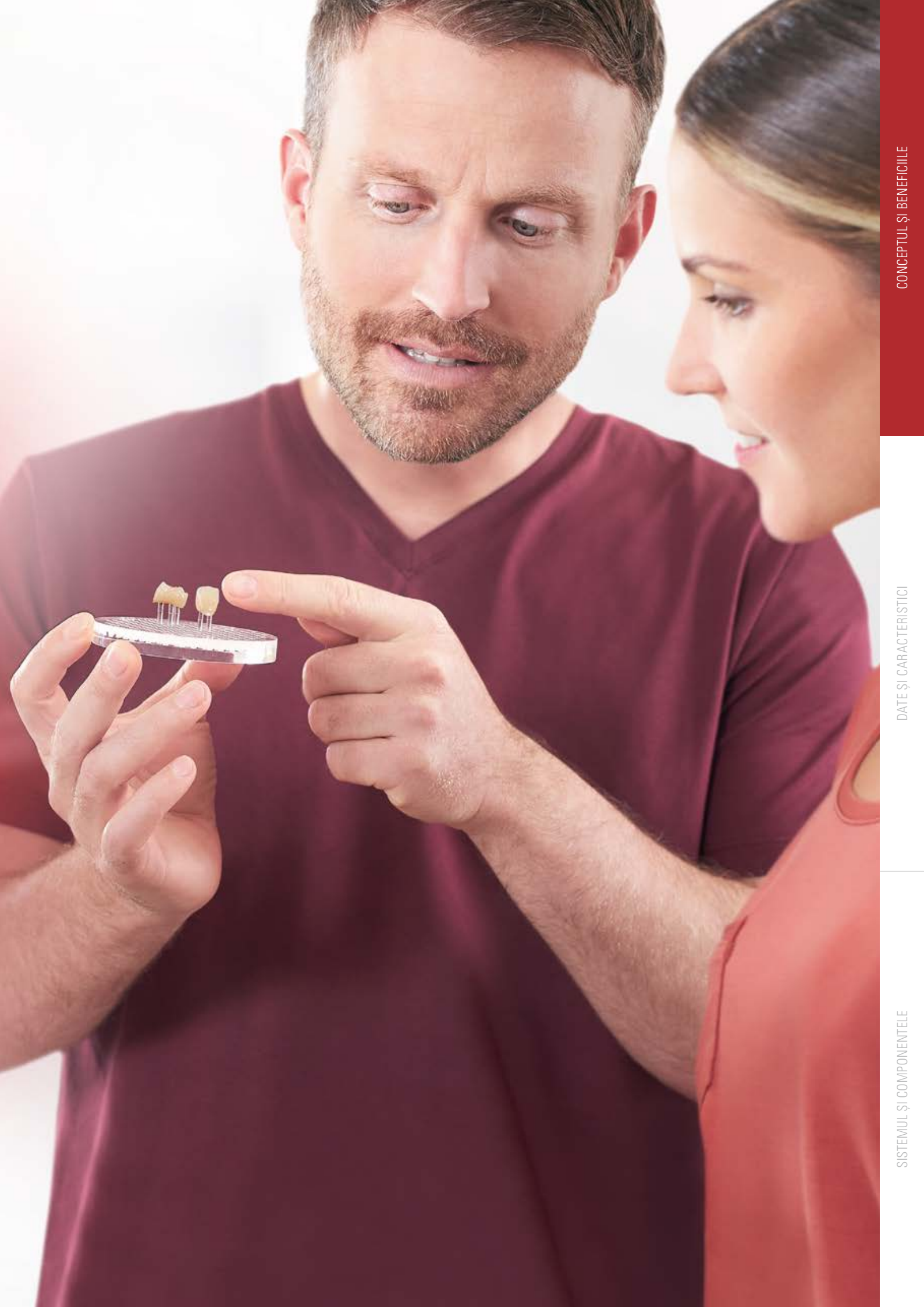

VITA AKZENT® LC – REPRODUCEREA NATURALĂ A EFECTELOR CROMATICE INDIVIDUALE



Ce?

- VITA AKZENT LC sunt culori de pictură fotopolimerizabile pentru reproducerea efectelor cromatice individuale și pentru efectuarea corecturilor de nuanță
- Pe lângă varietatea de nuanțe oferite, sistemul de culori de pictură impresionează prin aplicarea eficientă și precisă a culorilor și prin stabilitatea luciului

Pentru ce?

- Culoarele de pictură se pot utiliza în mod universal pentru caracterizarea extraorală a restaurărilor din ceramică hibridă, compozit de fațetare, baze de proteze, polimeri acrilici pentru printare 3D, precum și pentru caracterizarea internă folosind tehnica de stratificare în rășină

Cu ce?

Sistemul de pictare/glazurare include:

- 14 culori de efecte bogat nuanțate, patru intensificatori de culoare și o glazură pentru sigilarea suprafeței
- Componente perfect armonizate ale sistemului precum pensule, palete de mixare, lichide de modelare și curățare



VITA AKZENT® LC – CULORI DE PICTURĂ PENTRU COMPOZIT, ACRILAT ȘI CERAMICĂ HIBRIDĂ



VITA AKZENT® LC

- Cu utilizare universală pentru caracterizarea restaurărilor din ceramică hibridă, compozite de fațetare și CAD/CAM, precum și dinți de acrilat
- Diferite utilizări pentru toate tipurile de restaurări indirecte de la materialele menționate mai sus: de exemplu, coroane fabricate prin tehnica CAD/CAM, punți fațetate cu compozit, proteze totale/parțiale și restaurări provizorii pe termen lung



*Cu VITA AKZENT LC pot
caracteriza culorile exact la fel
cum fac la ceramică.*

*Peter Eiselt, manager laborator,
Bad Vilbel, Germania, 12/20*



AVANTAJE

Schimbarea culorii

Reproducere naturală a efectelor

A3

Modificare

Reproducere fiabilă



Reproducere fiabilă

- Reproducere fidelă, naturală, a tuturor efectelor de nuanță a dentiției naturale datorită gamei largi de culori de pictură strălucitoare

Modificare ușoară

- Nuanțare ușoară a culorilor printr-o simplă pensulare, controlând și planificând totodată sistematic cromatica restaurărilor dentare


Prelucrarea eficientă

- Aplicare extrem de precisă a efectelor cromatice individuale și repartizarea eficientă a nuanțării pe toată suprafața, datorită vâscozității perfect adaptate a culorilor de pictură

Rezultate fiabile

- Crearea unor restaurări cu o cromatică constantă și un luciu de durată, datorită rezistenței optime la uzură și decolorare a culorilor de pictură

cu o simplă pensulare

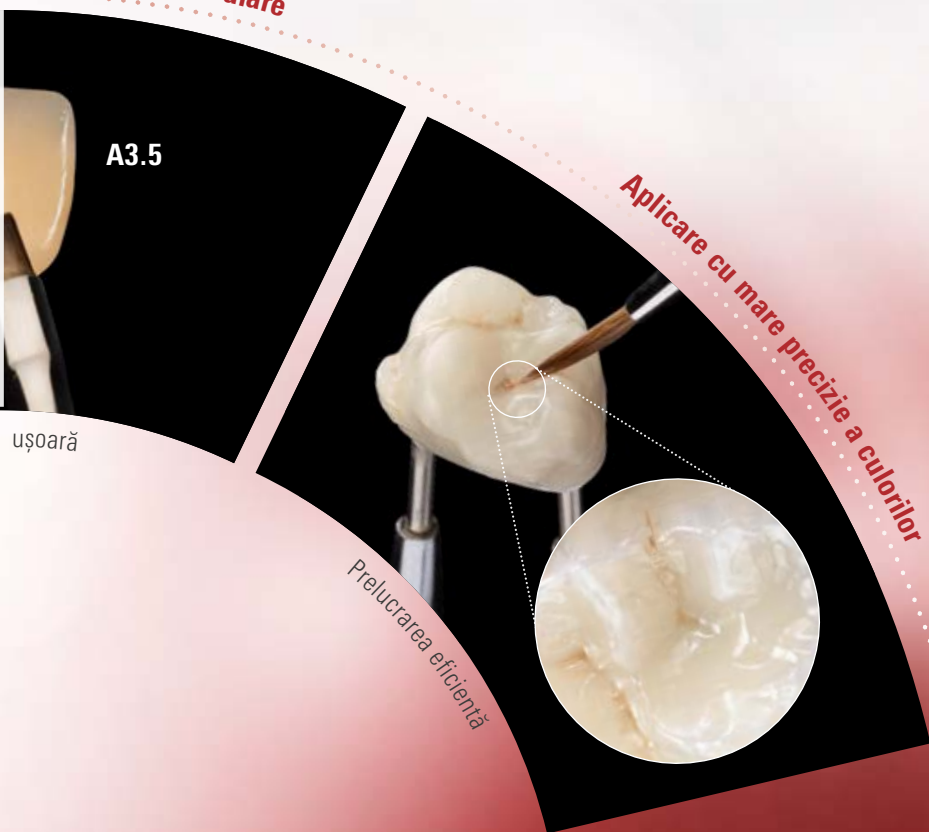

Aplicare cu mare precizie a culorilor



VITA AKZENT LC îmi permite personalizarea extrem de detaliată a restaurărilor frontale.

Dr. Bernhild Elke Starnitz,
Medic Dentist, Langen,
Germania, 12/20



REPRODUCEREA FIDELĂ A EFECTELOR PENTRU REZULTATE NATURALE



VITA AKZENT® LC EFFECT STAINS

- Sunt culori bogat nuanțate pentru reproducerea fidelă și naturală a efectelor (de ex. colorații pe dinte/fisuri, zone incizale translucide, pete de calcifiere și altele)
- Permit aplicarea extrem de precisă și selectivă, datorită stabilității excelente și a vâscozității perfect adaptate




Cu VITA AKZENT LC pot reproduce cu mare precizie mici detalii de nuanță.

*Dr. Harald Steinbrenner, Medic dentist,
Heppenheim, Germania, 02/21*



CORECTARE FIABILĂ A CULORII PENTRU O CORESPONDENȚĂ CROMATICĂ OPTIMĂ

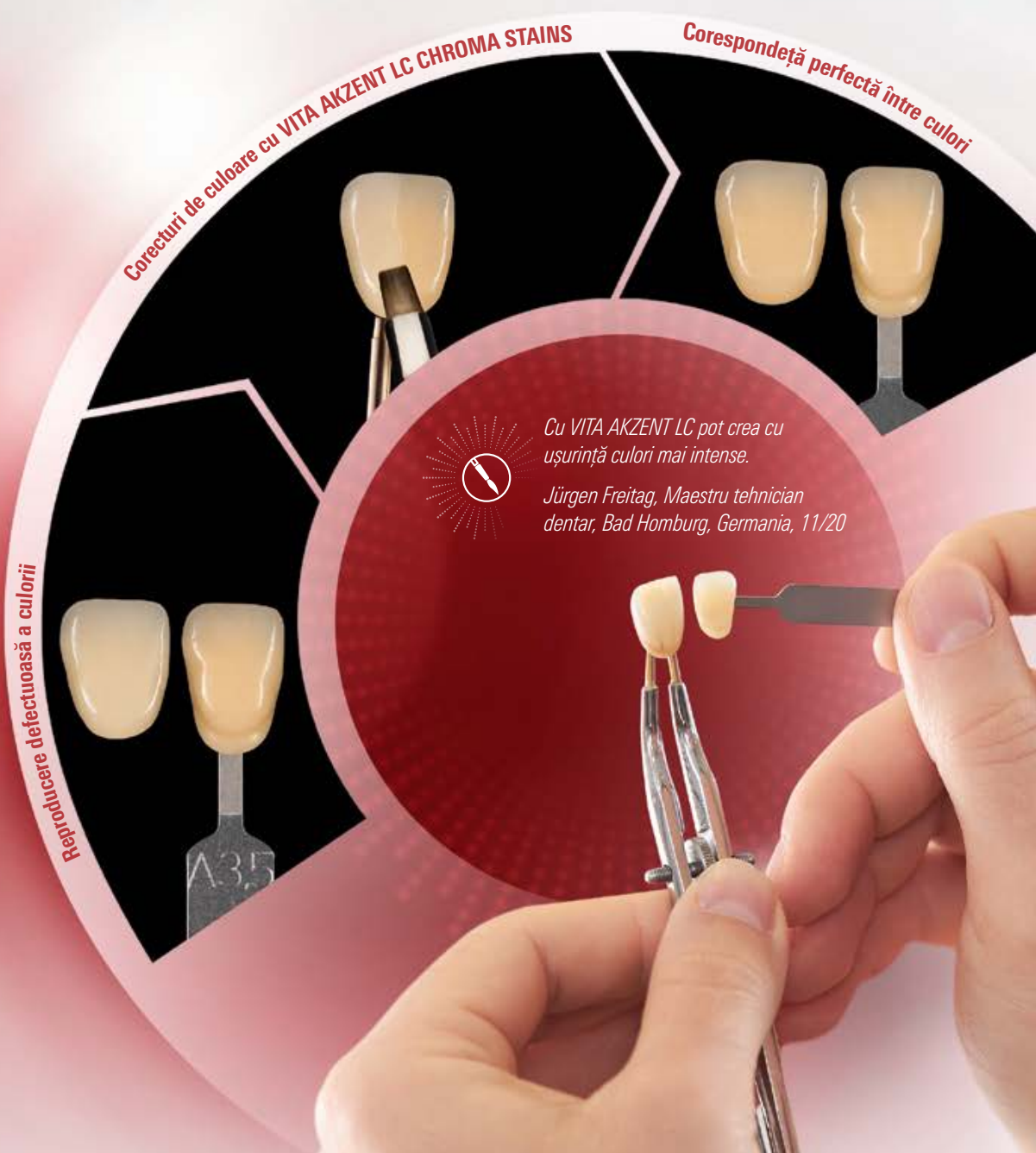

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS

- Sunt culori personalizate pentru controlul sistematic și planificat al cromaticii în vederea unei corecturi fiabile a culorii
- Permit de fiecare dată o aplicare eficientă pe toată suprafața, fără striații



DATE ȘI CARACTERISTICI

VITA AKZENT[®] LC a fost elaborat conform celor mai înalte standarde de calitate. Descoperiți mai jos cele mai importante date și multiplele avantaje ale noilor culori de pictură pentru compozit.



MOTIVE PENTRU OBȚINEREA UNOR REZULTATE PRECISE ȘI FIABILE

1. Fiabilitate demonstrată a aderenței

Test de aderență

VITA AKZENT LC, VITA

OPTIGLAZE color, GC



Mostră originală: Dinți artificiali VITAPAN colorați înainte de simularea de îmbătrânire

**Îmbătrânire simulată
prin cicluri termice**
(5000 de cicluri, 5 °C / 55 °C)



Rezultat: Dinți artificiali VITAPAN colorați după simularea de îmbătrânire

Sursa: Studiu intern, VITA R&D, Raport 0628/19, 03/20
Dr. M. Gmeuling ([1] vezi coperta broșurii)

VITA AKZENT® LC

- Asigură o aderență excelentă la materialele dentare pe bază de PMMA
- Prezintă o excelentă stabilitate a aderenței, în timpul testării, la dinții de proteză (VITAPAN) după simularea îmbătrânirii

2. Aplicare de maximă precizie, de fiecare dată

Test de stabilitate

VITA AKZENT LC (white)



1. Aplicarea colorantului pe o placă de sticlă



2. Testarea stabilității prin înclinarea plăcii

Sursa: Studiu intern, VITA PM,
Raport 0819/20, 09/20, H. Kimmich ([2]
vezi coperta broșurii)

VITA AKZENT® LC

- Oferă culori de pictură stabile, cu vâscozitate ideală, cu o aplicare extrem de precisă în vederea reproducerii exacte a tuturor caracterizărilor cromatice individuale



MOTIVE PENTRU DURABILITATE REMARABILĂ

1. Rezistență ridicată la uzură/luciu stabil



Testul rezistenței la uzură



Coroană colorată înainte de testul la uzură

Uzură simulată (20 de ore)



Coroană colorată după testul la uzură


Sursa: Studiu intern, VITA R&D, Raport 0083/21 07/21,
Dr. S. Aechtner ([1] vezi coperta broșurii)

VITA AKZENT® LC

- Permite reproduceri cromatice foarte rezistente și luciu foarte stabil , datorită unei matrici de polimeri întărită cu umplutură de dioxid de siliciu
- Prezintă un nivel excelent de luciu, la testare, după 20 de ore de uzură simulată într-un test de abraziune cu peria de dinți (20 de ore = 200 de zile de periaj de câte 2 x 3 minute pe zi)

2. Rezistență remarcabilă la decolorare

Testul rezistenței la decolorare

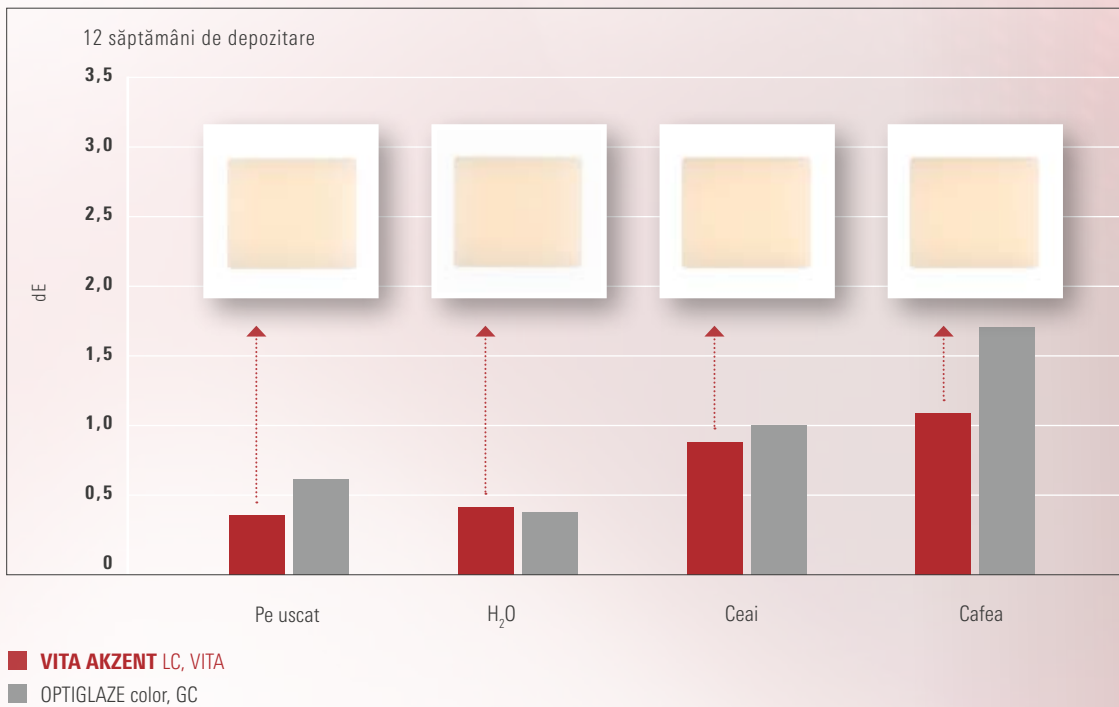

Sursa: Studiu intern, VITA R&D, Raport 0559/19, 03/20
Dr. M. Gmehling ([1] vezi coperta broșurii)

VITA AKZENT® LC

- Prezintă o rezistență excelentă la decolorare, datorită suprafeței omogene
- Prezintă stabilitate cromatică excelentă la testare, după imersiune în apă, ceai și cafea timp de 12 săptămâni

A man and a woman are shown in profile, looking at a laptop screen. The man is on the left, wearing a maroon t-shirt, and the woman is on the right, wearing a red t-shirt. They are both smiling and appear to be engaged in a collaborative activity. The background is a plain, light color.

SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

VITA AKZENT® LC include o gamă largă de culori și variante. Aflați mai multe despre întreaga gamă de materiale disponibile și componentele sistemului coordonat.



SYSTEMKOMPONENTEN

GLUE









































































CLEANER

BRUSH SET


MODELING LIQUID

STEIN
MIXING TRAY

ANSAMBLUL DE CULORI ȘI VARIANTE

VITA AKZENT® LC Portofoliu de materiale																		
VITA AKZENT® LC EFFECT STAINS																		
	<p>Pentru reproducerea exactă a caracteristicilor individuale/efectelor</p>	<table border="0"> <tr> <td> white</td> <td> orange</td> <td> dark-red</td> <td> grey</td> </tr> <tr> <td> cream</td> <td> russet</td> <td> purple</td> <td> black</td> </tr> <tr> <td> lemon</td> <td> khaki</td> <td> blue</td> <td></td> </tr> <tr> <td> sun</td> <td> pink</td> <td> grey-blue</td> <td></td> </tr> </table>	 white	 orange	 dark-red	 grey	 cream	 russet	 purple	 black	 lemon	 khaki	 blue		 sun	 pink	 grey-blue	
 white	 orange	 dark-red	 grey															
 cream	 russet	 purple	 black															
 lemon	 khaki	 blue																
 sun	 pink	 grey-blue																
VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS																		
	<p>Pentru creșterea sistematică a intensității</p>	<p>VITA classical A1–D4</p> <table border="0"> <tr> <td> A red-brown</td> <td> B red-sun</td> <td> C grey-brown</td> <td> D grey-red</td> </tr> </table> <p>VITA SYSTEM 3D-MASTER</p> <table border="0"> <tr> <td> L corn-yellow</td> <td> M2 red-yellow</td> <td> M3 dark-yellow</td> <td> R light-red</td> </tr> </table>	 A red-brown	 B red-sun	 C grey-brown	 D grey-red	 L corn-yellow	 M2 red-yellow	 M3 dark-yellow	 R light-red								
 A red-brown	 B red-sun	 C grey-brown	 D grey-red															
 L corn-yellow	 M2 red-yellow	 M3 dark-yellow	 R light-red															
VITA AKZENT® LC GLAZE																		
	<p>Pentru sigilarea permanentă cu luciu durabil</p>	<table border="0"> <tr> <td> glaze</td> </tr> </table>	 glaze															
 glaze																		
VITA AKZENT® LC COMPONENTS																		
	<p>Componente ale unui sistem armonizat pentru prelucrare fiabilă</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaner • Set de pensule • Suport mixare 																

OFERTA DE TRUSE

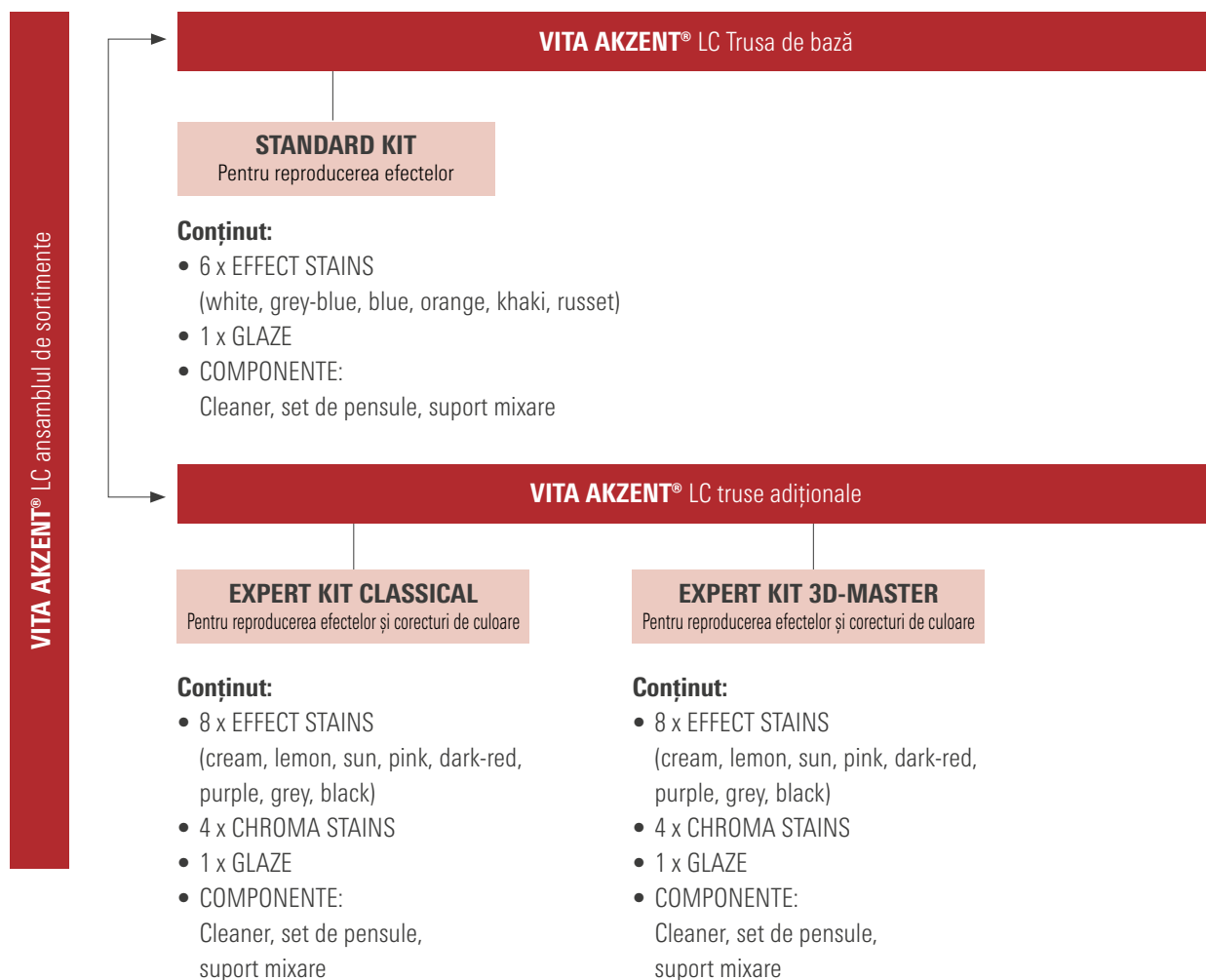

COMPONENTELE SISTEMULUI



SOLUȚII IDEALE PENTRU FLUXUL DE LUCRU

Determinarea culorii



- La determinarea digitală a culorii folosiți **VITA Easyshade V**, iar pentru determinarea vizuală a culorii folosiți o cheie de culori **VITA**.

Producător restaurărilor din VITA ENAMIC



- Realizați substructuri metalice sau restaurări monolitice din ceramica hibridă **VITA ENAMIC**, sau din compozit și proteze totale/parțiale cu **dinți prefabricați VITA**.

Fațetare*



- Stratificați substructurile metalice și restaurările anatomic reduse din ceramică hibridă sau compozit cu rășina de fațetare **VITA VM LC**.

Caracterizare Glazurare



- Caracterizați restaurările cu **VITA AKZENT LC STAINS** și sigiliați suprafețele cu glazura fotopolimerizabilă **VITA AKZENT LC GLAZE**.

Polimerizare



- Folosiți o lampă de fotopolimerizare **recomandată de VITA**.

Cimentarea




- Pentru cimentare folosiți sistemul auto-adeziv **VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS**.

*) Etapă opțională a procesului: Nu se aplică la restaurările monolitice.

SOLUȚII DE STRATIFICARE ȘI DE CARACTERIZARE VITA

Pentru un joc viu de culori și lumini cu toate nuanțele naturii.

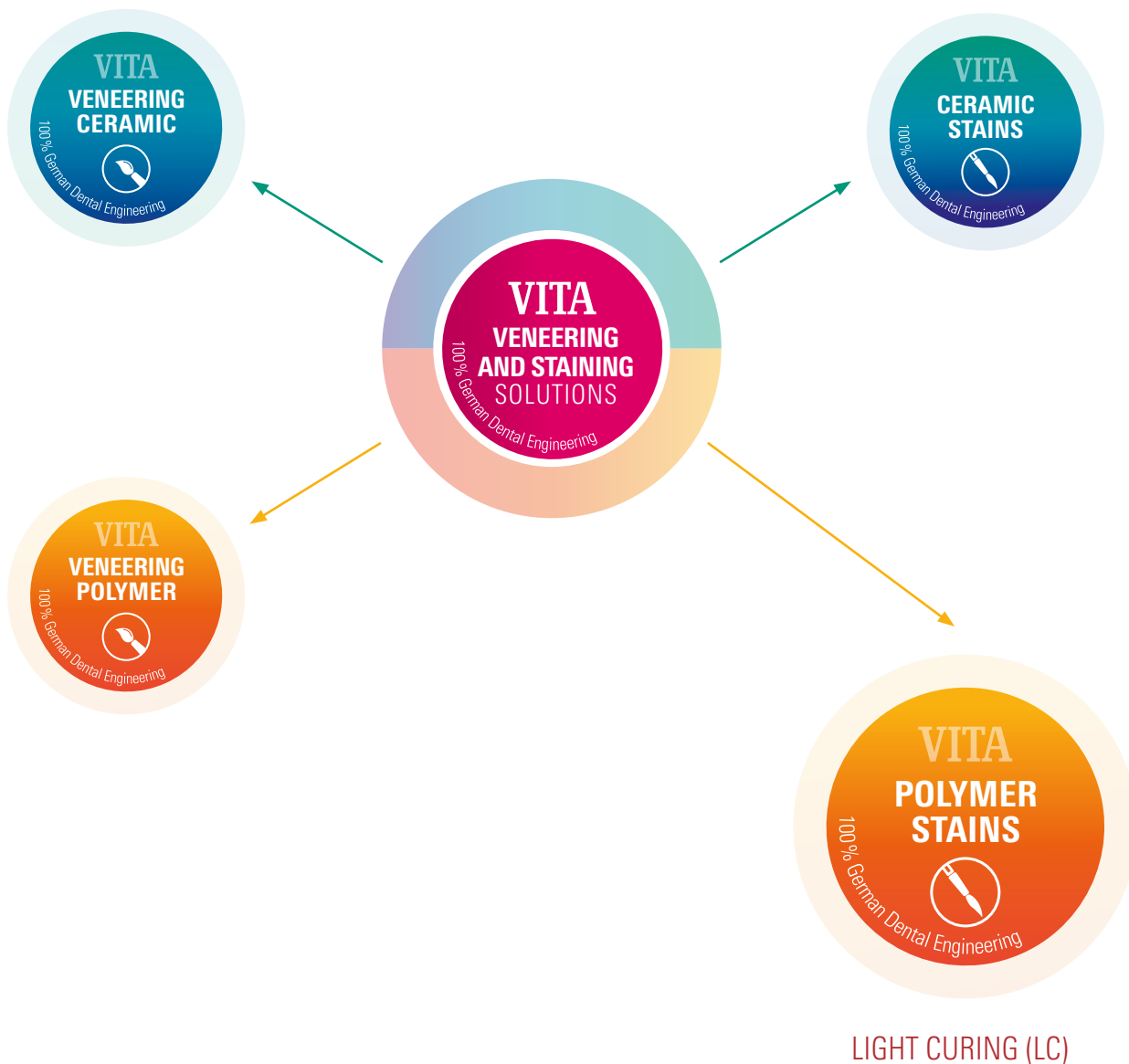

> VITA AKZENT® LC: Pentru reproducerea fiabilă a tuturor nuanțelor

Culori de pictură din compozit cu aplicabilitate universală pentru caracterizări naturale și precise, corecții de culoare și stabilitate cromatică/luciu.

SUNTEM LA DISPOZIȚIA DVS.

Informații suplimentare despre produse și prelucrarea acestora sunt disponibile și pe www.vita-zahnfabrik.com



Hotline Asistență Vânzări

Dna Carmen Holsten și echipa sa (Departamentul de Vânzări Interne) vă poate ajuta la plasarea comenzilor sau dacă aveți întrebări cu privire la livrare, produse sau materiale pentru marketing.

► **Telefon +49 (0) 7761 / 56 28 84**
Fax +49 (0) 7761 / 56 22 99
8.00 - 17.00 CET
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com



Hotline Tehnic

Dacă aveți întrebări tehnice privind produsele VITA, îi puteți contacta pe dl. Michael Tholey și echipa sa.

► **Telefon +49 (0) 7761 / 56 22 22**
Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46
8.00 - 17.00 CET
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com

► Alte contacte internaționale se găsesc pe www.vita-zahnfabrik.com/contacts.



Informații suplimentare despre VITA AKZENT LC puteți găsi pe:
www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc

Referințe

1. Studii interne, VITA R&D:


VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Divizia pentru cercetare și dezvoltare
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germania
Dr. Stefan Aechtner, manager de proiect pentru VITA R&D, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen
Dr. Marina Gmehling, dezvoltator VITA R&D, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

2. Studii interne, VITA managementul produsului:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germania
Hartmut Kimmich, Manager de produs, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Pentru informații detaliate despre teste, vezi Informații tehnice
VITA AKZENT LC;

Descărcați de pe www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc

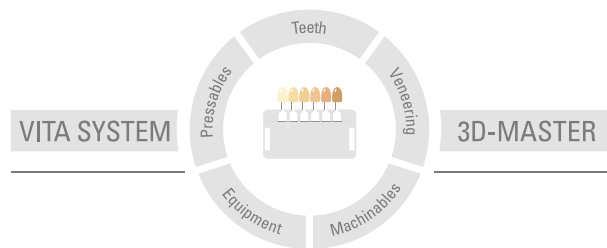

Atenție: Produsele noastre se utilizează cu respectarea instrucțiunilor de folosire. Nu ne asumăm răspunderea pentru daune produse din cauza unei manipulări sau prelucrări necorespunzătoare. Suplimentar, utilizatorul este obligat să verifice înainte de utilizare dacă produsul este corespunzător pentru domeniul de utilizare respectiv. Nu ne asumăm răspunderea pentru cazurile în care produsul nu este compatibil cu materialele și aparatele altui producător și din aceasta rezultă o pagubă. VITA Modulbox nu este neapărat un component al produsului. Editarea acestor instrucțiuni s-a făcut la 2022-07:

Odată cu publicarea acestei ediții cu informații privind utilizarea, toate edițiile precedente își pierd valabilitatea. Versiunea actuală aferentă o puteți găsi la adresa www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik este o firmă certificată, iar următoarele produse poartă marca

CE 0124:

VITA AKZENT® LC

Produsele/sistemele altor producători menționate în acest document sunt mărci înregistrate ale producătorului respectiv.

MD Rx Only

CH REP VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen (Germany)
Zweigniederlassung Basel c/o Perrig AG, Max Kämpf-Platz 1, 4058 Basel

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)