

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER

Guide de démarrage rapide



Colorants indépendants du CDT
pour le contrôle de la saturation

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER

FAITS & CARACTÉRISTIQUES


Les CHROMA STAINS sont

- des colorants céramique indépendants* du CDT pour toutes les céramiques cosmétiques classiques, les céramiques monolithiques en dioxyde de zirconium, les céramiques silicatées ou feldspathiques.

Avec CHROMA STAINS, vous bénéficiez des avantages suivants

- Adaptation chromatique simple dans les groupes de luminosité correspondants.
- Super propriétés de mise en œuvre, comme une application simple.
- Résultats très esthétiques grâce au maquillage de surface.

COMPOSANTS DU SYSTÈME

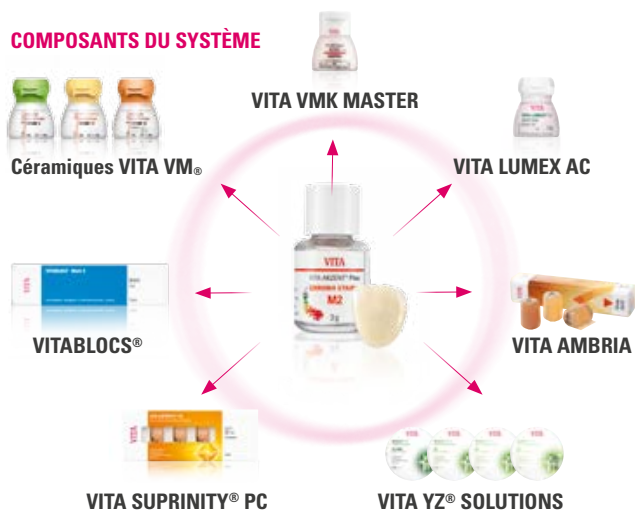

*) Céramiques cosmétiques VITA, céramiques vitreuses VITA, VITA YZ, VITABLOCS.

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER

Utilisation des CHROMA STAINS 3D-MASTER sur une base définie



CHROMA STAINS L		2L1.5 → 2L2.5	3L1.5
CHROMA STAINS M2		1M1 → 1M2	2M1 → 2M2
CHROMA STAINS M3			2M2
CHROMA STAINS R		2R1.5 → 2R2.5	3R1.5

! N. B.

* Mélangez dans le 4^e groupe de luminosité CHROMA STAINS INTENSE ORANGE (CSIO) avec les CHROMA STAINS correspondants (ratio du mélange 1:5).

Contrôle de la teinte

- Vous avez la possibilité de rendre toutes les couleurs plus rouges ou plus jaunes en mélangeant les couleurs (ratio du mélange 1:1).

Par exemple : pour que la couleur 2M2 soit plus jaune, mélangez du CSM3 et du CSL au ratio 1:1 pour obtenir la couleur 2L2.5.



→ 3L2.5	4L1.5*	→ 4L2.5*	
3M1 → 3M2	4M1* → 4M2*	5M1 → 5M2	
→ 2M3	3M2 → 3M3	4M2* → 4M3*	5M2 → 5M3
→ 3R2.5	4R1.5*	→ 4R2.5*	

 Exemple d'utilisation pour une restauration antérieure unitaire



1 Relevé de la couleur.



La couleur de la restauration ne s'intègre pas à celle des autres dents.



2 Application CHROMA STAINS.
Cuisson de fixation des colorants ou cuisson combinée avec VITA AKZENT Plus GLAZE (voir tableau des cuissons).



Adaptation chromatique parfaite de la restauration aux autres dents.

VITA AKZENT® Plus – Tableaux de cuisson

Programme de cuisson conseillé

Cuisson de glaçage POUDRE – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Prés. °C	min*	↗ min	↗ °C/min	Temp. env. °C	min	Vide min	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5.37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT	400	4.00	5.37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-	600*
VITA VM 11	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC GLAZE LT	400	6.00	7.00	50	750	1.00	-	500*
Cuisson de fixation des colorants	500	4.00	2.30	80	700	1.00	-	-
VITA AMBRIA Glaze LT	400	6.00	4.22	80	750	1.00	-	500*
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder	400	4.00	7.00	50	750	1.00	-	500*

Lors de la cuisson des pâtes, le temps de préchauffage doit être allongé de 4 à 6 min au minimum.

*) Le refroidissement lent jusqu'à la température correspondante est conseillé pour la dernière cuisson de céramique cosmétique prévue.

Le lift des appareils VITA VACUMAT doit être dans une position > 75 %. La pièce à cuire doit être à l'abri de toute arrivée d'air directe.



! **Attention** : tous les types de restauration peuvent également être glacés avec VITA AKZENT Plus GLAZE LT. Dans ce cas, il est possible de réduire la température jusqu'à 750 °C.





ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE TECHNIQUE

Questions au sujet des produits VITA ?

Des prothésistes dentaires et des conseillers techniques d'expérience répondront à vos questions aux coordonnées suivantes.

- ▶ **Téléphone +49 (0) 7761/562222**
- ▶ **Courriel info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **de 8 h à 17 h HEC**



ASSISTANCE EN LIGNE

Des questions sur la mise en œuvre et les produits ?

Vous trouverez des réponses en ligne sous la forme de **FAQ**,
de vidéos et de modules de formation.

Vous trouverez de plus amples informations, entre autres,
dans le mode d'emploi complet VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**

CE 0124

MD



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)