

VITA Bomba de vácuo II

Instruções de uso



VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

VITA – perfect match.

VITA

Informações gerais

Este equipamento se destina ao uso exclusivo em laboratório. Leia cuidadosamente estas instruções de uso antes de instalar ou operar o equipamento. Não deve ser feito no equipamento nenhum ajuste que não tenha sido explicitamente solicitado nestas instruções de uso. Qualquer modificação invalidará a garantia e pode apresentar um potencial risco. Não aceitamos nenhuma responsabilidade ou dano causado pelo uso impróprio ou modificação do equipamento sem permissão.

1. Verifique a tensão indicada na placa de identificação e certifique-se de que corresponda à tensão de rede no seu local.
2. A bomba não é resistente à corrosão. Não opere a bomba diretamente com gases corrosivos.
3. Instale o equipamento em uma área limpa, livre de poeira e ventilada, com temperaturas inferiores a 40 °C.
4. O separador de umidade pode prevenir que uma grande quantidade de líquido transborde para dentro da bomba. Tome cuidado em assegurar que o nível de líquido no frasco não exceda o limite de segurança. A não observância pode resultar em danos severos à bomba e invalidar a garantia. Se este for o caso, entre em contato com seu revendedor imediatamente.
5. O cartucho de filtro no separador de umidade é usado para absorver umidade e poeira. Substitua o cartucho de filtro quando estiver saturado para garantir um bom desempenho de bombeamento.
6. Para evitar danos à bomba, é importante purgá-la antes de iniciá-la.
7. Para evitar que o cartucho de filtro no separador de mistura bloqueie a entrada de ar, não incline a bomba durante o funcionamento.
8. Esta bomba conta com um dispositivo de proteção térmica que desliga a bomba automaticamente em caso de sobreaquecimento.

VITA Bomba de vácuo II – Informações gerais

9. A temperatura da superfície da bomba é muito alta durante e após o funcionamento. Não toque na bomba para evitar queimaduras.
10. Não use nenhum lubrificante que possa causar danos à bomba.
11. Nunca pulverize materiais inflamáveis ou tóxicos.
12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o fabricante ou a central de atendimento ao cliente para substituí-lo e evitar riscos.

Ao abrir a embalagem, verifique que a bomba está em boas condições.

Se não for este o caso, entre em contato com seu revendedor imediatamente ou nos contate através do e-mail: instruments@vita-zahnfabrik.com.

Colocação em funcionamento inicial

1. Verifique os cabos de conexão e a mangueira de vácuo quanto a danos visuais. Se o cabo de alimentação estiver danificado, não opere o equipamento. Entre em contato com o fabricante ou a central de atendimento ao cliente para substituí-lo.
2. Certifique-se de que o equipamento esteja ligado no interruptor principal (configuração de fábrica).



3. Certifique-se de que o separador de umidade esteja completamente fechado (configuração de fábrica).



4. Conecte adequadamente a bomba à sua unidade de queima VITA.

As conexões podem ser encontradas no manual de instruções da respectiva unidade de queima.

Substituição do cartucho

Substitua o cartucho de filtro quando estiver saturado com umidade ou partículas.





1. Gire o vidro do separador de umidade para fora em sentido anti-horário.
2. Gire o cartucho de filtro para fora em sentido anti-horário.
3. Insira o novo cartucho de filtro girando-o em sentido horário.
4. Insira de volta o vidro do separador de umidade girando-o em sentido horário.

VITA Bomba de vácuo II – Dados técnicos


Dados técnicos

Número de pedido	DVPURM110	DVPURM220
Potência máxima	100 W	80 W
Corrente máxima	1 A	0,4 A
Vácuo máximo	25 mbar	
Taxa máxima de fluxo	23 l/min	20 l/min
Regulador de vácuo	Sim	
Proteção contra transbordamento	Sim	
Nível de ruído	52 dB	
Espiga de mangueira	Conector de ar comprimido de 6 mm	
Peso líquido	5,2 kg	
Dimensão (CxLxA)	31,0 x 13,5 x 20,4 cm	
Conexão de alimentação	120 V, 60 Hz	220-240 V, 50/60 hz

Informações de segurança

Pictogramas		
Tensão perigosa	Este pictograma avverte o usuário sobre tensão perigosa. Antes de abrir a unidade, sempre desconecte o equipamento da corrente elétrica retirando o plugue da tomada.	
Superfície quente	Este pictograma avverte o usuário sobre superfícies quentes. Possibilidade de queimaduras.	
Eliminação separada	Elimine equipamentos elétricos e eletrônicos separadamente do lixo doméstico. A barra preta abaixo do símbolo de "lixeira com rodas" indica que o equipamento foi colocado no mercado após 13 de agosto de 2005. Observe que o equipamento está sujeito à diretiva da Comunidade Europeia 2012/19/EU (REEE) e às leis nacionais válidas em seu país e deve ser eliminado de acordo. Entre em contato com seu revendedor se você precisar eliminar o equipamento.	
Nota	Este pictograma avverte sobre situações perigosas com risco de ferimentos pessoais ou danos ao equipamento.	

Com o exclusivo VITA System 3D-Master, todas as tonalidades naturais dos dentes são sistematicamente determinadas e completamente reproduzidas.

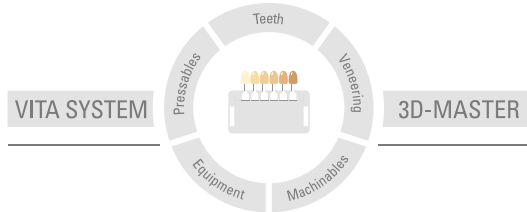

Nota importante: Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer responsabilidade se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto e assim causem danos. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Data de publicação deste manual de instruções: 2023-09

Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação deste manual de instruções. A respectiva versão atualizada e vigente encontra-se em www.vita-zahnfabrik.com

VITA Bomba de vácuo II possui a marcação CE no âmbito da diretiva 2014/30/UE



VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

 facebook.com/vita.zahnfabrik