

Módulo wifi VITA para hornos VITA

Instrucciones de uso



VITA – perfect match.

VITA

Indicaciones de seguridad y pictogramas

Explicación de los símbolos		
Tensión peligrosa	Este pictograma advierte de la existencia de tensiones peligrosas. Antes de abrir el aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica.	
Nota	Abrir la carcasa puede provocar daños al aparato.	
Eliminación separada	Proceder conforme a las normas de eliminación de dispositivos eléctricos y electrónicos; no eliminar junto con la basura doméstica. La barra negra bajo el símbolo "cubo de basura" significa que el aparato fue comercializado después del 13/08/2005. Tenga en cuenta que el aparato está sujeto a la directiva 2012/19/UE (RAEE) y a las leyes nacionales vigentes en el país correspondiente, y que debe ser entregado a un centro de eliminación adecuado. Dirigirse a su distribuidor en caso de que sea preciso eliminar el aparato.	
Marcado CE	El módulo wifi VITA cumple la normativa vigente de la Unión Europea (UE). La declaración de conformidad se puede obtener a través de VITA (departamento de Asuntos Regulatorios) en: www.vita-zahnfabrik.com	

2 Uso previsto

2.1 Usos prohibidos

No está permitido utilizar el aparato con fuentes de alimentación o productos peligrosos ni con dispositivos alterados que pudieran ser nocivos para la salud.

2.2 Usos permitidos

Solo se permite utilizar el aparato después de leer y entender íntegramente este manual de instrucciones y conforme a los procedimientos que en él se describen. Cualquier uso distinto o que vaya más allá, como pueda ser el procesamiento de productos distintos a los previstos, así como la manipulación de sustancias peligrosas o nocivas para la salud, se considera no conforme a lo prescrito. El fabricante/proveedor declina cualquier responsabilidad por daños derivados de dicho uso.

El riesgo recae exclusivamente en el usuario.

2.3 Condiciones ambientales

- Uso en interiores
- Temperatura ambiente de -10 °C a 40 °C
- Humedad relativa: 80 % a 40 °C
- Altitud máxima sobre el nivel del mar: 3800 m
- Fluctuación máxima de la tensión nominal no superior al 10 % por encima y el 15 % por debajo de la tensión nominal.

3 Volumen de suministro

- Módulo wifi VITA
- Instrucciones de uso

4 Datos técnicos

Rango de frecuencia:

- Rango de frecuencia 2,4 GHz

El aparato cumple las siguientes normas:

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010
- EN 62311:2008
- ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
- ETSI EN 301 389-17 V2.1.1 (2009-05)
- ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

Por la presente, VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG declara que el tipo de equipo radioeléctrico módulo wifi VITA es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: <https://www.vita-zahnfabrik.com/de>

5 Configuración del módulo wifi VITA

5.1 Inserción del módulo wifi VITA

Inserte el módulo wifi VITA en el puerto USB situado en la parte inferior del lateral derecho de la carcasa.



Figura 1: Inserción del módulo wifi VITA

1	Inserción del módulo wifi VITA
---	--------------------------------

5.2 Ajustes del aparato

Seleccione Ajustes del aparato.



Figura 2: Pantalla de inicio

1	Ajustes del aparato
---	---------------------

5.3 Ajustes del wifi

Seleccione Ajustes del wifi.

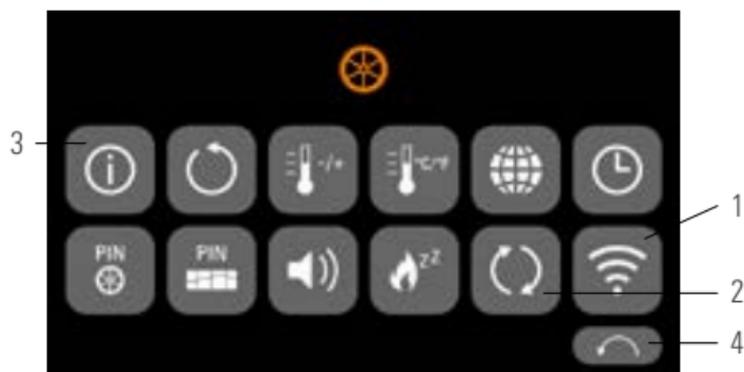


Figura 3: Sinopsis de ajustes del aparato

N.º	Denominación
1	Ajustes del wifi
2	Opciones de actualización
3	Datos del aparato
4	Volver a la pantalla de inicio

5.4 Selección de la red wifi

Seleccione su red.



Figura 4: Selección de la red wifi

1	Seleccionar la red wifi
2	Apagar el wifi
3	Desconectar el wifi
4	Volver a los ajustes del aparato
5	Buscar red

5.5 Introducción de la contraseña

Mediante el teclado que aparece, introduzca su contraseña para la red seleccionada.



Figura 5: Introducción de la contraseña

1	Introducir la contraseña del wifi
2	Borrar el último carácter
3	Borrar campo
4	Volver sin cambios
5	Confirmación

6 Funciones del módulo wifi VITA

6.1 Actualización online

1. Acceder a los ajustes del aparato (véase Ajustes del aparato)
2. Acceder a las opciones de actualización (véase Ajustes del wifi)
3. Seleccionar Actualización online

A continuación, se comprueba si está disponible una nueva actualización en línea.

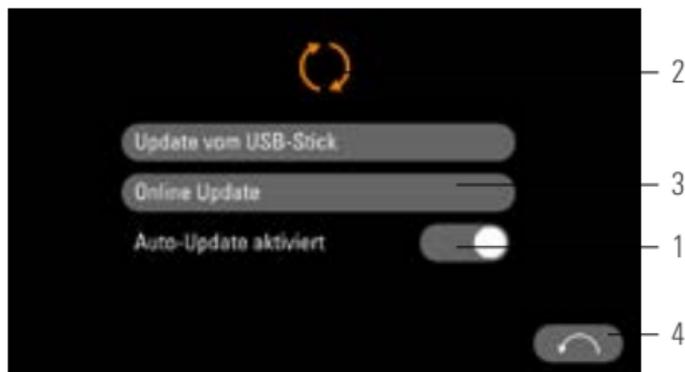


Figura 6: Activación de la actualización online

1	Activar la actualización automática
2	Actualización desde el lápiz USB
3	Actualización online
4	Volver a los ajustes del aparato

Nota: Si está activada "Actualización automática", se buscarán automáticamente nuevas actualizaciones cada vez que se encienda el horno.

6.2 Envío en línea de datos del proceso a VITA

1. Acceder a los ajustes del aparato (véase Ajustes del aparato)
2. Acceder a los datos del aparato (véase Ajustes del wifi)
3. Seleccionar “Enviar a VITA”



Figura 7: Envío de datos del aparato a VITA

1	Enviar datos del aparato a un lápiz USB
2	Enviar datos del aparato al Servicio técnico para aparatos de VITA
3	Volver a los ajustes del aparato

6.3 VITA Furnace App

Nota: La aplicación VITA Furnace solo puede utilizarse en dispositivos Android.

- Descarga de la VITA Furnace App en la Google Play Store



Figura 8: Código QR de VITA Furnace App



Figura 9:
Símbolo de Google Play Store

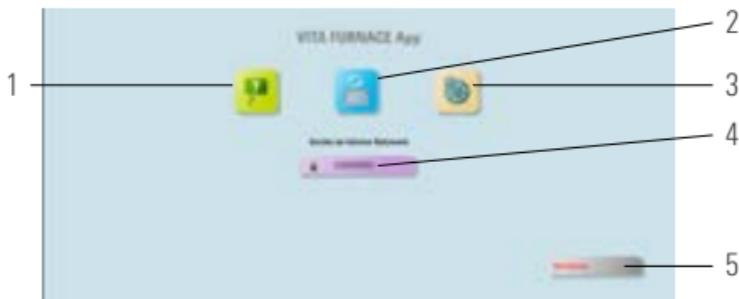


Figura 10: Pantalla de inicio de VITA Furnace App

1	Canal de YouTube de VITA
2	Buscar nuevos aparatos VITA
3	Ajustes
4	Seleccionar la interfaz de usuario de VITA Furnace App
5	Salir de VITA Furnace App

6.5 Interfaz de usuario de VITA Furnace App

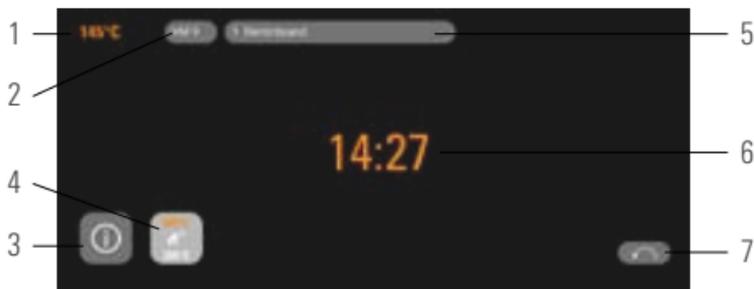


Figura 11: Visualización del horno en la VITA Furnace App

1	Indicación de la temperatura
2	Nombre del material
3	Información del aparato
4	Modo de espera
5	Nombre del programa
6	Duración del programa
7	Volver a la pantalla de inicio

Nota: La aplicación VITA Furnace solo puede utilizarse dentro de una red wifi local. Esto significa que el horno y el aparato con la VITA Furnace App deben estar conectados a la misma red wifi local.

6.6 Ajustes de VITA Furnace App

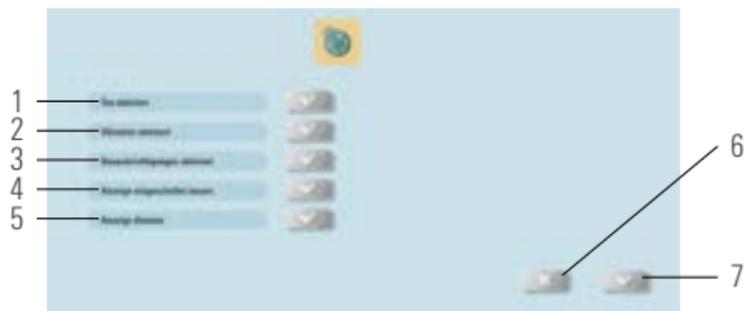


Figura 12: Ajustes de VITA Furnace App

1	Activar el sonido
2	Activar la vibración
3	Activar las notificaciones
4	Dejar activada la visualización
5	Atenuar la visualización
6	Volver a la pantalla de inicio sin cambios
7	Guardar los ajustes

7 Garantía y responsabilidad

La garantía y la responsabilidad se rigen por las condiciones estipuladas contractualmente. En caso de alteraciones del software sin el conocimiento y la autorización de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co KG, se extinguirán los derechos de responsabilidad y garantía.

7.1 Contacto con VITA

Para más información acerca del aparato, consulte nuestro sitio web:

<http://www.vita-zahnfabrik.com>

En la sección **Productos/Proceso de cocción/Hornos de cocción/**

VITA V60 i-Line PLUS pueden descargarse las actualizaciones de software.

Además, en la sección Asistencia/VITA Update-Messenger se le ofrece la posibilidad de registrarse para recibir automáticamente información actualizada sobre el aparato por correo electrónico mediante el Boletín de actualización de VITA.

Si desea hacer alguna consulta técnica o tiene alguna duda sobre los servicios de reparación y garantía, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: instruments@vita-zahnfabrik.com Tel.: +49 (0) 7761 / 562 - 111

Protección de la propiedad intelectual


Este manual de instrucciones es confidencial.

Debe ser utilizado exclusivamente por las personas autorizadas al efecto.

La cesión a terceros requiere la autorización por escrito de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG. Toda la documentación está protegida por las leyes de propiedad intelectual. No se permite la difusión ni reproducción total o parcial de este documento, ni tampoco la utilización y la divulgación de su contenido sin expresa autorización. Cualquier infracción es punible y obliga al pago de indemnización por daños y perjuicios.

Nos reservamos la opción de ejercitar los derechos de propiedad industrial.

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.

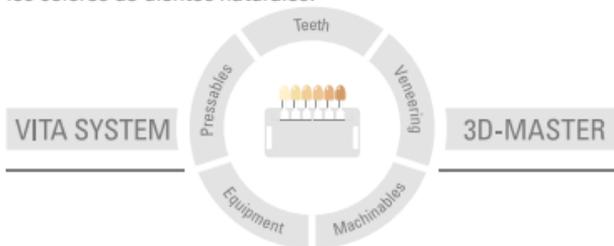

Nota importante: Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular VITA Modulbox no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 2023-10

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en: www.vita-zahnfabrik.com

El módulo wifi VITA lleva el marcado CE conforme a las Directivas 2014/30/UE, 2011/65/UE y 2014/53/UE.

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik