

VITAVM[®]LC *flow*: el composite de recubrimiento brillante

Precisión de modelado. Facilidad de pulido.



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

VITA – perfect match.


VITA

Descripción del producto

VITA VM LC flow es un composite de recubrimiento fotopolimerizable fluido para prótesis dentales fijas y removibles. Su consistencia fluida, acompañada de una elevada estabilidad, permite el modelado preciso del composite. La composición

especial del material facilita el pulido, posibilitando así unas superficies homogéneas con un brillo especialmente intenso.

FLUIDO Y ESTABLE

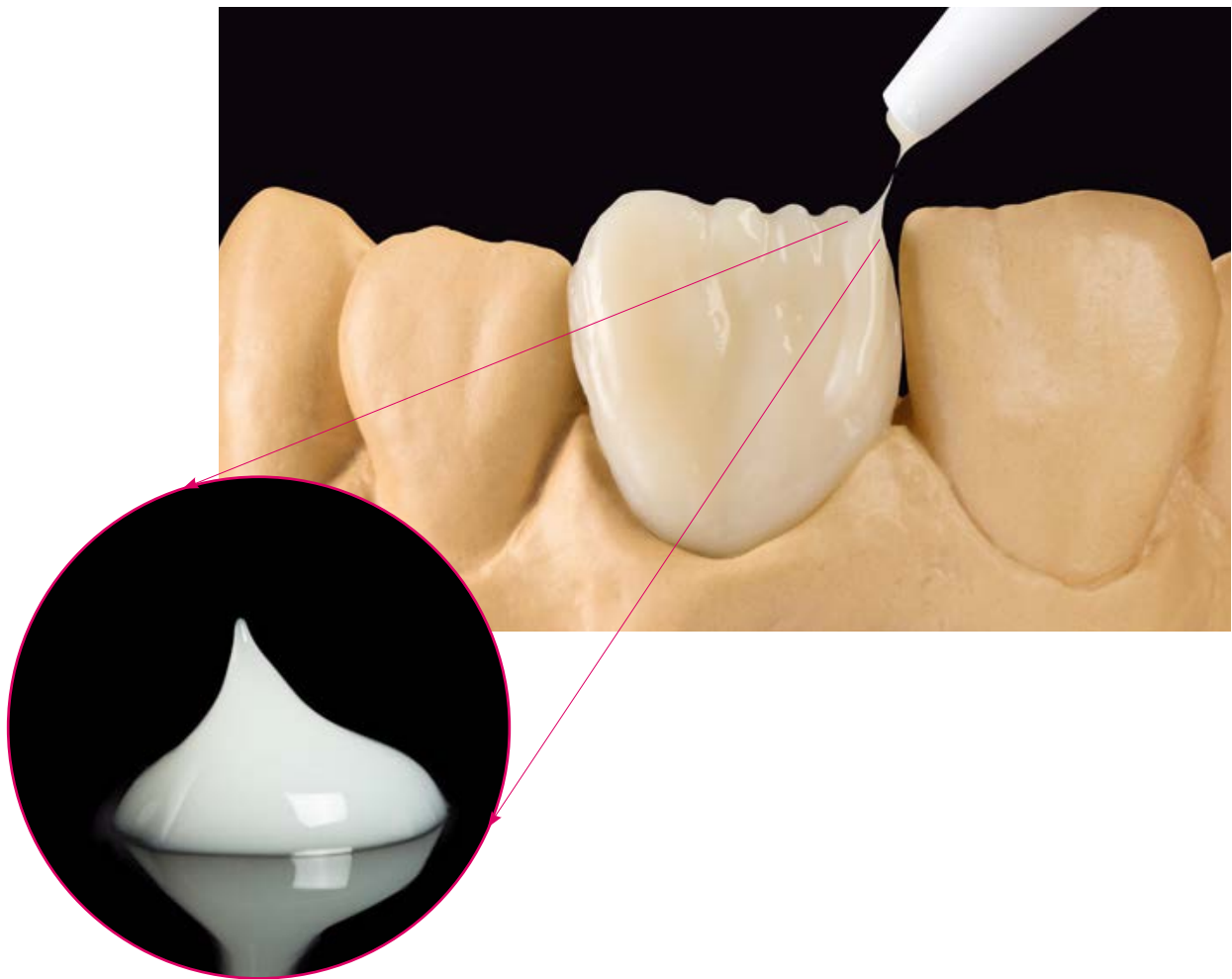

¿Qué?

- VITA VM LC flow es un composite de recubrimiento fotopolimerizable fluido para prótesis dentales fijas y removibles. Este moderno sistema de recubrimiento se caracteriza por una muy buena fluidez, acompañada de una elevada estabilidad.


¿Para qué?

- VITA VM LC flow está indicado para una amplia gama de indicaciones:
 - Recubrimiento de coronas, puentes, coronas telescópicas, supraestructuras implantosoportadas
 - Personalización de dientes protésicos
 - Reconstrucción de porciones gingivales
 - Caracterización de bases de prótesis

¿Con qué?

- Los componentes centrales del sistema de recubrimiento VITA VM LC flow son: OPAQUE, BASE DENTINE, ENAMEL y múltiples materiales complementarios. Es posible modelar directamente utilizando una jeringa, un pincel o una sonda.

VENTAJAS

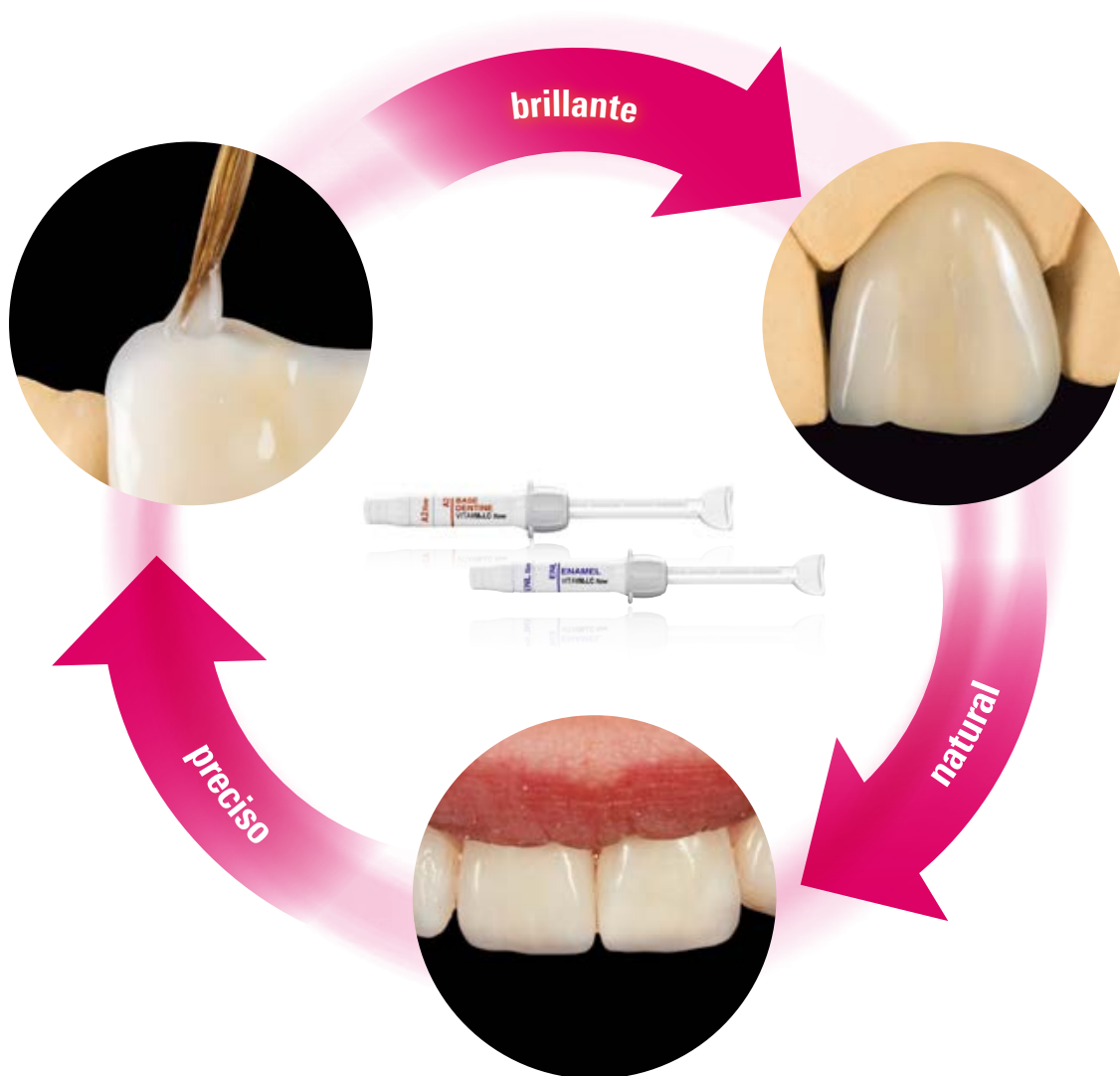

Preciso

- Su muy buena fluidez, acompañada de una elevada estabilidad gracias a su consistencia tixotrópica, permite un modelado preciso.

Natural

- Resultados expresivos que reproducen fielmente el modelo natural, gracias a los materiales ENAMEL y EFFECT con translucidez, opalescencia y fluorescencia integradas.


Brillante

- Superficies homogéneas con un brillo intenso gracias a la facilidad de pulido resultante de la matriz polimérica altamente reticulada con micropartículas de relleno distribuidas uniformemente.

Resistente

- La capacidad de carga y la resistencia superficial elevadas permiten confeccionar restauraciones duraderas, gracias a las muy buenas propiedades mecánicas del material.


SISTEMA Y CONCEPTO

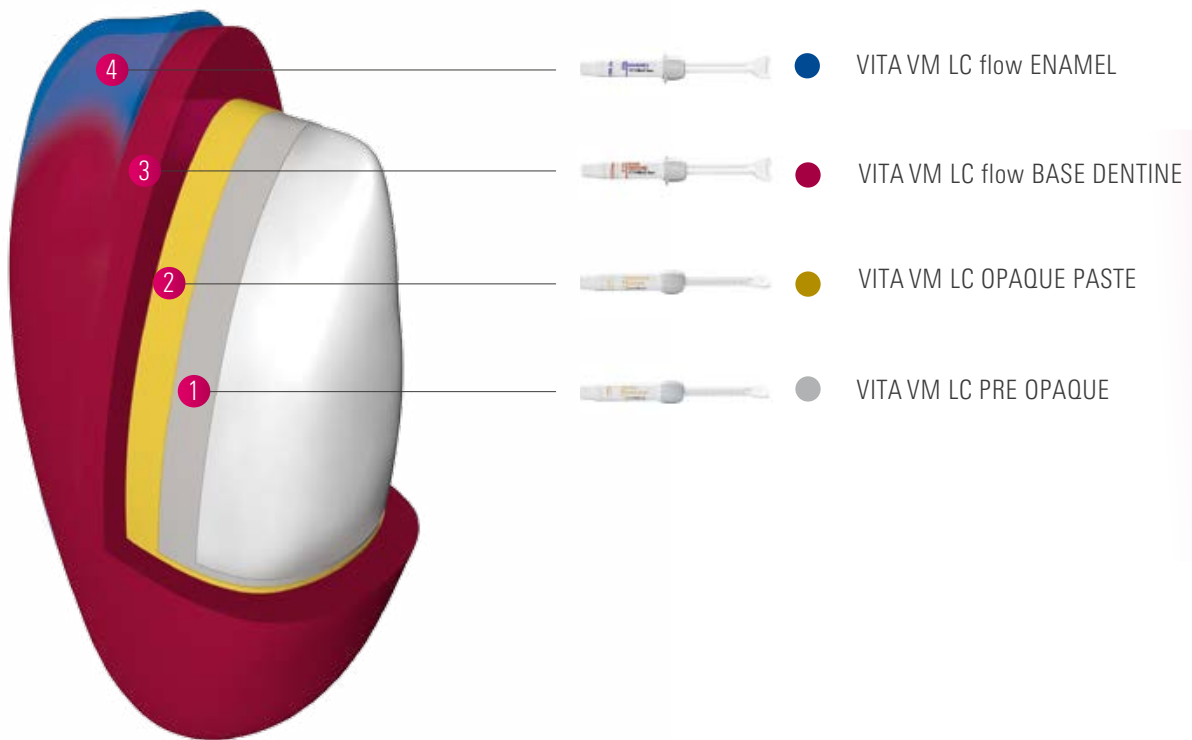

SISTEMA VITAVM®LC flow: COMPONENTES BÁSICOS

- Materiales VITA VM LC PRE OPAQUE y OPAQUE PASTE para el enmascaramiento de estructuras de soporte
- Materiales VITA VM LC flow BASE DENTINE para la zona cervical y del cuerpo
- Materiales VITA VM LC flow ENAMEL para la zona incisal


EJEMPLO PRÁCTICO

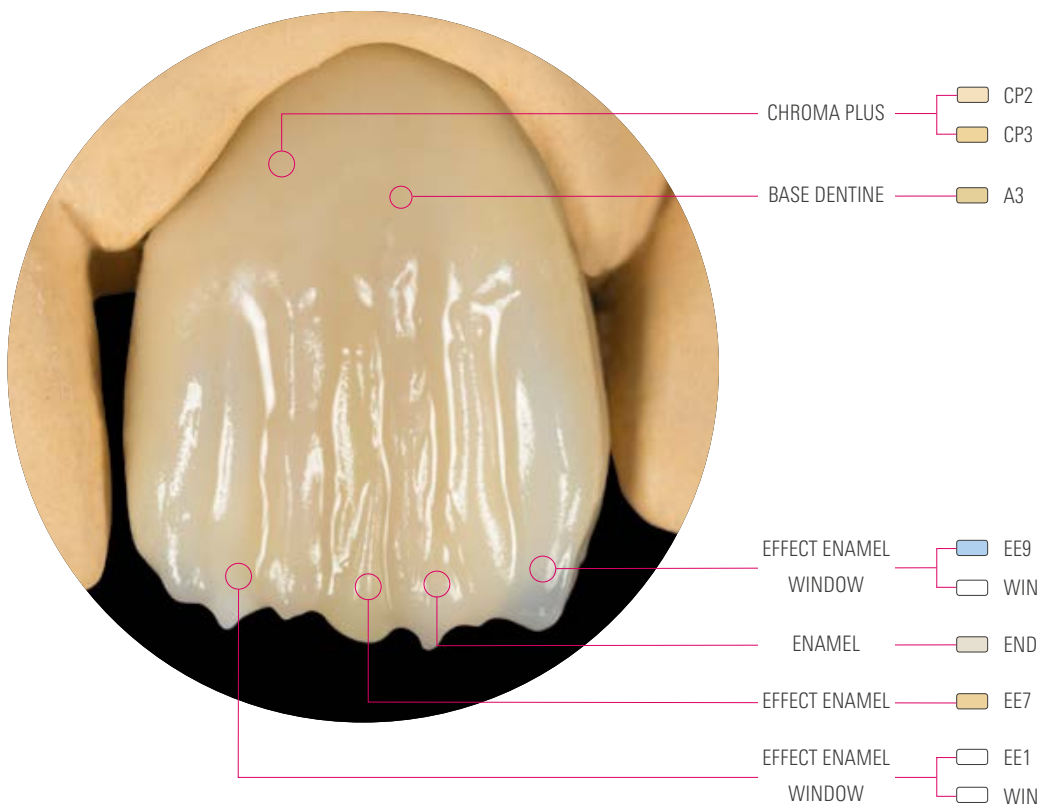

SISTEMA VITAVM®LC flow: COMPONENTES ADICIONALES

- Materiales VITA VM LC flow EFFECT para la zona incisal
- Materiales VITA VM LC flow CHROMA PLUS para la intensificación cromática en la zona cervical y del cuerpo
- Materiales VITA VM LC flow GINGIVA para la reconstrucción de porciones gingivales
- Maquillajes VITA VM LC PAINT para la reproducción de efectos cromáticos


RESUMEN DE COMPONENTES

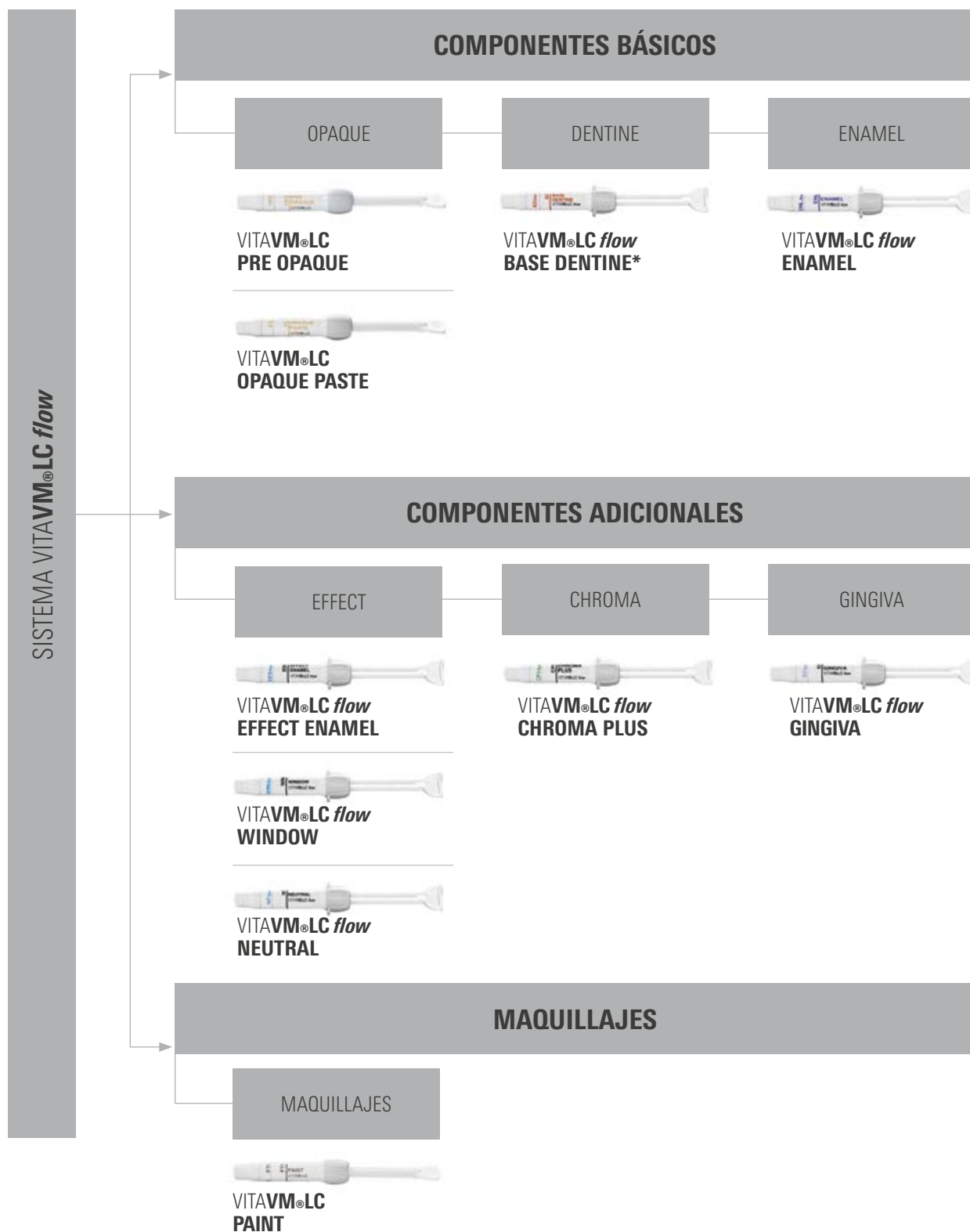


Nota: El SISTEMA VITA VM LC flow es compatible con los aparatos de fotopolimerización y los sistemas de unión (p. ej., VITA VMLC PRIMER) de uso habitual, de modo que puede utilizarse directamente. Encontrará un resumen detallado al respecto en www.vita-zahnfabrik.com.

* Disponible en 8 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y en 15 colores VITA classical A1-D4.

COLORES DISPONIBLES

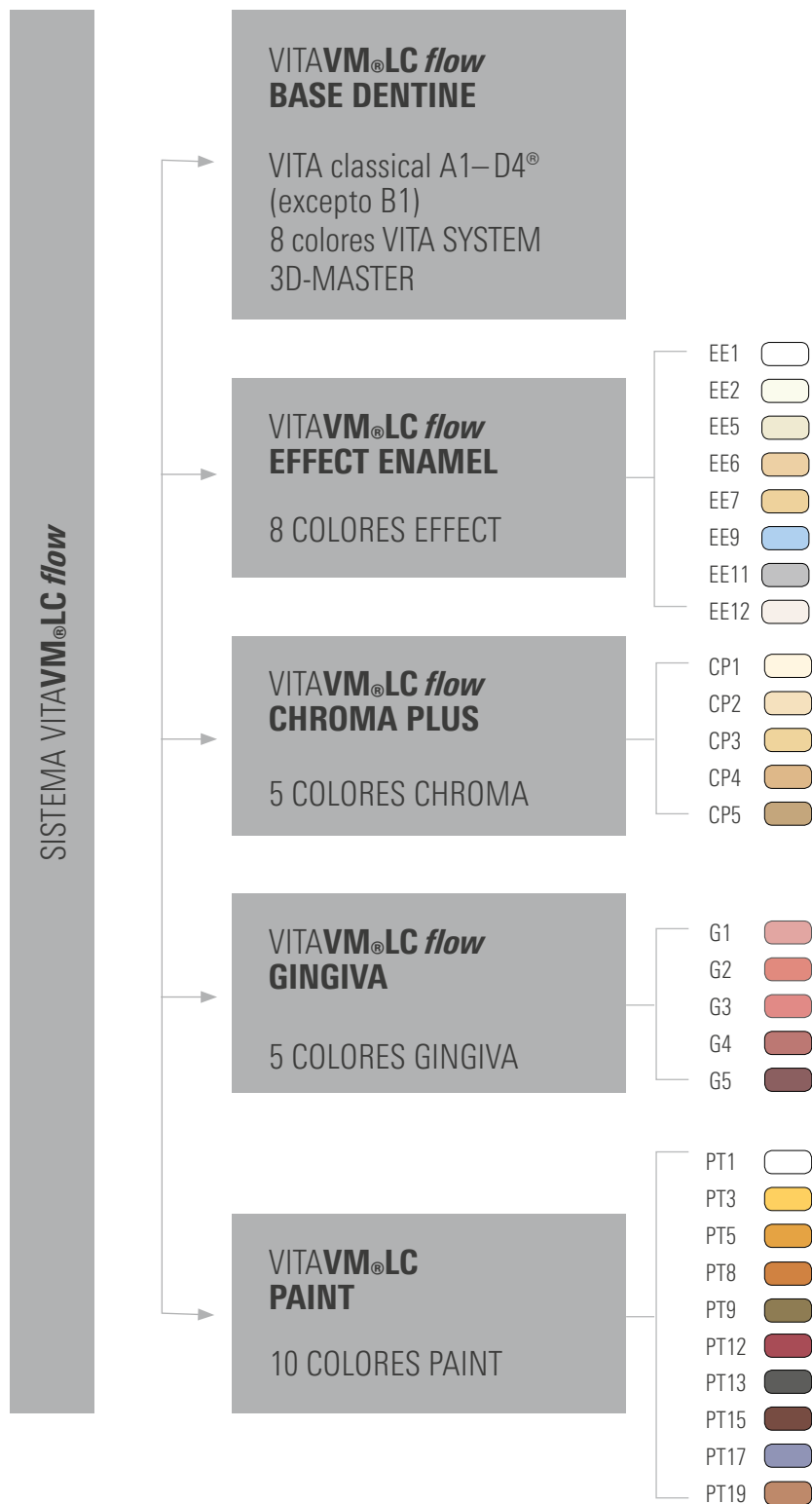

ÁMBITOS DE APLICACIÓN Y MATERIALES

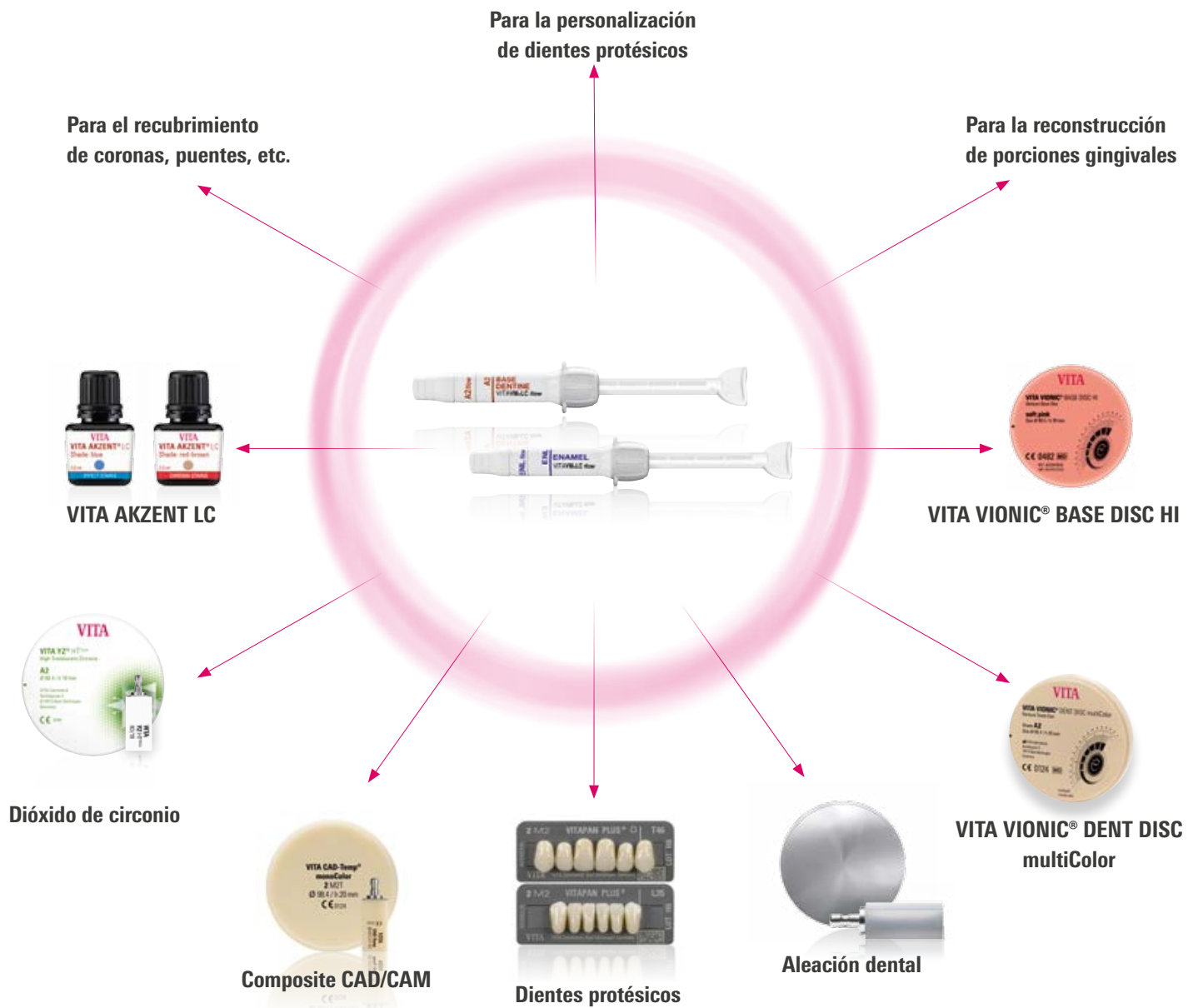

¿Para qué ámbitos de aplicación?

- Recubrimiento de coronas, puentes, coronas telescópicas, supraestructuras implantosoportadas
- Personalización de dientes protésicos
- Reconstrucción de porciones gingivales
- En combinación con el sistema de maquillajes/glaseado fotopolimerizable VITA AKZENT LC

¿Para qué materiales?

- Aleaciones dentales
- Cerámica híbrida
- Dióxido de circonio
- PMMA para CAD/CAM
- Composite CAD/CAM, PEEK
- Dientes protésicos de composite/polímero

INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO



- **Pincel:**

Para el modelado están indicados, p. ej., el pincel n.º 1 de VITA (VITA Zahnfabrik) y el pincel lay:art style (Renfert GmbH).



- **Instrumentos de pulido:**

Para el pulido previo están especialmente indicados los pulidores del kit VITA ENAMIC Polishing Set technical (VITA Zahnfabrik).



- **Pastas de pulido:**

Para el pulido de alto brillo está especialmente indicada la pasta de pulido VITA Polish Hybrid (VITA Zahnfabrik).



- **Aparatos de fotopolimerización:**

Para la polimerización están indicados aparatos de fotopolimerización de uso habitual, tales como Speed-Lablight (Hager & Werken), HiLite Power (Heraeus Kulzer) o Visio Beta vario (3M ESPE), entre muchos otros.*



- **Sistemas de unión:**

Para la unión adhesiva entre la estructura metálica y VITA VM LC flow recomendamos el uso de VITA **VM[®]LC PRIMER I y II**.



*) Para obtener una lista exhaustiva de los aparatos de fotopolimerización y los sistemas de unión recomendados, visite www.vita-zahnfabrik.com.

VISTA GENERAL DE SURTIDOS



VITAVM®**LC flow** BASIC KIT VITA classical A1–D4® (Ref. CVLCFBKCV3)

Surtido básico para la estratificación BASIC (DENTINE – paste/ENAMEL y materiales complementarios flow)

Cantidad	Contenido	Producto
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE
15	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A1-D4 (excepto B1)
15	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE A1-D4 (excepto B1)
2	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL, END
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 – CP5
1	5 ml	VITA VM LC GEL
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER

Accesorios: paleta de mezclado, soporte para pinceles, puntas de pincel, pincel de maquillaje

VITAVM®**LC flow** BASIC KIT SMALL* VITA classical A1-D4® (Ref. CVLCFBKSCV3)

Pequeño surtido básico para la estratificación BASIC (DENTINE, ENAMEL y materiales complementarios flow)

Cantidad	Contenido	Producto
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE
6	3 g	OPAQUE PASTE A1, A2, A3, A3.5 B3, D3
6	4 g	flow BASE DENTINE A1, A2, A3, A3.5 B3, D3
2	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL, END
1	5 ml	VITA VM LC GEL
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER

Accesorios: paleta de mezclado, soporte para pinceles, puntas de pincel, pincel de maquillaje

* También disponible en el VITA SYSTEM 3D-MASTER (ref. CVLCFBKSV1)



VITAVM®LC flow TEST KIT* A3 (Ref. CVLCFTA3)

Surtido monocromo para las primeras pruebas (DENTINE, ENAMEL y materiales complementarios flow)

Cantidad	Contenido	Producto
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC GEL
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Varillas de muestras de colores A3

Accesorios: pincel de maquillaje

VITAVM®LC flow PROFESSIONAL KIT (Ref. CVLCFPK1)

Para efectos y características naturales

Cantidad	Contenido	Producto
8	3 g	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE1, EE2, EE5, EE6, EE7, EE9, EE11, EE12
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1		Guía de colores VITA VM "Individual"

VITAVM®LC flow CREATIVE KIT (Ref. CVLCFCK1)

Para la estratificación sobre VITA CAD-Temp y para la personalización de dientes de resina VITA

Cantidad	Contenido	Producto
4	2 g	VITA VM LC PAINT PT1, PT5, PT15, PT17
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
2	3 g	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE6, EE9
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	5 ml	VITA VM LC GEL
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID

Accesorios: pincel de maquillaje

VITAVM®LC flow CHROMA KIT (ref. CVLCFCHK)

Surtido para la intensificación cromática en la zona del cuello/cuerpo del diente

Cantidad	Contenido	Producto
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1–CP5
1		Guía de muestra de colores VITA VM INDIVIDUAL


VITAVM®LC flow GINGIVA KIT (ref. CVLCFGK)

Surtido para la reconstrucción de porciones gingivales

Cantidad	Contenido	Producto
1	3 g	VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
5	3 g	VITA VM LC flow GINGIVA G1–G5
1		Guía de muestra de colores VITA VM INDIVIDUAL

* También disponible en el color VITA SYSTEM 3D-MASTER 2M2 (ref. CVLCFTK2M2)

Encontrará más información acerca de VITA VM LC flow
en nuestra web: www.vita-zahnfabrik.com

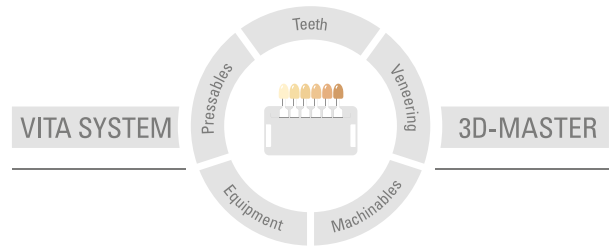

Nota importante: Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 2024-02

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado

CE 0124

VITAVM[®]LC *flow*, VITAVM[®]LC PRIMER

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

MD

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik