

VITAVM®LC flow - превосходный облицовочный композит

Отличная моделируемость. Простая полировка.



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

VITA – perfect match.


VITA

Описание продукта

VITAVMLCflow является жидкотекучим, светоотверждающим облицовочным композитом для несъемных и съемных протезов. Благодаря текучей консистенции с высокой устойчивостью к деформациям композит легко

моделируется. Благодаря особому составу материал легко полируется и таким образом обеспечивает однородность поверхностей с естественным блеском.

Текучий и устойчивый к деформациям

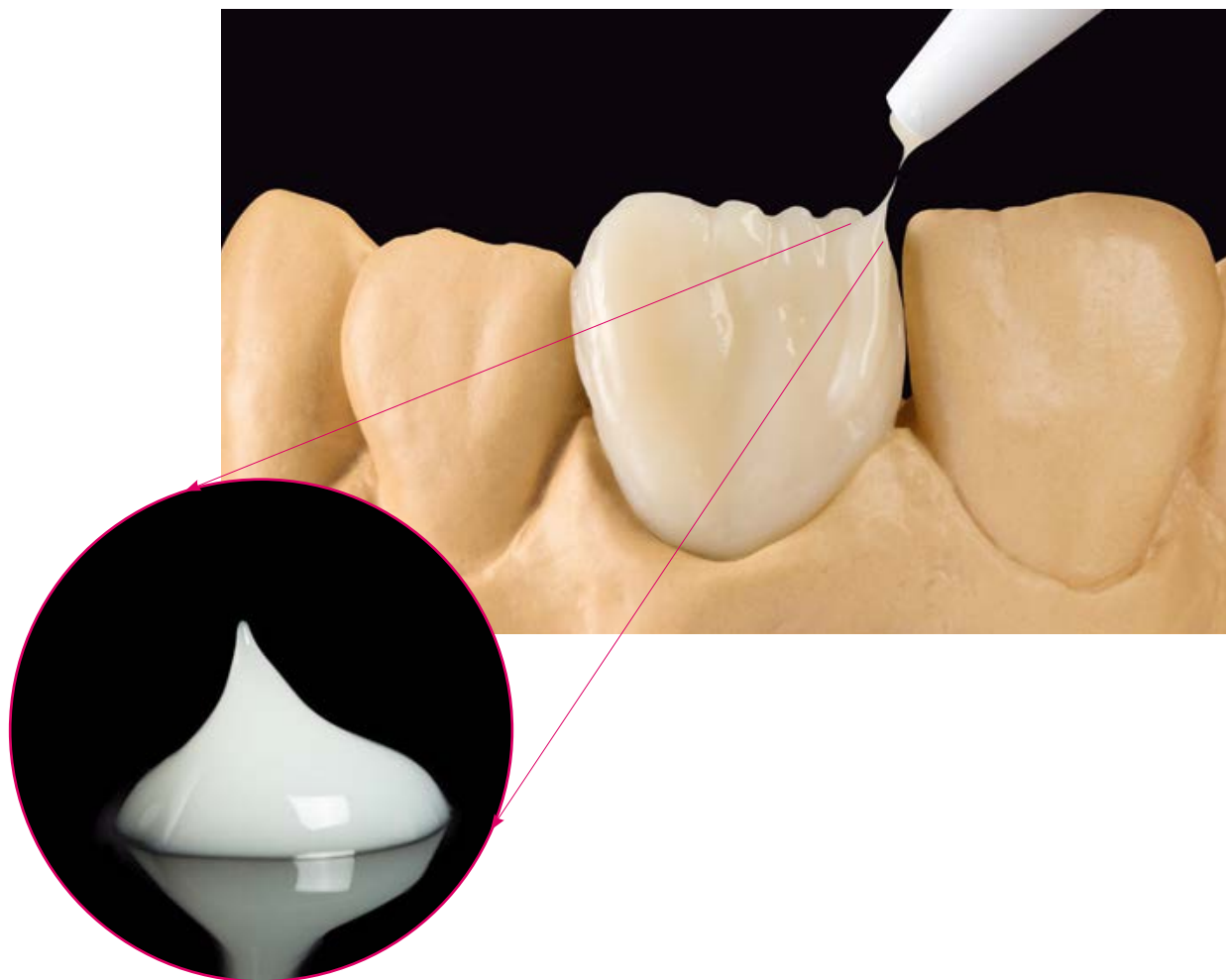

Что?

- VITA VM LC flow является жидкотекучим, светоотверждающим облицовочным композитом для несъемных и съемных протезов. Современная облицовочная система отличается превосходной текучестью с одновременно высокой стабильностью.


Для чего?

- VITA VM LC flow имеет широкий спектр применения:
 - Облицовка коронок, мостовидных протезов, телескопических коронок, супраконструкций с опорой на имплантат
 - Индивидуализация зубов для протезирования
 - Воспроизведение десны
 - Характеризация базисов протезов

С помощью чего?

- Основные компоненты облицовочной системы VITA VM LC flow: OPAQUE-, BASE DENTINE-, ENAMEL-, а также разные дополнительные массы. Моделирование осуществляется непосредственно с помощью шприца, кисточки или зонда.

ПРЕИМУЩЕСТВА

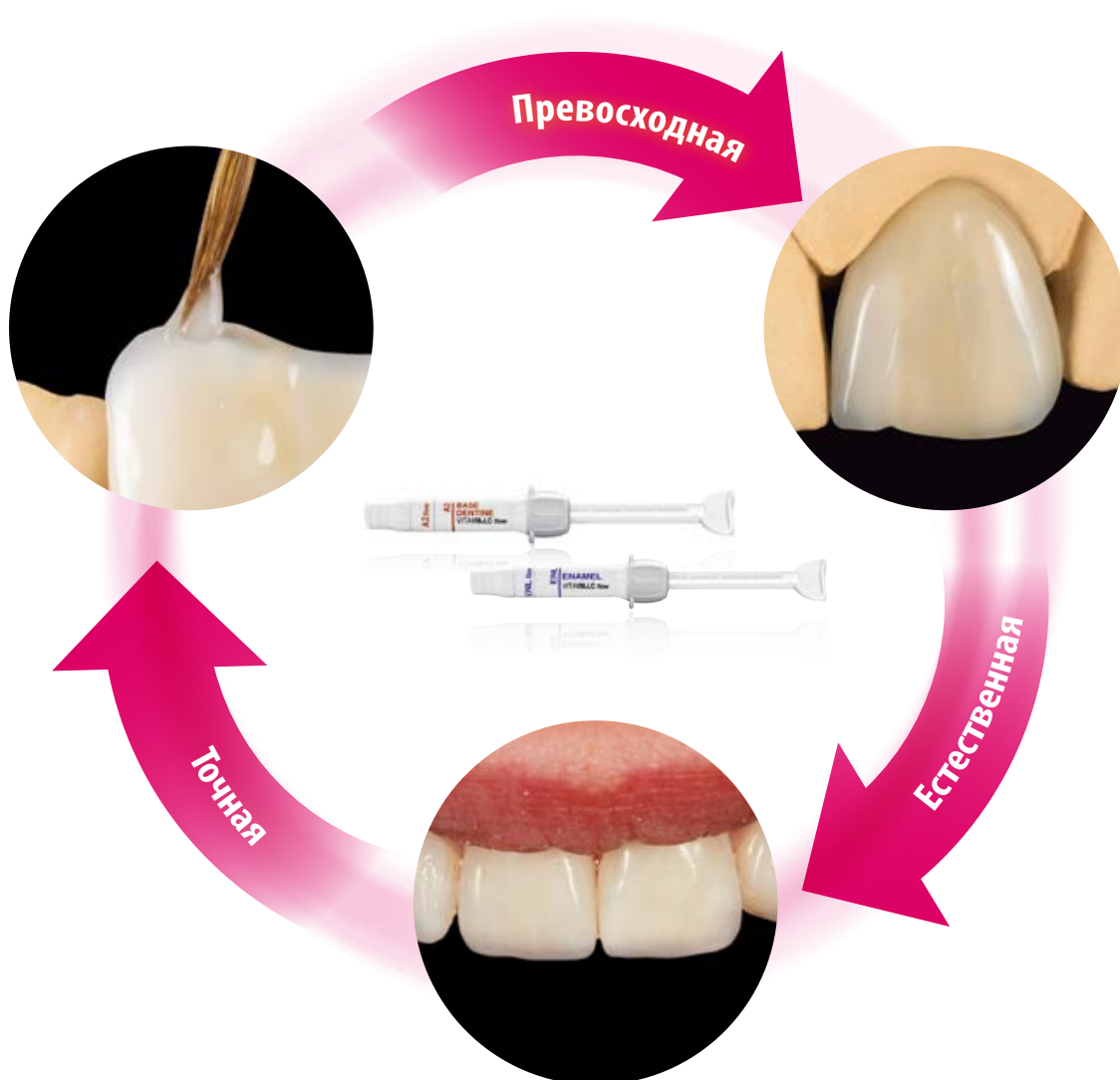

Точная

- Точное моделирование благодаря хорошей текучести с одновременно высокой устойчивостью к деформациям благодаря тиксотропной консистенции.

Естественная

- "Живой" вид приближенный к естественному образцу природы благодаря массам ENAMEL и EFFECT с интегрированной транслюценцией, опалесценцией и флуоресценцией.


Сияние

- Однородные поверхности с естественным блеском благодаря легкой полируемости за счет высокосвязанной полимерной матрицы с равномерно распределенными микрочастицами-наполнителями.

Устойчивость к деформациям

- Высокая устойчивость к нагрузкам и устойчивость поверхности к деформациям гарантируют долговечность изготовленных реставраций благодаря материалу с хорошими механическими свойствами.


СИСТЕМА И КОНЦЕПЦИЯ

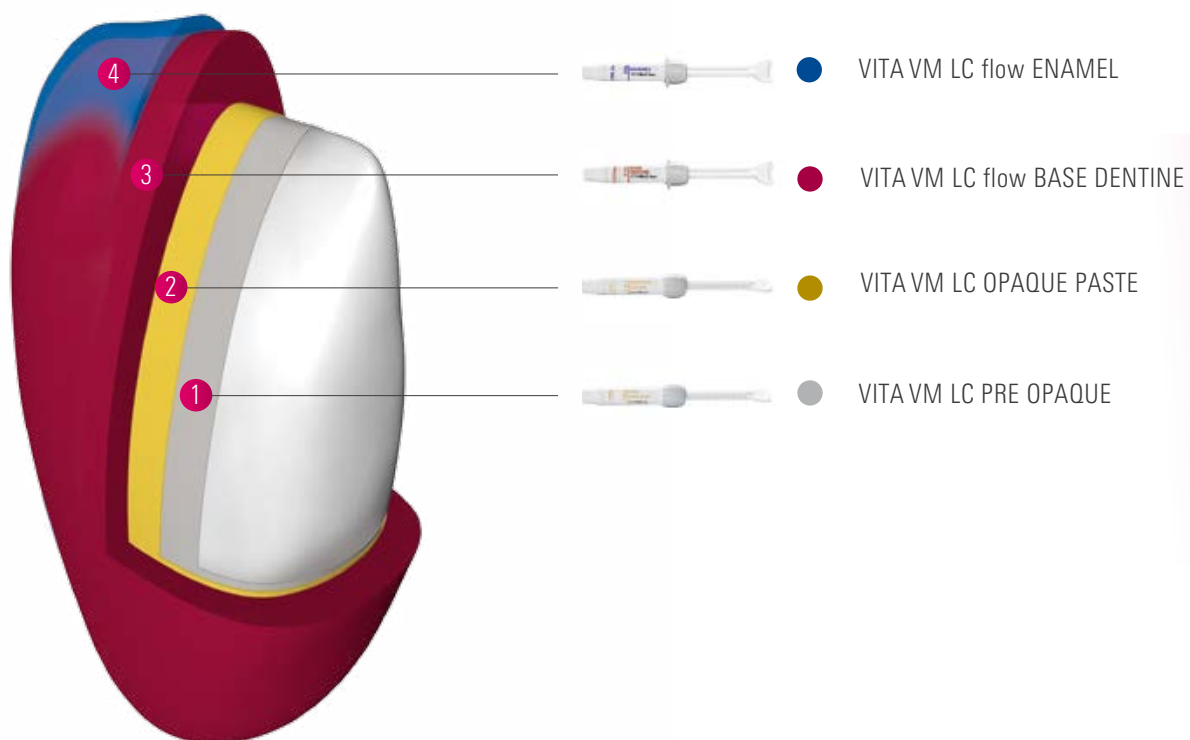

VITAVM[®]LC flow SYSTEM: ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- Массы VITA VM LC PRE OPAQUE- и OPAQUE PASTE для маскировки каркасных структур
- Массы VITA VM LC flow BASE DENTINE для пришеечной части и для области тела коронки.
- Массы VITA VM LC flow ENAMEL для режущего края.


ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

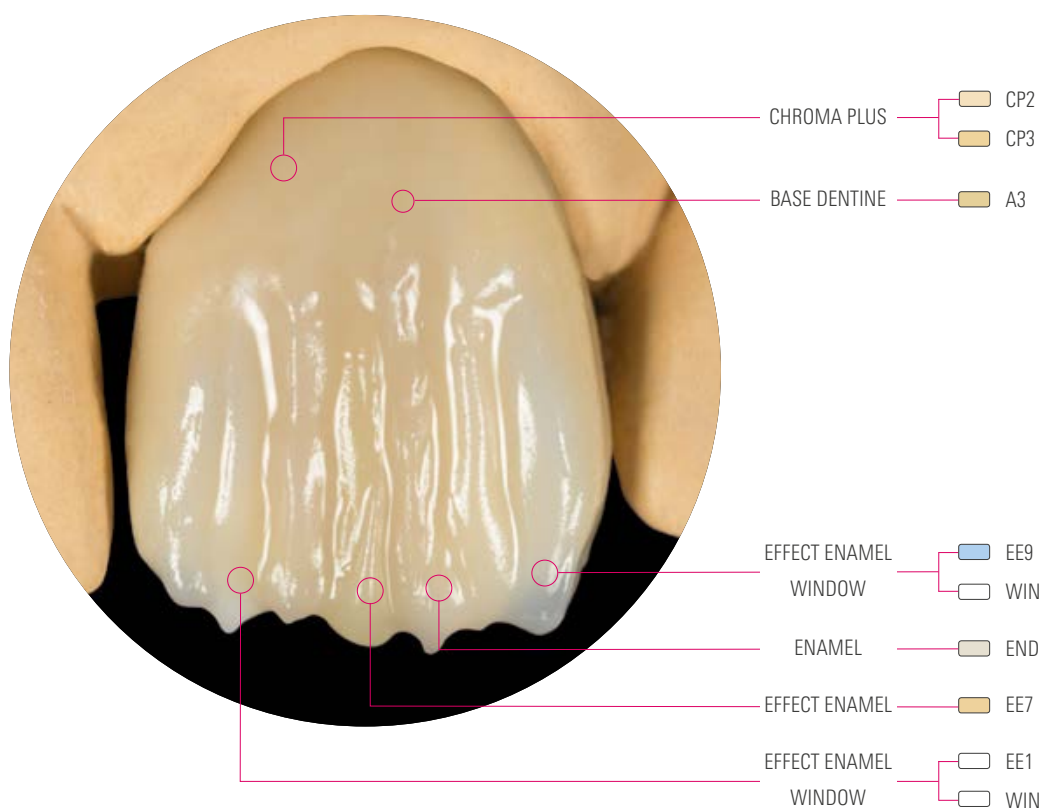

VITAVM[®]LC flow SYSTEM: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ


- Массы VITA VM LC flow EFFECT для режущего края
- Масса VITA VM LC flow CHROMA PLUS для более насыщенного оттенка пришеечной части и области тела коронки
- Массы VITA VM LC flow GINGIVA для воспроизведения десны
- Красители VITA VM LC PAINT для воспроизведения цветовых эффектов

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ

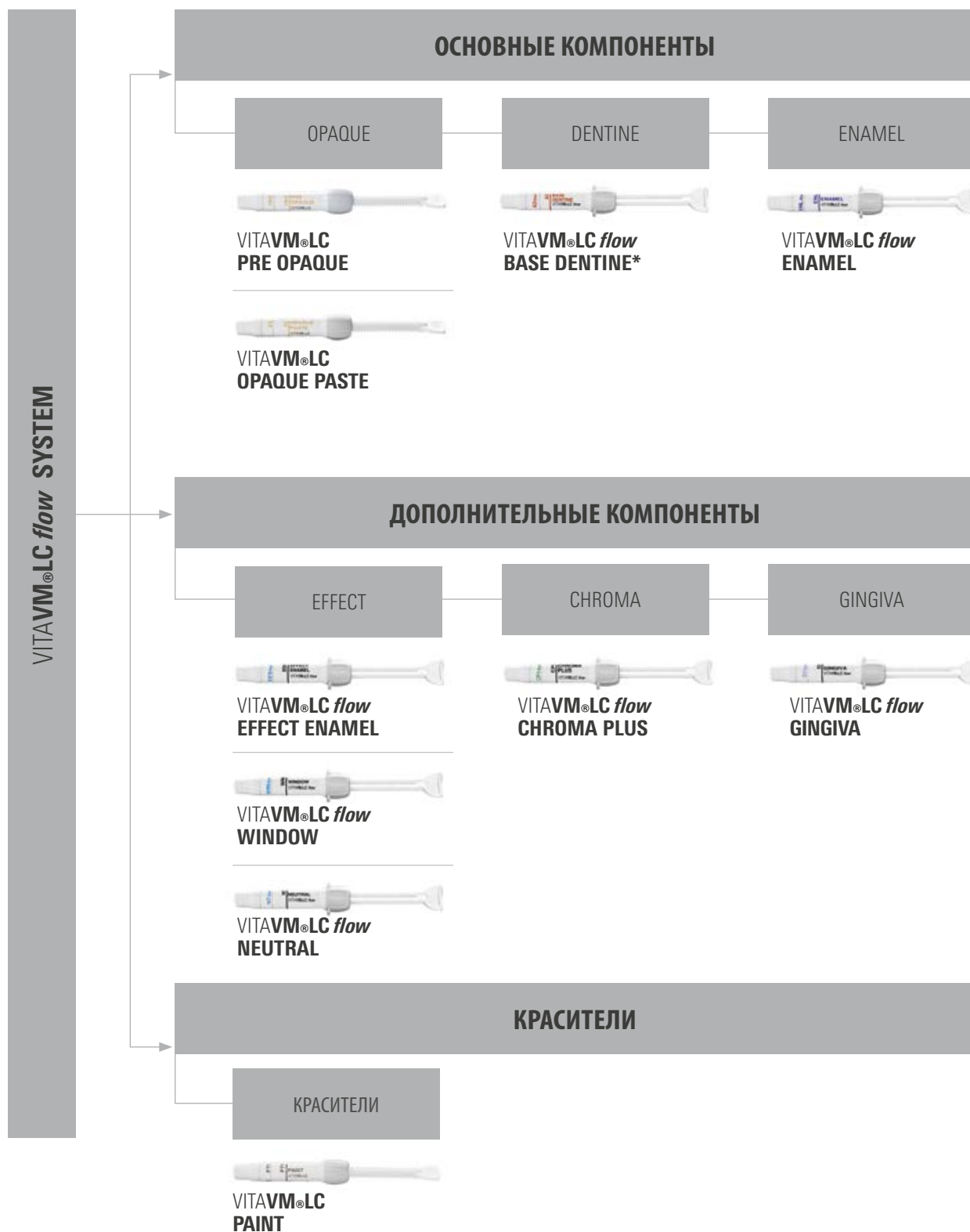


Примечание: VITA VM LC flow SYSTEM совместима и готова к использованию со всеми стандартными светоотверждаемыми приборами и системами связи с металлами (праймерами). Подробный обзор совместимых продуктов Вы найдете на www.vita-zahnfabrik.com/adiva. Предлагается в 8 цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER и 15 VITA classical A1–D4.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

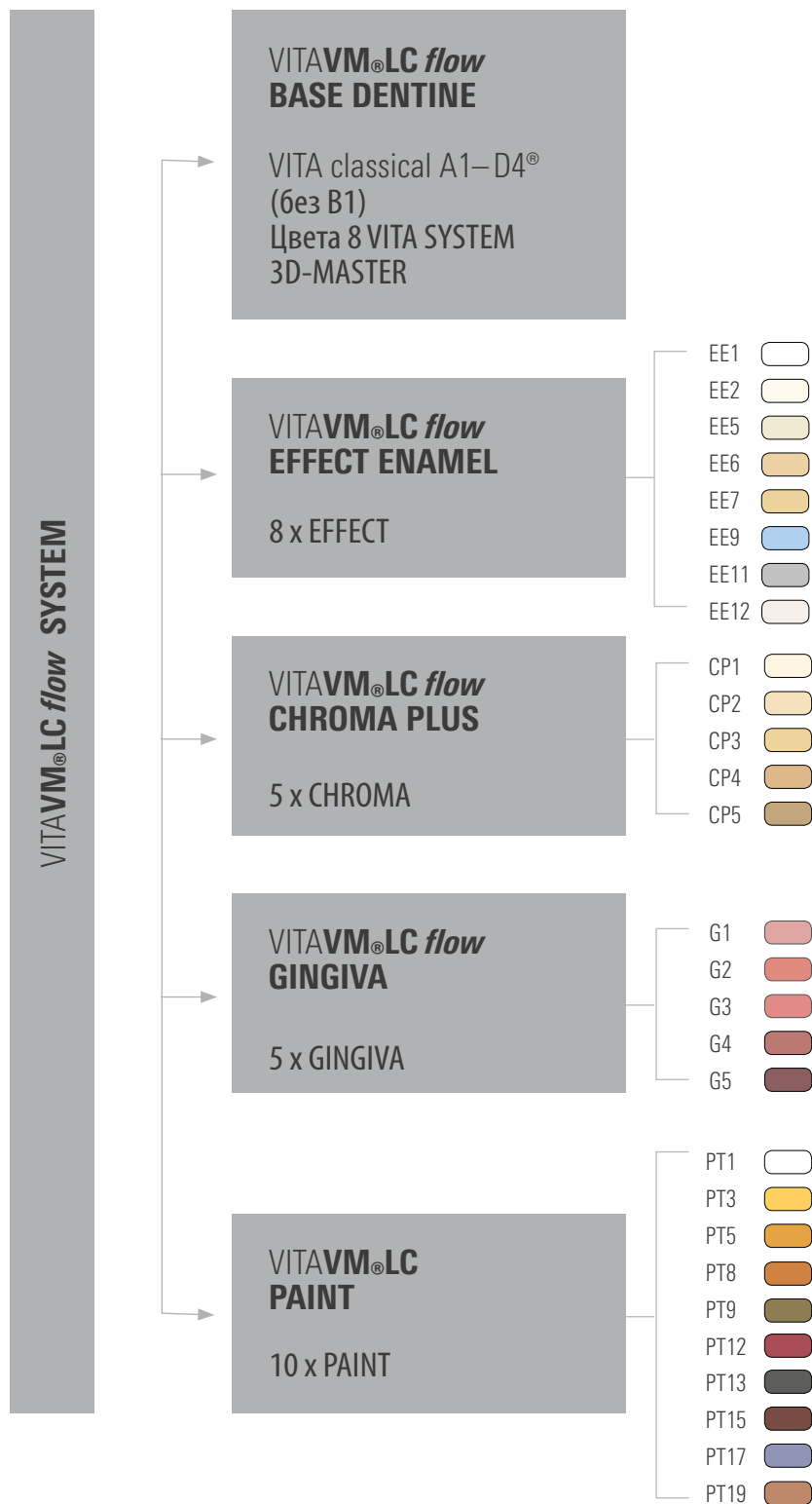

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

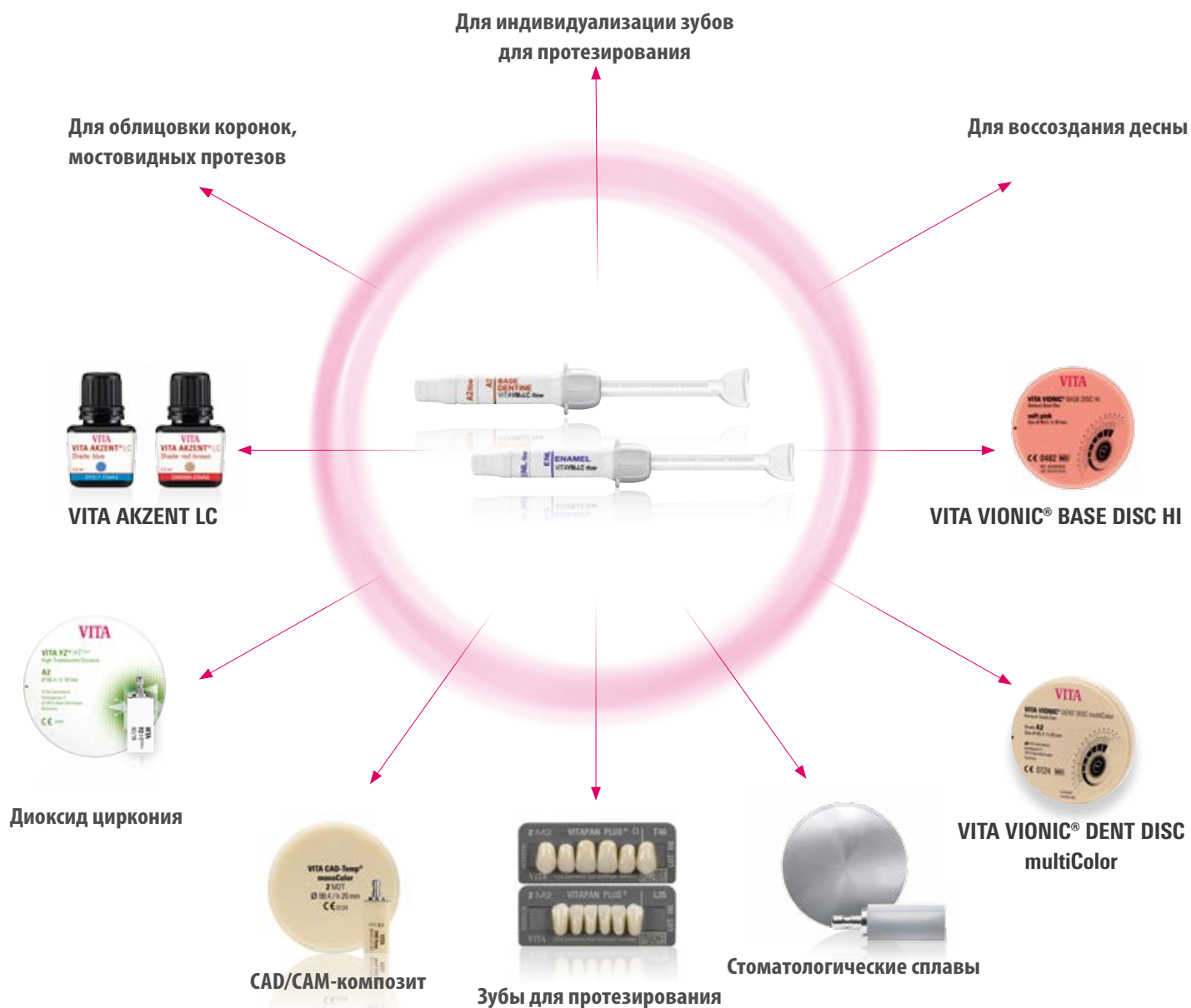

Для каких областей применения?

- Облицовка коронок, мостовидных протезов, телескопических коронок, супраконструкций с опорой на имплантат
- Индивидуализация зубов для протезирования
- Воссоздание десны
- В сочетании со светоотверждаемой системой красителей/глазури VITA AKZENT LC.

Для каких материалов?

- Стоматологические сплавы
- Гибридная керамика
- Диоксид циркония
- CAD/CAM-PMMA
- CAD/CAM-композит, PEEK
- Композитные зубы для протезирования

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ



- **Кисточка:**

Для моделирования подходят, например, кисточка VITA Nr. 1 (VITA Zahnfabrik), а также кисточка lay:art style (Renfert GmbH).



- **Полировальные инструменты:**

Для предварительной полировки подходит технический набор VITA ENAMIC Polishing Set technical (VITA Zahnfabrik)



- **Полировальные пасты:**

Полировальная паста VITA Polish Hybrid (VITA Zahnfabrik) особенно подходит для полировки до зеркального блеска.



- **Светоотверждаемые приборы:**

Для полимеризации подходят стандартные приборы для светополимеризации, например, Speed-Lablight (Hager & Werken), HiLite Power (Heraeus Kulzer), Visio Beta vario (3M ESPE) и многие др.*



- **Композитные системы:**

Мы рекомендуем VITAVM[®]LC PRIMER I и II для адгезивной связки между металлическим каркасом и VITA VM LC flow.



*) Полный список рекомендуемых светоотверждаемых приборов и систем бондинга Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

НАБОРЫ



VITA **VM[®]LC flow** BASIC KIT VITA classical A1–D4[®] (Кат.-№ CVLCFBKCV3)

Базовый набор для базовой послойной техники (DENTINE – paste / ENAMEL & дополнительные массы flow)

Количество	Содержание	Продукт
1	3 г	VITA VM LC PRE OPAQUE
15	3 г	VITA VM LC OPAQUE PASTE A1-D4 (без B1)
15	4 г	VITA VM LC OPAQUE PASTE A1-D4 (без B1)
2	4 г	VITA VM LC flow ENAMEL ENL, END
1	4 г	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1	3 г	VITA VM LC flow WINDOW WIN
5	3 г	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 – CP5
1	5 мл	VITA VM LC GEL
1	10 мл	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 мл	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 мл	VITA VM LC CLEANER
Принадлежности: Палитра, держатель кисточки, насадки для кисточки, кисточка для раскрашивания		

VITA **VM[®]LC flow** BASIC KIT SMALL* VITA classical A1-D4[®] (Кат.-№ CVLCFBKSCV3)

Малый базовый набор для базовой послойной техники (DENTINE – paste / ENAMEL & дополнительные массы flow)

Количество	Содержание	Продукт
1	3 г	VITA VM LC PRE OPAQUE
6	3 г	OPAQUE PASTE A1, A2, A3, A3.5 B3, D3
6	4 г	flow BASE DENTINE A1, A2, A3, A3.5 B3, D3
2	4 г	VITA VM LC flow ENAMEL ENL, END
1	5 мл	VITA VM LC GEL
1	10 мл	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 мл	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 мл	VITA VM LC CLEANER
Принадлежности: Палитра, держатель кисточки, насадки для кисточки, кисточка для раскрашивания		

*Также доступны в VITA SYSTEM 3D-MASTER (Кат.-№ CVLCFBKSV1)



VITAVM®LC flow TEST KIT* A3 (Кат.-№ CVLCFKA3)

Одноцветный стартовый ассортимент (DENTINE, ENAMEL и дополнительные массы flow)

Количество	Содержание	Продукт
1	3 г	VITA VM LC PRE OPAQUE
1	3 г	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 г	VITA VM LC flow BASE DENTINE A3
1	4 г	VITA VM LC flow ENAMEL
1	3 г	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 мл	VITA VM LC GEL
1	10 мл	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Планка с цветовыми образцами A3

Принадлежности: Кисточка для раскрашивания

VITAVM®LC flow PROFESSIONAL KIT (Кат.-№ CVLCFPK1)

Для воссоздания естественных нюансов

Количество	Содержание	Продукт
8	3 г	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE1, EE2, EE5, EE6, EE7, EE9, EE11, EE12
1	3 г	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	4 г	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1		Планка с цветовыми образцами VITA VM "Individual"

VITAVM®LC flow CREATIVE KIT (Кат.-№ CVLCFCK1)

Для облицовки CAD-Темп и для индивидуализации искусственных зубов VITA

Количество	Содержание	Продукт
4	2 г	VITA VM LC PAINT PT1, PT5, PT15, PT17
1	4 г	VITA VM LC flow ENAMEL
2	3 г	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE6, EE9
1	4 г	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1	3 г	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	5 мл	VITA VM LC GEL
1	10 мл	VITA VM LC MODELLING LIQUID

Принадлежности: Кисточка для раскрашивания

VITAVM®LC flow CHROMA KIT (Кат. № CVLCFCHK)

Набор для усиления цвета в пришеечной части и в области тела

Количество	Содержание	Продукт
5	3 г	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1–CP5
1		Планка с цветовыми образцами VITA VM INDIVIDUAL


VITAVM®LC flow GINGIVA KIT (Кат. №. CVLCFGK)

Набор для воссоздания десны

Количество	Содержание	Продукт
1	3 г	VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
5	3 г	VITA VM LC flow GINGIVA G1–G5
1		Планка с цветовыми образцами VITA VM INDIVIDUAL

*Также доступны в VITA SYSTEM 3D-MASTER 2M2 (Кат.-№ CVLCFTK2M2)

Более подробную информацию о VITA VM LC flow
Вы можете найти на сайте: www.vita-zahnfabrik.com

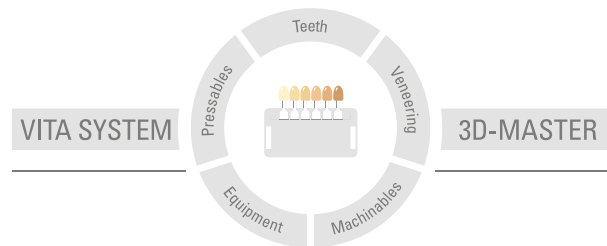

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 2024-05

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

Фирма VITA является сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку

CE 0124

VITAVM[®]LC flow, VITAVM[®]LC PRIMER

Упомянутые в документе продукты/системы других производителей являются зарегистрированными марками соответствующих производителей.



VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik