

VITA AKZENT® Plus

Guia de início rápido – GLAZE/GLAZE LT



Glaze e pigmentações de cerâmica de CET independente para pintura, coloração e glaze.

VITA – perfect match.

VITA

> Fatos e Características


Pigmentações e glazes VITA AKZENT Plus são:

- Pigmentações de cerâmica de CET independente
- Para pintura, coloração e glaze
- Para selar a superfície cerâmica

Com VITA AKZENT Plus você se beneficia de:

- Ajuste mais fácil de croma nos grupos de cores correspondentes
- Muito boas propriedades de processamento, assim como a aplicação mais fácil
- Resultados altamente estéticos através da coloração da superfície

COMPONENTES DO SISTEMA

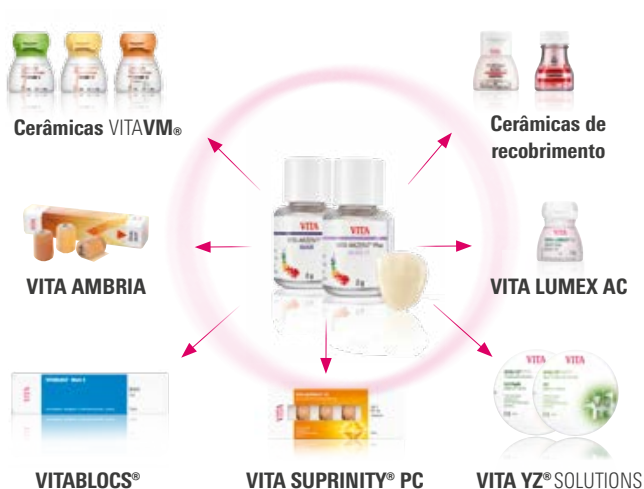

> 1. VITA AKZENT® Plus – GLAZE/GLAZE LT

Utilização de GLAZE/GLAZE LT



Indicações de processamento:

Aplicação de GLAZE

- O pó é misturado com POWDER FLUID para a obtenção de uma consistência cremosa
- Espalhar as massas de glaze uniformemente com um pincel, cobrindo toda a superfície da restauração
- Colocar as coroas a serem queimadas na bandeja de queima
- Colocar a restauração com a bandeja de queima no centro do forno e queimá-la com um programa de queima glaze pontente (dependendo do material do substrato)

Ciclo de queima recomendado

	Pré-seca- gem °C	min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. aprox. °C	min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ SOLUTIONS	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ GLAZE LT	400	4.00	5:37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600*
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC GLAZE LZ	400	6.00	7:00	50	750	1.00	-	-
VITA AMBRIA GLAZE LT	400	6.00	4:22	80	750	1.00	-	500*
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder	400	4.00	7:00	50	750	1.00	-	500*

Para o ciclo de queima de outros materiais, aplica-se de modo geral a seguinte regra:
Em caso de temperaturas de queima ≤ 850 °C, recomendamos o uso de GLAZE LT;
para temperaturas > 850 °C podem ser usadas todas as massas de glaze.

> 2. Portfólio de produtos

EFFECT STAINS

- Cores particularmente cromáticas e opacas
- Para a reprodução de tonalidades individuais e ajustes de cor com todas as suas características naturais
- A aplicação de uma camada grossa permite a cobertura total da cor original

BODY STAINS

- Massas caracterizadoras translúcidas que podem ser usadas como um fino filtro de cor sobre o material de base
- Alterações e mudanças de cor para tons avermelhados, amarelados, alaranjados, acastanhados ou cinzento-esverdeado

CHROMA STAINS

- Cores translúcidas para alterar a cromaticidade do material básico dentro de um grupo de cores

GLAZE

- Massa de glaze para uma superfície brilhante, vítrea, homogênea e sem poros após a queima

GLAZE LT

- LT = Baixa Temperatura: massa de glaze de baixa fusão para materiais cerâmicos com ponto de fusão abaixo de 800°C

FINISHING AGENT

- Para uma superfície com textura natural com um brilho mate

FLUOGLAZE LT SPRAY

- Para uma fluorescência e glaze naturais em apenas uma etapa

> 3. Cores disponíveis

VITA AKZENT Plus

EFFECT STAINS

ES01		branco	ES06		vermelho ferrugem	ES11		azul
ES02		creme	ES07		khaki (cáqui)	ES12		azul-acinzentado
ES03		amarelo limão	ES08		rosa	ES13		cinzento
ES04		amarelo sol	ES09		vermelho escuro	ES14		preto
ES05		laranja	ES10		lilás			

BODY STAINS

BS01		amarelo
BS02		castanho-amarelado
BS03		laranja
BS04		cinzento-esverdeado
BS05		castanho-acinzentado

CHROMA STAINS

VITA classical A1–D4

CSA		castanho-avermelhado
CSB		amarelo-avermelhado
CSC		acinzentado
CSD		vermelho-acinzentado

VITA SYSTEM 3D-MASTER

CSL		amarelado
CSM2		amarelo-avermelhado
CSM3		vermelho-amarelado
CSR		avermelhado
CSIO		laranja

GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FINISHING AGENT
- FLUOGLAZE LT

> Hotline e Suporte

 **Estamos aqui para ajudá-lo**

▶ Serviço de apoio técnico ao consumidor

Para questões técnicas sobre as soluções de produtos VITA, entre em contato com a equipe de assistência técnica.

Telefone +49 (0) 7761 / 56 22 22

Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46

8:00 às 17:00 h CET

E-mail info@vita-zahnfabrik.com

Para obter outros contatos internacionais, consulte
www.vita-zahnfabrik.com/contacts

▶ Suporte online

Questões sobre o processamento e as soluções de produtos? Você encontra respostas competentes online em forma de FAQs, vídeos e unidades eletrônicas de aprendizagem.


Para demais informações detalhadas, consulte o completo e abrangente manual de processamento do VITA AKZENT Plus.

www.vita-zahnfabrik.com

www.facebook.com/vita.zahnfabrik

CE 0124

MD

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG**
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

10551POR_0624_V02