

VITA AKZENT® Plus

Quick-Start Guide – GLAZE/GLAZE LT



WAK-unabhängige Glasur und Keramikmal Farben zum Lasieren, Kolorieren und Glasieren.

VITA – perfect match.

VITA

> Facts & Features


VITA AKZENT Plus Malfarben und Glasuren sind:

- WAK-unabhängige Keramikmalfarben
- zum Lasieren, Kolorieren und Glasieren
- zum Versiegeln der Keramikoberfläche

Mit VITA AKZENT Plus profitieren Sie von:

- einfacher Chromaanpassung in den zugehörigen Farbgruppen
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften, wie einfacher Applikation
- höchstethischen Ergebnissen durch Oberflächenbemalung

SYSTEMKOMPONENTEN

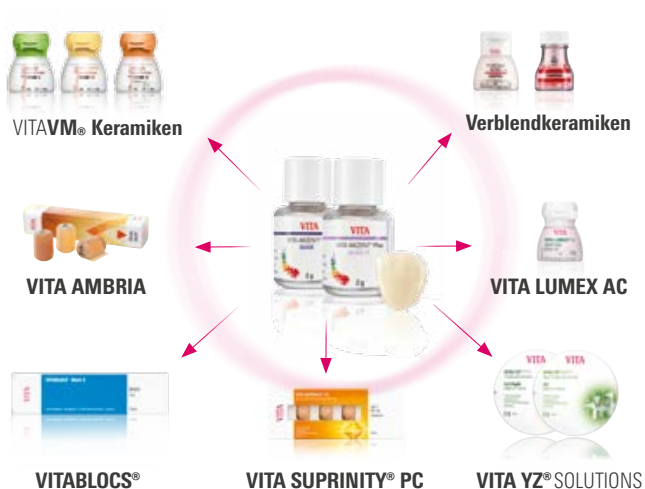

> 1. VITA AKZENT® Plus – GLAZE/GLAZE LT

➤ Einsatz von GLAZE/GLAZE LT



💡 Verarbeitungshinweis:

GLAZE-Auftrag

- das Pulver wird mit POWDER FLUID zu einer cremigen Konsistenz angerührt
- Glasurmasse gleichmäßig deckend mit einem Pinsel über die gesamte Oberfläche der Restauration ziehen
- die zu glasierende Krone auf den Brenngutträger geben
- Restauration mit Brenngutträger mittig im Ofen platzieren und mit entsprechendem Brennprogramm (abhängig vom Untergrundmaterial) brennen

📅 Empfohlene Brandführung

| | Vt. °C | min. | ↗ min. | ↗ °C/min. | Temp ca °C | min. | VAC min. | ↘ °C |
|----------------------------------|-----------|------|-----------|--------------|---------------|------|-------------|---------|
| VITA SUPRINITY PC | 400 | 4.00 | 5:00 | 80 | 800 | 1.00 | - | - |
| VITABLOCS | 500 | 4.00 | 5:15 | 80 | 920 | 1.00 | - | - |
| VITA YZ SOLUTIONS | 500 | 4.00 | 5:37 | 80 | 950 | 1.00 | - | - |
| VITA YZ GLAZE LT | 400 | 4.00 | 5:37 | 80 | 850 | 1.00 | - | - |
| VITA VM 9 | 500 | 4.00 | 5:00 | 80 | 900 | 1.00 | - | 600* |
| VITA VM 11 | 400 | 4.00 | 5:00 | 80 | 800 | 1.00 | - | - |
| VITA VM 13 | 500 | 4.00 | 4:45 | 80 | 880 | 1.00 | - | - |
| VITA VMK Master | 500 | 4.00 | 5:15 | 80 | 920 | 1.00 | - | - |
| VITA LUMEX AC GLAZE LZ | 400 | 6.00 | 7:00 | 50 | 750 | 1.00 | - | - |
| VITA AMBRIA GLAZE LT | 400 | 6.00 | 4:22 | 80 | 750 | 1.00 | - | 500* |
| VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder | 400 | 4.00 | 7:00 | 50 | 750 | 1.00 | - | 500* |

Für die Brandführung anderer Materialien gilt grundsätzlich die Regel:

Bei Brenntemperaturen ≤ 850 °C empfehlen wir die Verwendung von GLAZE LT, > 850 °C können alle Glasurmassen verwendet werden.

> 2. Produktportfolio

EFFECT STAINS

- besonders chromatische und deckende Farben
- zur Reproduktion individueller Farbtöne und farblichen Angleichungen jeder natürlichen Farbcharakteristik
- dick aufgetragen decken sie die darunterliegende Basisfarbe vollständig ab

BODY STAINS

- lasierende, durchscheinende Massen, die wie ein dünner Farbfilter auf dem Basismaterial wirken
- Farbveränderungen und Farbverschiebungen in Richtung rötlich, gelblich, orange, bräunlich oder grau-grünlich

CHROMA STAINS

- lasierende Farben zur Veränderung der Chromazität des Basismaterials innerhalb einer Farbgruppe

GLAZE

- Glasurmasse für eine glänzende, glasartige, homogene und geschlossene Oberfläche nach dem Brand

GLAZE LT

- LT = Low Temperature: niederschmelzende Glasurmasse für keramische Werkstoffe mit Brenntemperaturen unter 800 °C

FINISHING AGENT

- für eine natürliche Oberflächentextur mit einem matten Glanz





FLUOGLAZE LT SPRAY

- für eine natürliche Fluoreszenz und Glasur in einem Schritt






> 3. Verfügbare Farben

VITA AKZENT Plus

EFFECT STAINS

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|---|-----------|------|---|-----------|
| ES01 |  | weiß | ES06 |  | rostrot | ES11 |  | blau |
| ES02 |  | creme | ES07 |  | khaki | ES12 |  | grau-blau |
| ES03 |  | zitronengelb | ES08 |  | rosa | ES13 |  | grau |
| ES04 |  | sonnengelb | ES09 |  | dunkelrot | ES14 |  | schwarz |
| ES05 |  | orange | ES10 |  | lila | | | |

BODY STAINS


| | | |
|------|---|------------|
| BS01 |  | gelb |
| BS02 |  | gelb-braun |
| BS03 |  | orange |
| BS04 |  | olive-grau |
| BS05 |  | grau-braun |

CHROMA STAINS

VITA classical A1–D4

| | | |
|-----|---|-------------------|
| CSA |  | rötlich-bräunlich |
| CSB |  | rötlich-gelblich |
| CSC |  | gräulich |
| CSD |  | gräulich-rötlich |

VITA SYSTEM 3D-MASTER

| | | |
|------|--|------------------|
| CSL |  | gelblich |
| CSM2 |  | gelblich-rötlich |
| CSM3 |  | gelb-rot |
| CSR |  | rötlich |
| CSIO |  | orange |

GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FINISHING AGENT
- FLUOGLAZE LT

> Hotline und Support

 **Wir helfen Ihnen gerne weiter**

► Technische Hotline

Bei technischen Fragen rund um die VITA Produktlösungen können Sie gerne den technischen Service kontaktieren.

Phone +49 (0) 7761 / 56 22 22

Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46

8.00 bis 17.00 Uhr CET

Mail info@vita-zahnfabrik.com

**Weitere internationale Kontakte finden Sie unter
www.vita-zahnfabrik.com/contacts**

► Online-Support

Fragen rund um die Verarbeitung und zu Produktlösungen? Kompetente Antworten finden Sie online in Form von FAQs, Videos und elektronischen Lerneinheiten.

Weitere, detaillierte Informationen finden Sie u.a. in der komplett umfassenden VITA AKZENT Plus Verarbeitungsanleitung.

www.vita-zahnfabrik.com

www.facebook.com/vita.zahnfabrik

CE 0124

MD

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG**
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

105510_0124_V02