

# VITA AKZENT® Plus

Quick-Start Guide – GLAZE/GLAZE LT



WAK-unabhängige Glasur und Keramikmal Farben zum Lasieren, Kolorieren und Glasieren.

VITA – perfect match.

**VITA**

## > Facts & Features

---


### VITA AKZENT Plus Malfarben und Glasuren sind:

- WAK-unabhängige Keramikmalfarben
- zum Lasieren, Kolorieren und Glasieren
- zum Versiegeln der Keramikoberfläche

### Mit VITA AKZENT Plus profitieren Sie von:

- einfacher Chromaanpassung in den zugehörigen Farbgruppen
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften, wie einfacher Applikation
- höchstethischen Ergebnissen durch Oberflächenbemalung

### SYSTEMKOMPONENTEN

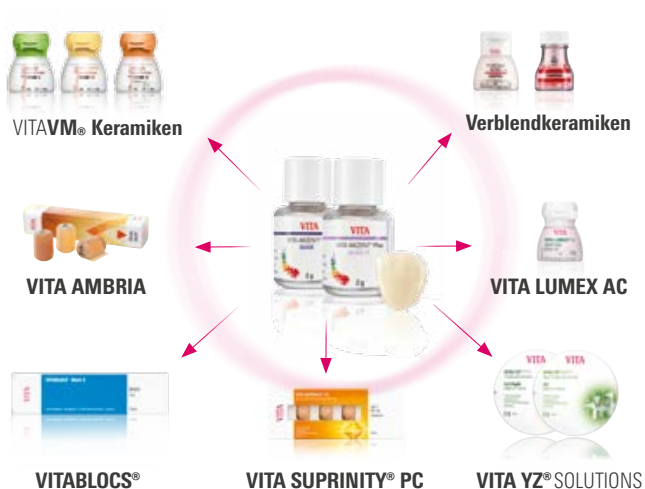

## > 1. VITA AKZENT® Plus – GLAZE/GLAZE LT

### ➤ Einsatz von GLAZE/GLAZE LT



### 💡 Verarbeitungshinweis:

#### GLAZE-Auftrag

- das Pulver wird mit POWDER FLUID zu einer cremigen Konsistenz angerührt
- Glasurmasse gleichmäßig deckend mit einem Pinsel über die gesamte Oberfläche der Restauration ziehen
- die zu glasierende Krone auf den Brenngutträger geben
- Restauration mit Brenngutträger mittig im Ofen platzieren und mit entsprechendem Brennprogramm (abhängig vom Untergrundmaterial) brennen

### 📅 Empfohlene Brandführung

	Vt. °C	min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp ca °C	min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ SOLUTIONS	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ GLAZE LT	400	4.00	5:37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600*
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC GLAZE LZ	400	6.00	7:00	50	750	1.00	-	-
VITA AMBRIA GLAZE LT	400	6.00	4:22	80	750	1.00	-	500*
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder	400	4.00	7:00	50	750	1.00	-	500*

Für die Brandführung anderer Materialien gilt grundsätzlich die Regel:

Bei Brenntemperaturen  $\leq 850$  °C empfehlen wir die Verwendung von GLAZE LT,  $> 850$  °C können alle Glasurmassen verwendet werden.

## > 2. Produktportfolio

---

### **EFFECT STAINS**

- besonders chromatische und deckende Farben
- zur Reproduktion individueller Farbtöne und farblichen Angleichungen jeder natürlichen Farbcharakteristik
- dick aufgetragen decken sie die darunterliegende Basisfarbe vollständig ab

### **BODY STAINS**

- lasierende, durchscheinende Massen, die wie ein dünner Farbfilter auf dem Basismaterial wirken
- Farbveränderungen und Farbverschiebungen in Richtung rötlich, gelblich, orange, bräunlich oder grau-grünlich

### **CHROMA STAINS**

- lasierende Farben zur Veränderung der Chromazität des Basismaterials innerhalb einer Farbgruppe

### **GLAZE**

- Glasurmasse für eine glänzende, glasartige, homogene und geschlossene Oberfläche nach dem Brand

### **GLAZE LT**

- LT = Low Temperature: niederschmelzende Glasurmasse für keramische Werkstoffe mit Brenntemperaturen unter 800 °C

### **FINISHING AGENT**

- für eine natürliche Oberflächentextur mit einem matten Glanz





### **FLUOGLAZE LT SPRAY**

- für eine natürliche Fluoreszenz und Glasur in einem Schritt






## > 3. Verfügbare Farben

VITA AKZENT Plus

### EFFECT STAINS

ES01		weiß	ES06		rostrot	ES11		blau
ES02		creme	ES07		khaki	ES12		grau-blau
ES03		zitronengelb	ES08		rosa	ES13		grau
ES04		sonnengelb	ES09		dunkelrot	ES14		schwarz
ES05		orange	ES10		lila			

### BODY STAINS


BS01		gelb
BS02		gelb-braun
BS03		orange
BS04		olive-grau
BS05		grau-braun

### CHROMA STAINS

#### VITA classical A1–D4

CSA		rötlich-bräunlich
CSB		rötlich-gelblich
CSC		gräulich
CSD		gräulich-rötlich

#### VITA SYSTEM 3D-MASTER

CSL		gelblich
CSM2		gelblich-rötlich
CSM3		gelb-rot
CSR		rötlich
CSIO		orange

### GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FINISHING AGENT
- FLUOGLAZE LT

## > Hotline und Support

---

 **Wir helfen Ihnen gerne weiter**

### ► Technische Hotline

Bei technischen Fragen rund um die VITA Produktlösungen können Sie gerne den technischen Service kontaktieren.

**Phone +49 (0) 7761 / 56 22 22**

**Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46**

**8.00 bis 17.00 Uhr CET**

**Mail [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**

**Weitere internationale Kontakte finden Sie unter  
[www.vita-zahnfabrik.com/contacts](http://www.vita-zahnfabrik.com/contacts)**

### ► Online-Support

Fragen rund um die Verarbeitung und zu Produktlösungen? Kompetente Antworten finden Sie online in Form von FAQs, Videos und elektronischen Lerneinheiten.

Weitere, detaillierte Informationen finden Sie u.a. in der komplett umfassenden VITA AKZENT Plus Gebrauchsanweisung.

**[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**

**[www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)**

**CE 0124**

**MD**

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG**  
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

105510\_0124\_V02