

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Guía de inicio rápido



Spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY es

- un espray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET para todas las cerámicas de recubrimiento habituales, cerámicas monolíticas de circonio, de silicato, de feldespato o vítreas.
- Adecuado para obtener una fluorescencia natural, en particular en restauraciones monolíticas de cerámica sin metal sin fluorescencia propia.
- Adecuado para sellar la superficie de la cerámica.

Con VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY se beneficiará de:

- Un incremento sencillo de la fluorescencia.
- Un glaseado rápido y seguro.
- Resultados altamente estéticos gracias a la fluorescencia natural.

COMPONENTES DEL SISTEMA



*) Todas las cerámicas de recubrimiento VITA, VITA YZ, VITA SUPRINITY PC, VITABLOCS, VITA AMBRIA.

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Utilización de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



Aplicación de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- Limpiar la restauración.
- Agitar enérgicamente el aerosol inmediatamente antes de usarlo.
- Sostener el cabezal pulverizador a unos 10 cm de la superficie a rociar.
- Aplicar desde todos los lados una capa uniforme.
- Colocar la restauración sobre un soporte de cocción para la cocción de glaseado (y de maquillajes) y cocerla conforme a los parámetros de cocción.



> Grosor de capa óptimo



> Se ha aplicado una capa demasiado fina



> Se ha aplicado una capa demasiado gruesa

Atención

- En caso de que el brillo sea insuficiente, se puede repetir el proceso.

Parámetros de cocción



	Presec. °C	→ min	↗ min	↗ °C/min	Temp. aprox. °C	→ min	VAC min	↘ °C
GLAZE LT SPRAY	400	6.00	4.45	80	740-850*	1.00	-	-

* La temperatura de cocción depende de la cerámica de recubrimiento y del material de estructura utilizados; se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.

1 Obtención de una fluorescencia natural

2 Tomando como ejemplo una corona natural y coronas anteriores monolíticas de dióxido de circonio

Corona natural

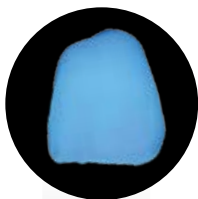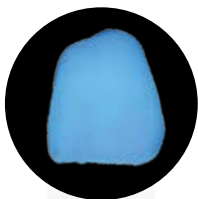


Corona monolítica
de dióxido de circonio


Con agente de fluorescencia de la c




> Sin fluorescencia propia

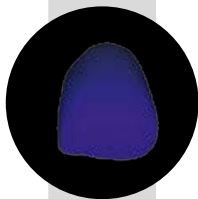

> Fluorescencia demasiado débil

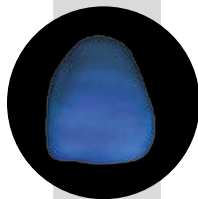

> Estriado debido al uso de Paste

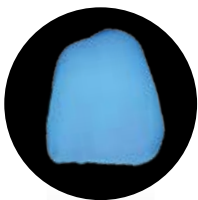

competencia



> **Fluorescencia
excesiva**



Con VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**



**Agente de fluorescencia y glaseado perfectamente
armonizado y aplicado de forma homogénea**
> VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**

VITA AKZENT® Plus – Gama de productos

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- Colores especialmente cromáticos y cubrientes.
- Para la reproducción de tonos cromáticos personalizados y ajustes cromáticos de cualquier característica de color natural.
- Aplicados en una capa gruesa, cubren por completo el color básico subyacente.

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- Materiales translúcidos de aplicación en capa fina, que actúan como un delgado filtro de color sobre el material de base.
- Para alteraciones y desviaciones del color hacia un tono rojizo, amarillento, naranja, pardusco o gris verdoso.

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- Colores de aplicación en capa fina para modificar la cromaticidad del material de base dentro de un grupo de colores.

VITA AKZENT Plus GLAZE

- Material de glasear para obtener una superficie brillante, vítrea, homogénea y cerrada tras la cocción.

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: material para glasear de bajo punto de fusión, para cerámicas con temperaturas de cocción inferiores a 800 °C.


VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- Spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET para alcanzar una fluorescencia natural.

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- Proporciona una textura natural de la superficie con un brillo mate.

VITA AKZENT® Plus – Colores disponibles

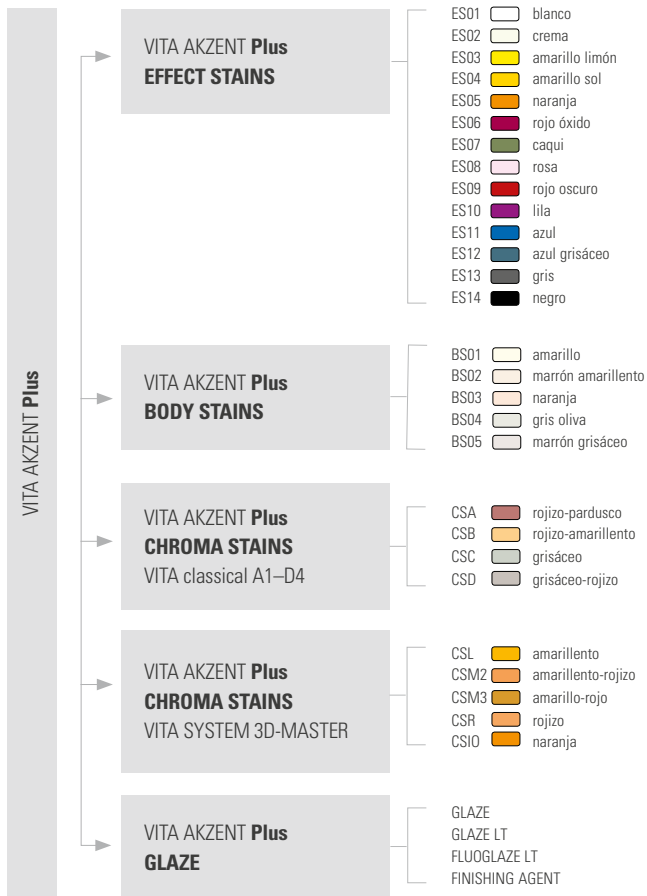



LÍNEA DIRECTA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Si desea realizar consultas técnicas sobre los productos de VITA, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico.

▶ **Teléfono: +49 (0) 7761 / 56 22 22**

Correo electrónico: info@vita-zahnfabrik.com

De 8:00 a 17:00 h CET

▶ Encontrará más datos de contacto internacionales en **www.vita-zahnfabrik.com/contacts**



ASISTENCIA ONLINE

¿Tiene preguntas en torno a la elaboración y las soluciones de producto? Encontrará respuestas competentes online en forma de

Preguntas frecuentes, vídeos y unidades didácticas electrónicas.

También encontrará más información detallada en las instrucciones de uso completas de VITA AKZENT.

▶ **www.vita-zahnfabrik.com**

▶ **facebook.com/vita.zahnfabrik**

CE 0124 MD Rx Only



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com