

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Guida rapida all'uso



Glasura in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – FATTI & CARATTERISTICHE

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY ist:

- una glasura in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET, per tutte le più comuni* ceramiche di rivestimento estetico, ceramiche monolitiche a base di zirconio, silicato, feldspato e vetroceramiche
- per conseguire una fluorescenza naturale specialmente su restauri monolitici in ceramica integrale privi di fluorescenza propria
- per sigillatura della superficie ceramica

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY offre:

- semplice incremento della fluorescenza
- glasura rapida e sicura
- risultati altamente estetici grazie alla fluorescenza naturale

COMPONENTI DI SISTEMA



*) tutte le ceramiche di rivestimento estetico VITA, VITA YZ, VITA SUPRINITY PC, VITABLOCS, VITA AMBRIA.

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

1 Impiego di VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



2 Applicazione di VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- pulire il restauro
- agitare energicamente la bomboletta appena prima dell'uso
- tenere la testina nebulizzatrice ad una distanza di ca. 10 cm dalla superficie da trattare
- nebulizzare da tutti i lati uno strato uniforme
- posizionare il restauro su un apposito supporto ed eseguire la cottura (dei supercolori e) finale secondo i parametri indicati



> Spessore ottimale



> Strato troppo sottile



> Strato troppo spesso

3 Attenzione:

- Se la lucentezza non fosse sufficiente, ripetere il processo

4 Parametri di cottura



	Prees. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. ca. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C.
GLAZE LT SPRAY	400	6.00	4.45	80	740-850*	1.00	-	-

* Attenersi alle istruzioni del produttore per quanto riguarda la temperatura di cottura in funzione della ceramica di rivestimento estetico o del materiale strutturale usati

1 - **Conseguimento di una fluorescenza naturale**

2 - Sull'esempio di una corona naturale e di corone frontali monolitiche in biossido di zirconio



corona naturale

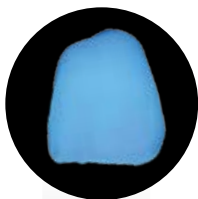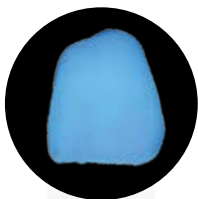

corona in biossido
di zirconio monolitico




con massa fluorescente di altro pr

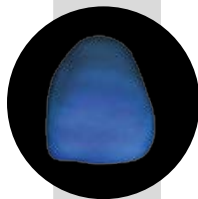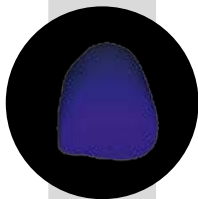

> **assenza di fluorescenza primaria**

> **fluorescenza insufficiente**

> **a strisce per l'uso di pasta**

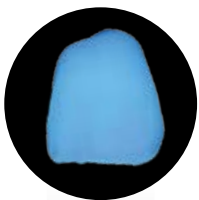

oduttore



> fluorescenza eccessiva



con VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**



Massa glasura ad alta fluorescenza perfettamente correlata e applicata in modo omogeneo

> VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**

VITA AKZENT® Plus – Portfolio prodotti

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- colori particolarmente cromatici e coprenti
- per la riproduzione di tonalità individuali e adattamenti di colore a qualsiasi caratteristica cromatica naturale
- in spessore elevato coprono completamente il colore base sottostante

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- masse lasura, che lasciano trasparire, agenti come un sottile filtro cromatico sul materiale base
- per modifiche e scostamenti cromatici verso il rosso, giallo, arancio, marrone o grigio-verde

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- colori di lasura per modificare la cromaticità del materiale base all'interno di un gruppo di colori

VITA AKZENT Plus GLAZE

- massa glasura per superfici lucenti, omogenee, simili al vetro e chiuse dopo la cottura

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: massa glasura a basso punto di fusione per ceramiche con temperature di cottura inferiori a 800 °C


VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- glasura in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET per conseguire una fluorescenza naturale

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- per una tessitura superficiale naturale ed una lucentezza opaca

VITA AKZENT® Plus – Colori disponibili

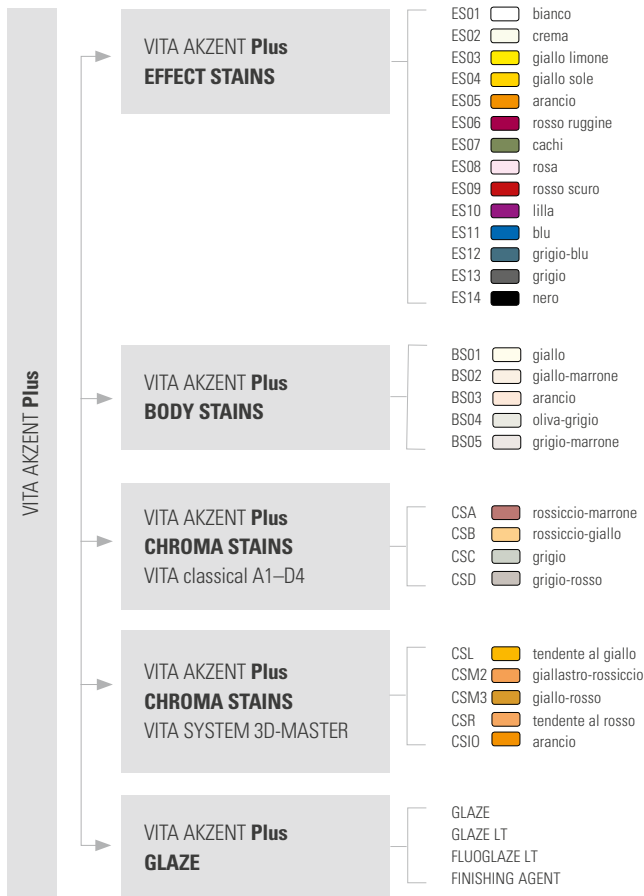



HOTLINE TECNICA

Per chiarimenti tecnici sulle soluzioni di prodotto VITA potete contattare l'assistenza tecnica.

► Telefono +49(0)7761 / 562222

E-mail info@vita-zahnfabrik.com

8:00 - 17:00 CET

► Per altri dati di contatto internazionali

consultare www.vita-zahnfabrik.com/contacts



ASSISTENZA ONLINE

Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto?

Risposte competenti online in forma di

FAQ, video e unità didattiche elettroniche.

Per ulteriori informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso complete VITA AKZENT.

► www.vita-zahnfabrik.com

► www.facebook.com/vita.zahnfabrik

CE 0124 MD Rx Only



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com