

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Guide de démarrage rapide



Spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – FAITS & CARACTÉRISTIQUES

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY est

- un spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT destiné à toutes les céramiques cosmétiques courantes*, céramiques en zirconium monolithiques, silicatées, feldspathiques ou vitreuses,
- adapté à l'obtention d'une fluorescence naturelle en particulier dans les restaurations céramo-céramiques monolithiques n'ayant pas de fluorescence propre,
- adapté au scellement des surfaces céramiques.

Avec VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY, vous profitez des avantages suivants

- augmentation plus simple de la fluorescence,
- glaçage plus rapide et plus sûr,
- résultats très esthétiques à la fluorescence naturelle.

COMPOSANTS DU SYSTÈME



*) Toutes les céramiques cosmétiques VITA, VITA YZ, VITA SUPRINITY PC, VITABLOCS, VITA AMBRIA.

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

1 Utilisation de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



2 Application de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

- Nettoyer la restauration.
- Agiter vigoureusement le flacon vaporisateur avant usage.
- Maintenir la buse de vaporisation à env. 10 cm de la surface à traiter.
- Appliquer une couche uniforme sur toutes les faces.
- Déposer la restauration pour la cuisson de (colorants et) glaçage sur un support de cuisson et cuire selon les paramètres indiqués.



> Épaisseur de couche optimale

> Application trop mince

> Application trop épaisse

3 N. B.

- Si le glaçage ne suffit pas, le processus peut être répété.

4 Paramètres de cuisson


	Prés. °C	min	min	°C/min	Temp. env. °C	min	Vide min	°C
GLAZE LT SPRAY	400	6.00	4.45	80	740-850*	1.00	-	-

* La température de cuisson dépend de la céramique cosmétique utilisée, en particulier du matériau d'infrastructure ; respecter les spécifications du fabricant.


1 – **Obtention d'une fluorescence naturelle**

2 – À l'exemple d'une couronne naturelle et de couronnes antérieures en dioxyde de zirconium


Couronne naturelle

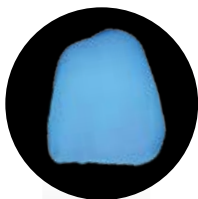

Couronne monolithique
en dioxyde de zirconium

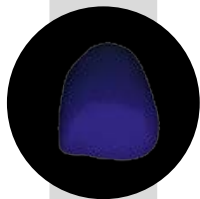


Avec agent fluorescent conçu

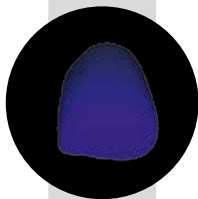

> **Aucune
fluorescence
intrinsèque**

> **Fluorescence
trop faible**

> **Stries dues à
l'utilisation de pâte**

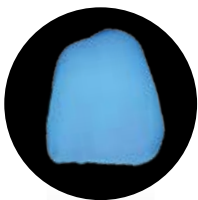

rent



> Trop grande
fluorescence



Avec VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**



**Agent fluorescent et de glaçage parfaitement
harmonisé et homogènement appliqué**
> VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**

VITA AKZENT® Plus – Gamme de produits

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- Couleurs particulièrement saturées et couvrantes.
- Pour la reproduction de nuances spécifiques et pour se rapprocher d'une couleur naturelle particulière.
- En application épaisse, elles recouvrent intégralement la couleur de base sous-jacente.

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- Lasures translucides agissant comme un filtre chromatique fin sur le matériau de base.
- Pour des variations chromatiques et des écarts de teinte dans les tons rougeâtre, jaunâtre, orange, brunâtre ou gris-verdâtre.

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- Lasures colorées pour changer la chromaticité du matériau de base au sein d'un groupe de couleur.

VITA AKZENT Plus GLAZE

- Glaçure pour une surface brillante, s'apparentant à du verre, homogène et dense, après la cuisson.

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature : glaçure basse fusion pour les céramiques dont la température de cuisson est inférieure à 800 °C.

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- Spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT pour l'obtention d'une fluorescence naturelle.

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- Pour une texture de surface naturelle avec un éclat mat.






VITA AKZENT® Plus – Couleurs disponibles

VITA AKZENT Plus

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- ES01  blanc
- ES02  crème
- ES03  jaune citron
- ES04  jaune vif
- ES05  orange
- ES06  rouille
- ES07  kaki
- ES08  rose
- ES09  rouge foncé
- ES10  lilas
- ES11  bleu
- ES12  gris-bleu
- ES13  gris
- ES14  noir

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- BS01  jaune
- BS02  brun-jaune
- BS03  orange
- BS04  gris olive
- BS05  brun-gris

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA classical A1–D4

- CSA  rougeâtre-brunâtre
- CSB  jaunâtre-rougeâtre
- CSC  grisâtre
- CSD  grisâtre-rougeâtre

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA SYSTEM 3D-MASTER

- CSL  jaunâtre
- CSM2  jaunâtre-rougeâtre
- CSM3  jaune-rouge
- CSR  rougeâtre
- CSIO  orange

VITA AKZENT Plus GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FLUOGLAZE LT
- FINISHING AGENT



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE TECHNIQUE

Pour toute question technique concernant les produits VITA notre service technique VITA est à votre disposition.

► **Téléphone +49 (0) 7761 / 56 22 22**

Courriel info@vita-zahnfabrik.com

De 8 h à 17 h HEC

► Pour obtenir les coordonnées des autres interlocuteurs à l'international, visitez la page **www.vita-zahnfabrik.com/contacts**



ASSISTANCE EN LIGNE

Des questions sur la mise en œuvre et les produits ?

Vous trouverez des réponses en ligne sous la forme de **FAQ**,
de vidéos et de modules de formation en ligne.

Vous trouverez de plus amples informations, entre autres, dans le mode d'emploi complet VITA AKZENT Plus.

► **www.vita-zahnfabrik.com**

► **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**

CE 0124 MD Rx Only



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com