

VITAVM[®]CC

Information produit



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

VITA – perfect match.

VITA

Résine polymérisable à froid non chargée pour réalisation extra-orale de restaurations provisoires et de réparations. Disponible dans les couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A–D.

VITAVM[®].CC Adaptée à toutes les indications




VITA VM CC est une résine autopolymérisable non chargée. C'est le matériau idéal pour la réalisation extra-orale de restaurations provisoires et de réparations.

Indications

- Fabrication de couronnes et de bridges provisoires.
- Fixation de dents artificielles VITA, par ex. sur des plaques métalliques.
- Réparations.
- Couverture d'attachements lors de travaux combinés.



Stratification BASIC

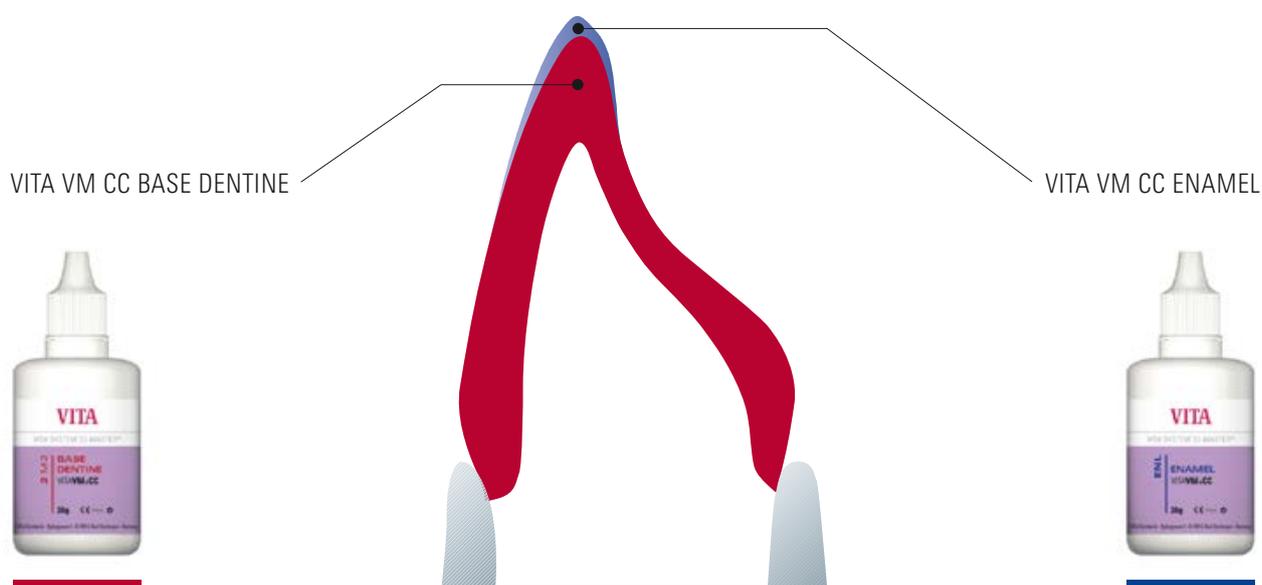

Stratification BASIC

La stratification en couleur soutenue BASIC VITA VM CC se compose de deux poudres

- BASE DENTINE
- ENAMEL

Avec les deux masses, l'utilisateur peut déjà réaliser une restauration très naturelle et rayonnante de vitalité.

Personnalisation

Les masses complémentaires permettent de créer des effets naturels et des caractéristiques facilement et de manière authentique.



Le provisoire, base du succès

Le provisoire est un élément important du processus thérapeutique en prothèse fixée. Il sert en principe à protéger les dents préparées et à réhabiliter temporairement l'esthétique et la fonction.

Bien utilisé, il apporte davantage : il contribue à une conception parfaite de la restauration définitive. Notamment pour les restaurations en secteur antérieur, il permet dès ce stade de retoucher l'esthétique, la phonétique et la fonction.




De plus le provisoire facilite l'acceptation de la prothèse par le patient car assez tôt il peut s'habituer à la nouvelle situation. VITA VM CC joue donc un grand rôle. Grâce à ce matériau, les patients bénéficient d'une esthétique naturelle même avec une prothèse provisoire.



III. 1 Situation de la réhabilitation

III. 2 Restauration provisoire et conception du secteur antérieur avec VITA VM CC



III. 3 La situation des antérieures immédiatement après la pose de la céramique (VITA In-Ceram YZ stratifié avec VITAVM 9)

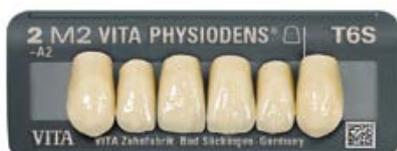

Pour concevoir une prothèse provisoire, il est possible de déterminer la forme et la couleur qui conviendront au patient à l'aide de dents artificielles. Pour déterminer la forme et la couleur de dent adaptées, une carte des formes vivantes avec par ex. VITA PHYSIODENS est particulièrement bien adaptée. Le patient peut ainsi se faire une idée de sa future prothèse et participer au choix.

	<p>VITA VM[®]CC BASIC KIT 16-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER[®] ou VITA VM[®]CC BASIC KIT VITA classical A1-D4[®] Coffret de base pour la stratification BASIC</p>
	<p>VITA VM[®]CC BASIC KIT 5-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER[®] Petit assortiment de base pour la stratification BASIC avec une offre de masse réduite</p>
	<p>VITA VM[®]CC CLASSICAL COLOR KIT Gamme d'extension pour les utilisateurs de VITA VM CC 3D-MASTER qui souhaitent élargir leur gamme existante avec VITA classical A1-D4 (sans B1)</p>
	<p>VITA VM[®]CC PROFESSIONAL KIT* Pour des effets naturels et des caractérisations</p>


* Utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER[®] et VITA classical A1-D4[®].

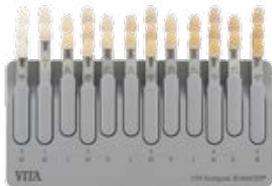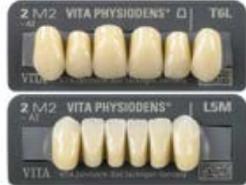	<p>VITA Easyshade[®] V</p> <p>Utilisez pour la détermination de la couleur numérique le VITA Easyshade V et pour la détermination de la couleur visuelle, par ex. le VITA Linearguide 3D-MASTER ou VITA classical A1–D4.</p>
	<p>VITA Easyshade LITE</p> <p>Permet de réaliser une détermination de la couleur numérique simple et rapide de la couleur naturelle dans les systèmes de couleurs établis VITA classical A1–D4 et VITA SYSTEM 3D-MASTER.</p>
	<p>VITA Toothguide 3D-MASTER[®]</p> <p>Avec le VITA SYSTEM 3D-MASTER, vous définissez rapidement et précisément la couleur de dent correcte.</p>
	<p>Teintier VITA classical A1–D4</p> <p>L'original - pour déterminer la couleur de dent dans les couleurs VITA classical A1–D4. Avec le VITA Bleached Shades complémentaire, les couleurs des dents éclaircies seront déterminées avec justesse.</p>
	<p>Dents artificielles VITA PHYSIODENS[®], VITAPAN EXCELL[®], VITAPAN[®] LINGOFORM, VITAPAN[®], VITA MFT[®].</p> <p>Les quatre gammes de dents apportent toujours la solution adaptée à l'indication. Leur matériau éprouvé depuis des décennies a prouvé qu'il avait le meilleur comportement à l'abrasion. VITA VM CC et les dents artificielles VITA peuvent être combinées de manière optimale.</p>
	<p>Adhésif VITACOLL</p> <p>L'adhésif VITACOLL provoque une liaison chimique fiable des dents résine avec les polymères à chaud et à froid, comme par ex. VITA VM CC, et empêche la désolidarisation des dents.</p>

Pour de plus amples informations : www.vita-zahnfabrik.com

La résine cosmétique VITA VM CC est disponible en couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A–D. Compatibilité chromatique garantie avec tous les matériaux VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A–D.

Le teintier VITA SYSTEM 3D-MASTER est unique en son genre. Il permet de déterminer d'une manière systématique toutes les couleurs de dent naturelles et de les reproduire intégralement.

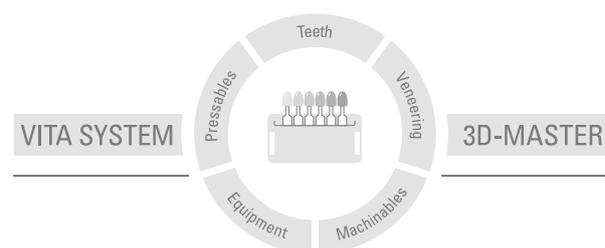

N.B. Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrectes. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 2024-04

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifiée et les produits suivants portent le marquage

CE0124

VITAVM[®]CC · VITA PHYSIODENS[®] · VITAPAN[®] · VITAPAN PLUS[®]
VITAPAN[®] LINGOFORM · VITACOLL[®]

MD

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tél. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline : Tél. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik