

VITAVM[®]CC

Informacje o produkcie



VITA ustalenie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

VITA – perfect match.

VITA

Materiał bez wypełniacza do polimeryzacji na zimno stosowany poza jamą ustną, przeznaczony do wkonywania uzupełnień tymczasowych i napraw. Dostępny w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITA classical A–D.

VITAVM[®].CC Dostosowany do różnych wskazań




VITA VM CC bez wypełniacza do polimeryzacji na zimno. To idealny materiał do zewnątrzustnego wykonywania uzupełnień tymczasowych oraz napraw.

Zakres zastosowania

- Wykonawstwo tymczasowych koron i mostów
- Mocowanie konfekcyjnych zębów akrylowych VITA, np. w protezach szkieletowych
- Naprawy
- Krycie w zasuwach w trakcie wykonywania uzupełnień złożonych, kombinowanych



Nakładanie warstw wg schematu BASIC

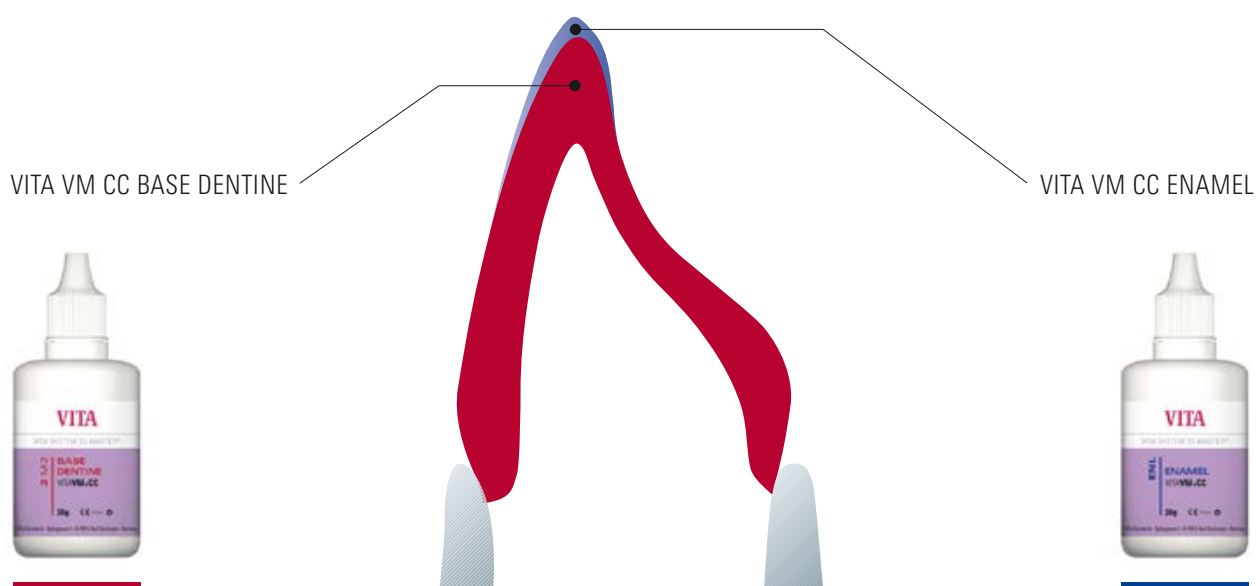

Nakładanie warstw wg schematu BASIC

Schemat nakładania warstw BASIC VITA VM CC składa się z dwóch mas:

- BASE DENTINE
- ENAMEL

Użytkownik może za pomocą dwóch warstw wykonać trwałe uzupełnienie tymczasowe o wysokich walorach estetycznych.

Indywidualizacja

Przy pomocy mas dodatkowych można łatwo uzyskać naturalne efekty i autentyczne cechy charakterystyczne.



Uzupełnienie tymczasowe podstawą sukcesu

Uzupełnienie tymczasowe jest ważnym elementem w procesie leczenia pacjenta i ostatecznego zastosowania uzupełnienia stałego. Uzupełnienie zasadniczo służy do ochrony oszlifowanych zębów i tymczasowo odtwarza estetykę oraz funkcję w jamie ustnej pacjenta.



Odpowiednio wykonane tymczasowe spełnia dodatkowe funkcje. Dzięki niemu możemy optymalnie określić kształt wykonywanego docelowego uzupełnienia stałego. Szczególnie w przypadku odbudowy zębów przednich możemy przy pomocy uzupełnienia tymczasowego przeprowadzić korektę estetyki, fonetyki oraz funkcji.




Poza tym uzupełnienie tymczasowe ułatwia pacjentowi akceptację nowej sytuacji zaistniałej w jamie ustnej. Uzupełnienie tymczasowe wykonane z materiału VITA VM CC, odgrywa znaczącą rolę w osiągnięciu odpowiednich walorów estetycznych tak ważnych dla pacjenta.

Zdj. 1: Sytuacja przed rehabilitacją.

Zdj. 2: Odbudowa tymczasowa i projektowanie zębów odcinka przedniego przy użyciu VITA VM CC

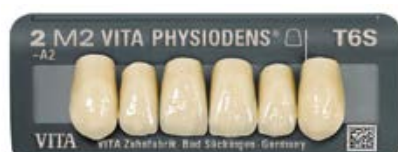


Zdj. 3: Sytuacja zębów przednich bezpośrednio po założeniu. (VITA In-Ceram YZ licowana ceramiką VITA VM 9)



Forma uzupełnienia tymczasowego powinna dokładnie odzwierciedlać typ pacjenta. W tym celu możemy posłużyć się zębami konfekcyjnymi. Aby odpowiednio określić właściwy kształt i kolor zębów stosujemy np. szablony kształtów VITA PHYSIODENS. W ten sposób pacjent wspólnie z technikiem dentystycznym i stomatologiem określa kształt i kolor nowego uzupełnienia protetycznego.

	<p>VITA VM[®]CC BASIC KIT 16-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER[®] lub VITA VM[®]CC BASIC KIT VITA classical A1-D4[®] Asortyment podstawowy dla nakładania warstw wg schematu BASIC</p>
	<p>VITA VM[®]CC BASIC KIT 5-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER[®] Asortyment podstawowy dla schematu nakładania warstw BASIC ze zredukowanym asortymentem mas.</p>
	<p>VITA VM[®]CC CLASSICAL COLOR KIT Asortyment dla klientów VITA VM CC 3D-MASTER, którzy chcą rozszerzyć swój komplet mas o kolory VITA classical A1-D4 (oprócz B1).</p>
	<p>VITA VM[®]CC PROFESSIONAL KIT* Dla naturalnych efektów i charakterystyki</p>


* zastosowanie dla VITA SYSTEM 3D-MASTER[®] i VITA classical A1-D4[®]

	<p>VITA Easyshade® V</p> <p>W celu cyfrowego doboru koloru stosujemy urządzenie VITA Easyshade V lub wizualną metodę tradycyjną kolornikami VITA Linearguide 3D-MASTER lub VITA classical A1–D4.</p>
	<p>VITA Easyshade LITE</p> <p>Umożliwia proste i szybkie cyfrowe określanie koloru naturalnych zębów w systemach kolorystycznych VITA classical A1–D4 i VITA SYSTEM 3D-MASTER.</p>
	<p>VITA Toothguide 3D-MASTER®</p> <p>Przy pomocy kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można szybko i precyzyjnie określić właściwy kolor uzębienia.</p>
	<p>Kolornik VITA classical A1–D4</p> <p>Oryginalny kolornik do wyznaczania kolorów wg skali VITA classical A–D. Dodatkowy VITA Bleached Shades umożliwia wiarygodnie określić kolor wybielonych zębów.</p>
	<p>Zęby konfekcyjne VITA VITA PHYSIODENS®, VITAPAN EXCELL®, VITAPAN® LINGOFORM, VITAPAN®, VITA MFT®.</p> <p>Wszystkie pięć typów zębów można stosować w każdym przypadku klinicznym. Materiał, z którego zostały wyprodukowane, sprawdził się na przestrzeni dziesięcioleci i cechuje się znakomitą odpornością na ścieranie. Materiał VITA VM CC i zęby konfekcyjne VITA optymalnie ze sobą korelują.</p>
	<p>VITACOLL® aktywator przyczepności</p> <p>Aktywator przyczepności VITACOLL zapewnia niezawodne chemiczne połączenie zębów akrylowych z takimi polimerami jak np. VITA VM CC, których polimeryzacja przeprowadzana jest na zimno lub na gorąco oraz zapobiega wyłamywaniu się zębów.</p>

Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

Materiał licujący VITA VM CC dostępny jest w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITA classical A–D. Gwarantowana jest kompatybilność kolorów wszystkich materiałów VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITA classical A–D.

Za pomocą jednego w swoim rodzaju kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i reprodukować wszystkie naturalne kolory zębów.

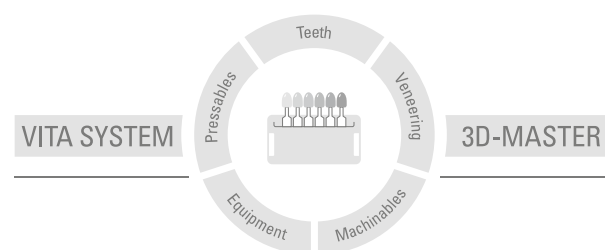

Uwaga: Nasze produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użytkowania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego stosowania i obsługi. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do sprawdzenia przed użyciem czy produkt jest właściwym do zastosowania w danym polu aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody jeśli produkt jest stosowany w połączeniu i przy użyciu materiałów i urządzeń pochodzących od innych producentów, a które są niekompatybilne lub nie posiadają autoryzacji do stosowania z naszymi produktami. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww zestawu. Data wydania informacji: 2024-04

Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualna wersja broszury jest dostępna na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikacje a następujące produkty noszą znak

CE0124

**VITAVM[®]CC · VITA PHYSIODENS[®] · VITAPAN[®] · VITAPAN PLUS[®]
VITAPAN[®] LINGOFORM · VITACOLL[®]**



VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Faks +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik