

VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS

Идеально попадающие в цвет результаты прессования. Всегда.



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA



VITA – perfect match.

VITA

A close-up, soft-focus photograph of a woman's face, showing her eyes, nose, and a slight smile. She has dark hair and is wearing a yellow top. The background is a plain, light-colored wall.

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

VITA AMBRIA® Press solutions - это высокоэстетичная пресс-керамическая система для достижения естественных результатов. В дополнение к непревзойденной цветопередаче и отличной светодинамике, пресс-керамика также отличается эффективной обработкой.



▶ **VITA AMBRIA –**
Сияние. Цветопередача. Точность.



VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS – ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, ПРАВИЛЬНАЯ ЦВЕТопЕРЕДАЧА И НАДЕЖНОСТЬ



VITA AMBRIA –
пресс-керамическая
система для эстетических
и стабильных результатов.



Что?

- Усиленная диоксидом циркония дисиликатлитиевая пресс-керамическая система для высокоэстетичных и стабильных результатов с эффективной обработкой.

Для чего?

- Для создания изящных реконструкций, таких как виниры, вкладки/накладки, а также высокоэстетичные полные/частичные коронки и трехзвеньевые мосты до 2-го премоляра

С помощью чего?

- Пресс-керамическая система состоит из пресс-керамических заготовок с несколькими уровнями транслюцентности (MO, T/HT/ST) и двух размеров (S, L), муфельной системой, паковочным материалом и жидкостью, а также пресс-плунжерами.



ПРЕСС-КЕРАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С СОВМЕСТИМЫМИ КОМПОНЕНТАМИ



VITA AMBRIA®

- Для эффективной и надежной обработки на каждом этапе: от паковки до прессования и облицовки, разработаны системные компоненты

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА



МОДЕЛИРОВАНИЕ



ПАКОВКА



ПРЕССОВАНИЕ



ОБЛИЦОВКА*



ОКРАШИВАНИЕ



ПОЛИРОВКА



**VITA AMBRIA –
эффективность с системой.**

Оptionальный этап процесса: не применяется для монолитных реставраций.

ПРЕИМУЩЕСТВА



▶ **VITA AMBRIA –
эстетичная,
надежная, точная.**

Высокая эстетика

- Воссоздание многогранной игры цвета и света благодаря материалу с почти естественной транслюцентностью, опалесценцией и флуоресценцией

Цветопередача


- Надежное воспроизведение цвета зубов благодаря пресс-заготовкам с очень хорошей цветопередачей и идеально подобранными системными компонентами

Эффективность

- Экономия времени за счет сокращения рабочих операций и точные результаты прессования благодаря идеальному сочетанию материала и паковочной массы.

Прочность

- Высокая прочность (> 550 МПа) благодаря керамике на основе дисиликата лития, усиленной диоксидом циркония, обеспечивает долговечность реставраций.

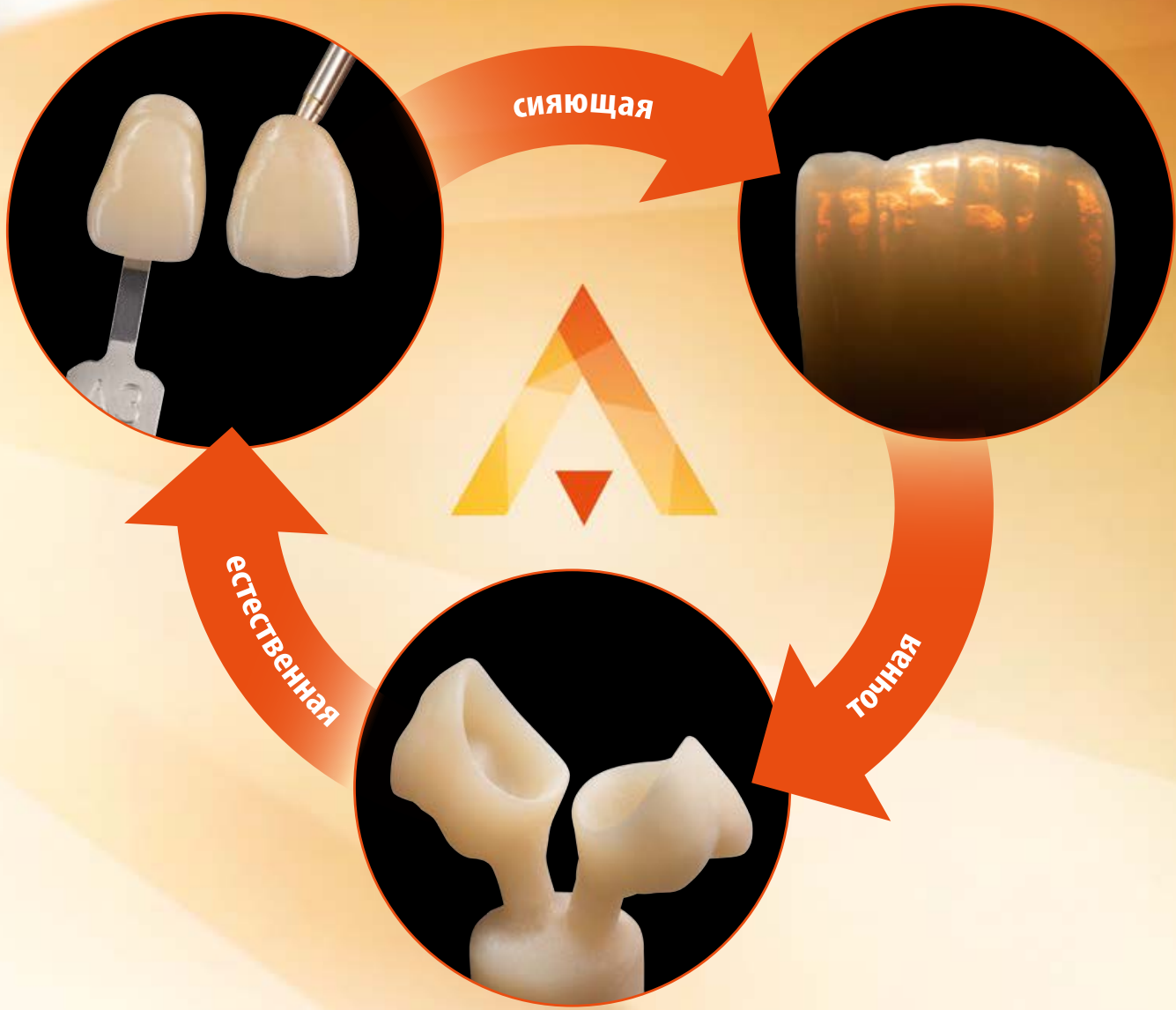

ПРЕВОСХОДНАЯ СВЕТОДИНАМИКА ДЛЯ ВЫСОКОЭСТЕТИЧНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ

VITA AMBRIA -
Для многогранной
игры цвета и света.



VITA AMBRIA®

- обладает естественной транслюцентностью для превосходной светопроводимости
- имеет интегрированную опалесценцию для сияющей игры цвета
- обеспечивает естественную флуоресценцию для игры света



▶ лучшее светопропускание




▶ сияющая игра цвета




▶ естественная флуоресценция



НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЦВЕТА ЗУБА

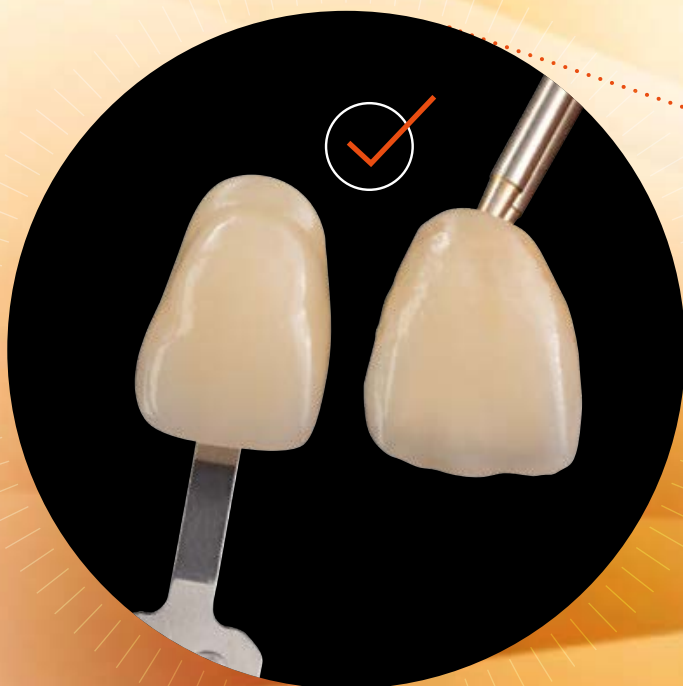

◀ **VITA AMBRIA – perfect match.**
Надежная цветопередача
благодаря пресс-заготовкам
с лучшей цветопередачей.

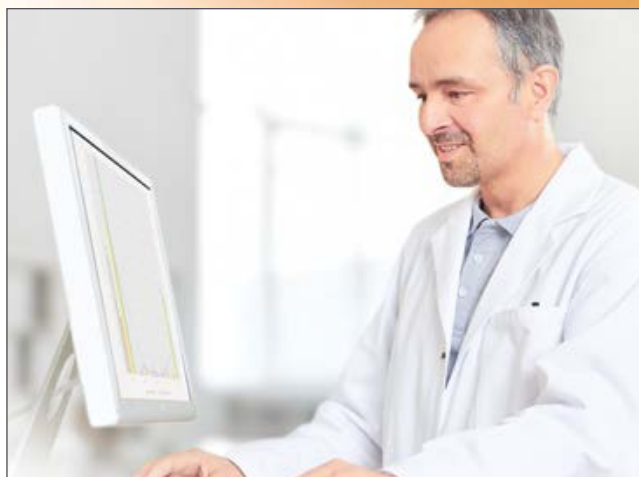

Точная рецептура цвета

- Благодаря высокоточным метрологическим процессам при разработке и производстве пресс-заготовок VITA AMBRIA достигается очень высокий уровень цветопередачи.



Точное определение цвета

- С помощью систем визуального и цифрового определения цвета от VITA Zahnfabrik цвет зубов можно определять с высокой точностью.



Точное воспроизведение цвета

- Точная информация о цвете зуба и точные цветовые заготовки позволяют эффективно и надежно воспроизводить цвет.



ТОЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



VITA AMBRIA Пресс-керамика

VITA AMBRIA®

- гарантирует высокоточные результаты прессования, поскольку материал и паковочная масса идеально согласованы
- экономия времени за счет сокращения рабочих этапов, поскольку небольшой реакционный слой можно легко удалить путем абразивной обработки стеклянными шариками без последующей обработки в кислотной ванне.



VITA AMBRIA паковочная масса и жидкость




совместимая паковочная масса

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ПОЛИРУЕМОСТЬ

1. Очень высокая устойчивость к нагрузкам для долговечности



Биаксиальная прочность

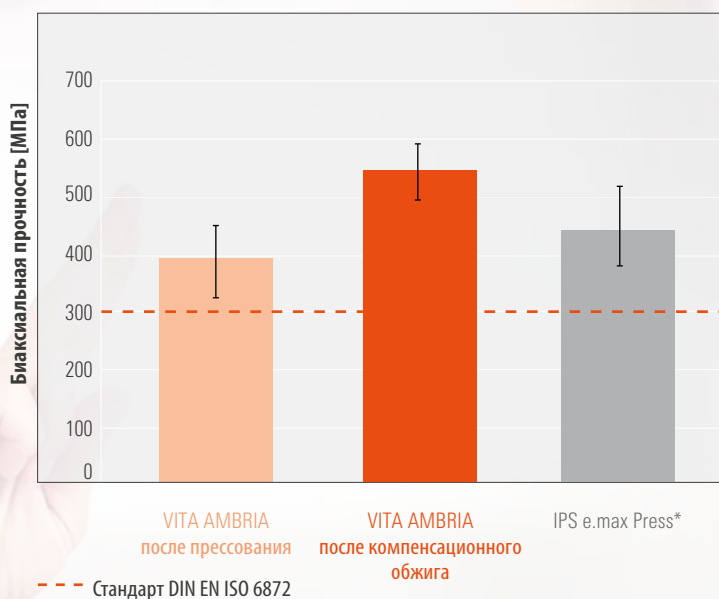

Источник: Interne Untersuchung, VITA F&E, Messung Biaxialfestigkeit o. g. Materialien in Anlehnung an ISO 6872 (mit modifizierter Probengeometrie), (Gödiker, 1/2019, [1] vgl. Prospektrückseite)
*) Уровень прочности после процесса прессования. Компенсационный обжиг не указан производителем.


VITA AMBRIA®

- благодаря высокой прочности обеспечивает долгосрочную клиническую стабильность
- при биаксиальной прочности в среднем > 550 МПа (после обжига Power Glaze) достигается уровень прочности, превышающий стандартные требования

2. Эффективная полируемость для высокого уровня блеска


1. Обработка алмазом

Поверхность после обработки алмазным шлифовальным инструментом

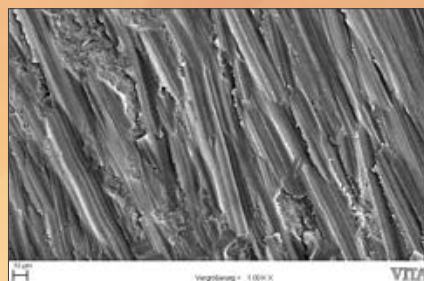

2. Грубая полировка

Поверхность после обработки грубым полировальным инструментом

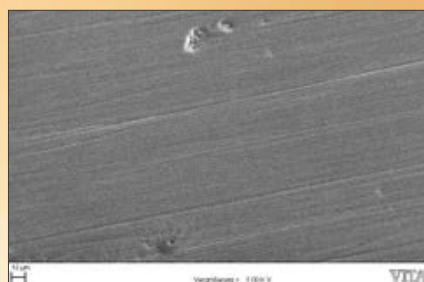

3. Окончательная полировка

Поверхность после обработки с помощью мягкого полировального инструмента



Источник: Interne Untersuchung, VITA F&E, REM-Bilder der bearbeiteten Oberfläche von VITA AMBRIA Probekörper, 1.000-fache Vergrößerung, (Gödiker, 8/2019, [1] vgl. Prospektrückseite)

**VITA AMBRIA -
Быстрое и эффективное
достижение высокого блеска.**

VITA AMBRIA®

- может быть очень эффективно отполирован до зеркального блеска благодаря своей однородной структуре
- показывает однородную, гладкую поверхность без дефектов при испытаниях после трех этапов обработки (обработка алмазом, грубая полировка, окончательная полировка)



A close-up, profile view of a man and a woman. The man, on the left, has dark hair and a beard, and is wearing an orange polo shirt. The woman, on the right, has dark hair and is wearing a yellow top. They are both looking towards each other, suggesting a conversation or a shared moment. The background is bright and out of focus.

СИСТЕМА И КОМПОНЕНТЫ

VITA AMBRIA® пресс-заготовки доступны в широком диапазоне размеров и цветов. Также имеется широкий ассортимент согласованных системных компонентов.



ОБЗОР ВАРИАНТОВ, РАЗМЕРОВ И ЦВЕТОВ

VITA AMBRIA разновидности и цвета

VITA AMBRIA пресс-заготовки												
для изящных виниров, эстетических полных и частичных коронок и трехвневевых мостов до 2-го премоляра												
Степени транслюцентности				Размер				Цвет				
<ul style="list-style-type: none"> • Translucent (= транслюцентный) Т • High translucent (= высоко транслюцентный) НТ • Super Translucent (= супер транслюцентный) ST* • Medium opacity (MO)* 				Пресс-заготовки <ul style="list-style-type: none"> • S • L 				<ul style="list-style-type: none"> • Монохромный 				
VITA classical A1–D4												
Цвета	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D2	D3
Translucent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
High Translucent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VITA SYSTEM 3D-MASTER / Bleached Shades												
Цвета	0M1	0M3	1M1	1M2	2M1	2M2	3M1	3M2	4M1	4M2		
Translucent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
High Translucent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VITA ENAMEL												
Цвета	ENL			ENM				ENI				
Super Translucent	✓			✓				✓				
VITA AMBRIA MO												
Цвета	MO-0			MO-1				MO-2				
Medium Opacity	✓			✓				✓				

***) Доступно только в форме пресс-таблеток, размер S.



СОГЛАСОВАННЫЕ ПРЕСС-КОМПОНЕНТЫ



Паковочная масса/жидкость

Идеально подходит для пресс-заготовок VITA AMBRIA, фосфатно-связанная и быстродействующая паковочная масса с жидкостью для точного контроля расширения и текучести.

VITA AMBRIA INVEST

- VITA AMBRIA INVEST P: выпускается в упаковке по 50 x 100 г
- VITA AMBRIA INVEST F: выпускается в виде 1-литровой бутылки



Муфельная система

Муфельное кольцо и основание для удобного размещения и демонтажа объектов; подходит для всех известных пресс-печей.

- МУФЕЛЬНАЯ СИСТЕМА VITA AMBRIA: доступна в виде муфельной системы 100 и 200 г



Пресс-штампы

Одноразовые плунжеры для удобства обращения, без длительной струйной обработки и предварительного нагрева.


- VITA AMBRIA PLUNGER: поставляется в упаковке по 50 штук (диаметр 13 мм)

ДОСТУПНЫЕ СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Паковка

VITA AMBRIA INVEST P + F
VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM

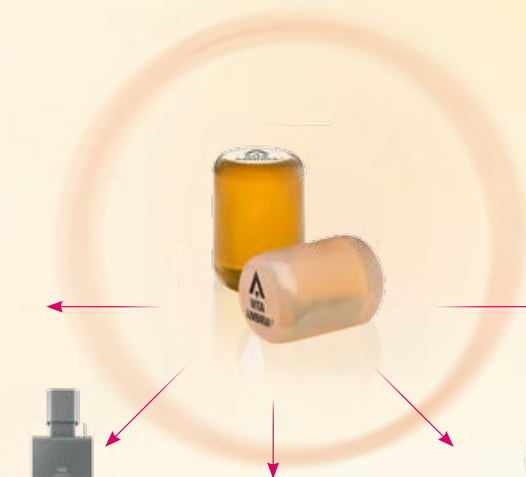

Индивидуализация
и глазуровка
VITA AKZENT PLUS.



Прессование

VITA VACUMAT 6000 MP
VITA AMBRIA PLUNGER



Полировка
VITA CERAMICS
POLISHING SET



Облицовка

VITA LUMEX AC

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Определение цвета



- Используйте **VITA Easyshade V** для цифрового определения цвета и цветовую шкалу **VITA** для визуального.

Моделировка



- Для моделировки используйте выгораемый без остатка моделировочный или фрезерный воск.

Паковка



- Используйте для паковки согласованную систему паковочных материалов **VITA AMBRIA INVEST P + F** и **VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM**.

Прессование



- Для прессования пресс-таблеток **VITA AMBRIA** используйте комбинированную пресс-печь **VITA VACUMAT 6000 MP**, а также одноразовый пресс-штамп **VITA AMBRIA PLUNGER**.

Облицовка*



- Для облицовки реставраций используйте идеально согласованную с **VITA AMBRIA** облицовочную керамику **VITA LUMEX AC**.

Индивидуализация и покрытие глазурью



- Для индивидуализации и глазурования реставраций используйте красители/глазуровочные массы **VITA AKZENT PLUS**.

Полировка



- Для полировки реставраций рекомендуется использовать полировальный набор для керамики **VITA CERAMICS Polishing Set**.

Фиксация



- Облицованная с помощью **VITA LUMEX AC** реставрация фиксируется адгезивно или самоадгезивно с **VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS**.

**) Опционально: Облицовка с помощью VITA Lumex AC — является необязательным этапом рабочего процесса и не является обязательной для концепции монолитного протезирования.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ

Больше информации по продуктам и их обработке на сайте www.vita-zahnfabrik.com



Технические консультанты:

Алина Керецман

тел.: +7 (915) 079-62-76

e-mail: A.Keretsman@vita-zahnfabrik.com

Владимир Мадюдя

тел.: +38 (067) 740-52-94

e-mail: V.Madyudya@vita-zahnfabrik.com

Сергей Агакин

тел.: +7 (916) 471-25-53

e-mail: S.Agakin@vita-zahnfabrik.com




Более подробную информацию о VITA AMBRIA
Вы можете найти на сайте: www.vita-zahnfabrik.com/ambria

1. Referenzen

1. Внутренние исследования, VITA F&E:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Ressort Forschung und Entwicklung
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen,
Dipl.-Ing. Michael Gödiker, Projektleiter F&E, Bad Säckingen

Для получения подробной информации об испытаниях см.
Научно-техническая документация VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS
Загрузить через www.vita-zahnfabrik.com/ambria

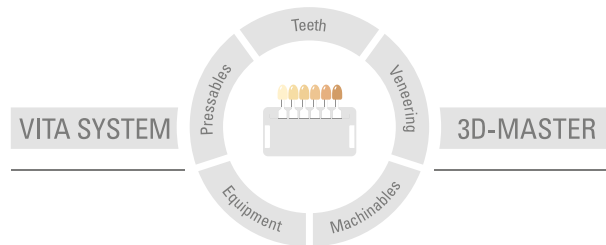

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбок VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 2024-11

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

Фирма VITA является сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку

CE 0124

VITA AMBRIA®, VITA LUMEX® AC, VITA AKZENT® PLUS

Упомянутые в документе продукты/системы других производителей являются зарегистрированными марками соответствующих производителей.

MD

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)