

# VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Quickstart Guide



WAK-unabhängige Malfarben  
zur Steuerung des Chromas

VITA – perfect match.

**VITA**

## > VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS – FACTS & FEATURES

### **CHROMA STAINS sind:**

- WAK-unabhängige Keramikmaldfarben für gängige Verblendkeramiken, monolithische Zirkon-, Silikat- oder Feldspatkeramiken wie z. B. VITABLOCS, VITA YZ SOLUTIONS, VITA LUMEX AC, VITA VM 13 und VITA AMBRIA.

### **Mit CHROMA STAINS profitieren Sie von:**


- einfacher Chromaanpassung in den zugehörigen Farbgruppen
- Beeindruckende Verarbeitungseigenschaften, wie einfache Applikation
- höchstethischen Ergebnissen durch Oberflächenbemalung

## > SYSTEMKOMPONENTEN



## VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

### Einsatz der CHROMA STAINS auf einem definierten Untergrund

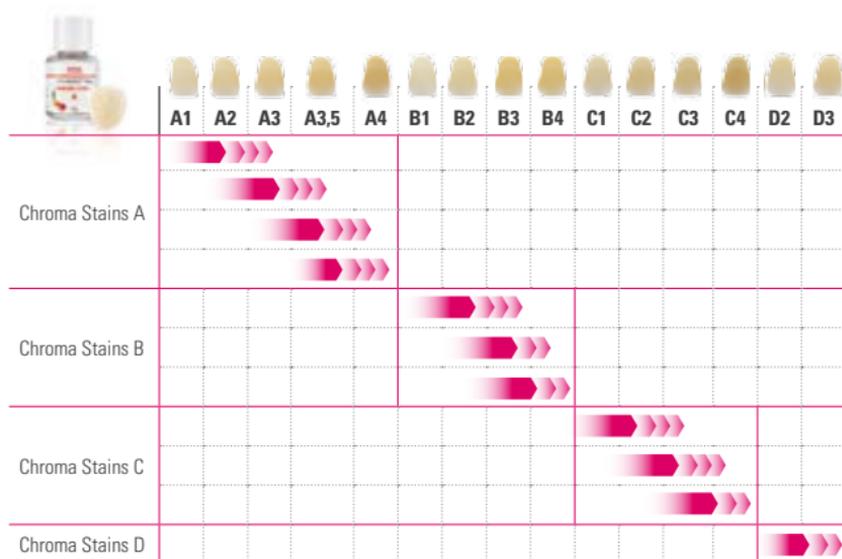

**! Bitte beachten:** Ein Chromawechsel ist nur innerhalb einer Farbgruppe möglich. Die VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS sind entwickelt worden, um das Chroma innerhalb einer Farbgruppe zu intensivieren. Je nach angemischter Konsistenz variiert die Intensität der Malfarben. Je dicker die Konsistenz, umso chromatischer können Sie die Restauration verändern.

## VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

---

### Anwendungsbeispiel anhand einer einzelnen Frontzahnrestauration



**1** Farbbestimmung



Restauration fügt sich farblich  
nicht in Restzahngebiss ein



**2** Applikation CHROMA STAINS  
Malfarbenfixierbrand oder Kombinationsbrand mit  
VITA AKZENT Plus GLAZE (siehe Brenntabelle)



Perfekte Farbanpassung  
der Restauration am Restzahnbestand

## Steuerung der Chromazität

### Dünne Konsistenz



### Dicke Konsistenz



Applikation  
**CHROMA STAINS**



**! Bitte beachten:** Pfützenbildungen sind zu vermeiden. Möchten Sie die Restauration deutlich chromatischer, empfehlen wir dies in zwei Bränden durchzuführen.

\* Die Konsistenz der VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS Paste entspricht 1:2.

## VITA AKZENT® Plus – Brenntabellen

### Empfohlene Brandführung

**POWDER Glanzbrand** – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE LT, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Vt. °C	→ min.*	↗ min.	↗ °C/min.	Temp ca °C	→ min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT/ST/XT	400	4.00	5:37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600**
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC mit GLAZE LT Powder	400	4.00	-	50	750	1.00	-	500**
VITA AMBRIA GLAZE LT	400	6.00	4:22	80	750	1.00	-	500**
Malfarbenfixierbrand	500	4.00	2:30	80	700	1.00	-	-

\*) Bei Pastenbränden ist die Vorwärmzeit von 4 Min. auf 6 Min. zu erhöhen (VITA LUMEX AC 8 Min.).

\*\*\*) Die Langzeitabkühlung bis zur entsprechenden Temperatur ist eine Empfehlung für den jeweils letzten geplanten Verblendkeramikbrand. Die Liftposition bei VITA VACUMAT Geräten sollte dabei >75% sein. Das Brenngut muss vor direkter Luftzufuhr geschützt werden.



**! Bitte beachten:** Alle Restaurationstypen können ebenfalls mit VITA AKZENT Plus GLAZE LT glasiert werden. In diesem Fall können Sie die Temperatur auf bis zu 750°C herabsetzen.





## TECHNISCHE HOTLINE

Fragen rund um VITA Produktlösungen?

Die **erfahrenen Zahntechniker und Technikberater** beantworten sie unter:

- ▶ **Phone +49(0) 7761/562222**
- ▶ **Mail [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **8.00 bis 17.00 Uhr CET**



## ONLINE-SUPPORT

Fragen rund um die Verarbeitung und zu Produktlösungen?

Kompetente Antworten finden Sie online in Form von **FAQs**, **Videos und elektronischen Lerneinheiten**.

Weitere, detaillierte Informationen finden Sie u. a. in der komplett umfassenden VITA AKZENT Plus Gebrauchsanweisung.

- ▶ **[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **[www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)**



CE 0124



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49 7761 562-0 · Fax +49 7761 562-299

Hotline: Tel. +49 7761 562-222 · Fax +49 7761 562-446

[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)



[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)