

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Guía de inicio rápido



Maquillajes independientes del
CET para regular el croma

VITA – perfect match.

VITA

> VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS: DATOS Y CARACTERÍSTICAS


CHROMA STAINS son:

- Maquillajes para cerámica independientes del CET para las cerámicas de recubrimiento habituales, cerámicas de circonio, de silicato o de feldespato monolíticas, tales como VITABLOCS, VITA YZ SOLUTIONS, VITA LUMEX AC, VITA VM 13 y VITA AMBRIA.


Con los CHROMA STAINS, beneficiese de:

- Ajuste sencillo del croma en los grupos de colores correspondientes
- Propiedades de manipulación impresionantes, como, por ejemplo, facilidad de aplicación
- Resultados altamente estéticos gracias a la coloración de la superficie

> COMPONENTES DEL SISTEMA

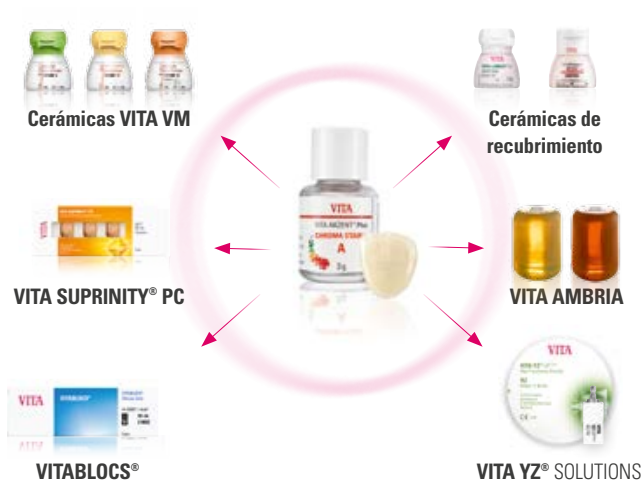

Utilización de los CHROMA STAINS sobre un sustrato definido

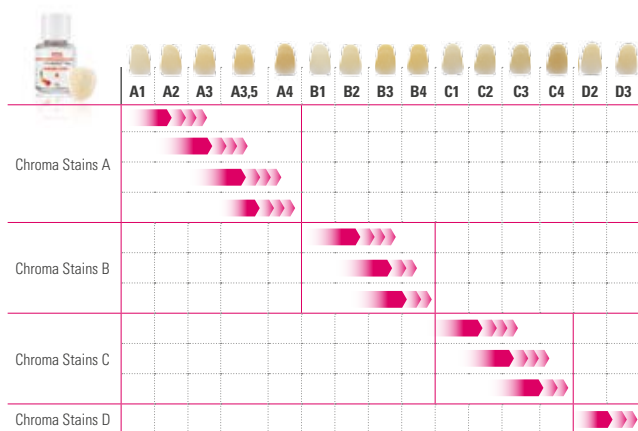

Nota: El cambio de cromas solo es posible dentro de un grupo de colores. Los VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS han sido desarrollados para intensificar el cromas dentro de un grupo de colores. La intensidad de los maquillajes varía en función de la consistencia de la mezcla. Cuanto más espesa sea la consistencia, en mayor medida podrá modificar la intensidad cromática de la restauración.

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Ejemplo de aplicación basado en una restauración de diente anterior individual



1 - Determinación del color



La restauración no se integra cromáticamente en la dentadura remanente



2 - Aplicación de CHROMA STAINS
Cocción de fijación de los maquillajes o cocción combinada con VITA AKZENT Plus GLAZE (véase la tabla de cocción)



Perfecta adaptación cromática de la restauración a la dentadura remanente

Regulación de la cromaticidad


Consistencia fluida



Consistencia espesa



Aplicación de
CHROMA STAINS

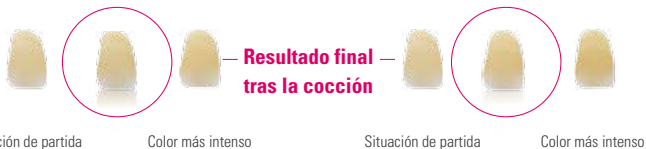

! **Nota:** Debe evitarse la formación de charcos. Si desea aumentar sustancialmente la intensidad cromática de la restauración, recomendamos hacerlo en dos cocciones.

* La consistencia de los VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS Paste se corresponde con 1:2.

VITA AKZENT® Plus – Tablas de cocción

Proceso de cocción recomendado

Cocción de glaseado con POWDER: CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE LT, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Presec. °C	→ min*	↗ min	↗ °C/ min	Temp. °C, aprox.	→ min	VAC min	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT/ST/XT	400	4.00	5:37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600**
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC con GLAZE LT Powder	400	4.00	-	50	750	1.00	-	500**
VITA AMBRIA GLAZE LT	400	6.00	4:22	80	750	1.00	-	500**
Cocción de fijación de los maquillajes	500	4.00	2:30	80	700	1.00	-	-

*) En las cocciones de pasta es preciso incrementar el tiempo de precalentamiento de 4 min a 6 min (VITA LUMEX AC 8 min).

***) El enfriamiento lento hasta la temperatura indicada está recomendado para la última cocción prevista de la cerámica de recubrimiento.

En los hornos VITA VACUMAT, el elevador debe estar en la posición >75 %. Las piezas de cocción deben estar protegidas de la entrada directa de aire.



! **Nota:** Todos los tipos de restauración pueden glasearse también con VITA AKZENT Plus GLAZE LT. En este caso puede reducirse la temperatura hasta 750 °C.





LÍNEA DIRECTA DE ASISTENCIA TÉCNICA

¿Tiene preguntas sobre las soluciones de producto VITA?

Los **experimentados protésicos dentales y asesores técnicos** las responderán en:

- ▶ **Teléfono: +49 (0) 7761/562222**
- ▶ **E-mail: info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **De 8:00 a 17:00 h CET**



ASISTENCIA ONLINE

¿Tiene preguntas en torno a la elaboración y las soluciones de producto?

Encontrará respuestas competentes online en forma de

Preguntas frecuentes, vídeos y unidades didácticas electrónicas.

También encontrará más información detallada en las instrucciones de uso completas de VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



CE 0124



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49 7761 562-0 · Fax +49 7761 562-299

Hotline: Tel. +49 7761 562-222 · Fax +49 7761 562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com



[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)