

# VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Guia de início rápido



Pigmentação de CET independente  
para controle do croma

VITA – perfect match.

**VITA**

## > VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS – FATOS E CARACTERÍSTICAS


### **CHROMA STAINS** são:

- Pigmentações cerâmicas independentes de CET para cerâmicas de revestimento convencionais, cerâmicas de zircônio monolíticas, cerâmicas de silicato ou cerâmicas feldspáticas, por exemplo, VITABLOCS, VITA YZ SOLUTIONS, VITA LUMEX AC, VITA VM 13 e VITA AMBRIA.


### **Com CHROMA STAINS** você se beneficia de:

- Ajuste mais fácil de cor nos grupos de cores correspondentes
- Características de processamento impressionantes, bem como aplicação fácil
- Resultados altamente estéticos através da coloração da superfície

## > COMPONENTES DO SISTEMA

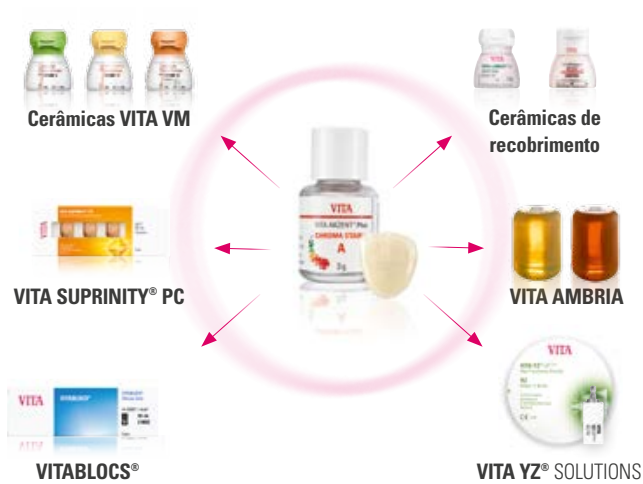

Aplicação de CHROMA STAINS sobre um substrato definido

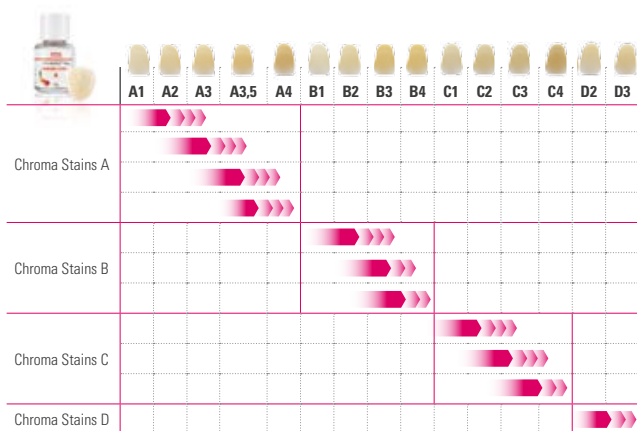

**Observe:** uma mudança de cor só é possível dentro de um mesmo grupo de cores. Os VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS foram desenvolvidos para intensificar o cor dentro de um mesmo grupo de cores. Dependendo da consistência da mistura, a intensidade da pigmentação varia. Quanto mais espessa a consistência, mais é possível modificar a restauração cromaticamente.

## VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

### Exemplo de utilização de uma única restauração na região anterior



**1** Determinação da cor



A cor da restauração não se integra como dente residual



**2** Aplicação do CHROMA STAINS  
Queima de fixação de pigmento ou queima de combinação com VITA AKZENT Plus GLAZE (ver tabela de queima)




Adaptação perfeita da cor da restauração na dentição residual


## Controle da cromaticidade

### Consistência fina



### Consistência espessa

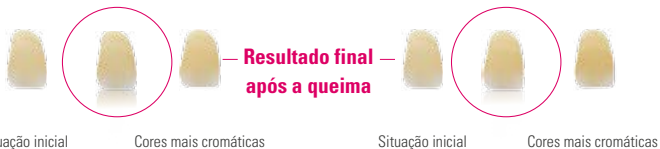

 **Observação:** evite a formação de poças. Caso queira a restauração claramente mais cromática, recomendamos que isso seja executado em duas queimas.

\* A consistência do VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS Paste corresponde a 1:2.

## VITA AKZENT® Plus – Tabelas de queima

### Ciclo de queima recomendado

#### QUEIMA DE GLAZE PÓ – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE LT, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Presec. °C	→ min.*	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT/ST/XT	400	4.00	5:37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600**
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC com GLAZE LT Powder	400	4.00	-	50	750	1.00	-	500**
VITA AMBRIA GLAZE LT	400	6.00	4:22	80	750	1.00	-	500**
Queima de fixação de pigmentos	500	4.00	2:30	80	700	1.00	-	-

\*) No caso de queimas de pasta, o tempo de pré-aquecimento deve ser aumentado de 4 minutos para 6 minutos (VITA LUMEX AC: 8 minutos).

\*\*) Recomenda-se para a última queima planejada da cerâmica de recobrimento um resfriamento prolongado até que a respectiva temperatura seja atingida. A posição do elevador nos aparelhos VITA VACUMAT deverá ser >75%. O material de queima deve ser protegido contra a incidência de ventilação direta.



**!** **Atenção:** todos os tipos de restauração também podem ser glazeados com VITA AKZENT Plus GLAZE LT. Neste caso, você pode reduzir a temperatura em até 750°C.





## HOTLINE TÉCNICA

Questões a respeito das soluções de produtos VITA?  
Os **experientes técnicos em prótese dentária**  
e **consultores técnicos** esclarecem suas dúvidas:

- ▶ **Telefone: +49 (0) 7761/562222**
- ▶ **E-mail: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **das 8h às 17h CET**



## SUPOORTE ONLINE

Questões sobre o processamento e as soluções de produtos?  
Você encontra respostas competentes online em forma de **FAQs**,  
**vídeos e unidades eletrônicas de aprendizagem**.

Demais informações detalhadas, entre outras, você encontra no  
completo e abrangente Manual de Instruções VITA AKZENT Plus.

- ▶ **[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **[www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)**



CE 0124



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49 7761 562-0 · Fax +49 7761 562-299  
Hotline: Tel. +49 7761 562-222 · Fax +49 7761 562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)