

# VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER

Quickstart Guide



WAK-unabhängige Malffarben  
zur Steuerung des Chromas

VITA – perfect match.

**VITA**

# VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER – FACTS & FEATURES


## CHROMA STAINS sind:

- WAK-unabhängige Keramikalfarben für alle gängigen\* Verblendkeramiken, monolithische Zirkondioxid-, Silikat-, oder Feldspatkeramiken

## Mit CHROMA STAINS profitieren Sie von:

- einfacher Chromaanpassung in den zugehörigen Helligkeitsgruppen
- top Verarbeitungseigenschaften wie einfacher Applikation
- höchstethischen Ergebnissen durch Oberflächenbemalung

## SYSTEMKOMPONENTEN

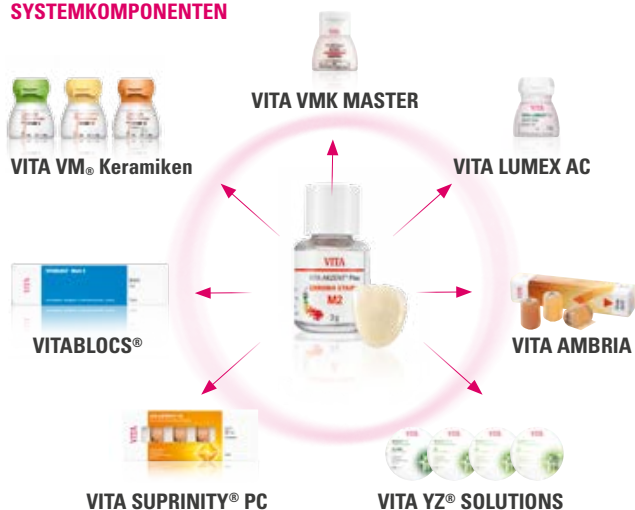

\*) VITA Verblendkeramiken, VITA Glaskeramiken, VITA YZ, VITABLOCS.

## VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER

### Einsatz der CHROMA STAINS 3D-MASTER auf einem definierten Untergrund



<b>CHROMA STAINS L</b>		2L1.5 → 2L2.5	3L1.5
<b>CHROMA STAINS M2</b>		1M1 → 1M2	2M1 → 2M2
<b>CHROMA STAINS M3</b>			2M2
<b>CHROMA STAINS R</b>		2R1.5 → 2R2.5	3R1.5

### ! Bitte beachten:

\* Bitte mischen Sie in der 4. Helligkeitsgruppe CHROMA STAINS INTENSE ORANGE (CSIO) in die entsprechenden CHROMA STAINS ein (Mischungsverhältnis 1:5).

## Steuerung des Farbtons

- Sie haben die Möglichkeit alle Farbtöne rötlicher oder gelblicher anzupassen, indem Sie die Farben untereinander mischen (Mischungsverhältnis 1:1).

**Zum Beispiel:** Um den Farbton 2M2 gelblicher anzupassen, mischen Sie CSM3 und CSL im Mischungsverhältnis 1:1 und erhalten damit den Farbton 2L2.5.



→ 3L2.5	4L1.5*	→ 4L2.5*	
3M1 → 3M2	4M1* → 4M2*	5M1 → 5M2	
→ 2M3	3M2 → 3M3	4M2* → 4M3*	5M2 → 5M3
→ 3R2.5	4R1.5*	→ 4R2.5*	

 Anwendungsbeispiel anhand einer einzelnen Frontzahnrestauration



**1** Farbnahme



Restauration fügt sich farblich  
nicht in Restzahngebiss ein



**2** Applikation CHROMA STAINS  
Malfarbenfixierbrand oder Kombinationsbrand mit  
VITA AKZENT Plus GLAZE (siehe Brenntabelle)



Perfekte Farbanpassung  
der Restauration am Restzahnbestand

## VITA AKZENT® Plus – Brenntabellen

### Empfohlene Brandführung

**POWDER Glanzbrand** – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Vt. °C	min.*	↗ min.	↗ °C/min.	Temp ca. °C	min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5.37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT	400	4.00	5.37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-	600*
VITA VM 11	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC GLAZE LT	400	6.00	7.00	50	750	1.00	-	500*
Malfarbenfixierbrand	500	4.00	2.30	80	700	1.00	-	-
VITA AMBRIA Glaze LT	400	6.00	4.22	80	750	1.00	-	500*
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder	400	4.00	7.00	50	750	1.00	-	500*

Bei Pastenbränden ist die Vorwärmzeit von 4 Min. auf 6 Min. zu erhöhen.

- \*) Die Langzeitabkühlung bis zur entsprechenden Temperatur ist eine Empfehlung für den jeweils letzten geplanten Verblendkeramikbrand. Die Liftposition bei VITA VACUMAT Geräten sollte dabei >75% sein. Das Brenngut muss vor direkter Luftzufuhr geschützt werden.



- ! Bitte beachten:** Alle Restaurationstypen können ebenfalls mit VITA AKZENT Plus GLAZE LT glasiert werden. In diesem Fall können Sie die Temperatur auf bis zu 750 °C herabsetzen.





## TECHNISCHE HOTLINE

Fragen rund um VITA Produktlösungen?  
Erfahrene Zahntechniker und Technikberater  
beantworten sie unter:

- ▶ **Phone +49 (0)7761/562 222**
- ▶ **Mail [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **8.00 bis 17.00 Uhr CET**



## ONLINE-SUPPORT

Fragen rund um die Verarbeitung und zu Produktlösungen?  
Kompetente Antworten finden Sie online in Form von **FAQs**,  
**Videos und elektronischen Lerneinheiten**.

Weitere, detaillierte Informationen finden Sie u.a. in der  
komplett umfassenden VITA AKZENT Plus Verarbeitungsanleitung.

- ▶ **[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **[www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)**

# CE 0124

MD



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)