

Petits coups de pinceau.
Grands effets.



VITA AKZENT® LC

Maquillants composites
 photopolymérisables destinés
 à la caractérisation esthétique
 des restaurations dentaires.



Caractérisation

VITA AKZENT® LC

Système de colorants/glaçage photopolymérisable.



Les produits VITA AKZENT LC sont des maquillants composite photopolymérisables pour la reproduction d'effets de couleurs individuels et pour la mise en œuvre de corrections de couleurs. Outre leur diversité, ces colorants séduisent par une application efficace et précise de la couleur et une stabilité fiable de la couleur et du brillant.

Les colorants VITA AKZENT LC sont universels et conviennent parfaitement pour la caractérisation extraorale des prothèses dentaires en

- céramique hybride
- résine composite CFAO
- résine composite cosmétique
- bases prothétiques
- polymères acryliques d'impression 3D
- dents artificielles

En outre, ils peuvent être utilisés de manière optimale pour la caractérisation interne dans la technique de stratification de résine.

Fiabilité

Reproduction fiable et fidèle au naturel des facettes colorées de la denture naturelle grâce à divers effets colorés brillants et à un traitement intuitif.

Simple

Modification de la couleur d'une grande simplicité d'un seul coup de pinceau grâce aux couleurs chromatiques pour le contrôle systématique de la chromaticité et esthétique optimale de la gencive.

Efficacité

Efficacité du traitement grâce à des effets de couleurs précis ou des couleurs appliquées en surface avec des viscosités idéalement adaptées.



Dents artificielles

Matériau d'impression 3D

Base prothétique numérique/analogique

Résine composite d'incrustation

Résine composite CFAO

Céramique hybride

Effets fidèles à l'original.

Esthétique blanche/rouge naturelle

Pour l'individualisation chromatique de bases prothétiques, il est possible d'utiliser les produits VITA AKZENT LC EFFECT STAINS. Les produits EFFECT STAINS sont idéaux pour permettre une reproduction fidèle au rendu naturel de la gencive.


Les masses sont particulièrement fluides et se prêtent donc parfaitement à la précision d'application. [L'utilisation est très simple : les détails figurent dans le mode d'emploi imprimé n° 10748.](#)



Individualisation diversifiée

Les produits VITA AKZENT LC EFFECT STAINS sont des couleurs polyvalentes qui permettent une reproduction fidèle des effets, au rendu naturel, par exemple dans des cas de décolorations de

collets/fissures dentaires, de zones d'émail translucides, de calcifications et bien plus encore.

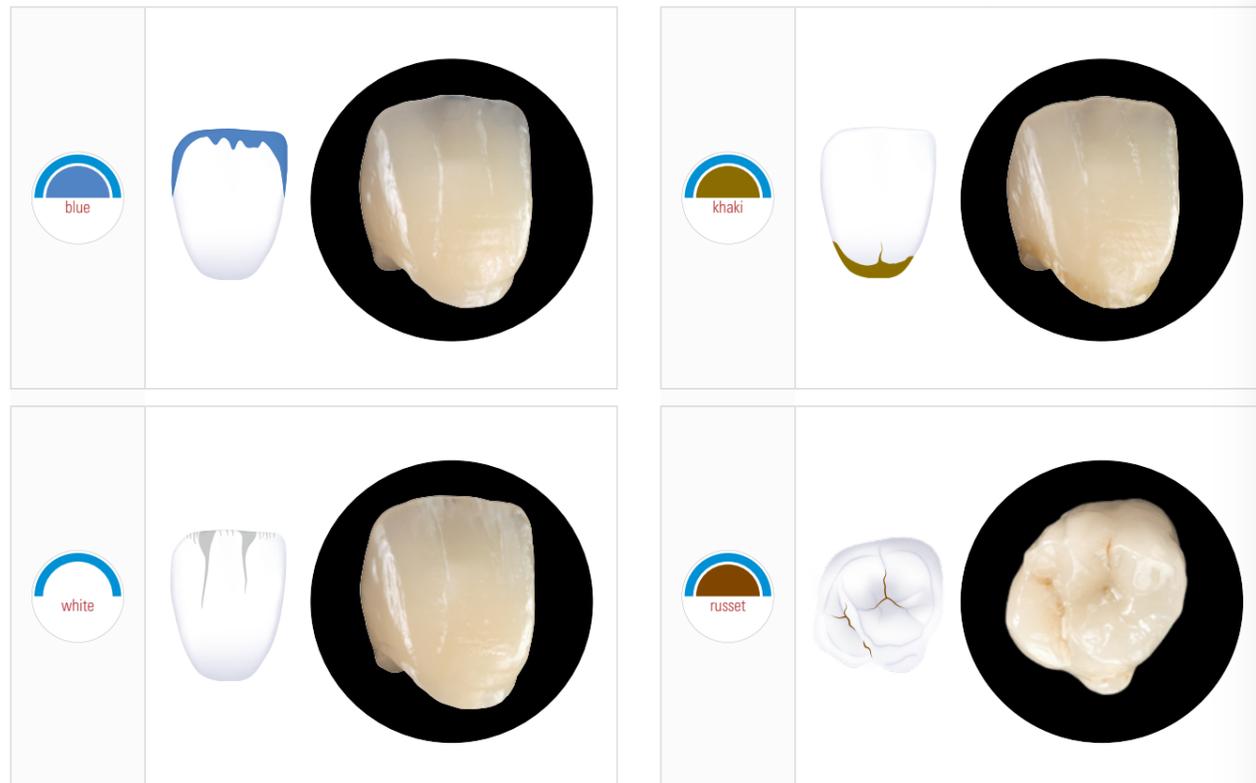

Correction de couleur fiable pour une correspondance des couleurs optimale.

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS

Les produits VITA AKZENT LC CHROMA STAINS servent à intensifier systématiquement la couleur au sein d'un groupe de colorants.

VITA classical A1–D4

Couleurs	
	A1 A2 A3 A3.5 A4
	B1 B2 B3 B4
	C1 C2 C3 C4
	D2 D3

PERFECT MATCH



Mauvaise correspondance des couleurs



Correction de couleur avec
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS



Correspondance parfaite des
couleurs



En apprendre plus dans les tutoriels
vidéos : [www.vita-zahnfabrik.com/
tutorial/akzentlc/all/ifu/correctionc](http://www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/akzentlc/all/ifu/correctionc)

Faits et preuves.

Liaison cohésive

Test d'adhérence

VITA AKZENT LC, VITA

OPTIGLAZE color, GC



Prototypes : dents artificielles VITAPAN maquillées avant simulation de vieillissement

Simulation de vieillissement
par des cycles thermiques
(5 000 cycles, 5 °C/55 °C)



Résultat : dents artificielles VITAPAN maquillées après simulation de vieillissement

Source : examen interne, VITA R&D, rapport 0628/19, 03/20,
Dr M. Gmehling ([1] voir verso du prospectus)

Application point par point des couleurs

VITA AKZENT LC propose des colorants stables et à viscosité probante pour une application précise et pointue du colorant pour la reproduction fidèle de toutes les caractéristiques individuelles des couleurs.

Test de stabilité

VITA AKZENT LC (white)



1. Application du colorant sur la plaque en verre



2. Contrôle de la stabilité par inclinaison de la plaque

Source : examen interne, VITA GP, rapport 0478/21, 10/21,
H. Kimmich ([2] voir verso du prospectus)

Grande résistance.


VITA AKZENT LC se distingue par une surface homogène qui garantit une excellente résistance à la décoloration.

Lors des tests, le matériau a montré une excellente stabilité des couleurs après 12 semaines de stockage dans l'eau, le thé et le café. VITA AKZENT LC permet une reproduction particulièrement remarquable des couleurs et une haute stabilité du brillant grâce à


une matrice polymère renforcée par des charges de silice.

En outre, il a montré un excellent niveau de brillance lors du test d'abrasion à la brosse à dents après 20 heures d'usure simulée (ce qui correspond à 200 jours de brossage des dents à raison de 2 x 3 minutes par jour).

Excellente résistance à la décoloration

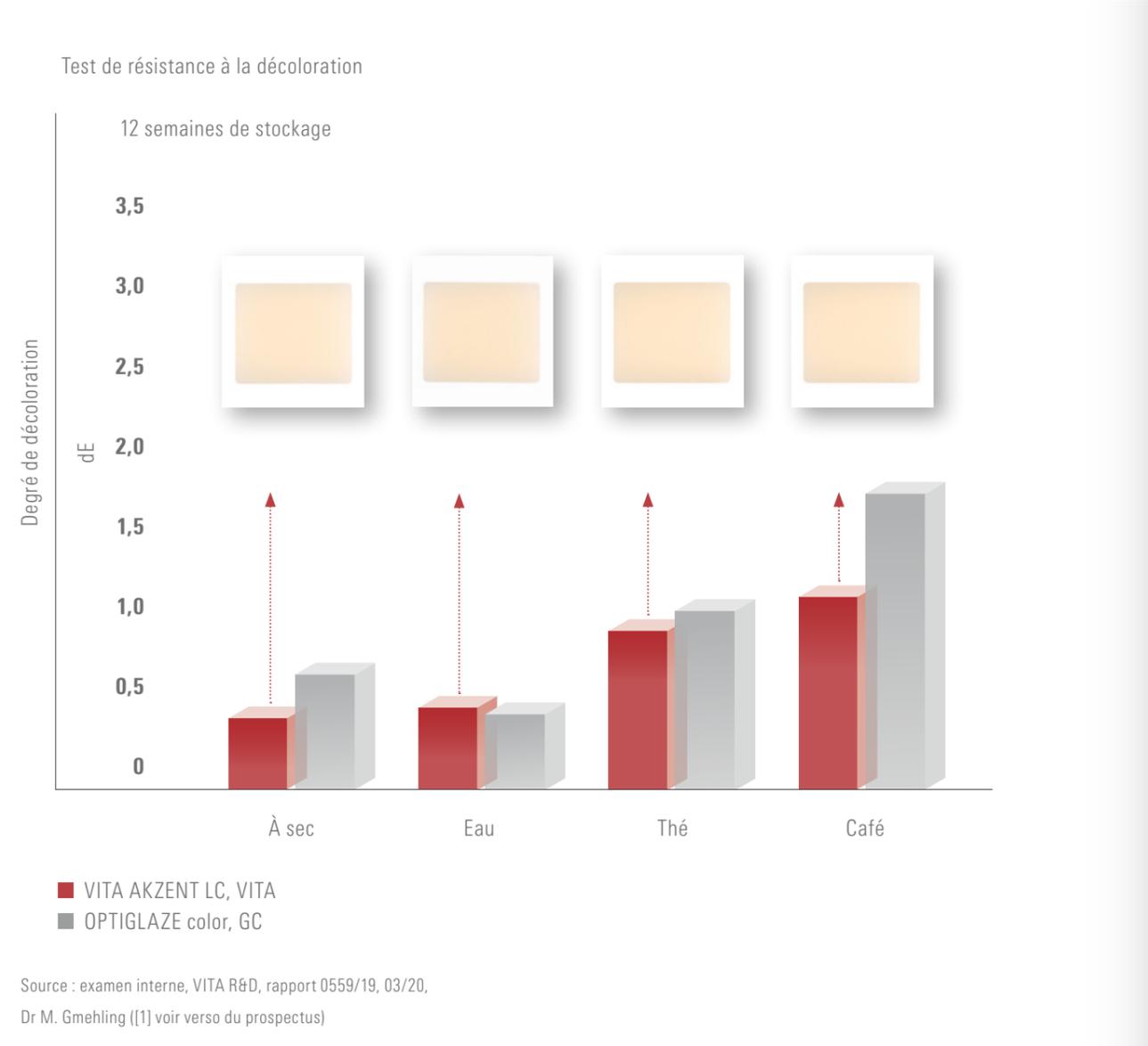

Grande résistance à l'usure et stabilité du brillant

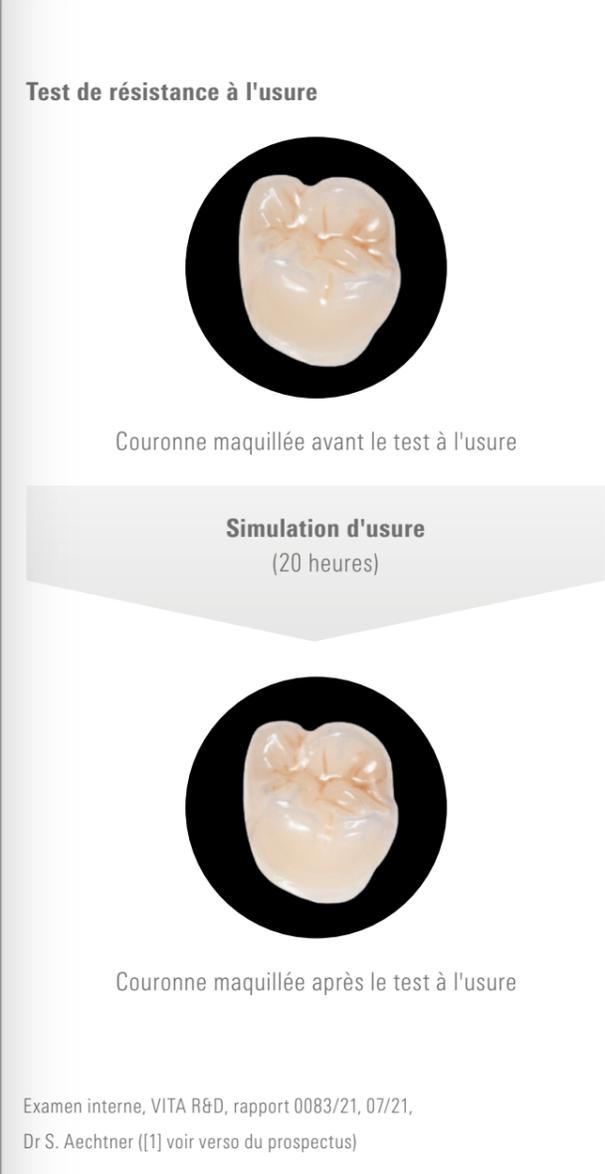


Aperçu de l'offre et des variantes de couleurs.

Aperçu de la gamme VITA AKZENT® LC

VITA AKZENT® LC EFFECT STAINS



Pour la fidélité de reproduction des caractérisations/effets individuels

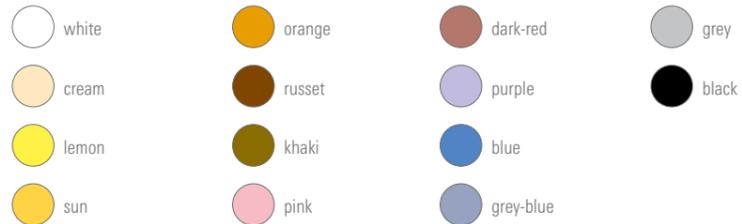

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS



Pour l'augmentation systématique de la chromaticité

VITA Classical A1-D4



VITA SYSTEM 3D-MASTER



VITA AKZENT® LC GLAZE



Pour un scellement de surface durablement brillant



VITA AKZENT® LC COMPONENTS

Composants du système idéalement adaptés pour une mise en œuvre fiable

- Cleaner
- Pinceau à colorant, micro-brosses
- Plaque de mélange

Aperçu de la gamme VITA AKZENT® LC

Coffret de base VITA AKZENT® LC

STANDARD KIT

Pour la reproduction des effets



Contenu

- 6 EFFECT STAINS (white, grey-blue, blue, orange, khaki, russet)
- 1 GLAZE
- Accessoires : nettoyant, pinceau à colorant, micro-brosses, plaque de mélange

Coffrets complémentaires VITA AKZENT® LC

EXPERT KIT CLASSICAL

Pour la reproduction des effets et la correction de couleur



Contenu

- 8 x EFFECT STAINS (cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black)
- 4 CHROMA STAINS classical
- 1 GLAZE
- Accessoires : nettoyant, pinceau à colorant, micro-brosses, plaque de mélange

EXPERT KIT 3D-MASTER

Pour la reproduction des effets et la correction de couleur



Contenu

- 8 x EFFECT STAINS (cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black)
- 4 CHROMA STAINS 3D-MASTER
- 1 GLAZE
- Accessoires : nettoyant, pinceau à colorant, micro-brosses, plaque de mélange

GINGIVA KIT

Pour l'individualisation de la base prothétique



Contenu

- 4 x EFFECT STAINS (cream, pink, dark red, purple)
- 1 GLAZE
- Accessoires : nettoyant, 1 pinceau à colorant, micro-brosses, palette de mélange

Des solutions adaptées en cours de processus.



Détermination de la couleur de dent

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE, VITA classical A1-D4, VITA Toothguide 3D-MASTER



Fabrication de prothèse dentaire

VITA ENAMIC, résine composite CFAO, résine composite cosmétique, bases prothétiques, VITA VIONIC SOLUTIONS, dents artificielles VITA



Caractérisation / Glaçure*

VITA AKZENT LC



Polissage

VITA Polish Hybrid



Fixation

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS



Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire



Assistance téléphonique et support

Téléphone +49 7761 562-890
Fax +49 7761 562-233
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Assistance téléphonique technique

Téléphone +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Assistance téléphonique technique VITA Amérique du Nord

États-Unis : +1 800-828-3839
Assistance technique États-Unis :
+1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Assistance téléphonique VITA Canada

Canada : +1 800-263-4778
Assistance technique Canada :
+1 800-324-6224

N.B.

Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Publication de cette brochure produit : 2025/03

Cette nouvelle édition la brochure du produit rend caduques toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifié et les produits suivants portent le marquage **CE 0124** : VITA AKZENT® LC

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.

Rx uniquement **MD**

Références

Recherches internes, VITA R&D

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Département recherche et développement
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Allemagne
Dr Berit Gödiker, directrice de projet R&D
VITA, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Données de test détaillées

Voir documentation technique scientifique
VITA AKZENT® LC, téléchargement
via www.vita-zahnfabrik.com



Pour de plus amples informations sur VITA AKZENT LC, scanner le code QR.
<https://www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc>



VITA AKZENT® LC

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Allemagne

Téléphone : +49 7761 562-0
Assistance téléphonique : +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

