

VITA

Guía de inicio rápido



VITA Easyshade® V

Determinación óptima del color,
seguridad máxima.





Índice

1 Instalación

1.1 Instalación de la aplicación VITA mobileAssist+ 4

2 Permisos

2.1 Concesión de permisos 5

2.2 Concesión de permisos para ubicación y Bluetooth 5

2.3 Concesión de permiso para la cámara 6

3 Bluetooth

3.1 Activación del Bluetooth en el VITA Easyshade V 8

3.2 Activación del Bluetooth en el iPhone 8

4 Conexión

4.1 Conexión del VITA Easyshade V a la aplicación 9

5 Transmisión de los datos de medición

5.1 Transmisión de los datos de medición 10

1. Instalación

1.1 Instalación de la aplicación VITA mobileAssist+

- Abra el App Store en su iPhone o iPad.
- Busque **“VITA mobileAssist+”**.
- Descargue e instale la aplicación.

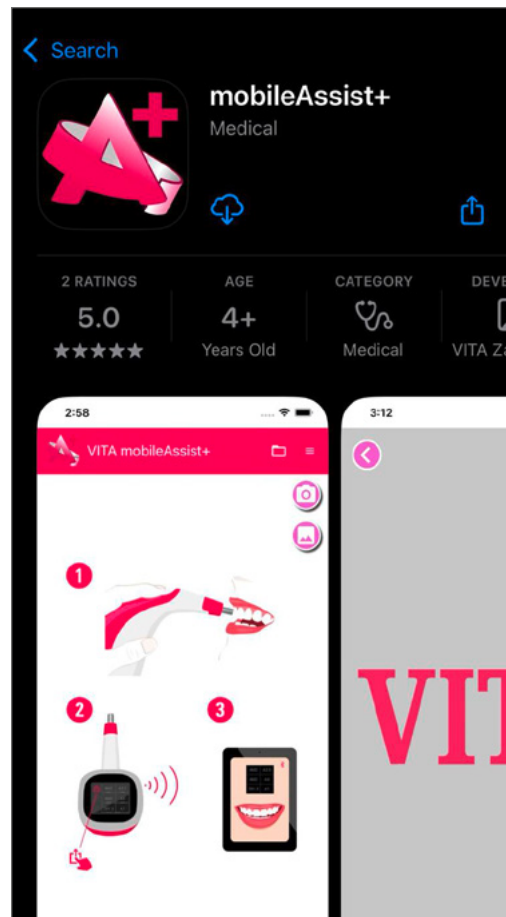


Figura 1: Instalación de la aplicación VITA mobileAssist+.

2. Concesión

2.1. Concesión de permisos

La primera vez que inicie la aplicación VITA mobileAssist+ se le pedirán permisos de acceso. Estos permisos son necesarios para que la aplicación pueda detectar su VITA Easyshade V por Bluetooth y utilizar capturas de cámara para mediciones del color.

2.2. Concesión de permiso para Bluetooth

- Tan solo la primera vez que se inicia la aplicación aparece una ventana con la pregunta: **“¿Tiene ‘mobileAssist+’ permiso para buscar dispositivos Bluetooth?”**.
- Toque **“Permitir”** para que la aplicación pueda detectar su **VITA Easyshade V** a través de Bluetooth.

2. Concesión

2.3. Concesión de permiso para la cámara

- Al tocar el símbolo de cámara en la aplicación, se mostrará una ventana con el mensaje: **“mobileAssist+ quiere acceder a la cámara”**.
- Toque **“Permitir”** para que la aplicación pueda acceder a la cámara y tomar fotografías.

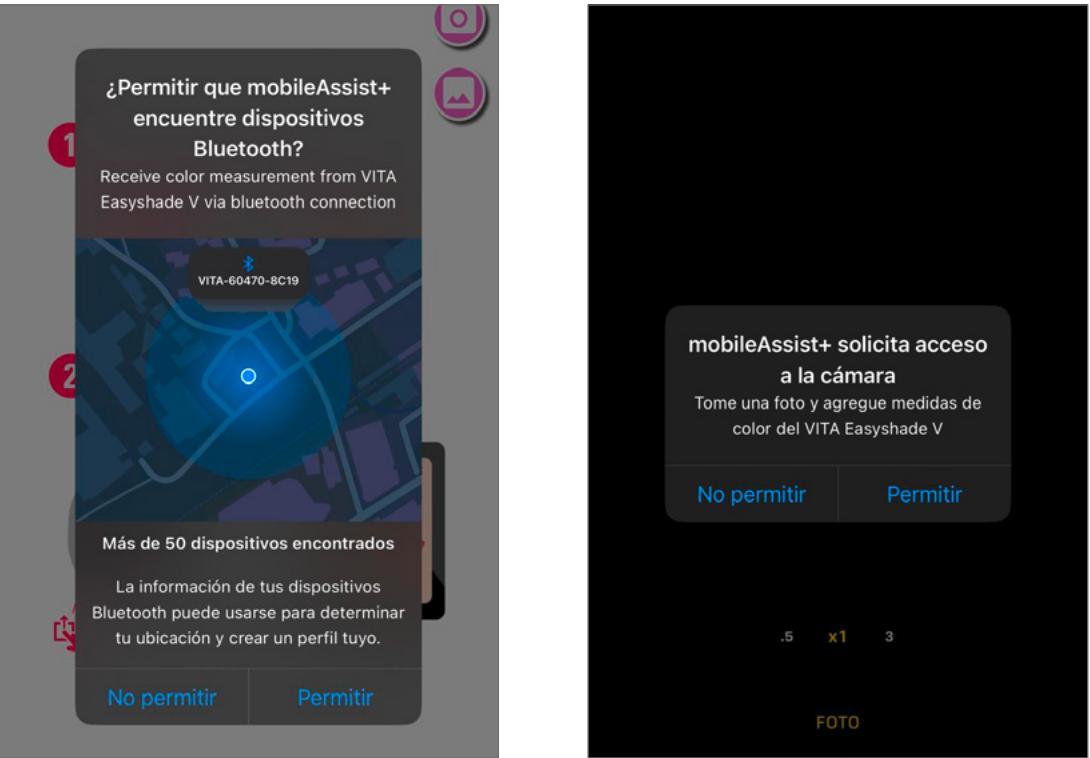


Figura 2: Concesión de permisos para Bluetooth y para la cámara.

Nota

En caso de que no haya concedido los permisos durante el primer inicio o al utilizar la cámara, podrá activarlos manualmente más adelante en los ajustes:

- Ajustes ⇒ Apps ⇒ mobileAssist+ ⇒ Activar Bluetooth.
- Ajustes ⇒ Apps ⇒ mobileAssist+ ⇒ Activar cámara.

O BIEN

- Ajustes ⇒ Privacidad y seguridad ⇒ Bluetooth ⇒ Activar mobileAssist+.
- Ajustes ⇒ Privacidad y seguridad ⇒ Cámara ⇒ Activar mobileAssist+.

Cerciórese de que estén activados los permisos para Bluetooth y para la cámara. Sin estos permisos, la aplicación no podrá comunicarse con su VITA Easyshade V ni tomar fotografías.

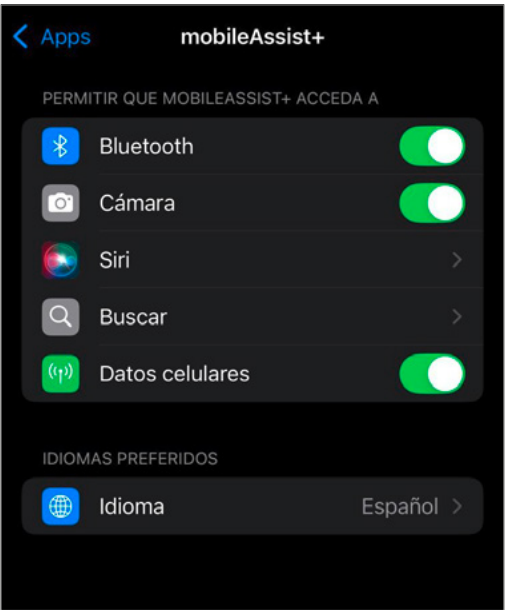


Figura 3: Activación manual.

3. Bluetooth

3.1. Activación del Bluetooth en el VITA Easyshade V

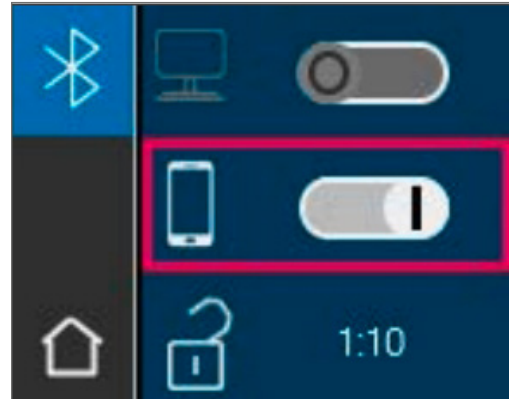


Figura 4: Activación del Bluetooth en el VITA Easyshade V.

- Encienda su **VITA Easyshade V**.
- Acceda al menú de Bluetooth del aparato.
- Para activar el Bluetooth, deslice hacia la derecha el mando deslizante del medio.
- Se abrirá automáticamente el icono del candado y el aparato permanecerá detectable durante dos minutos.
- Si el icono del candado permanece cerrado, tóquelo para hacer detectable el aparato.

3.2. Activación del Bluetooth en el iPhone



Figura 5: Activación del Bluetooth en el iPhone.

- Abra los ajustes de su iPhone.
- Acceda a Bluetooth y cerciórese de que esté activado.

4. Conexión

4.1. Conexión del VITA Easyshade V a la aplicación

- Inicie la aplicación VITA mobileAssist+.
- Toque la imagen del VITA Easyshade V situada en la parte inferior.
- Seleccione su aparato de la lista. ⇒ Encontrará el número de serie en la base de la estación de carga.
- Espere hasta que se haya establecido la conexión.


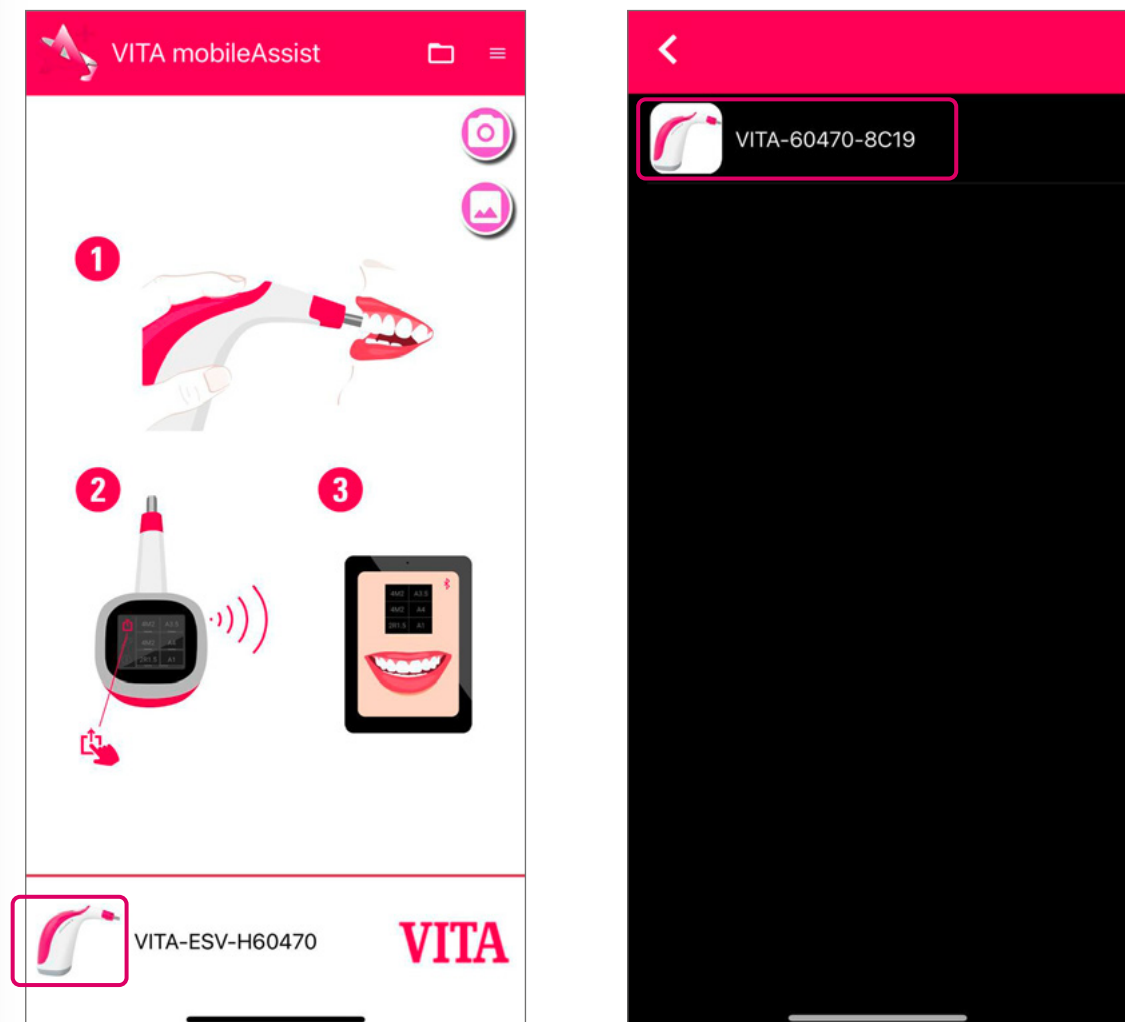


Figura 6: Conexión del VITA Easyshade V a la aplicación.

5. Transmisión de los datos de medición

5.1. Transmisión de los datos de medición

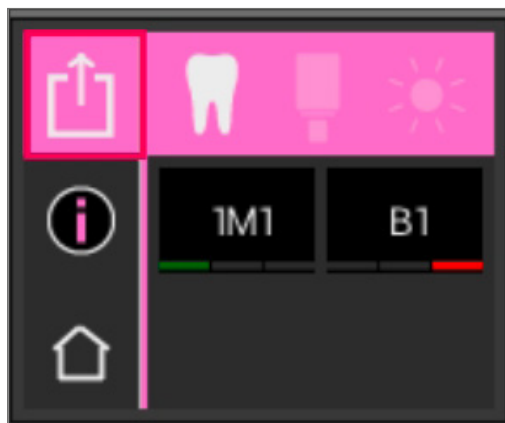

- Lleve a cabo una medición del color o toque el icono del resultado de medición.
- El símbolo de compartir indicará la existencia de una conexión activa.
- **Toque** el icono de compartir para transmitir los datos de medición.

Figura 7: Transmisión de los datos de medición.

Nota

En caso de que un dispositivo iOS o Android previamente vinculado al VITA Easyshade V todavía se encuentre dentro del alcance del Bluetooth, esto puede afectar negativamente a la conexión con un nuevo dispositivo.

iOS: Ajustes ⇒ Bluetooth ⇒ Localizar VITA Easyshade en la lista “Mis dispositivos” ⇒ Tocar el botón (i) ⇒ Seleccionar “Omitir dispositivo” ⇒ Desactivar brevemente el Bluetooth y volver a activarlo ⇒ Volver a intentar establecer la conexión con un nuevo dispositivo

Android: Ajustes ⇒ Bluetooth ⇒ Localizar VITA Easyshade en la lista “Dispositivos vinculados” ⇒ Eliminar el dispositivo o seleccionar “Olvidar” ⇒ Desactivar brevemente el Bluetooth y volver a activarlo o reiniciar el dispositivo ⇒ Volver a intentar establecer la conexión con un nuevo dispositivo

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

