

Comando del forno semplice

Immagine	Forni	Numero di matricola	 VITA vPad excellence numero di matricola > 2820170051 VITA vPad PRO numero di matricola > 3720250049	 VITA vPad comfort numero di matricola > 3020180051 VITA vPad LITE numero di matricola > 3620250049
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore vPad (D63100) al VITA vPad excellence e alla presa di rete superiore del forno.	✓ Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore vPad (D63100) al VITA vPad comfort e alla presa di rete superiore del forno.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400		
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987		
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Collegare VITA vPad excellence alla presa di rete inferiore del forno.	✓ Collegare VITA vPad comfort alla presa di rete inferiore del forno.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401		
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✓	✓
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049		
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx	✓	✓ Possibile solo con VITA vPad LITE
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049		

Comando del forno multiplo

(Apparecchi non misti, costruiti prima del 2017 e dopo il 2017)

Immagine	Forni	Numero di matricola	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX I. Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno. Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore (D63100) a VITA SWITCHBOX I.	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX II. Collegare VITA SWITCHBOX II alla presa di rete superiore del forno. Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore (D63100) a VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400				
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX I. Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno. Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore (D63100) a VITA SWITCHBOX I.	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX II. Collegare VITA SWITCHBOX II alla presa di rete inferiore del forno.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✗	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049				
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✗	✓	✗	✗
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx				
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049				

* L'apparecchio collegato alla porta 1 deve essere sempre acceso.

Comando multiforno misto

(Apparecchi misti, costruiti prima e dopo il 2017)



VITA vPad excellence
numero di matricola < 2820170051



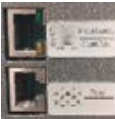
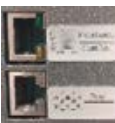
VITA vPad comfort
numero di matricola < 3020180051



VITA vPad excellence
numero di matricola > 2820170051
VITA vPad PRO
numero di matricola > 3720250049



VITA vPad comfort
numero di matricola > 3020180051
VITA vPad LITE
numero di matricola > 3620250049

Immagine	Forni	Numero di matricola	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX I.	✓ Collegare VITA vPad comfort a VITA SWITCHBOX II.	✓ Collegare VITA vPad comfort a VITA SWITCHBOX I.	✓ Collegare VITA vPad comfort a VITA SWITCHBOX II.	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX I. Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX II. Collegare la presa di rete superiore del forno alle porte 2-4 di VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400								
	VITA VACUMAT 6000 M/MP (DV6000Mxxx/DV6000MPxxx)	> 1320178854	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX II alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX I alla presa di rete superiore del forno.	Collegare VITA SWITCHBOX II alla presa di rete superiore del forno.	Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore (D63100) a VITA SWITCHBOX I.	Collegare la presa di rete inferiore del forno alla porta 1 di VITA SWITCHBOX II.		
		> 1820172401								
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX II. Collegare la presa di rete superiore del forno alle porte 2-4 di VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400								
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987						Collegare il forno alla porta 1 di VITA SWITCHBOX II.		
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049								
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049								
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX II. Collegare la presa di rete superiore del forno alle porte 2-4 di VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx								
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Collegare VITA vPad excellence a VITA SWITCHBOX II. Collegare la presa di rete superiore del forno alle porte 2-4 di VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049								

* L'apparecchio collegato alla porta 1 deve sempre essere acceso.