

VITA ENAMIC®



Kurzinformation

Stand: 11.13

Softwarevoraussetzungen

- Für die **CEREC Software > 4.0 und < 4.2** kann auf der Sirona-Website unter www.sirona.com/de/CERECdownloads ein **VITA Material Service Pack CEREC SW 4.0.x** heruntergeladen werden
- Für die **inLab Software > 4.0 und < 4.2** kann auf der Sirona Webseite unter www.sirona.com/de/inLabdownloads ein **VITA Material Service Pack inLab SW 4.0.x** heruntergeladen werden

Politur

Um VITA ENAMIC erfolgreich polieren zu können, wurden spezielle 2-stufige Poliersortimente entwickelt.

Hochglanz-Endpolitur bei niedrigster Drehzahl und ohne Wasserkühlung durchführen


VITA shade, VITA made.

VITA




Das jeweilige Material-Servicepack fügt die VITA ENAMIC Hybrid-Keramik zu dem Material-Menü hinzu und implementiert die Blockgröße und die speziellen Schleifparameter für dieses Material.

Um das Material auch mit der kleinen CEREC bzw. inLab Schleifeinheit und mit älteren Software-Versionen < 4.0 schleifen zu können, wählen Sie bitte VITABLOCS Mark II, I 14 bzw. I 10 aus.

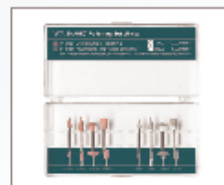

Art.-Nr. EENPSETC / VITA ENAMIC Polishing Set clinical / für das Winkelstück

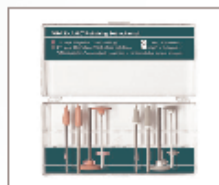

Art.-Nr. EENPSETT / VITA ENAMIC Polishing Set technical / für das Handstück

Schleifmittelzusatz Dentatec (bezogen auf einen vollen Tank)

- CEREC und inLab / 50 ml
- CEREC und inLab MC XL / 75 ml

Farbliche Charakterisierung

Zur farblichen Charakterisierung (Maltechnik) von Restaurationen aus VITA ENAMIC steht das speziell entwickelte VITA ENAMIC STAINS KIT mit 6 Farben und Zubehör zur Verfügung. Bitte beachten Sie die entsprechende Verarbeitungsanleitung.

Hinweis:

Restaurationen aus VITA ENAMIC dürfen während der Verarbeitung unter keinen Umständen gebrannt werden. Die farbliche Charakterisierung und Individualisierung erfolgt durch Polymerisation.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 | D-79704 Bad Säckingen | Germany
Tel. +49 (0) 7761 / 562-0 | Fax +49 (0) 7761 / 562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761 / 562-222 | Fax +49 (0) 7761 / 562-446
www.vita-zahnfabrik.com | info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik

Weitere ausführliche Verarbeitungshinweise (Verarbeitungsanleitung etc.) erhalten Sie unter www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Erfolg mit VITA ENAMIC!

Die VITA Zahnfabrik ist nach der Medizinprodukteverordnung zertifiziert und folgendes Produkt trägt die Kennzeichnung  0124 : VITA ENAMIC®



Art.-Nr. EENSTKIT / VITA ENAMIC Stains Kit



VITA shade, VITA made.

VITA

VITA ENAMIC®

Short instructions

Date of issue: 11.13

VITA shade, VITA made.

VITA



Software requirements

- For the **CEREC software > 4.0 and < 4.2**, you can visit the Sirona website at www.sirona.com/en/CERECdownloads to download a **VITA Material Service Pack CEREC SW 4.0.x**
- For the **inLab software > 4.0 and < 4.2**, you can visit the Sirona website at www.sirona.com/en/inLabdownloads to download a **VITA Material Service Pack CEREC SW 4.0.x**


Polishing

To allow VITA ENAMIC to be effectively polished, special 2-step polishing products were developed.

Perform the high-gloss final polish with the lowest possible rotational speed and without using water for cooling.



Product no. EENPSETC/VITA ENAMIC
Polishing Set clinical/for the angle
section

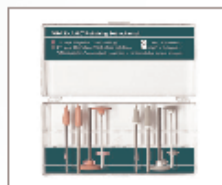

Product no. EENPSETT/VITA ENAMIC
Polishing Set technical/for the
handpiece

Each material service pack adds the VITA ENAMIC hybrid ceramic to the material menu and implements the block size and special milling parameters for this material.

In order to also mill the material with the small CEREC / inLab milling system and with older software versions < 4.0, select VITABLOCS Mark II, I 14 resp. I 10.

Dentatec milling additive, in relation to a full tank

1. CEREC and inLab/50 ml
2. CEREC and inLab MC XL/75 ml

Shade characterization

The specially-developed VITA ENAMIC STAINS KIT with 6 shades and accessories is provided for shade characterization (staining) of VITA ENAMIC restorations. The corresponding working instructions should be followed.

Note:

Under no circumstances should restorations made of VITA ENAMIC be fired during processing. A polymerization process is used for characterizing and individualizing the shade.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Postfach 1338 | D-79704 Bad Säckingen | Germany

Tel. +49 (0) 7761/562-0 | Fax +49 (0) 7761/562-299

Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 | Fax +49 (0) 7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com | info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik

Further detailed instructions for use (working instructions, etc.) are available from www.vita-enamic.com.

Thank you for your purchase – and for trusting VITA ENAMIC!

VITA Zahnfabrik is certified according to the Medical Device Directive and the following product bears the CE mark **CE 0124: VITA ENAMIC®**

Rx only



Product no. EENSTKIT/VITA ENAMIC
Stains Kit



VITA shade, VITA made.

VITA