


El camino seguro hacia una prótesis limpia

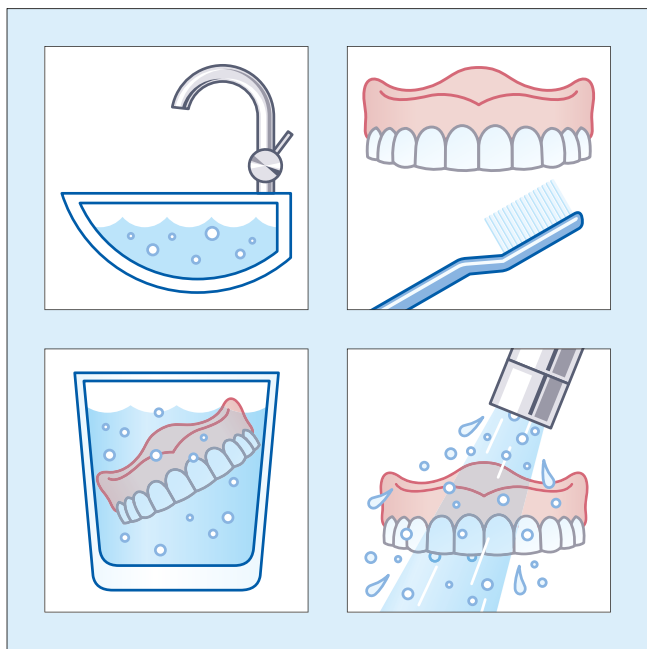

Versión 09.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Apreciado/a paciente:


Hoy ha recibido su nueva prótesis dental, por lo que deseamos agradecerle la confianza depositada en nosotros.

Un **equipo altamente cualificado formado por el odontólogo, la auxiliar y los protésicos dentales** ha confeccionado individualmente para usted su prótesis dental empleando los **mejores materiales y las tecnologías más avanzadas**.

Gracias a la utilización de dientes protésicos VITA, su prótesis dental le permitirá continuar luciendo una **sonrisa natural**. Disfrutará de una **funcionalidad excelente** y una **comodidad de uso extraordinaria**.

Para garantizar que pueda disfrutar de su prótesis dental durante el mayor tiempo posible, preservando su salud y sin sufrir ninguna molestia, en esta guía le ofrecemos algunas instrucciones para el cuidado. Si tuviera preguntas adicionales, no dude en contactar con nosotros en cualquier momento (**nuestros datos de contacto figuran en el dorso**).


Primer paso de limpieza: lavado

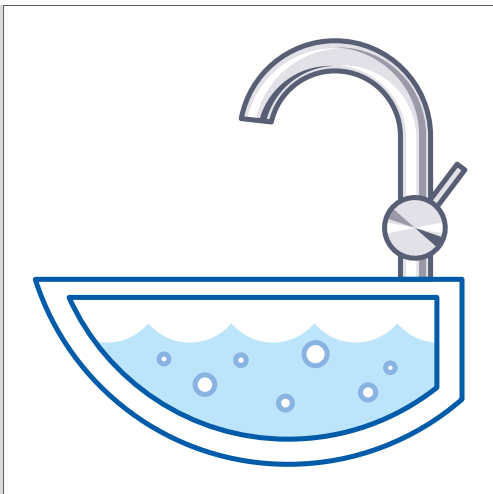

Como **protección contra la formación de depósitos** y para **prevenir inflamaciones**, limpie a fondo cada día toda la prótesis **por la mañana y por la noche con agua corriente.**

A fin de proteger al máximo la prótesis, recomendamos limpiarla en un lavamanos lleno de agua. Como alternativa, también puede colocar una toalla en el lavamanos.

Segundo paso de limpieza: limpieza y cepillado

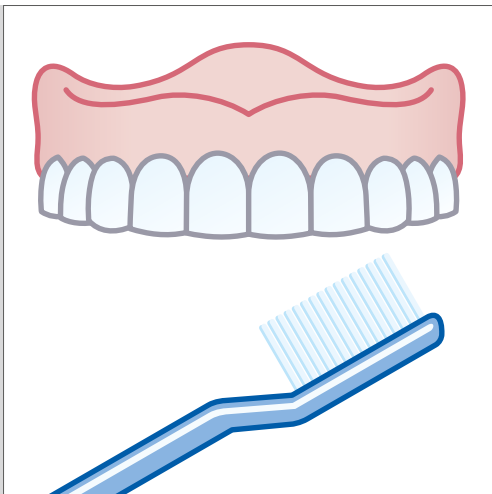


A continuación, sostenga la prótesis en la mano y cepíllela cuidadosamente **utilizando un cepillo suave**. Para ello están especialmente indicados los cepillos dentales manuales o los cepillos para prótesis dentales con **filamentos de nailon**.

Importante: cepille meticulosamente **todos los dientes**, prestando especial atención a los **espacios interdentales** y a todas las zonas en las que exista contacto con la encía o con los dientes naturales.

Utilice para la limpieza **agua caliente** y una **pasta dentífrica SIN partículas abrasivas**.

Tercer paso de limpieza: remojo

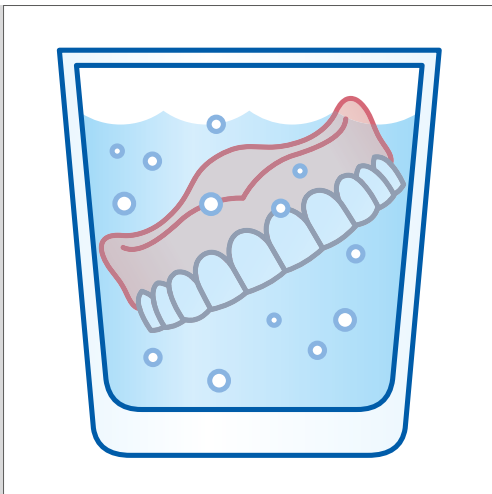

Después del cepillado, **aclare** de nuevo la prótesis con abundante **agua fría** y a continuación suméjala en un **recipiente** del tamaño suficiente **lleno de agua** para la **limpieza en profundidad**.

Si observara que se han formado depósitos pese a la limpieza regular, puede recurrir a un aparato de limpieza por ultrasonidos. Consulte a su odontólogo para obtener información al respecto. Además, es posible poner la prótesis en remojo durante diez minutos en una solución de vinagre al 5 – 10 %. A fin de poder garantizar la durabilidad de la prótesis de dientes VITA, le recomendamos prescindir de pastillas o soluciones de limpieza, algunas de las cuales son muy agresivas, y ceñirse a las instrucciones de limpieza aquí expuestas.

Cuarto paso de limpieza: aclarado



Antes del siguiente uso, vuelva a aclarar bien la prótesis **debajo del grifo**.

La limpieza regular, así como el control periódico por parte de su dentista, le permitirán mantener durante mucho tiempo la elevada calidad de su prótesis. Además, de este modo protegerá su salud y evitará los gastos de posibles reparaciones.

Le deseamos que disfrute de su prótesis durante mucho tiempo.



Reciba un cordial saludo de su odontólogo / protésico dental.

¡Estamos encantados de ayudarle!

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299

Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

 facebook.com/vita.zahnfabrik