
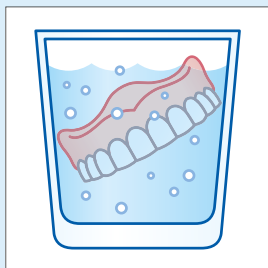
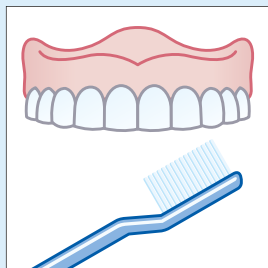


## Comment bien nettoyer votre prothèse

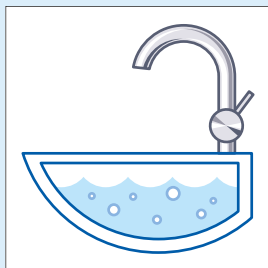

Édition 09.15

VITA shade, VITA made.

**VITA**



**Chère patiente, cher patient,**

nous vous avons posé aujourd'hui votre nouvelle prothèse - merci de votre confiance !

**Une équipe très qualifiée composée du dentiste, de l'assistante dentaire et des prothésistes** a conçu votre prothèse dans les **meilleurs matériaux et en faisant appel aux toutes dernières connaissances techniques.**

Grâce aux dents artificielles VITA votre prothèse met en valeur votre **sourire naturel**. Vous allez apprécier sa **remarquable fonctionnalité** et **son extraordinaire confort en bouche.**

Afin que vous puissiez profiter de votre prothèse, préserver votre santé et ne subir aucun désagrément, nous allons vous donner quelques conseils pour l'entretenir. Pour de plus amples questions, merci de nous contacter - **nos coordonnées figurent au dos de ce document.**


## Première étape du nettoyage : le rinçage



Pour **éviter les dépôts et les inflammations**, laver soigneusement votre prothèse **à l'eau courante deux fois par jour, le matin et le soir.**

Pour un nettoyage optimal, nous vous conseillons de plonger votre prothèse dans le lavabo rempli d'eau. Vous pouvez aussi déposer préalablement un gant au fond du lavabo.


## Deuxième étape : nettoyage et brossage

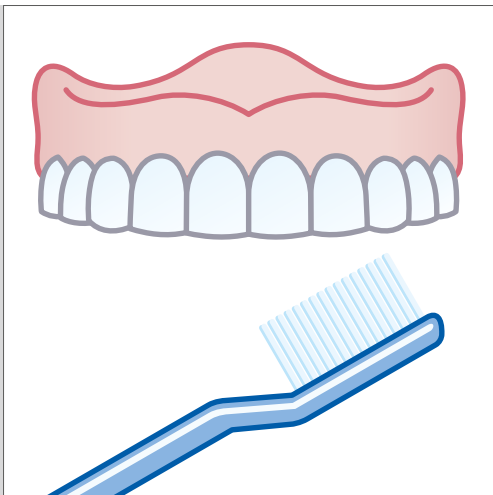

Prenez ensuite votre prothèse en main et nettoyez la doucement avec une **brosse souple**. Le mieux pour cela est d'utiliser des brosses à dents ou des brosettes à prothèses en **poils de nylon**.

**Important :** pensez à bien nettoyer **chacune des dents** et soyez particulièrement vigilant au niveau des **espaces interdentaires** et des zones en contact avec la gencive ou des dents naturelles. Pour le nettoyage utilisez de **l'eau chaude** et un **dentifrice SANS particules abrasives**.

## Troisième étape : le trempage

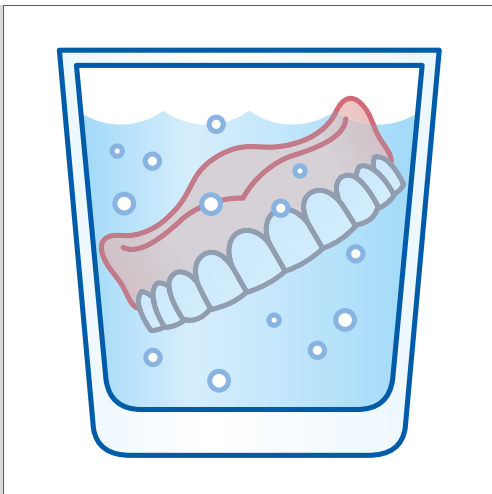

**Rincez** à nouveau votre prothèse **à l'eau froide** après le nettoyage et déposez la pour un **nettoyage en profondeur** dans un **réceptacle suffisamment grand et rempli d'eau**.

Si malgré un nettoyage régulier vous constatez des dépôts, vous pouvez utiliser un appareil de nettoyage aux ultrasons. Parlez-en à votre dentiste. Vous pouvez en complément faire tremper votre prothèse dans de l'eau vinaigrée à 5 - 10% pendant 10 minutes. Pour assurer la longévité de votre prothèse réalisée avec les dents VITA, nous vous conseillons de ne pas utiliser de pastilles ou de solutions de nettoyage qui sont parfois vraiment agressives. Suivez les conseils indiqués ici.


## Quatrième étape : le rinçage



**Avant de remettre votre prothèse, rincez la encore soigneusement à l'eau courante.**

En nettoyant régulièrement votre prothèse et en la contrôlant, vous avez la certitude de porter longtemps une prothèse de grande qualité. En procédant ainsi vous préserverez votre santé et vous éviterez d'éventuels frais de réparation.

**Cordialement.**



Avec l'aimable coopération de votre dentiste/prothésiste

**Nous sommes là pour vous conseiller !**

**VITA**

---

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299

Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446

[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)