
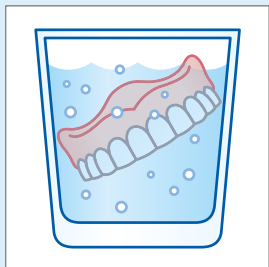
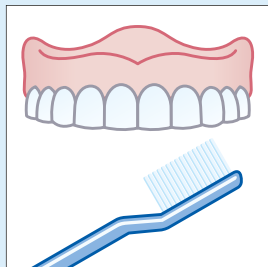


A maneira mais segura de se limpar próteses

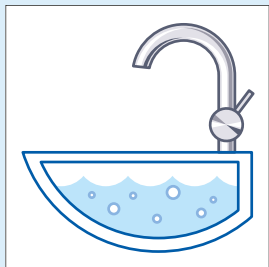

Edição 01.16

VITA shade, VITA made.

VITA

Querido(a) paciente,

hoje você adquiriu suas novas próteses dentárias da VITA – muito obrigado por sua confiança!

Uma **equipe altamente qualificada de dentistas, auxiliares de dentistas e técnicos protésicos** fez sua prótese dentária com os **melhores materiais** e a personalizou para você **de acordo com as descobertas mais recentes neste campo.**

Graças à utilização dos dentes artificiais da VITA, sua prótese dentária proporcionará a você o seu **sorriso natural** de sempre. **Excelente funcionalidade e conforto excepcional** é o que você pode esperar de sua nova prótese.

Para que você possa desfrutar mais de sua prótese dentária, proteger sua saúde e para que não haja nenhuma complicação, oferecemos aqui a você algumas instruções de cuidados. Para demais dúvidas, entre em contato conosco a qualquer momento - **nossas informações de contato encontram-se no verso.**


Primeiro passo de limpeza: enxágue



Para **proteger contra acúmulos** e **evitar inflamações**, limpe sua prótese cuidadosamente todos os dias **pelas manhãs e noites** sob **água corrente**.

A fim de proteger a prótese de forma ideal, recomendamos a limpeza em uma pia cheia de água. Alternativamente, você também pode colocar uma toalha na base da pia.

Segundo passo de limpeza: limpeza e escovação

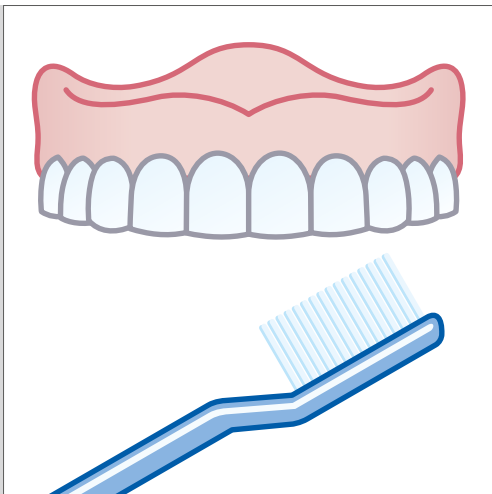


Em seguida, com a prótese na mão, limpe-a **com uma escova macia** suavemente. Escovas de dentes manuais ou escovas para próteses com **cerdas de nylon** são as mais adequadas para isso.

Importante: escove **todos os dentes** cuidadosamente, restando atenção especial às **lacunas** e todos os lugares onde há contato com a gengiva ou dentes naturais.

Utilize para a limpeza **água morna** e um **creme dental SEM partículas abrasivas**.

Terceiro passo de limpeza: deixar de molho

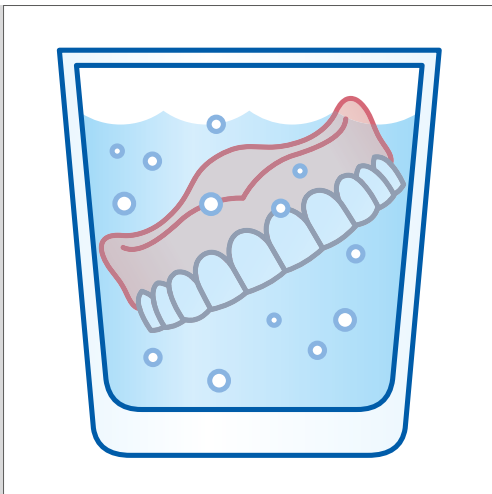

Enxágue a prótese após a escovação novamente cuidadosamente **com água fria** e coloque-a após a **limpeza profunda** em um **recipiente suficientemente grande, cheio de água.**

Se, apesar de limpeza regular, você notar algum tipo de acúmulo, então poderá recorrer a um limpador ultrassônico. Converse sobre isso com seu dentista. Além disso, é possível fazer um banho de 10 minutos numa solução de vinagre de 5-10%. A fim de garantir a longevidade das próteses com dentes artificiais VITA, encorajamos você a evitar o uso de certos comprimidos de limpeza ou soluções muito agressivas, e observar as instruções de limpeza mencionadas aqui.

Quarto passo de limpeza: enxáguar novamente



Antes da próxima utilização, enxágue novamente a prótese com água corrente.

Limpeza e controle regulares com seu dentista garantirão que a alta qualidade de sua prótese seja mantida por muito tempo. Além disso, você protegerá desta forma a sua saúde e prevenirá possíveis custos de reparação.

Desejamos a você sempre uma boa mordida!



Com os cumprimentos de seu dentista / técnico de prótese dentária

Estamos felizes em ajudá-lo!

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299

Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

 facebook.com/vita.zahnfabrik