

Chère cliente, cher client,

afin que vous puissiez mettre à jour le logiciel de votre VITA Easyshade V, nous vous indiquons ci-après la procédure à suivre.

Pour toute question concernant cette mise à jour, veuillez contacter le SAV des appareils VITA de votre région. Vous pouvez aussi joindre le SAV VITA par :

- Tél. : +49 (0)77 61 / 562 – 101, -105, -106 ou -114
- Fax : +49 (0)77 61 / 562 – 102
- Courriel : [instruments-service@vita-zahnfabrik.com](mailto:instruments-service@vita-zahnfabrik.com)

## **1. Conditions à remplir pour le téléchargement et l'installation**

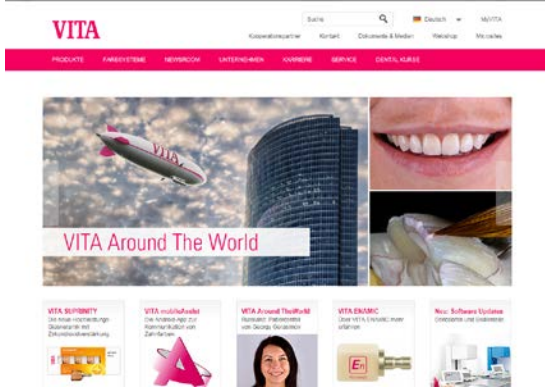
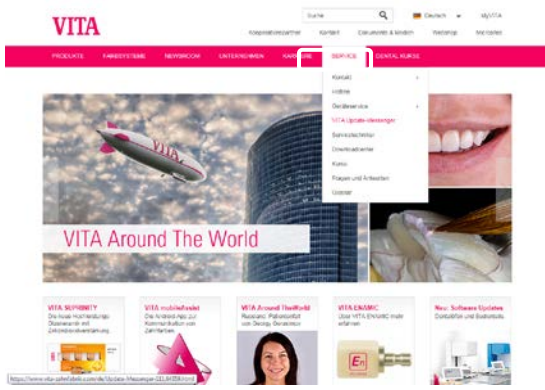
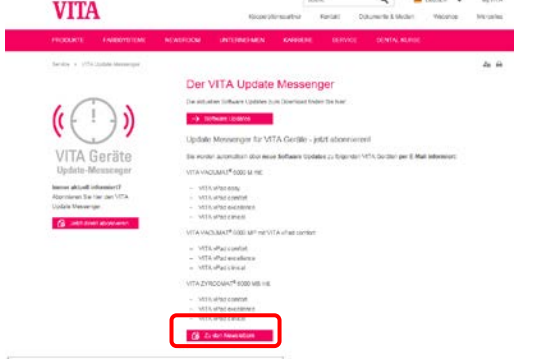
- a) Accès Internet
- b) Ordinateur sous Windows et équipé de la fonction Bluetooth ou de l'adaptateur Bluetooth-Dongle de l'ensemble VITA Easyshade V

## **2. Procédure générale**

Durée estimée de la mise à jour env. 8 min

1. Charger la mise à jour sur Internet
2. Activer le Bluetooth sur votre VITA Easyshade V
3. Sélectionner Mise à jour logiciel,  
l'appareil effectue la recherche
4. Cliquer sur le VITA Easyshade V désiré
5. La fenêtre de mise à jour s'ouvre
6. Lancer la mise à jour par "Start"
7. Pendant la mise à jour, n'effectuer aucune mesure avec votre VITA Easyshade V.

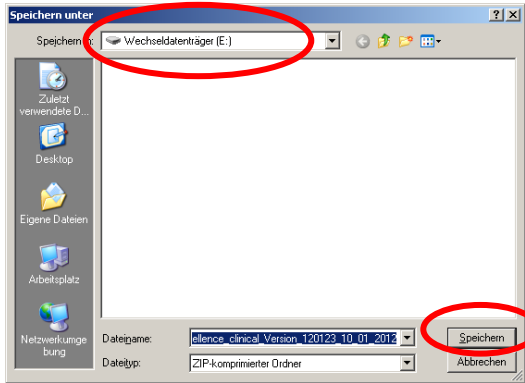
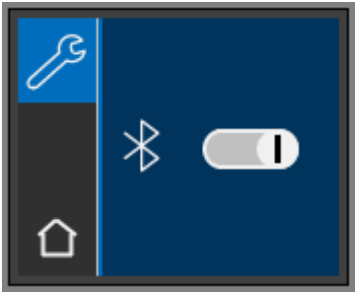
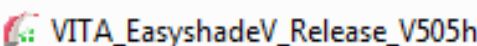


1. Chargement de la nouvelle mise à jour à partir d'Internet et enregistrement sur l'ordinateur		
Étape	Saisie par l'utilisateur	Fonction
1	<a href="http://www.vita-zahnfabrik.com">www.vita-zahnfabrik.com</a> Aller sur le site via votre navigateur Internet.	
2	Sélectionner „Service“ + „VITA Update-Messenger“.	
3	Sélectionner „Vers les Newsletters“. Sélectionner ensuite „VITA Update Messenger 01/2016“ et confirmer par „Vers la Newsletter“.	



## VITA Easyshade® V

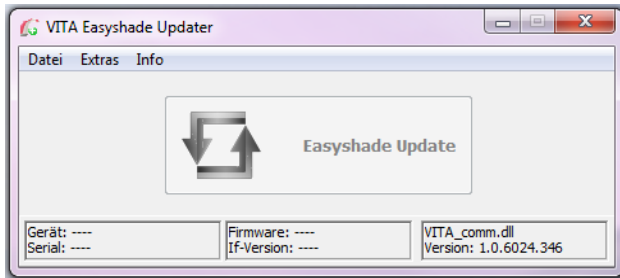
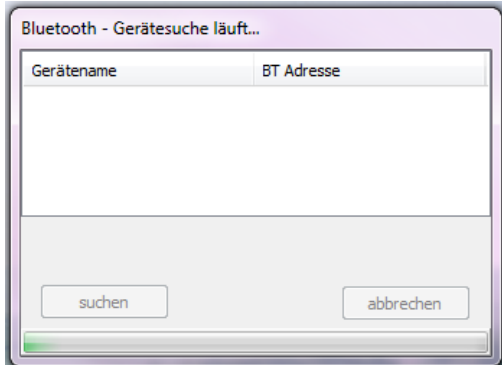
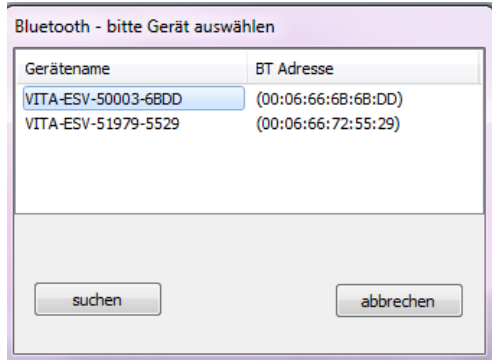
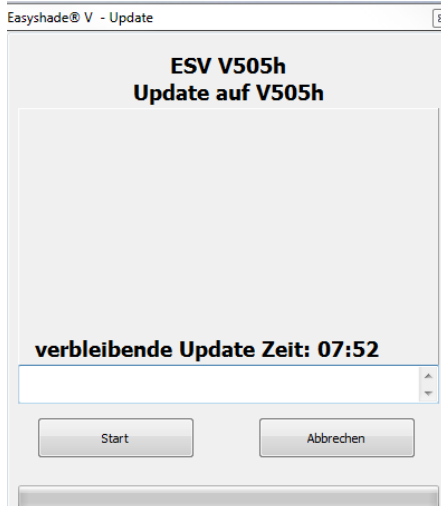
### Procédure pour les mises à jour du logiciel VITA Easyshade V

Étape	Saisie par l'utilisateur	Fonction
4	Sélectionner „Chargement procédure d'installation“ ou „Vers le téléchargement“.	
5	Sélectionner „Enregistrer“.	
6	Enregistrer le fichier dans le dossier de votre choix et lancer VITA_EasyshadeV_Release_V505h_Pkg.exe par un double clic. Le programme de mise à jour va être copié dans le dossier que vous avez sélectionné.	
7	Activer Bluetooth sur votre VITA Easyshade V.	
8	Double clic sur le fichier dans le lecteur sélectionné.	



# VITA Easyshade® V

## Procédure pour les mises à jour du logiciel VITA Easyshade V

Étape	Saisie par l'utilisateur	Fonction
9	La recherche s'effectue.	 
10	Cliquer sur le VITA Easyshade V désiré. En présence d'un seul VITA Easyshade V le choix est automatique.	
11	La fenêtre de mise à jour s'ouvre, commencer via "Start". (Durée estimée env. 8min) Pendant la mise à jour l'écran VITA Easyshade V est noir (et inutilisable).	



## VITA Easyshade® V

### Procédure pour les mises à jour du logiciel VITA Easyshade V

---

Étape	Saisie par l'utilisateur	Fonction
12	Fermer le programme à la fin de la mise à jour. Démarrer à nouveau votre VITA Easyshade V.	