

VITA FiringAssist i-Line

Programa para la edición de programas de cocción VITA V60 i-Line®

Instrucciones básicas – Añadir programas de cocción nuevos a una lista de programas existente



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 11.16

VITA shade, VITA made.

VITA

Índice

1	Instalación del VITA FiringAssist i-Line	4
2	Información importante	4
3	Transferir una lista de programas desde VITA V60 i-Line a VITA FiringAssist i-Line	5
3.1	Preparación del lápiz USB	5
3.2	Exportar una lista de programas desde VITA V60 i-Line	6
3.3	Importar una lista de programas a VITA FiringAssist i-Line	6
4	Editar una lista de programas	7
5	Añadir programas a la lista de programas	8
6	Transferir una lista de programas nueva a VITA V60 i-Line	9
6.1	Exportar una lista de programas a un lápiz USB	9
6.2	Importar una lista de programas a VITA V60 i-Line	10
6.3	Preparar el lápiz USB para su uso posterior	10

1 Instalación del VITA FiringAssist i-Line

Para instalar el VITA FiringAssist i-Line proceda como sigue:

- Instalar en el PC el archivo **VITA_FiringAssist_i_Line_installer_1_0_0.exe**.
Es posible que para la instalación se requieran derechos de administrador.
- Durante la instalación, indicar la ruta de instalación (p. ej., *C:\Programas\lv60tool*).

Una vez instalado correctamente el programa, en el menú de inicio aparecerá una nueva entrada de menú con el nombre *VITA FiringAssist i-Line*.

En dicha entrada se podrán abrir dentro del programa *VITA FiringAssist i-Line* estas instrucciones y una rutina de desinstalación.

2 Información importante

Si se transfiere una lista de programas a un VITA V60 i-Line, se sobrescribe toda la lista de programas de cocción ya existente en el VITA V60 i-Line.

A fin de evitar que se sobrescriba por error la lista de programas existente en el VITA V60 i-Line, es necesario exportar siempre una copia de seguridad de dicha lista con un lápiz USB preparado y vacío.

3 Transferir una lista de programas desde VITA V60 i-Line a VITA FiringAssist i-Line

A fin de poder importar al VITA FiringAssist i-Line la lista de programas guardada en el V60 i-Line es necesario preparar primero un lápiz USB. Después puede exportarse la lista de programas desde el VITA V60 i-Line e importarse al VITA FiringAssist i-Line.

3.1 Preparar el lápiz USB

- Inserte un lápiz USB completamente vacío en el PC.
- Abra el VITA FiringAssist i-Line.
- Haga clic en el símbolo  (Preparar) en la parte superior del programa.

A continuación se muestran en una ventana nueva todas las unidades de disco (= posibles lápices USB). En el ejemplo que se ilustra más abajo (fig. 1) es la unidad de disco "N:" con el nombre "KING".

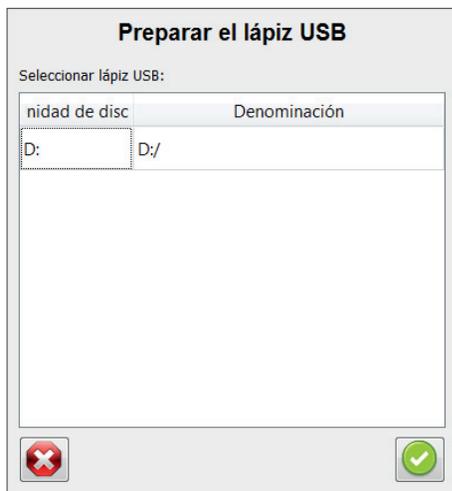


Fig. 1: Selección de la unidad de disco (= lápices USB)

- Seleccione la unidad de disco (= lápiz USB) y confirme (o haga doble clic en la unidad de disco).

Aparece una ventana con la indicación "Se ha completado correctamente la preparación. Ahora se puede expulsar el lápiz USB y a continuación se puede quitar del equipo".

3.2 Exportar una lista de programas desde VITA V60 i-Line

- Inserte el lápiz USB preparado en el VITA V60 i-Line apagado.
- Encienda el VITA V60 i-Line en el interruptor principal.

Después de encender el VITA V60 i-Line, se exporta toda la lista de programas del VITA V60 i-Line al lápiz USB.

- Espere a que el VITA V60 i-Line esté operativo.
- Después vuelva a retirar el lápiz USB.

El lápiz USB contiene ahora una copia de la lista de programas (“programs.vup”) en la carpeta “programs”.

3.3 Importar una lista de programas a VITA FiringAssist i-Line

- Vuelva a insertar el lápiz USB en el PC.
- En el VITA FiringAssist i-Line haga clic en el símbolo  (Importar).
- En la nueva ventana, seleccione la unidad de disco (= lápiz USB) con un doble clic.

La lista de programas importada se muestra ahora en la tabla izquierda de la ventana de programa (fig. 2).

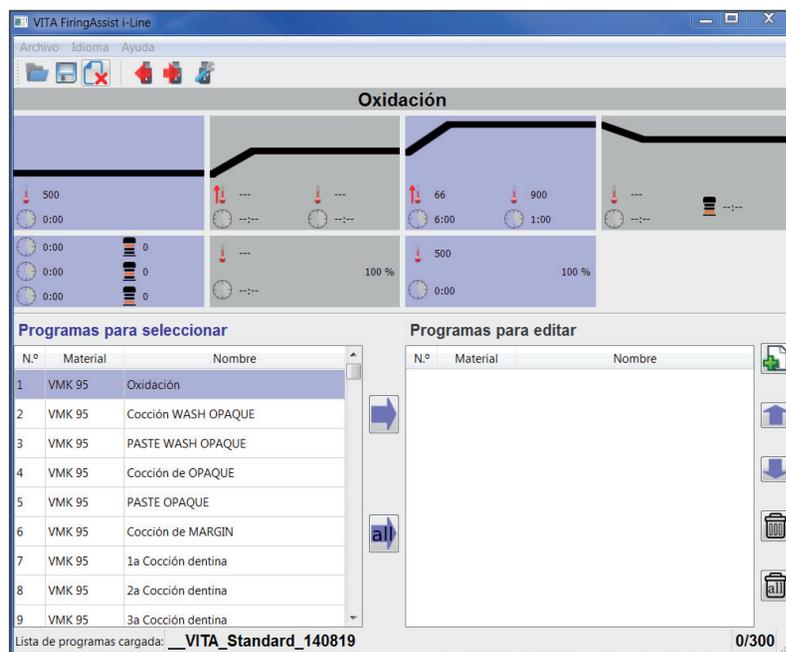


Fig. 2: Ventana de programa de VITA FiringAssist i-Line

4 Editar una lista de programas

- Haga clic en el símbolo .

Todos los programas de la lista de programas en la tabla izquierda se copian a la tabla derecha.

Tab. 1: Tabla izquierda y derecha con las opciones de función

Tabla izquierda	Tabla derecha
Visualización exclusiva de la lista de programas abierta	Edición de la lista de programas abierta
Lista de programas no editable	Lista de programas editable, almacenable y exportable
Algunos o todos los programas de la lista de programas abierta se pueden desplazar a la derecha	Los programas no se pueden desplazar a la izquierda

Cree ahora una copia de seguridad de la lista de programas en el PC.

- Haga clic en el símbolo  (Guardar).
Se abre una ventana de programa nueva para introducir el nombre de la lista de programas.
- Introduzca un nombre para la lista de programas y confirme.

Consejo: Si incluye la fecha actual en el nombre, sabrá cuándo fue la última actualización.

A continuación se puede editar la lista de programas importada en la tabla derecha si es necesario.

5 Añadir programas a la lista de programas

A fin de añadir programas nuevos de otra lista de programas a la lista de programas de la derecha, es necesario abrir la nueva lista de programas en la tabla izquierda.

- Haga clic en el símbolo  (Abrir).
Aparece una lista con todas las listas de programas guardadas.
- Seleccione la lista de programas deseada y confirme.



Fig. 3: Cargar una selección de programas

- Haga clic en el programa de la tabla derecha bajo el que deben colocarse los programas que se van a copiar.
- Haga clic en uno o varios de los programas deseados en la tabla izquierda (manteniendo presionado el botón del ratón).
- Haga clic en el símbolo .

Los programas copiados se colocan en la tabla derecha, debajo del programa marcado.

La posición de uno o varios programas marcados en la tabla derecha se puede cambiar haciendo clic en los



símbolos. Al presionar continuamente se produce un desplazamiento continuado.

6 Transferir una lista de programas nueva a VITA V60 i-Line

La lista de programas de la tabla derecha puede exportarse al lápiz USB e importarse al VITA V60 i-Line.

6.1 Exportar una lista de programas a un lápiz USB

- Haga clic en el símbolo  (Exportar).
- Seleccione la unidad de disco (= lápiz USB) y confirme la selección (o haga doble clic en la unidad de disco).



Fig. 4: Selección de la unidad de disco (= lápiz USB)

El mensaje “Se ha completado correctamente la exportación. Ahora se puede expulsar el lápiz USB y a continuación se puede quitar del equipo” confirma la correcta exportación de los datos.

Si aparece el mensaje “¿Sobrescribir el archivo existente?”, hay que sobrescribir el archivo para poder transferir la nueva lista de programas al lápiz USB. La lista de programas nueva se encuentra ahora en el lápiz USB y puede importarse al VITA V60 i-Line.

6.2 Importar una lista de programas a VITA V60 i-Line

- Inserte el lápiz USB preparado en el VITA V60 i-Line **apagado**.
- Encienda el VITA V60 i-Line en el interruptor principal.

Después de encender el VITA V60 i-Line, se importa toda la lista de programas nueva desde el lápiz USB al VITA V60 i-Line.

Se sobrescribe la lista de programas preinstalada en el VITA V60 i-Line.

- Espere a que el VITA V60 i-Line esté operativo.
- Después vuelva a retirar el lápiz USB del VITA V60 i-Line.

6.3 Preparar el lápiz USB para su uso posterior

A fin de evitar una futura sobrescritura **involuntaria** de una lista de programas en un VITA V60 i-Line, borre la nueva lista de programas del lápiz USB una vez transferida correctamente.

- Inserte el lápiz USB en el PC.
- Abra el VITA FiringAssist i-Line.
- Haga clic en el símbolo  (Preparar) en la parte superior del programa.

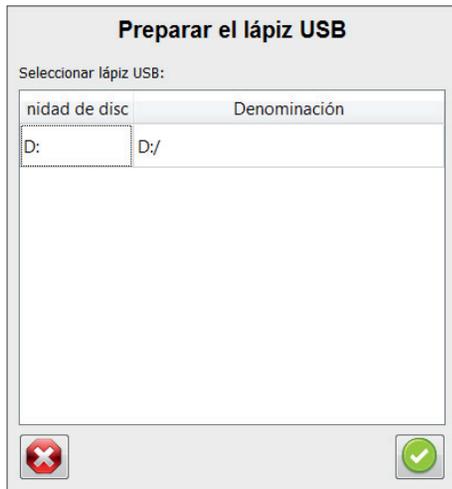


Fig. 5: Selección de la unidad de disco (= lápiz USB)

- En la nueva ventana, seleccione la unidad de disco (= lápiz USB) y confirme (o haga doble clic en la unidad de disco).


Aparece la pregunta “¿Borrar el archivo existente?”.

- Confirme el borrado del archivo.

Se abre una ventana con la indicación “Se ha completado correctamente la preparación. Ahora se puede expulsar el lápiz USB y a continuación se puede quitar del equipo”.

El lápiz USB vuelve a estar vacío y listo para el próximo uso.

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.

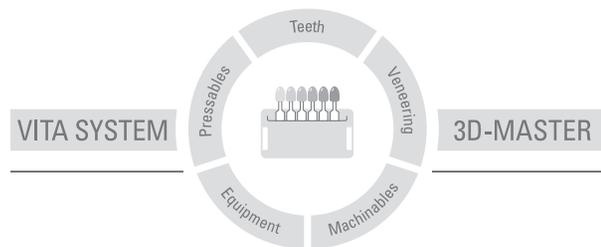

Nota importante: Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte si se utiliza el producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Asimismo, con independencia del fundamento jurídico y en la medida en que la legislación lo admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos datos se limitará en todo caso al valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En especial, en la medida en que la legislación lo admita, no aceptamos en ningún caso responsabilidad alguna por lucro cesante, daños indirectos, daños consecuenciales o reclamaciones de terceros contra el comprador. Solo admitiremos derechos a indemnización derivados de causas atribuibles a nosotros (en el momento de la celebración del contrato, violación del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso de dolo o negligencia grave. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 11.16

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761 / 562-0 · Fax +49 (0) 7761 / 562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761 / 562-222 · Fax +49 (0) 7761 / 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik