

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Quickstart Guide



WAK-unabhängige Malfarben
zur Steuerung des Chromas

VITA – perfect match.

VITA

> VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS – FACTS & FEATURES

CHROMA STAINS sind:

- WAK-unabhängige Keramikmaldfarben für alle gängigen Verblendkeramiken, monolithische Zirkon-, Silikat- oder Feldspatkeramiken

Mit CHROMA STAINS profitieren Sie von:


- einfacher Chromaanpassung in den zugehörigen Farbgruppen
- Top Verarbeitungseigenschaften, wie einfacher Applikation
- höchstethischen Ergebnissen durch Oberflächenbemalung

> SYSTEMKOMPONENTEN



VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Einsatz der CHROMA STAINS auf einem definierten Untergrund

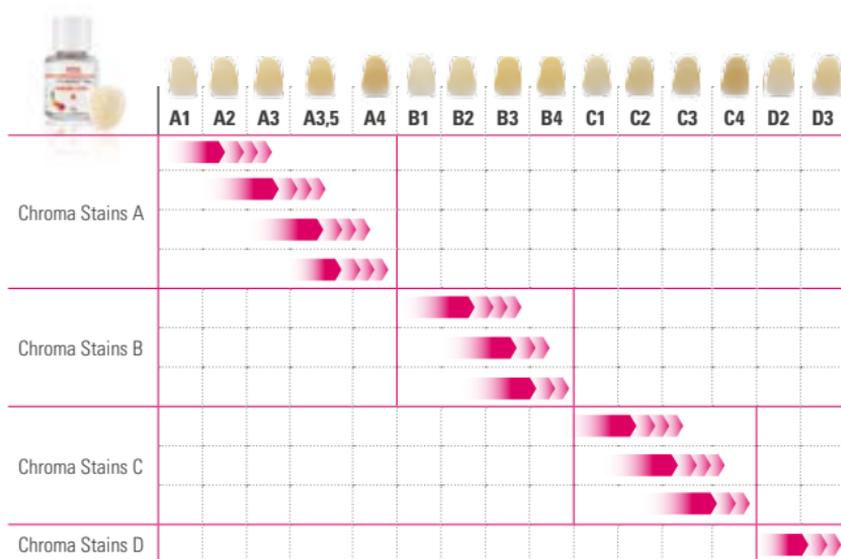

! Bitte beachten: Ein Chromawechsel ist nur innerhalb einer Farbgruppe möglich. Die VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS sind entwickelt worden, um das Chroma innerhalb einer Farbgruppe zu intensivieren. Je nach angemischter Konsistenz variiert die Intensität der Malfarben. Je dicker die Konsistenz, umso chromatischer können Sie die Restauration verändern.

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Anwendungsbeispiel anhand einer einzelnen Frontzahnrestauration



1 Farbbestimmung



Restauration fügt sich farblich
nicht in Restzahngebiss ein



2 Applikation CHROMA STAINS
Malfarbenfixierbrand oder Kombinationsbrand mit
VITA AKZENT Plus GLAZE (siehe Brenntabelle)



Perfekte Farbanpassung
der Restauration am Restzahnbestand

Steuerung der Chromazität

Dünne Konsistenz



Pulver*

1:2



Flüssigkeit



Pulver*

1:1



Flüssigkeit



Applikation
CHROMA STAINS



Ausgangssituation

Chromatischere Farbe

Ausgangssituation

Chromatischere Farbe

! Bitte beachten: Pfützenbildungen sind zu vermeiden. Möchten Sie die Restauration deutlich chromatischer, empfehlen wir dies in zwei Bränden durchzuführen.

* Die Konsistenz der VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS Paste entspricht 1:2.

VITA AKZENT® Plus – Brenntabellen

Empfohlene Brandführung

POWDER Glanzbrand – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE LT, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Vt. °C	→ min.*	↗ min.	↗ °C/min.	Temp ca °C	→ min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT/ST/XT	400	4.00	5:37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC mit GLAZE LT Powder	400	4.00	-	50	750	1.00	-	500
Malfarbenfixierbrand	500	4.00	2:30	80	700	1.00	-	-

* Bei Pastenbränden ist die Vorwärmzeit von 4 Min. auf 6 Min. zu erhöhen (VITA LUMEX AC 8 Min.).



! Bitte beachten: Alle Restaurationstypen können ebenfalls mit VITA AKZENT Plus GLAZE LT glasiert werden. In diesem Fall können Sie die Temperatur auf bis zu 750°C herabsetzen.





TECHNISCHE HOTLINE

Fragen rund um VITA Produktlösungen?

Die **erfahrenen Zahntechniker und Technikberater** beantworten sie unter:

- ▶ **Phone +49(0) 7761/562222**
- ▶ **Mail info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8.00 bis 17.00 Uhr CET**



ONLINE-SUPPORT

Fragen rund um die Verarbeitung und zu Produktlösungen?

Kompetente Antworten finden Sie online in Form von **FAQs**,
Videos und elektronischen Lerneinheiten.

Weitere, detaillierte Informationen finden Sie u. a. in der
komplett umfassenden VITA AKZENT Plus Gebrauchsanweisung.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**

 Rx Only

CE 0124

10375D_1023_V05



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)