


# VITA VIONIC® SOLUTIONS

Pour les prothèses numériques avec systèmes CFAO ouverts

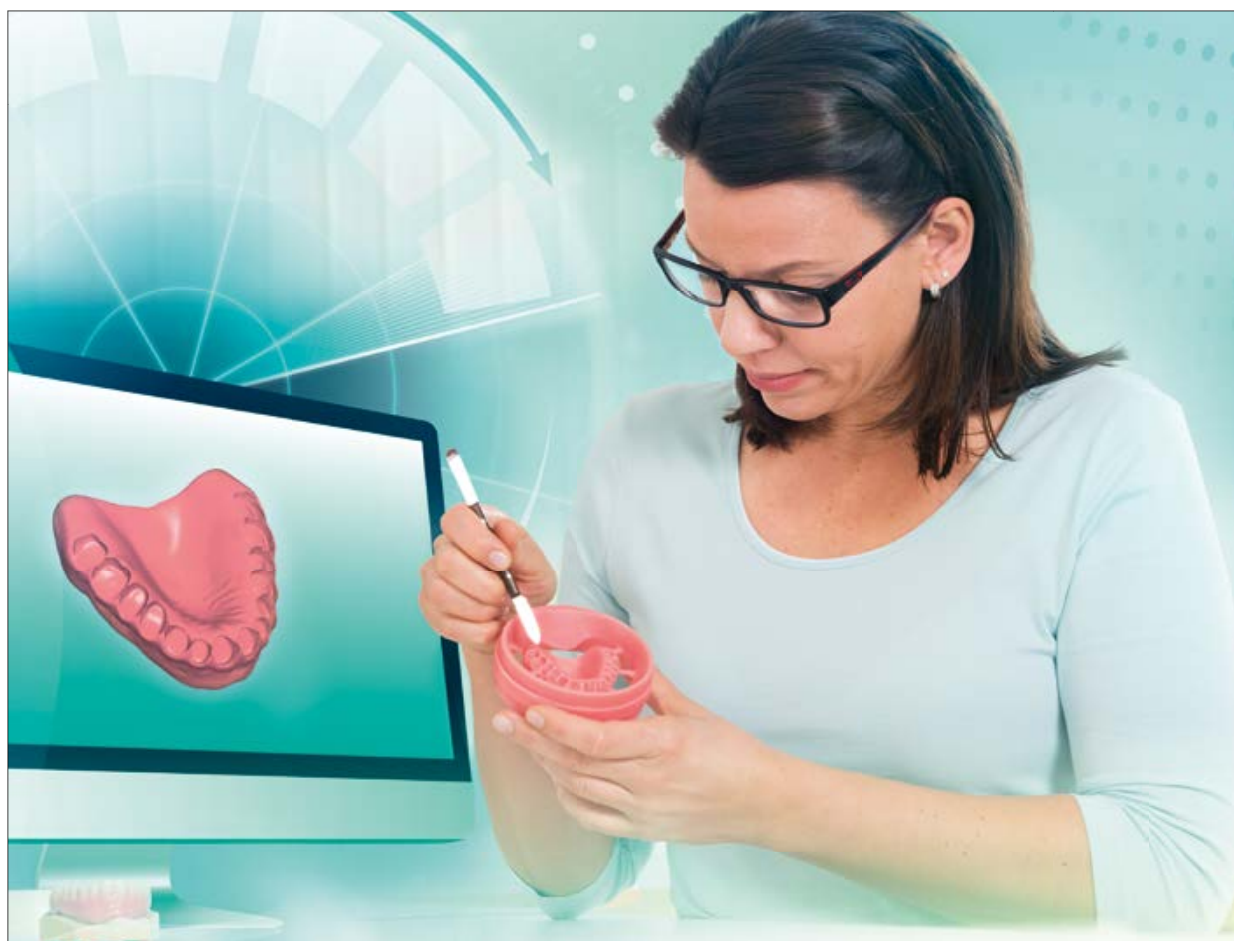

Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 12.17

VITA – perfect match.

**VITA**

## Description du produit

VITA VIONIC SOLUTIONS permet la réalisation efficace de montages en cire CFAO. À la première étape, le montage numérique de la prothèse est réalisé avec un logiciel de CAO. À la deuxième étape, une base de cire précise ou un montage grand format est réalisé par FAO en VITA VIONIC WAX,

analogue à la conception. Puis, une fois l'essayage réussi, la prothèse est réalisée de façon conventionnelle. Avec VITA VIONIC, les laboratoires bénéficient d'un gain de temps et d'une grande précision dans la réalisation de la prothèse.

## MONTAGE EN CIRE CFAO




### Quoi ?

- Disque de cire pour la réalisation de montage CFAO

### Avec quoi ?

- VITA VIONIC WAX en rose pour une base de cire précise
- VITA VIONIC WAX en blanc pour un montage taille réelle

## AVANTAGES

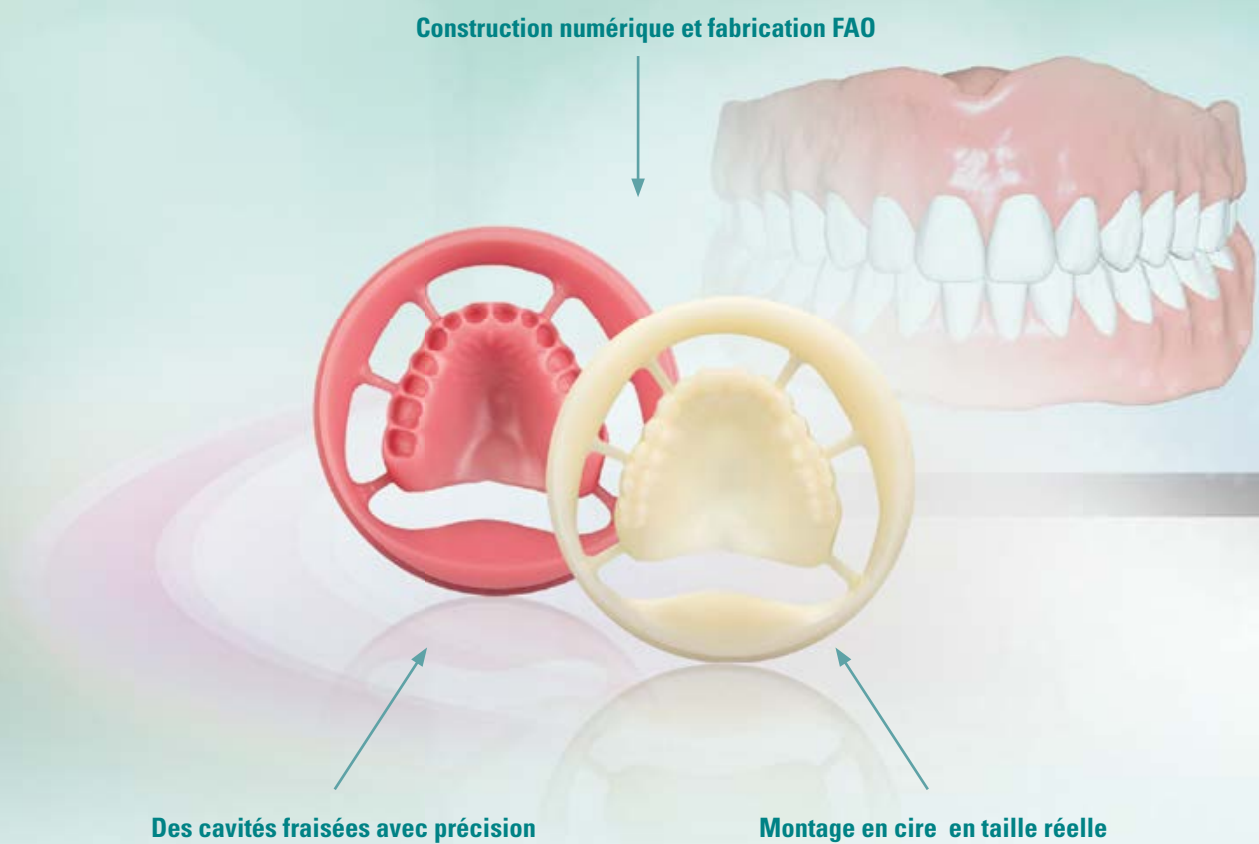

### Montage en cire rapide

- par construction numérique et fabrication FAO

### Montage en cire précis

- par des cavités minutieusement fraisées à partir de la construction numérique

### Essayage en bouche confortable du montage en cire

- fabrication de prothèses CFAO taille réelle en cire blanche

## CONCEPTION CAO



### Quoi ?

- Logiciel de CAO avec options de design harmonisées et spécifiques à VITA

### Pourquoi ?


#### Restauration de la fonction simple et adaptée au patient...

- grâce à des concepts vestibulaires et linguaux intégrés
- grâce à des classes d'occlusion intégrées (I + II)
- grâce à une situation occlusale intégrée (occlusion normale/croisée)

### Pourquoi ?

- pour le montage numérique de prothèses adapté au patient d'un simple clic

## FLUX DE TRAVAIL

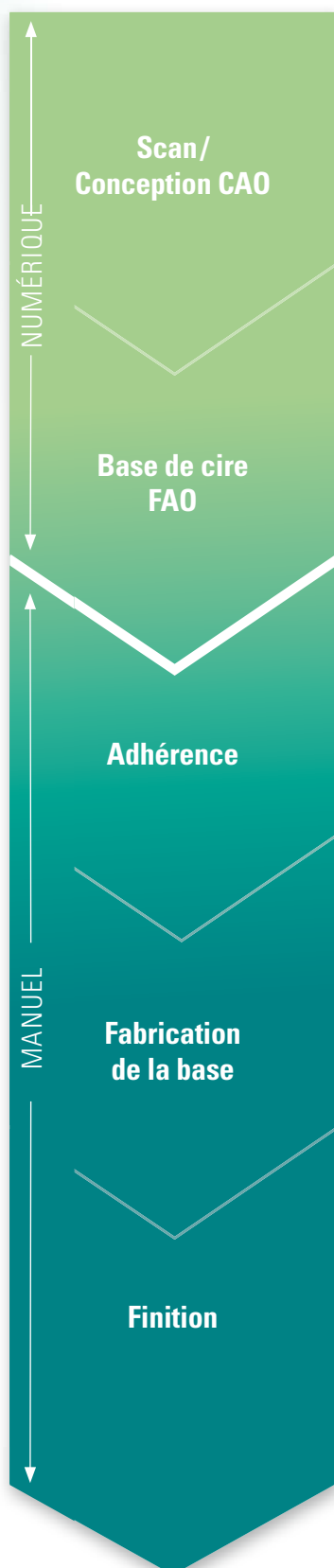

NUMÉRIQUE

Scan/  
Conception CAO



- Dans la conception CAO de la prothèse, profitez des **concepts prothétiques harmonisés** spécifiques à VITA.

Base de cire  
FAO



- Pour la réalisation du montage, utilisez les **disques en cire synthétique VITA VIONIC WAX**.

MANUEL

Adhérence



- Pour une fixation sûre des dents prothétiques VITA aux matériaux de base, utilisez l'**adhésif VITACOLL**.

Fabrication  
de la base




- Utilisez les **polymères à froid ou à chaud recommandés** par VITA pour la fabrication de la base, par exemple par un procédé d'injection ou de bourrage.

Finition



- Pour la finition, utilisez des **instruments de polissage adaptés** et le **composite cosmétique VITA VM LC** pour la personnalisation.

## INFORMATIONS DE BASE

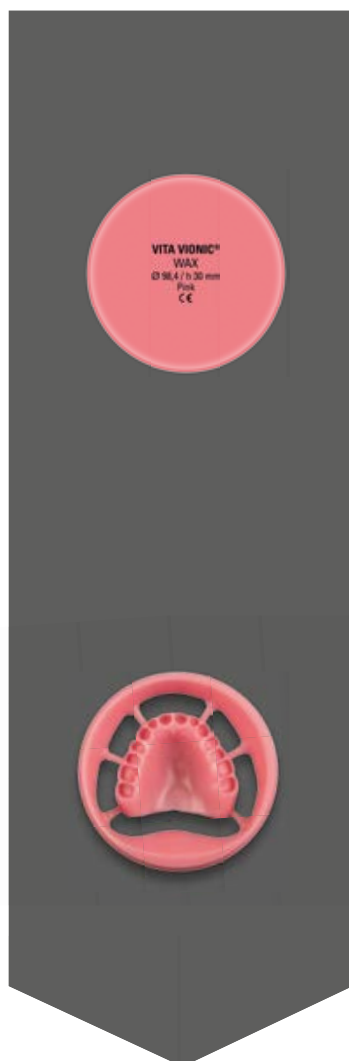

### Caractéristiques ?

#### VITA VIONIC WAX

- Disques en cire synthétique résistants à la température et de forme stable.

### Couleurs disponibles ?

- Rose
- Blanc



### Géométries disponibles ?

- Ø 98,4 mm / H 30 mm



## SYSTÈMES COMPATIBLES



### Partenaire technologique CAO pour les prothèses numériques VITA


- 3Shape AS

### VITA VIONIC WAX est disponible pour les systèmes\* :


- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- DG SHAPE DWX-Serie (DG SHAPE)

\*) Partenaire système VITA validé pour le travail des composants VITA VIONIC sélectionnés

## COMPOSANTS DU SYSTÈME

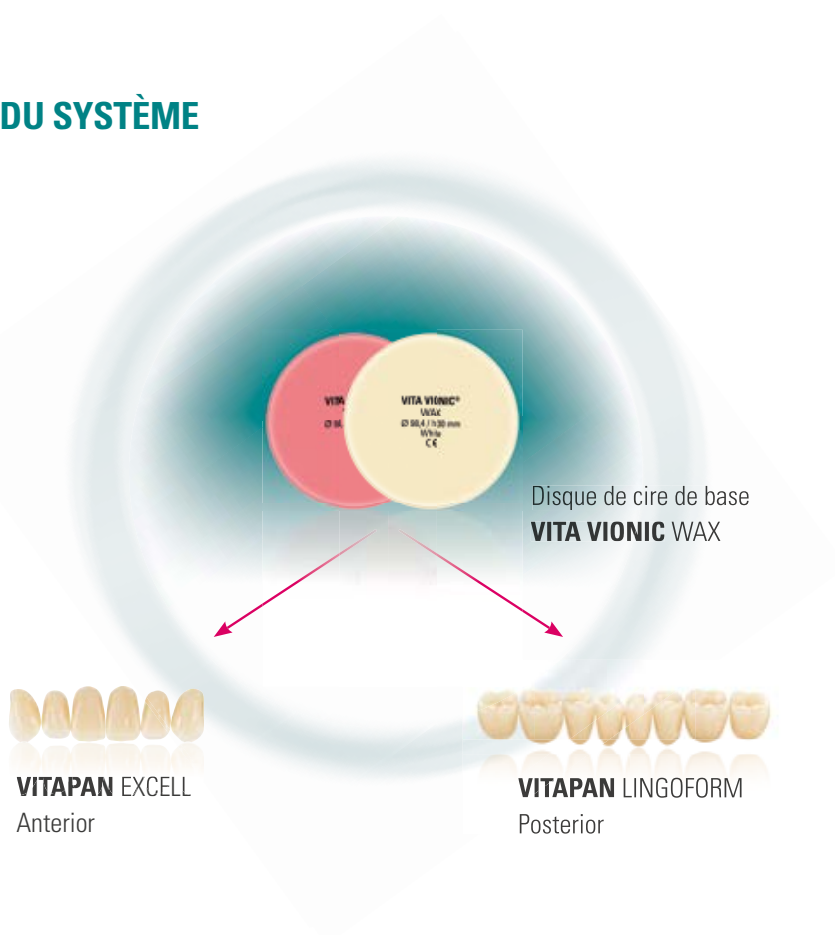

Vous trouverez de plus amples informations sur les VITA VIONIC SOLUTIONS sur le site [www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics](http://www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics)

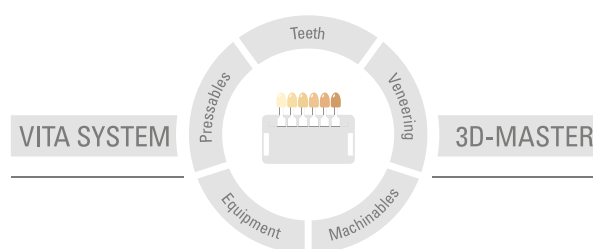

**N.B.** Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés. De plus, notre responsabilité quant à l'exactitude de ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans la mesure où la loi l'autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise livrée selon facture hors taxes. En outre et dans la mesure où la loi l'autorise, notre responsabilité ne peut en aucun cas être engagée pour les pertes de bénéfices, pour les dommages directs ou indirects, pour les recours de tiers contre l'acheteur. Toute demande de dommages et intérêts pour faute commise (faute lors de l'établissement du contrat, entorse au contrat, négociations illicites etc.) n'est possible qu'en cas de préméditation ou de négligence caractérisée. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 12.17

Cette nouvelle édition du mode d'emploi rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik est certifié selon la directive sur les dispositifs médicaux et les produits suivants portent le marquage **CE** 0124 :

**VITA VIONIC®WAX**

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)