

VITAVM[®].CC

Informazione prodotto



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 04.17

VITA – perfect match.

VITA

Materiale polimerizzabile a freddo, autopolimerizzante, privo di sostanze di carica per la realizzazione extraorale di provvisori e riparazioni.
Disponibile sia in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER che VITA classical A–D

VITAVM[®]CC Per tutte le indicazioni



VITAVM CC è un materiale polimerizzabile a freddo, privo di sostanze di carica. E' l'ideale per la realizzazione extraorale di provvisori e riparazioni.

Indicazioni

- Realizzazione di corone e ponti provvisori
- Fissaggio di denti in resina VITA, ad es. su protesi scheletrate
- Riparazioni
- Copertura di attacchi in protesi combinata



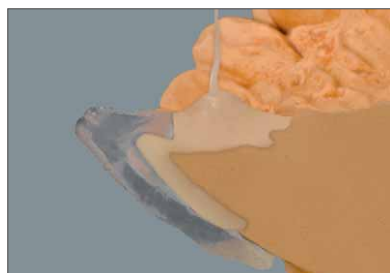


Fig. 1: La sezione mostra un riempimento uniforme, privo di bolle in tutte le zone

La scelta di polimeri di altissima qualità quale materia prima e la loro accurata lavorazione sono alla base delle eccellenti caratteristiche di materiale di VITAVM CC.

Semplicità di lavorazione

Le caratteristiche di lavorazione sono funzionali alle esigenze dell'utilizzatore: ottima miscelabilità ed eccellente scorrevolezza consentono un lavoro veloce e razionale.

Superfici lisce

L'agevole lucidabilità e la struttura omogenea del materiale riducono il deposito di placca sulle superfici lisce di VITAVM CC.


Con questo materiale è possibile realizzare provvisori estetici di lunga durata, che assicurano un elevato confort al paziente.

Vantaggi della resina polimerizzabile a freddo

- Eccellente scorrevolezza
- Ottima miscelabilità
- Agevole lucidabilità
- Stabilità cromatica superiore rispetto a sistemi paragonabili
- Ottima stabilità e ridotto rischio di fratture grazie alla correlazione ideale tra resistenza a flessione e modulo di elasticità
- Forte riduzione del deposito di placca
- Indurimento privo di bolle, con o senza pressione



Stratificazione BASIC

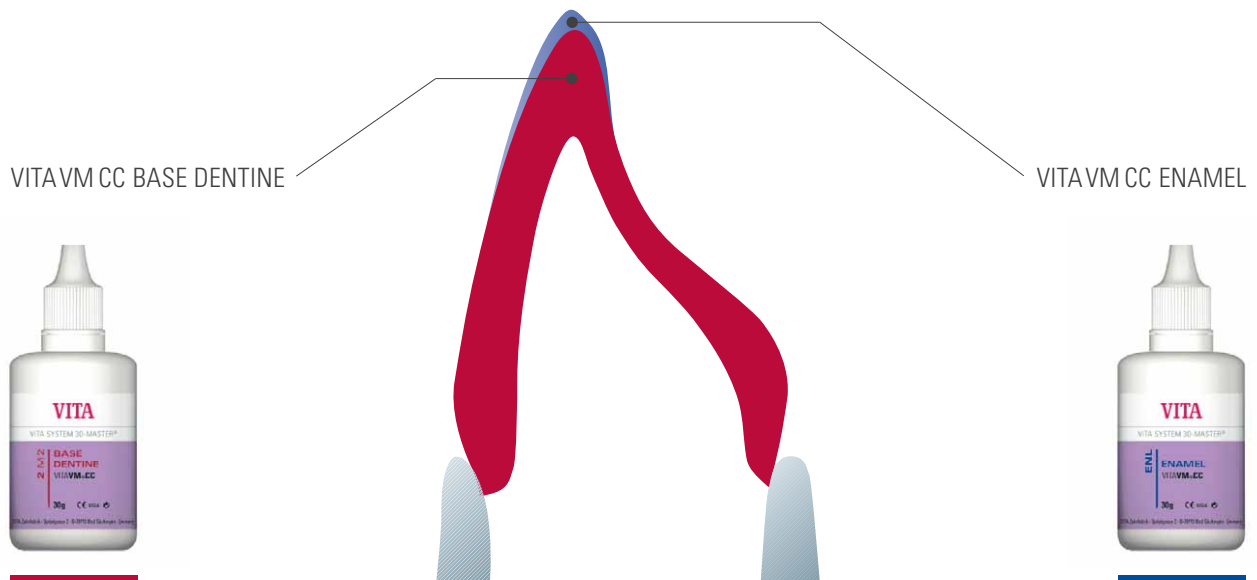

Stratificazione BASIC

La stratificazione VITAVM CC BASIC cromaticamente intensa prevede l'impiego di due masse

- BASE DENTINE
- ENAMEL

Con soli due strati è possibile ottenere una riabilitazione provvisoria di aspetto naturale.

Individualizzazione

Con le masse aggiuntive è possibile realizzare in modo semplice e realistico effetti e caratterizzazioni naturali.



Il provvisorio alla base del successo

Il provvisorio è una fase importante nel quadro del processo di riabilitazione dei pazienti con protesi fisse. In linea di principio serve da protezione dei denti preparati e per il ripristino temporaneo di estetica e funzione.

Utilizzato correttamente, il provvisorio ha anche altri pregi. Consente di preparare in modo mirato la configurazione ottimale della riabilitazione definitiva. Soprattutto nel caso di restauri frontali è possibile realizzare già con il provvisorio correzioni di estetica, fonetica e funzione.



Il provvisorio inoltre facilita l'accettazione del restauro da parte del paziente, in quanto può abituarsi precocemente alla nuova situazione. VITAVM CC gioca un ruolo importante: provvisori in VITAVM CC sono caratterizzati da un aspetto estetico piacevole e soddisfano i pazienti.



Fig. 1: Situazione prima della riabilitazione

Fig. 2: Riabilitazione provvisoria e configurazione del settore frontale con VITAVM CC.

Fig. 3: Aspetto dei frontali immediatamente dopo l'inserimento (VITA In-Ceram YZ rivestito con VITAVM 9)



Per la configurazione del provvisorio è utile attenersi a forma e colore di denti confezionati. Per determinare forma e colore adatti sono particolarmente utili le tabelle forme viventi, come ad es. VITA PHYSIODENS.

In tal modo il paziente è in grado di farsi un'idea della situazione definitiva ed esprimere un proprio parere.

VITAVM®CC Assortimenti modulari per la massima efficienza

	<p>VITAVM®CC BASIC KIT 16-COLOR* Assortimento base per la stratificazione BASIC</p>
	<p>VITAVM®CC BASIC KIT 5-COLOR* Assortimento base piccolo per la stratificazione BASIC con quantitativo ridotto di masse</p>
	<p>VITAVM®CC CLASSICAL COLOR KIT Assortimento integrativo per utilizzatori VITAVM CC 3D-MASTER, che desiderano completare il loro assortimento con la colorazione VITA classical A1–D4 (senza B1).</p>
	<p>VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT** Per la realizzazione di effetti e caratteristiche naturali</p>

* disponibile sia in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER che VITA classical A–D


** utilizzabile sia per colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER che VITA classical A–D

	<p>VITA Easyshade[®] V</p> <p>Per la determinazione digitale del colore usate VITA Easyshade[®] V e per la determinazione visiva ad es. VITA Linearguide 3D-MASTER[®] o VITA classical A1–D4[®].</p>
	<p>VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER[®]</p> <p>Con VITA Linearguide è possibile determinare in modo spedito e preciso il corretto colore dei denti. VITA Linearguide 3D-MASTER è un'alternativa all'affermata VITA Toothguide 3D-MASTER e si distingue per la disposizione lineare dei campioni colore.</p>
	<p>Scala colori VITA classical A1–D4</p> <p>La scala colori originale per determinare i colori VITA classical A1–D4. Con i VITA BleachedShades aggiuntivi è possibile determinare in sicurezza il colore dei denti sottoposti a sbiancamento.</p>
	<p>Denti in resina VITA PHYSIODENS[®], VITAPAN[®], VITAPAN PLUS[®], VITA LINGOFORM[®]</p> <p>Le quattro linee di denti offrono la soluzione adeguata per tutte le indicazioni. Studi scientifici confermano che il loro materiale affermato da decenni presenta il miglior comportamento di abrasione. VITAVM CC e denti VITA costituiscono una combinazione ottimale.</p>
	<p>Adesivo VITACOLL[®]</p> <p>L'adesivo VITACOLL realizza un legame chimico affidabile tra denti in resina e materiali polimerizzabili a caldo e a freddo, come ad es. VITAVM CC, impedendo il distacco dei denti.</p>

Per ulteriori informazioni: www.vita-zahnfabrik.com

Il materiale di rivestimento estetico VITAVM CC è disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A–D. E' assicurata la compatibilità cromatica con tutti i materiali VITA 3D-MASTER e VITA classical A–D.

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

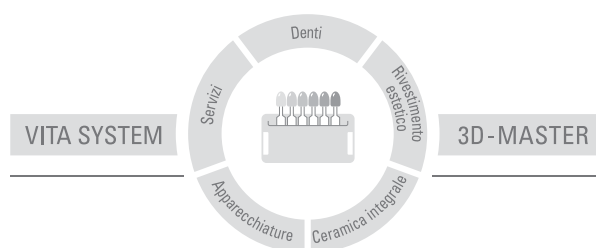

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori: La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell'IVA. In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nei confronti dell'acquirente. Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per comportamento colposo (colpa in "contrahendo", violazione contrattuale positiva, atto illecito) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. Data di questa informazione per l'uso: 04.17

VITA Zahnfabrik è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed i seguenti materiali sono marcati **CE**₀₁₂₄ :
VITAVM_{CC} · **VITA PHYSIODENS[®]** · **VITAPAN[®]** · **VITAPAN PLUS[®]**
VITA LINGOFORM[®] · **VITACOLL[®]**

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax 49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com