VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Guida rapida all'uso





> VITA AK7FNT® Plus CHROMA STAINS – FATTI & CARATTERISTICHE

I CHROMA STAINS sono:

 Supercolori indipendenti dal CET per tutte le ceramiche di rivestimento estetico, le ceramiche monolitiche a base di biossido di zirconio, silicatiche e feldspatiche

I CHROMA STAINS offrono:


- semplice adattamento cromatico nei corrispondenti gruppi di colore
- caratteristiche di lavorazione al massimo livello, come semplicità di applicazione
- risultati altamente estetici mediante pittura superficiale

> COMPONENTI DI SISTEMA



■ VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS**

D- Uso di CHROMA STAINS su una base definita

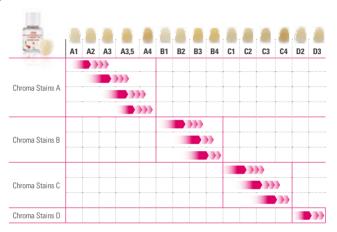

1 Attenzione: una modifica del croma è possibile solo all'interno di un gruppo di colori. I VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS sono stati sviluppati per intensificare il croma all'interno di un gruppo di colori. A seconda della consistenza approntata varia l'intensità del supercolore. Quanto più densa è la consistenza, tanto più si potrà modificare l'intensità cromatica del restauro.

B-VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Applicazione sull'esempio del restauro di un dente anteriore singolo



1 - Determinazione del colore



Il restauro non si armonizza cromaticamente con la dentatura residua




Applicazione di CHROMA STAINS Cottura di fissaggio supercolori o cottura combinata con VITA AKZENT Plus GLAZE (v. tabelle di cottura)



Adattamento cromatico perfetto del restauro alla dentatura residua

🕒 Controllo della cromaticità

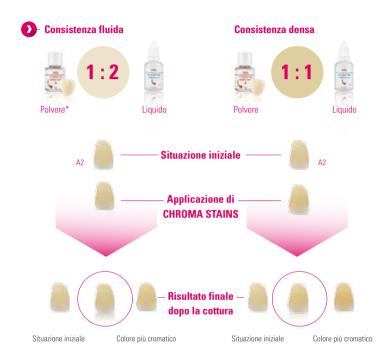

Attenzione: evitare che si formi ristagno. Se si desidera un restauro decisamente più cromatico, si consiglia di eseguire la modifica in due cotture.

^{*} La consistenza di VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS Paste corrisponde ad un rapporto 1:2.

VITA AKZENT® Plus – Tabelle di cottura

■ Cottura raccomandata

Cottura finale POWDER – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE LT, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Prees.	→ min.*	min.	°C/ min.	Temp. ca °C	→ min.	VAC min.	°C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT/ST/XT	400	4.00	5:37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC con GLAZE LT Powder	400	4.00	-	50	750	1.00	-	500
Cottura di fissaggio supercolori	500	4.00	2:30	80	700	1.00	-	-

^{*} Per la cottura dei materiali in pasta il tempo di preriscaldo va aumentato da 4 min. a 6 min. (VITA LUMEX AC 8 min.).



Attenzione: tutti i tipi di restauro possono essere glasati con VITA AKZENT Plus GLAZE LT. In questo caso la temperatura può essere abbassata fino a 750°C.





HOTLINE TECNICA

Domande sulle soluzioni di prodotto VITA? Contatta gli esperti odontotecnici e consulenti tecnici:

Tel. +49(0)7761/562222
 Mail info@vita-zahnfabrik.com
 8.00 - 17.00



SUPPORTO ONLINE

Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto? Risposte competenti online in forma di **FAQ**, video e unità didattiche elettroniche.

Per ulteriori informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso complete VITA AKZENT Plus..

- www.vita-zahnfabrik.com
- www.facebook.com/vita.zahnfabrik

MD Rx Only **C €** 0124



WITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-20 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

