

# VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Instruções de processamento Quick-Start



Pigmentação de CET independente  
para controle do croma

VITA – perfect match.

**VITA**

## > VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS – FACTS & FEATURES


### **CHROMA STAINS** são:

- Uma pigmentação de cerâmica de CET independente para todas as cerâmicas de recobrimento padrão, cerâmicas de zircônio monolíticas, de silicato ou feldspáticas.

### **Com CHROMA STAINS você se beneficia de:**


- ajuste mais fácil de cor nos grupos de cores correspondentes
- características excelentes de processamento, estando a aplicação mais fácil
- resultados altamente estéticos através da coloração da superfície

## > COMPONENTES DO SISTEMA

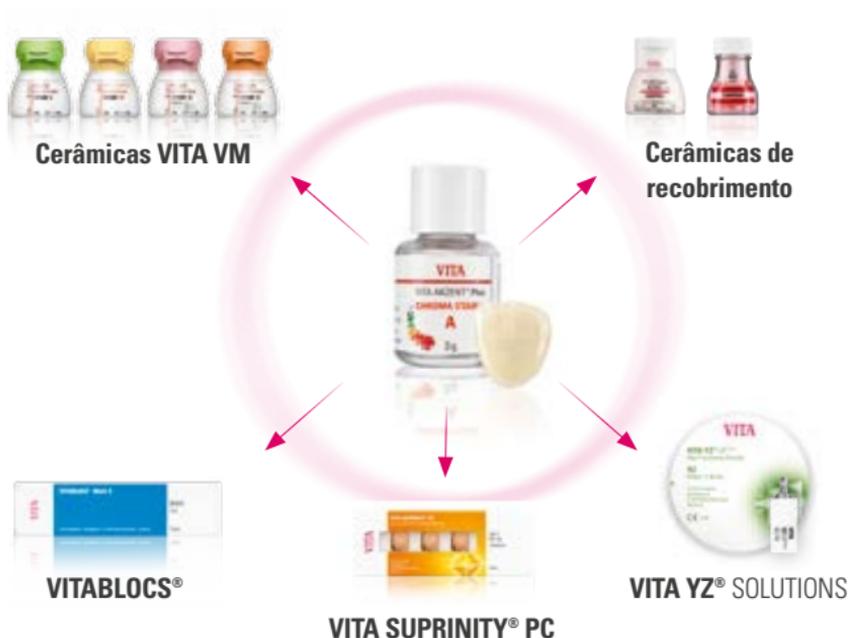

## VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

### Aplicação de CHROMA STAINS sobre uma superfície definida

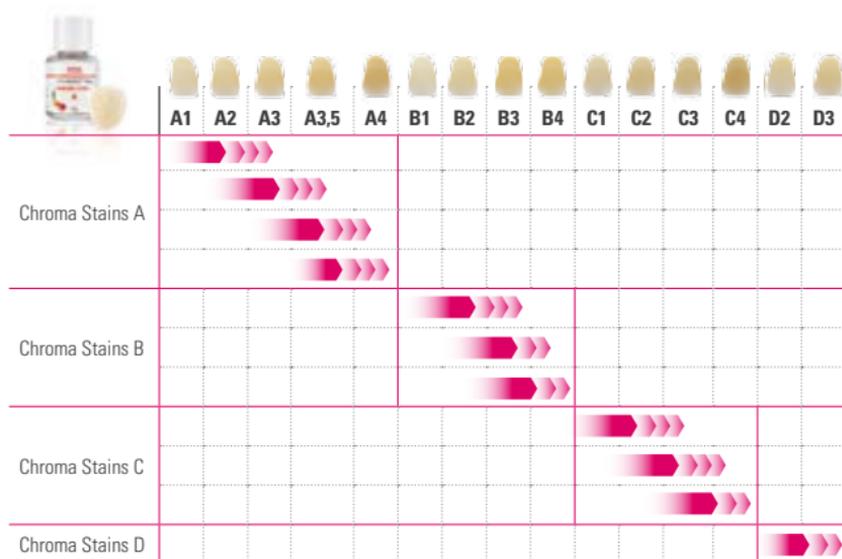

**! Observe:** uma mudança de cor só é possível dentro de um mesmo grupo de cores. Os VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS foram desenvolvidos para intensificar o cor dentro de um mesmo grupo de cores. Dependendo da consistência da mistura, a intensidade da pigmentação varia. Quanto mais espessa a consistência, mais é possível de modificar a restauração cromaticamente.

## VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

### Exemplo de utilização de uma única restauração na região anterior



1 Determinação da cor



A cor da restauração não se integra como dente residual



2 Aplicação do CHROMA STAINS  
Queima de fixação da pigmentação ou queima de combinação com VITA AKZENT Plus GLAZE (consulte a tabela de queima)



Adaptação perfeita da cor da restauração na dentição residual

## Controle da cromaticidade

### Consistência fina



### Consistência espessa



 **Observe:** evitar a formação de poças. Caso queira a restauração claramente cromática, recomendamos executar duas queimas.

\* A consistência da pasta VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS é de 1:2.

## VITA AKZENT® Plus – Tabelas de queima

### Ciclo de queima recomendado

**Queima de glaze em pó – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE LT, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT**

	Presec. °C	→ min.*	↗ min.	↗ °C/ min.	Temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT/ST/XT	400	4.00	5:37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
Queima de fixação de pigmentos	500	4.00	2:30	80	700	1.00	-	-

\* Para cozeduras de pasta, é necessário prolongar a fase de temperatura de pré-aquecimento de 4 a 6 min.



 **Observe:** todos os tipos de restauração também podem ser glazeadas com VITA AKZENT Plus GLAZE LT. Neste caso, você pode reduzir a temperatura em até 750°C.





## HOTLINE TÉCNICA

Questões a respeito das soluções de produtos VITA?

Os **experientes Técnico de Prótese e Consultor Técnico, MDT Ralf Mehlin e MDT Daniel Schneider** lhes responderão em:

- ▶ **Phone +49(0) 7761/562222**
- ▶ **Mail [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **8:00 até 17:00 horas CET**



## SUPORTE ONLINE

Questões sobre o processamento e as soluções de produtos?

Você encontra respostas competentes online em forma de **FAQs, vídeos e unidades eletrônicas de aprendizagem.**

Demais informações detalhadas, entre outros, você encontra no completo e abrangente Manual de Processamento VITA AKZENT Plus.

- ▶ **[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **[www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)