

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Краткая рабочая инструкция



красители, независимые от КТР
для регулирования насыщенности

VITA – perfect match.

VITA

> VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS – FACTS & FEATURES


CHROMA STAINS:

- Керамические красители, независимые от КТР для всех стандартных облицовочных керамик, монокристаллических циркониевых керамик, силикатных или полевошпатных керамик

Преимущества использования CHROMA STAINS:


- Простое создание необходимой насыщенности в соответствующих цветовых группах
- Превосходные рабочие свойства, такие как простое нанесение
- Высоко эстетичные результаты благодаря окрашиванию поверхностей

> Системные компоненты

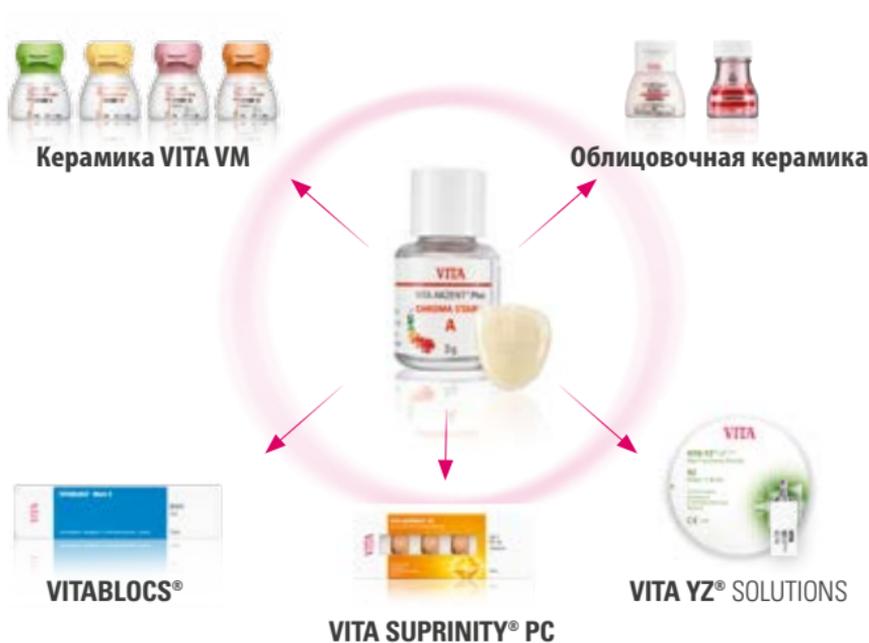

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Применение CHROMA STAINS

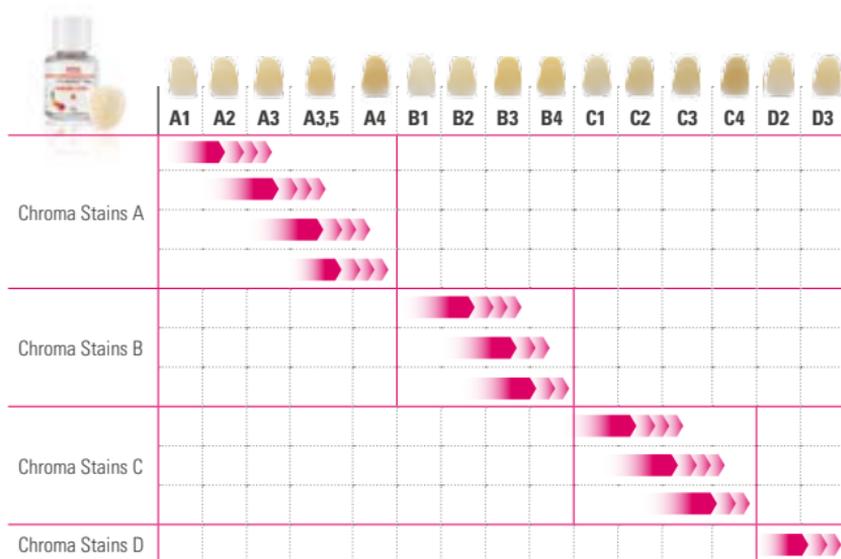

Обратите внимание: Изменение насыщенности возможно только внутри одной цветовой группы. Красители VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS специально предназначены для создания более интенсивного цвета внутри одной группы. В зависимости от консистенции варьируется интенсивность красителей. Чем плотнее консистенция, тем более насыщенной может стать Ваша реставрация.

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS

Пример использования на основе одиночной фронтальной реставрации



1 Определение цвета



Реставрация по цвету не вписывается в зубной ряд



2 Нанесение CHROMA STAINS
Фиксирующий обжиг красителей
или комбинированный обжиг с
VITA AKZENT Plus GLAZE (см. таблицу обжигов)



Превосходное совпадение цвета реставрации
с соседними зубами

🗄️ Регулирование насыщенности цвета

▶ Жидкая консистенция

Густая консистенция



Нанесение
CHROMA STAINS



! **Обратите внимание:** следует избегать образования луж. Если Вы хотите получить более насыщенный цвет реставрации, рекомендуем провести два обжига.

* Консистенция VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS Paste соответствует 1:2

VITA AKZENT® Plus – Таблица обжига

Рекомендуемый обжиг

Глянцевый обжиг порошкообразных красителей –
CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE LT,
GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Vt. °C	→ мин.*	↗ мин.	↗ °C/мин.	Темп. ок. С	→ мин.	вакуум мин	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT/ST/XT	400	4.00	5:37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
Обжиг красителей	500	4.00	2:30	80	700	1.00	-	-

* При обжиге пастообразных красителей увеличить температуру предварительного нагрева с 4 до 6 мин.



! **Обратите внимание:** все виды реставраций также могут быть покрыты глазурью VITA AKZENT GLAZE LT Plus. В этом случае, вы можете снизить температуру до 750 °C.





ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Вопросы по продукции VITA?

Опытные зубные техники и консультанты Ralf Mehlin и Daniel Schneider ответят на Ваши вопросы:

- ▶ **Телефон +49(0)7761/562222**
info@vita-zahnfabrik.com
с 8.00 до 17.00 ч



ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА

Вопросы по обработке и продукции?

Компетентные ответы Вы найдете на нашем сайте в разделе **FAQs**, **Videos** и **elektronischen Lerneinheiten**.

Более подробную информацию Вы можете найти в полной рабочей инструкции VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik