

VITA INTERNO®

Pentru efecte cromatice naturale, profunde

















VITA – perfect match.

VITA

**Ceramica VITA Interno
permite tehnicianului să
reproducă cu o
perfectiune maximă
efectele cromatice din
profundimea dintelui.**



	VITA INTERNO white smoke - Int 01
	VITA INTERNO sand - Int 02
	VITA INTERNO lemon chrome - Int 03
	VITA INTERNO sunflower - Int 04
	VITA INTERNO coral blush - Int 05
	VITA INTERNO gold earth - Int 06
	VITA INTERNO misty lilac - Int 07
	VITA INTERNO marina - Int 08
	VITA INTERNO cream pearl - Int 09
	VITA INTERNO burnt orange - Int 10
	VITA INTERNO clove - Int 11
	VITA INTERNO splinter - Int 12
	VITA INTERNO
	VITA INTERNO

Trusa VITA INTERNO® conține:

Material	Nr. Comandă.	Cantitate
Ceramică Interno INTERNO FLUID	Int 01 - Int 12	12 x 3 g 1 x 20 ml
AKZENT / INTERNO placă mixare		1 bucată
Spatulă sticlă		1 bucată
Pensulă a&e Nr. 3/0		1 bucată
Cheie de culori		1 bucată
Instrucțiuni de utilizare	Nr. 770E	1 buc

**Rezultate remarcabile se pot obține
cu ceramica Interno în special
la reproducerea efectelor cromatice
(contraste) din zona incizală
a dintelui natural.**

Fluorescența lor puternică
se datorează unor nuanțe
cu luminozitate ridicată
care transmit și mai bine lumina –
la fel ca dinții naturali.

Ceramica VITA Interno poate fi
mixată cu mase de dentină
și translucenț. Astfel, efectul cromatic
devine și mai intens.



În cazuri speciale ceramica Interno
se poate folosi la crearea unei impresii
suplimentare de profunzime când
spațiul este limitat.

**Studiu pe
dinți naturali:**

Reflexie tipică a luminii
pe muchia incizală




Structuri interne
vizibile în mod clar în dentina
dintelui natural după îndepărtarea
stratului de smalț



Secțiunea transversală
ilustrează diversitatea
efectelor cromatice din
dentină



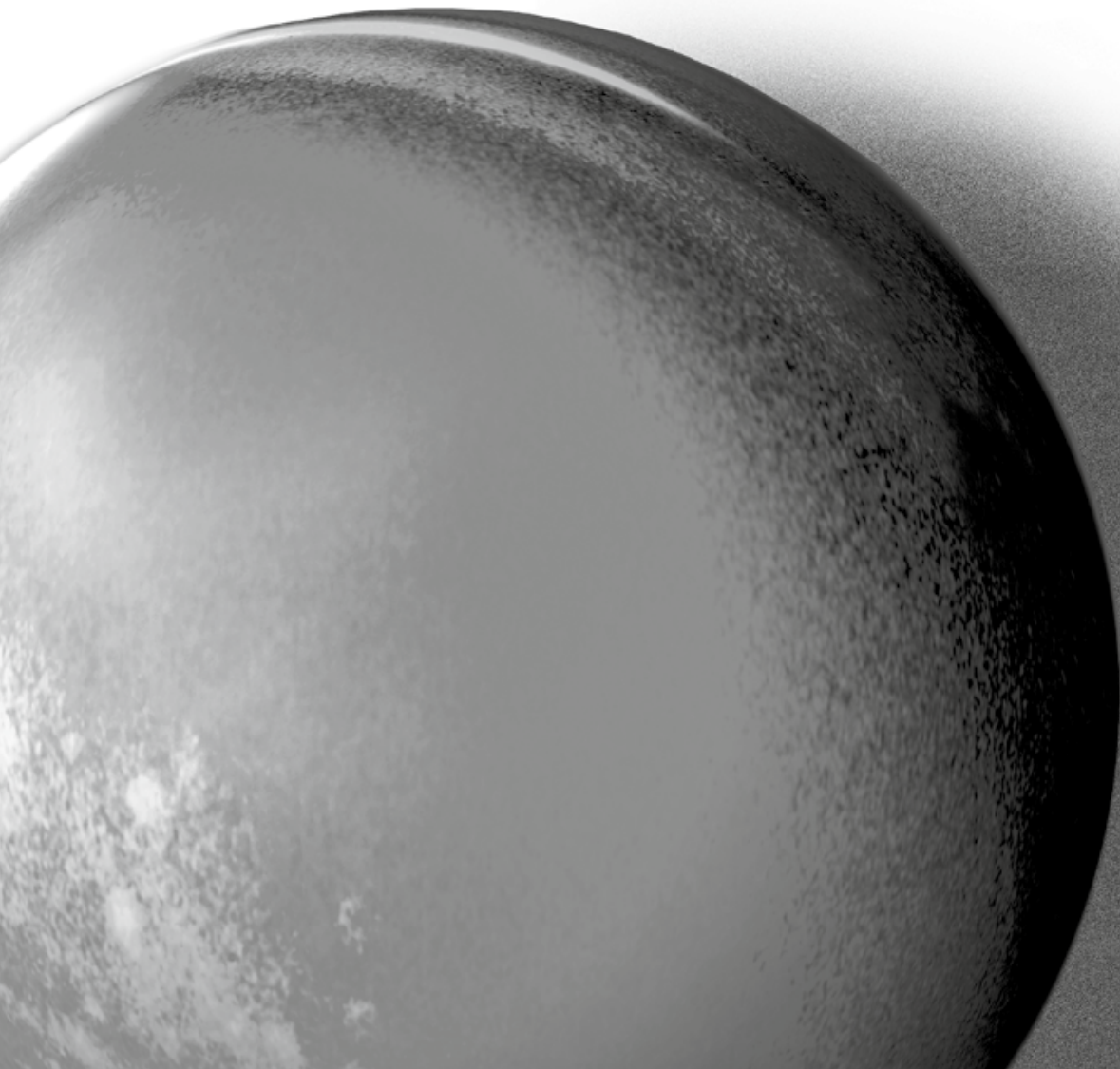



Diferiți factori modifică structurile din dinte natural. Efecte cromatice și contraste se regăsesc în special la dinții pacienților mai în vârstă.






Exemplu de aplicare a unui amestec de Interno și ceramică transparentă pentru a imita nuanțarea portocalie în zona smalțului. Amestecul de Interno trebuie "spălat" în ceramica foarte bine umezită. Este de asemenea important ca ceramica Interno să se aplice într-un strat foarte subțire.





Aspect viu al coroanei în profunzime
cu ceramica Interno.

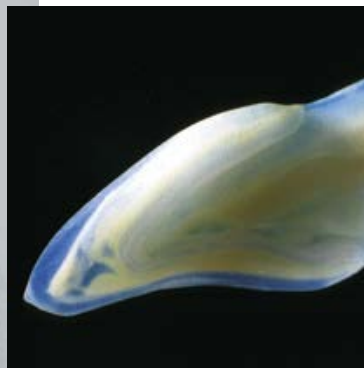

**Observații asupra dentiței naturale:
Luminozitatea intensă a
ceramicii Interno este similară
cu efectul puternic fluorescent al
dinților naturali:**



sus:
coroană VITA VM 7
în mijloc

Un dinte natural;

jos:

Fluorescența coroanei VITA VM 7
cu ceramică Interno.






Reflexie puternică a luminii la un dinte natural.






Trei studii de caz



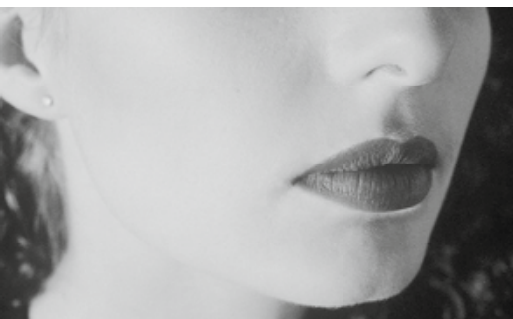

**Cu ceramica Interno se pot obține
efecte extrem de naturale în zona interdentară
și incizală la lumina cu incidență laterală.**

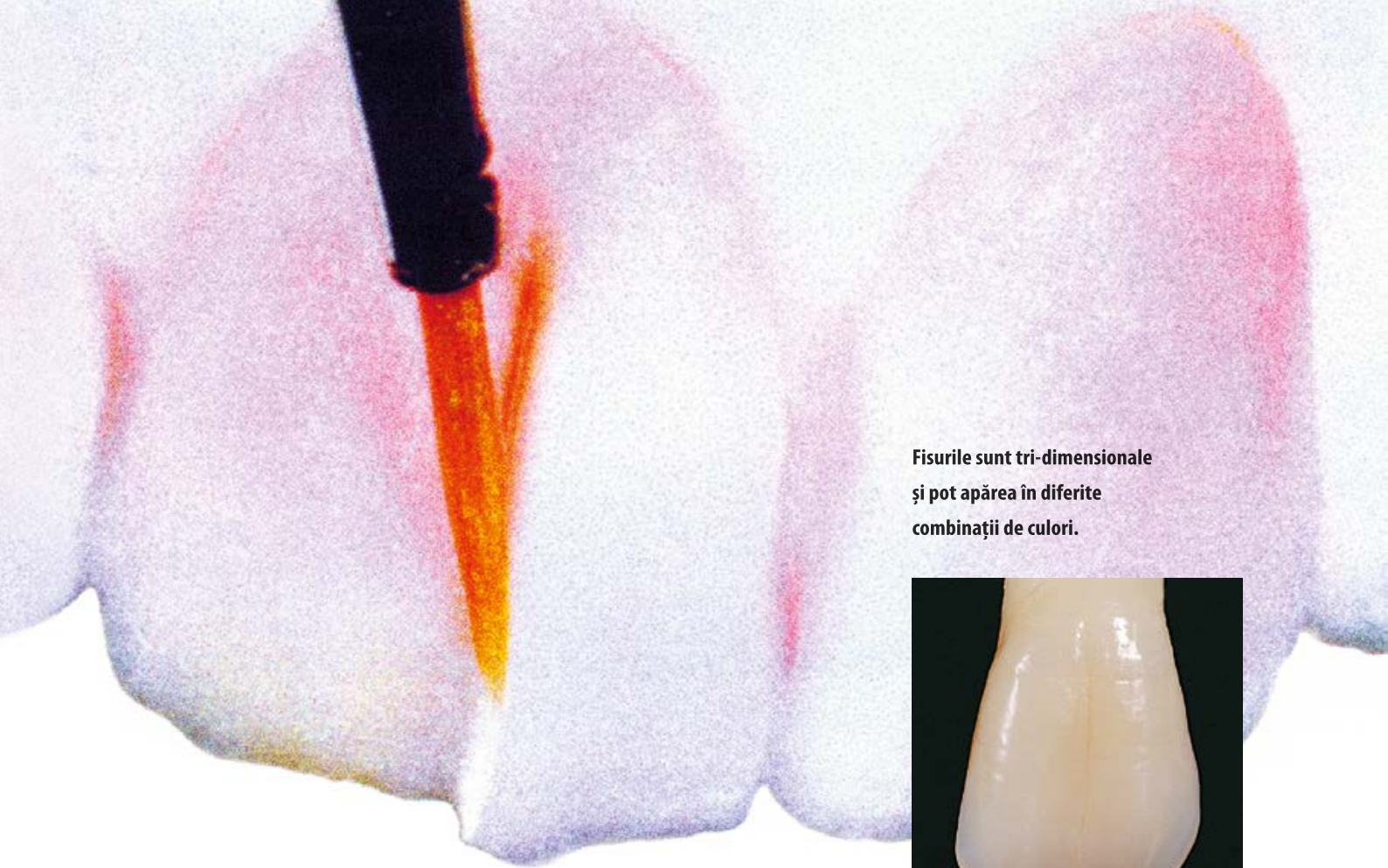


**Fisurile sunt tri-dimensionale
și pot apărea în diferite
combinații de culori.**



**Prin mixarea cu alte ceramici Interno
și nuanța Interno 12
(splinter) poate fi modificată
și individualizată.**



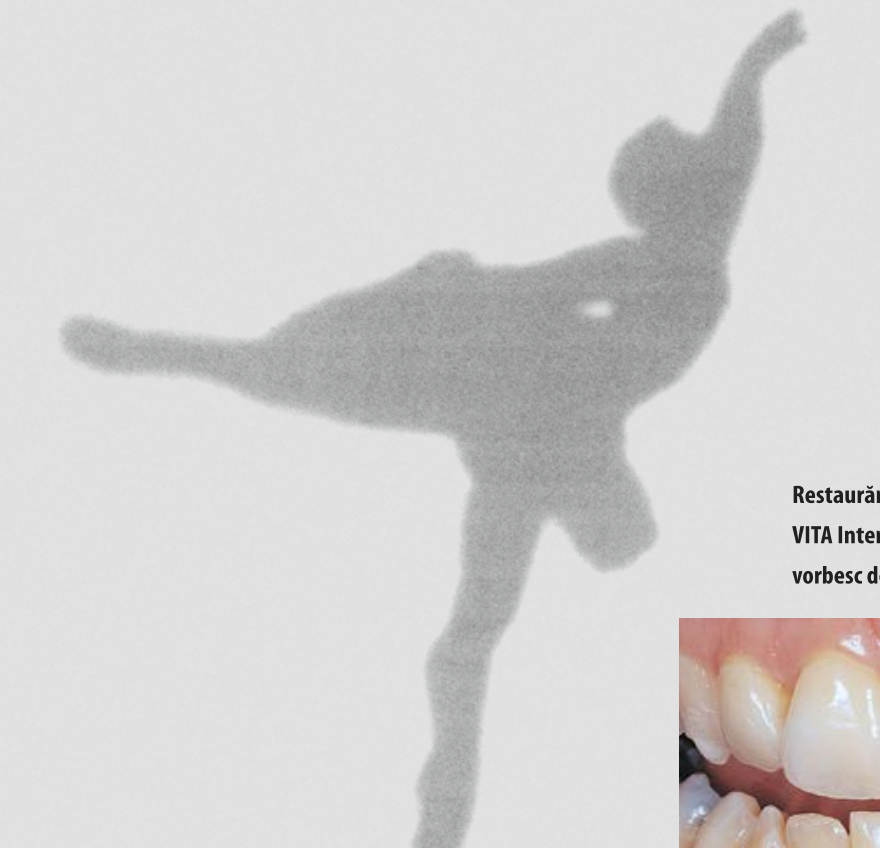

**Restaurări cu
VITA Interno - rezultatele
vorbec de la sine.**



Ceramicile VITA Interno au fost elaborate și dezvoltate în strânsă colaborare cu ceramistul Claude Sieber, Basel/Elveția. Conceptul acestei broșuri poartă amprenta lui, imaginile și studiile de caz reprezintă filozofia sa.

VITA INTERNO® Instrucțiuni de utilizare

Aria de aplicare

Masele ceramice din această trusă cuprind nuanțe ce sunt în conformitate cu anomaliile regăsite în dintele natural. Aceste ceramici permit utilizatorilor să reproducă efectele cromatice naturale și să reproducă cu precizie maximă restaurările ceramice pe baza dinților naturali.

Ceramicile VITA Interno se pot utiliza în toate tehnicile ceramice în combinație cu următoarele produse: VITA VM 7, VM 9, VM 13, VM 15, VITA VMK Master, VMK 95 și ceramicile VITA Titankeramik. Acești coloranți nu sunt însă potriviți pentru nuanțarea materialelor opace.

Proprietăți

Ceramicile VITA Interno au o granulație fină, sunt puternic fluorescente și se disting prin intensitatea cromatică. Se pot mixa între ele. Se pot folosi ca atare sau amestecate cu opaque dentine, dentine, enamel și ceramicile translucide.

Procedura de lucru

La mixarea cu opaque dentine, ceramicile VITA Interno cresc fluorescența și luminozitatea naturală a restaurării ceramice în diferite condiții de iluminare. Când sunt amestecate cu dentina, caracterul cromatic al ceramicii se poate modifica. Amestecul Interno/dentină (Int 01-03 și Int 09) este potrivit în special pentru efectul de mamelon. Datorită structurii de granulație fină, ceramicile Interno se pot integra în dentină, base dentină sau opaque dentină în stare nemixată pentru obținerea unor efecte de profunzime. Amestecul dintre ceramicile translucide și Interno (ex. Int 01, Int 03, Int 08) îmbunătățește efectul de transluciditate în zona incizală. Folosind Interno Int 12 (splinter), fie ca atare, fie mixat cu alte nuanțe Interno, este posibilă reproducerea fisurilor naturale din smalț. Masele Interno Int 10 și Int 11 nu sunt fluorescente; acestea sunt potrivite în special pentru reproducerea efectelor de dentină întărită specifică dinților abrazați. Temperatura de ardere este cea de ardere a dentinei setată în cazul materialului ceramic folosit.

Important

La șlefuirea materialului ceramic este necesară folosirea unui aspirator, purtarea unei măști faciale sau umezirea lucrării.



Recomandări de ardere pentru:

VITAVM®7	Pre- uscare °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.
Arderea dentinei	500	6.00	7.27	55	910	1.00	7.27

VITAVM®9	Pre- uscare °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.
Arderea dentinei	500	6.00	7.27	55	910	1.00	7.27

VITAVM®13	Pre- uscare °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.
Arderea dentinei	500	6.00	6.55	55	880	1.00	6.55


VITAVM®15	Pre- uscare °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.
Arderea dentinei	400	6.00	8.00	50	800	1.00	8.00

VITA VMK Master®	Pre- uscare °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.
Arderea dentinei	500	6.00	7.49	55	930	1.00	7.49

VMK 95	Pre- uscare °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.
Arderea dentinei	600	6.00	6.00	55	930	1.00	6.00

VITA TITANKERAMIK	Pre- uscare °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.
Arderea dentinei	400	6.00	7.00	53	770	1.00	8.00


Cu sistemul unic VITA SYSTEM 3D-MASTER, toate culorile dintelui natural sunt determinate sistematic și reproduse perfect.

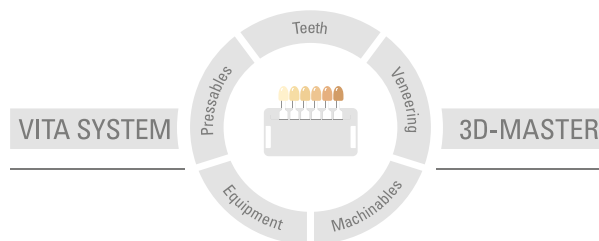

Atenție: Produsele noastre se utilizează cu respectarea instrucțiunilor de folosire. Nu ne asumăm răspunderea pentru daune produse din cauza unei manipulări sau prelucrări necorespunzătoare. Suplimentar, utilizatorul este obligat să verifice înainte de utilizare dacă produsul este corespunzător pentru domeniul de utilizare respectiv. Nu ne asumăm răspunderea pentru cazurile în care produsul nu este compatibil cu materialele și aparatele altui producător. De altminteri răspunderea noastră pentru corectitudinea acestor date este limitată la valoarea mărfii livrate cf. facturii fără impozit, independent de motivul juridic și cu condiția ca acest lucru să fie permis prin lege. Răspunderea noastră este exclusă mai ales în cazuri de profit pierdut, de daune indirecte, daune intervenite ca urmări ale altor daune sau daune interese pretinse de terți, cu condiția ca acest lucru să fie permis de lege. Acordarea de daune-interese (eroare la încheierea contractului, încălcarea contractului, acțiuni nepermise etc.) se face numai în caz de premeditare sau de neglijență gravă. VITA Modulbox nu este neapărat un component al produsului.

Data emiterii acestor informații: 12.17

După publicarea acestor instrucțiuni de utilizare nicio versiune anterioară nu mai este valabilă. Versiunea actuală există pe site-ul www.vita-zahnfabrik.com

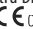VITA Zahnfabrik este certificată conform Directivei pentru Dispozitive Medicale, iar produsele de mai jos menționate în această borșură au marca CE  0124 :

VITA INTERNO®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761 / 562-0 · Fax +49 (0) 7761 / 562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761 / 562-222 · Fax +49 (0) 7761 / 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

 facebook.com/vita.zahnfabrik