

VITA AKZENT® Plus

Mode d'emploi rapide – PASTE/SPRAY



Colorants non liés à un CDT
pour le lasurage, le maquillage et le glaçage.

VITA – perfect match.

VITA

FAITS & CARACTÉRISTIQUES VITA AKZENT® PLUS

Les colorants et glaçures VITA AKZENT sont :

- des colorants céramiques indépendants du CDT pour toutes les céramiques cosmétiques classiques, les céramiques monolithiques en zirconium, silicate ou feldspathiques,
- pour le lasurage, le maquillage et le glaçage,
- pour le scellement des surfaces céramiques.

Avec VITA AKZENT Plus et CHROMA STAINS, vous profitez des avantages suivants :


- adaptation chromatique simple dans les groupes de couleurs correspondants,
- super propriétés de mise en œuvre, comme une application simple,
- résultats très esthétiques grâce au maquillage de surface.

COMPOSANTS DU SYSTÈME



VITA AKZENT® Plus – GLAZE SPRAY

Utilisation de GLAZE/GLAZE LT SPRAY

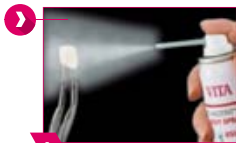

1



2

Application de GLAZE

- Nettoyer la restauration
- Agiter vigoureusement le flacon vaporisateur avant usage
- Maintenir la buse de vaporisation à env. 10 cm de la surface à traiter
- Appliquer sur tous les côtés une couche uniforme
- Déposer la restauration pour la cuisson de colorants et de glaçage sur un support de cuisson et cuire selon les paramètres indiqués
- Si le glaçage ne suffit pas, le processus peut être répété

Attention : ne pas appliquer de glaçure dans l'intrados !



› Épaisseur de couche optimale



› Application trop mince



› Application trop épaisse

VITA AKZENT® Plus – GLAZE PASTE

Utilisation de GLAZE/GLAZE LT PASTE



Application de GLAZE

- Bien mélanger la pâte colorante avec la spatule
- Appliquer directement à partir du pot avec le pinceau fourni
- Appliquer uniformément la glaçure sur l'ensemble de la surface de la restauration
- Placer la couronne à glacer sur le support de cuisson
- Placer la restauration au milieu du support de cuisson et lancer le programme de cuisson approprié (selon le matériau de base)

N. B.

- Pour qu'elles retrouvent leur consistance initiale, il est possible de malaxer les pâtes ayant séché avec du VITA AKZENT Plus PASTE FLUID.
- Bien mélanger les liquides et la pâte en s'assurant de ne pas créer de poches de liquide.

Colorants VITA AKZENT® Plus

Utilisation des colorants et de la glaçure



Application de GLAZE

comme cuisson de fixation des colorants

- Bien mélanger les colorants avec la spatule
- Appliquer les notes de couleur aux endroits souhaités sur la restauration
- Placer de façon sûre la restauration sur le support de cuisson et effectuer la cuisson
- Appliquer ensuite GLAZE PASTE conformément aux instructions et répéter la cuisson

comme cuisson de coloration et de glaçage

- Appliquer GLAZE PASTE conformément aux instructions
- Appliquer EFFECT, BODY ou CHROMA Stains sur la glaçure
- Placer de façon sûre la restauration sur le support de cuisson et lancer la cuisson

! **Attention :** après la cuisson de fixation des colorants, ces derniers présentent une apparence terne. Pour voir l'effet lors de l'application, recouvrir légèrement la surface de Liquid.

Gamme de produits VITA AKZENT® Plus

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- Couleurs particulièrement saturées et couvrantes
- Pour la reproduction de nuances spécifiques et pour se rapprocher d'une couleur naturelle particulière
- En application épaisse, elles recouvrent intégralement la couleur de base sous jacente

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- Lasures translucides agissant comme un filtre chromatique fin sur le matériau de base
- Variations chromatiques et écarts de teinte dans les tons rougeâtre, jaunâtre, orange, brunâtre ou gris-verdâtre

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- Lasures colorées pour changer la chromaticité du matériau de base au sein d'un groupe de couleur

GLAZE

- Glaçure pour une surface brillante, s'apparentant à du verre, homogène et dense, après la cuisson


GLAZE LT

- LT = low temperature : glaçure basse fusion pour les céramiques dont la température de cuisson est inférieure à 800 °C

Finishing Agent

- Pour une texture de surface naturelle avec un éclat mat

VITA AKZENT® Plus – Couleurs disponibles

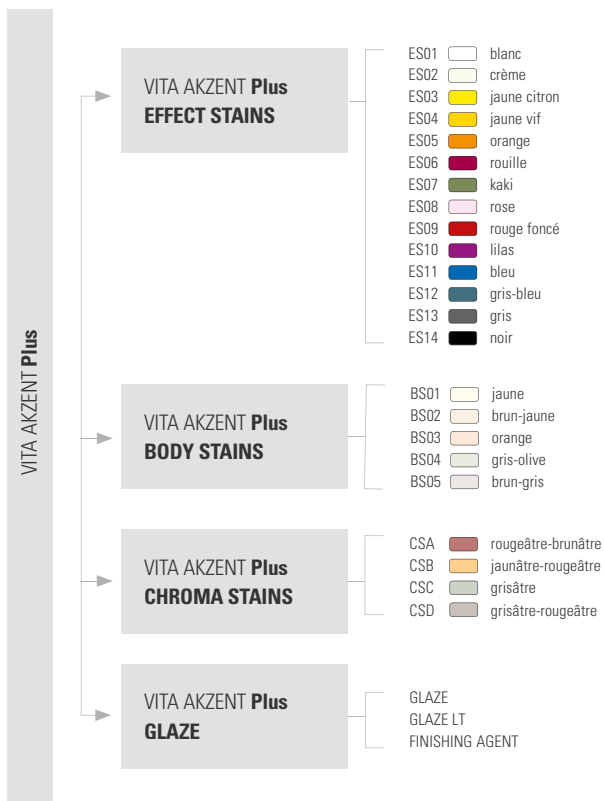



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE TECHNIQUE

Questions au sujet des produits VITA ? **Des prothésistes dentaires et des conseillers techniques d'expérience** se feront un plaisir de répondre à vos questions, aux coordonnées suivantes

- ▶ **Téléphone +49 (0) 7761/562222**
- ▶ **Courriel info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **De 8 h à 17 h (HEC)**



ASSISTANCE EN LIGNE

Des questions sur la mise en œuvre et les produits ?
Vous trouverez des réponses en ligne sous la forme de **FAQ**,
de vidéos et de modules de formation en ligne.

Vous trouverez de plus amples informations, entre autres,
dans le mode d'emploi complet VITA AKZENT Plus n° 1925.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



Vous trouverez des tutoriels vidéos dans
l'élément de commande du VITA SMART.FIRE



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline : Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com