

VITA AKZENT® Plus

Istruzioni di impiego Quick-Start – PASTE/SPRAY



Colori di caratterizzazione per ceramica,
indipendenti dal CET per lasura,
accentuazione e glasatura.

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® PLUS – FATTI & CARATTERISTICHE

Le masse di caratterizzazione e glasura VITA AKZENT Plus sono:

- supercolori indipendenti dal CET per tutte le ceramiche di rivestimento estetico, le ceramiche monolitiche a base di biossido di zirconio, silicatiche e feldspatiche
- per lasura, accentuazione e glasatura
- per sigillatura della superficie ceramica

VITA AKZENT Plus con CHROMA STAINS offrono:

- semplice adattamento cromatico nei corrispondenti gruppi di colore
- caratteristiche di lavorazione al massimo livello, come semplicità di applicazione
- risultati altamente estetici mediante pittura superficiale

COMPONENTI DI SISTEMA



VITA AKZENT® Plus – GLAZE SPRAY

Impiego di GLAZE/GLAZE LT SPRAY



Applicazione di GLAZE:

- pulire il restauro
- agitare energicamente la bomboletta appena prima dell'uso
- tenere la testina nebulizzatrice ad una distanza di ca. 10 cm dalla superficie da trattare
- nebulizzare da tutti i lati uno strato uniforme
- posizionare il restauro su un apposito supporto ed eseguire la cottura (dei supercolori e) finale secondo i parametri indicati
- se la lucentezza non fosse sufficiente, ripetere il processo

Attenzione: le superfici interne devono essere prive di glasura!



> Spessore ottimale



> Troppo sottile



> Troppo spesso

VITA AKZENT® Plus – GLAZE PASTE

Impiego di GLAZE/GLAZE LT PASTE



Applicazione di GLAZE:

- impastare bene i supercolori in polvere con una spatola
- prelevare direttamente dal vasetto con il pennello in dotazione
- stendere la massa glasura in strato uniforme su tutta la superficie del restauro
- sistemare la corona da glasare sul supporto di cottura
- posizionare il restauro con il supporto di cottura al centro del forno ed eseguire il corrispondente programma di cottura (indipendentemente dal materiale strutturale)

Attenzione:

- paste essiccate possono essere impastate con VITA AKZENT Plus PASTE FLUID per ripristinare la consistenza originale.
- miscelare integralmente i liquidi nella pasta e accertarsi che non si formino pozze.

Impiego di supercolori e glasura




Applicazione di GLAZE:

come cottura di fissaggio dei supercolori:

- impastare bene i supercolori con la spatola
- effettuare le accentuazioni cromatiche nelle aree desiderate del restauro
- posizionare il restauro sul supporto ed eseguire la cottura
- applicare quindi GLAZE PASTE secondo le istruzioni ed eseguire una nuova cottura

come cottura di supercolori e finale:

- applicare GLAZE PASTE secondo le istruzioni
- applicare EFFECT, BODY o CHROMA Stains sulla glasura
- posizionare il restauro sul supporto ed eseguire la cottura

 **Attenzione:** dopo la cottura di fissaggio i supercolori appaiono opachi. Per riconoscere l'effetto in fase di applicazione, bagnare leggermente la superficie col Liquid.

VITA AKZENT® Plus – Portfolio prodotti

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- Colori particolarmente cromatici e coprenti
- Per la riproduzione di tonalità individuali e adattamenti di colore a qualsiasi caratteristica cromatica naturale
- In spessore elevato coprono completamente il colore base sottostante

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- Masse lasura, che lasciano trasparire, agenti come un sottile filtro cromatico sul materiale base
- Modifiche e scostamenti cromatici verso il rosso, giallo, arancio, marrone o grigio-verde

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- Colori di lasura per modificare la cromaticità del materiale base all'interno di un gruppo di colori

GLAZE

- Massa glasura per superfici lucenti, omogenee e simili al vetro dopo la cottura


GLAZE LT

- LT = Low Temperature: massa glasura a basso punto di fusione per ceramiche con temperature di cottura inferiori a 800 °C

Finishing Agent

- Per una tessitura superficiale naturale ed una lucentezza opaca

VITA AKZENT® Plus – Colori disponibili

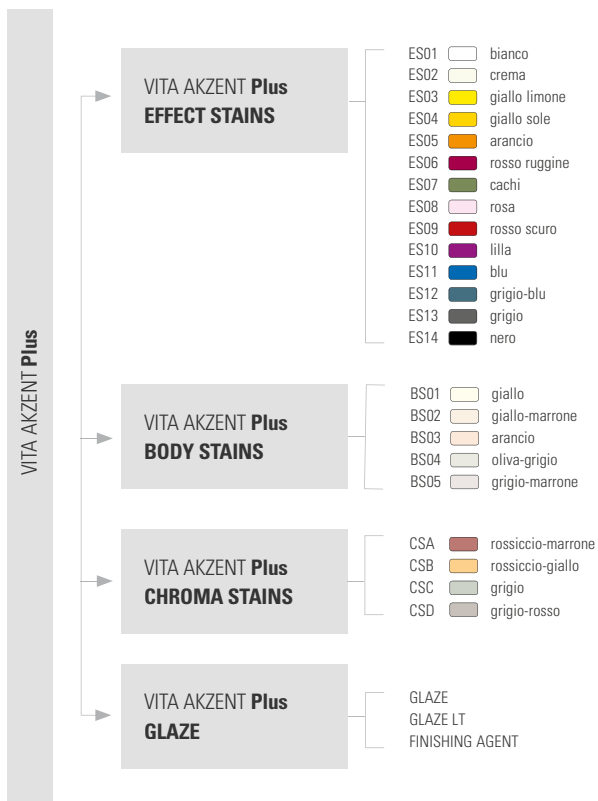



HOTLINE TECNICA

Domande sulle soluzioni di prodotto VITA?

Esperti odontotecnici e consulenti tecnici

rispondono alle vostre richieste:

- ▶ **Telefono +49 (0) 7761/562222**
- ▶ **Mail info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8.00 - 17.00**



SUPPORTO ONLINE

Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto?

Risposte competenti online in forma di **FAQ,**

video e unità didattiche elettroniche.

Per ulteriori informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego complete VITA AKZENT Plus Nr. 1925.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



Video Tutorial sono disponibili nell'unità di comando VITA SMARTFIRE



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germania
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com