

# VITA AKZENT® Plus

Instruções de processamento Quick-Start – PASTA/SPRAY



Pigmentações de cerâmica de CET independente para pintura, coloração e glaze.

VITA – perfect match.

**VITA**

## VITA AKZENT® PLUS – FATOS & CARACTERÍSTICAS

### Pigmentações e glazes VITA AKZENT Plus são:

- Pigmentações de cerâmica de CET independente para todas as cerâmicas de revestimento cerâmico, cerâmicas de zircônio monolíticas, de silicato ou feldspáticas.
- para pintura, coloração e glaze
- para selar a superfície cerâmica

### Com VITA AKZENT Plus com CHROMA STAINS você se beneficia de:


- ajuste mais fácil de cor nos grupos de cores correspondentes
- características excelentes de processamento, estando a aplicação mais fácil
- resultados altamente estéticos através da coloração da superfície

### COMPONENTES DO SISTEMA



## VITA AKZENT® Plus – GLAZE SPRAY

### Utilização de GLAZE/GLAZE LT SPRAY

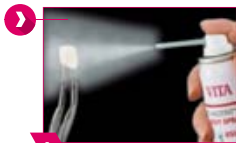

1



2

### Aplicação de GLAZE:

- Limpe a restauração
- Agite vigorosamente o pulverizador imediatamente antes da aplicação
- Mantenha a ponta de pulverização aprox. a 10 cm da superfície de pulverização
- jateie em todos os lados uma camada homogênea
- Coloque a restauração em uma bandeja de queima para a queima de glaze (e fixação dos pigmentos), e proceda à queima de acordo com os respectivos parâmetros
- caso o brilho não seja suficiente, o processo pode ser repetido

### Atenção: não usar glaze nas superfícies internas!



> Excelente espessura de camada



> Aplicação muito fina



> Aplicação muito espessa

## VITA AKZENT® Plus – Pasta de GLAZE

### Utilização de GLAZE/GLAZE LT PASTE



### ✓ Aplicação de GLAZE:

- Misturar bem a pasta de pigmentação com a espátula
- Retirar com o pincel, incluído, diretamente do pote
- Espalhar as massas de glaze uniformemente cobrindo toda a superfície da restauração
- Colocar as coroas a serem queimadas na bandeja de queima
- Colocar a restauração com a bandeja de queima no centro do forno e queimá-la com um programa de queima glaze pendente (dependendo do material do substrato)

### ! Atenção:

- As pastas secas podem ser devolvidas à sua consistência original com o VITA AKZENT Plus PASTE FLUID.
- Misture os líquidos completamente sob a pasta e certifique-se de que não são formadas poças.

## VITA AKZENT® Plus - Pigmentações

### Utilização de pigmentações e glaze




### Aplicação de GLAZE:

#### como queima de fixação de pigmentação:

- Misturar bem os pigmentos com a espátula
- Definir as tonalidades de cor nos locais desejados da restauração
- Colocar e queimar a restauração na bandeja de queima
- Em seguida, aplique GLAZE PASTE de acordo com as instruções e queime novamente

#### como queima de pigmentação e glaze

- Aplicar GLAZE PASTE conforme as instruções
- Aplicar EFFECT, BODY ou CHROMA no glaze
- Colocar e queimar a restauração na bandeja de queima

 **Atenção:** após a queima de pigmentação e fixação as cores aparecem foscas. Para ver o efeito da aplicação, molhe ligeiramente a superfície com Liquid.

## VITA AKZENT® Plus – Portfólio de produtos

---

### VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- cores particularmente cromáticas e opacas
- para a reprodução de tonalidades individuais e ajustes de cor com todas as suas características naturais
- a aplicação de uma camada grossa permite a cobertura total da cor original

### VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- massas caracterizadoras translúcidas que podem ser usadas como um fino filtro de cor sobre o material de base
- alterações e mudanças de cor para tons avermelhados, amarelados, alaranjados, acastanhados ou cinzento-esverdeado

### VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- cores translúcidas para alterar a cromaticidade do material básico dentro de um grupo de cores

### GLAZE

- Massa de glaze para uma superfície brilhante, vítrea, homogênea e sem poros após a queima

### GLAZE LT

- LT = Baixa Temperatura: massa de glaze de baixa fusão para cerâmicas com ponto de fusão abaixo de 800°C

### Finishing Agent

- para uma superfície com textura natural com um brilho mate

## VITA AKZENT® Plus – Cores disponíveis

VITA AKZENT Plus





### VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

ES01		branco
ES02		creme
ES03		amarelo limão
ES04		amarelo sol
ES05		laranja
ES06		vermelho ferrugem
ES07		khaki (cáqui)
ES08		rosa
ES09		vermelho escuro
ES10		lilás
ES11		azul
ES12		azul-acinzentado
ES13		cinzento
ES14		preto

### VITA AKZENT Plus BODY STAINS

BS01		amarelo
BS02		castanho-amarelado
BS03		laranja
BS04		cinzento-esverdeado
BS05		castanho-acinzentado

### VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

CSA		castanho-avermelhado
CSB		amarelo-avermelhado
CSC		acinzentado
CSD		vermelho-acinzentado

### VITA AKZENT Plus GLAZE

GLAZE  
GLAZE LT  
FINISHING AGENT



## HOTLINE TÉCNICA

Questões a respeito das soluções de produtos VITA?

**Técnicos dentários e consultores técnicos experientes**

ficarão satisfeitos em responder às suas perguntas em:

- ▶ **Telefone +49 (0) 7761/562222**
- ▶ **E-mail [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **8:00 até 17:00h CET**



## SUPOORTE ONLINE

Questões sobre o processamento e as soluções de produtos?

Você encontra respostas competentes online em forma de **FAQs**,  
**vídeos e unidades eletrônicas de aprendizagem.**

Demais informações detalhadas, entre outros, você encontra no completo e abrangente Manual de Processamento VITA AKZENT Plus nº 1925.

- ▶ **[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**
- ▶ **[www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)**



Você encontra tutoriais de vídeo no painel de controle do VITA SMARTFIRE



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3, D-79713 Bad Säckingen - Alemanha  
Tel. +49(0)7761/562-0 - Fax +49(0)7761/562-299  
Linha de assistência: Tel. +49(0)7761/562-222 - Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)